

**SVARBI INFORMACIJA!**

**Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš pradedant naudotis šiuo įrenginiu, ypatingai - saugumo instrukcijas. Perduodant šį įrenginį kitam asmeniui, taip pat perduokite ir šią instrukciją!**

- Naudokite šį įrenginį tik pagal paskirtį, kaip nurodyta instrukcijoje.
- Garantija laikoma negaliojanti jeigu įrenginys buvo naudojamas ne pagal paskirtį.
- Šis įrenginys netinkamas besilaukiančioms moterims!
- Paprastas svėrimasis vaikams nėra draudžiamas, tačiau kūno riebalų masės analizės funkciją reikėtų praleisti, dėl siunčiamų impulsų. Šis impulsas yra siunčiamas per kūną, atliekant kūno riebalų masės nustatymo procesą.
- Šios svarstyklės netinkamos naudoti žmonėms turintiems stimulatorius arba kitus medicininius implantus. Kūno riebalų masės rodmenys gali būti netikslūs žmonėms sergantiems diabetu arba turintiems medicininius/fizinius apribojimus. Tas pats galioja labai aukštos kvalifikacijos sportininkams.
- Nenaudokite įrenginio jeigu jis neveikia tinkamai. Jeigu svarstyklės buvo išmestos, sudrėkusios arba buvo pažeistos.

**Pavojus paslysti ir nukristi!**

Niekada nelipkite ant svarstyklių šlapiomis kojomis. Niekada nelipkite ant svarstyklių dėvint kojines. Niekada nedėkite svarstyklių ant nelygaus paviršiaus. Niekada nestovėkite ant svarstyklių krašto. Visada stovėkite svarstyklių viduryje, kad pėdos paliestų 2 elektrodus (kaire koja ant kairio elektrodo ir dešine ant dešiniojo).

**Pavojus vaikams!**

Baterijos gali būti mirtinos jas prarijus. Laikykite baterijas ir patį įrenginį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei baterija yra praryjama, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Laikyti pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje: tai gali kelti pavojų užspringti.

**Pavojus, susijęs su baterijomis!**

Baterijos negali būti deformuotos, ardamos ar įmestos į ugnį. Jei baterijos ištekėjo, vengti kontakto su baterijos skysčiu. Nuplaukite visas odos vietas su vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Keisdami baterijas, laikykitės teisingą poliškumą (+/-).

**Naudoti tik tas pačias arba lygiavertio tipo baterijas (3x AAA 1,5 V).**

Saugokite baterijas nuo karščio. Išimkite baterijas iš prietaiso, kai jie baigiasi arba ne naudojant įrenginio. Tai padeda išvengti žalos, kurią gali sukelti ištekėjimas.

**Materialinės žalos rizika!**

Saugokite prietaisą nuo drėgmės. Laikykite svarstykles nuo vandens.

Svarstyklių paviršius yra slidus, ypač kai drėgnas. Laikykite paviršių sausą.

Nelaikykite svarstyklių karštoje aplinkoje ir saugokite nuo stiprios saulės.

Saugokite svarstykles nuo drebulio.

Neardykite svarstyklių.

Remontas turėtų būti atliekamas tik autorizuosame garantiniame centre.

Grindys gali būti padengtas dažais arba įvairiomis dirbtinėmis medžiagomis. Kai kurios iš šių medžiagų gali paveikti minkštintas prietaiso kojeles. Po svarstyklės kojelėmis padėkite neslidu pagrindą.

Valant nereikia naudoti jokių stiprių cheminių medžiagų.


Mes patvirtiname, kad vonios svarstyklės, modelis BS 445 Connect, atitinka pagrindinius Europos RTTE direktyvos 1999/5/EC reikalavimus. Jūs galite prašyti EC atitikties deklaracijos iš Medisana AG, Jagenbergstrasse 19, 41468 Neuss, Vokietija, arba galite ją atsisiųsti iš Medisana puslapio ([www.medisana.com/bs445connect](http://www.medisana.com/bs445connect)). Papildoma informacija ir konkrečių šalių aptarnavimo skyrių adresai: [www.medisana.com](http://www.medisana.com).

**A) Paprastas pasisvėrimas:**

- 2) tiesiog užlipkite ant svarstyklių **basomis** (neavint kojinių)
- 1) netrukus ekrane pamatysite savo svorį

## B) Asmeninių duomenų nustatymas:

Svarstyklės gali saugoti duomenis (lytis, sporto režimas, ūgis, amžius) 8 žmonių su iki 30 atminties vietų, kiekvienam. Šios į svarstyklių vertybės yra: Vyras, 165 cm, 30 metų, kg.

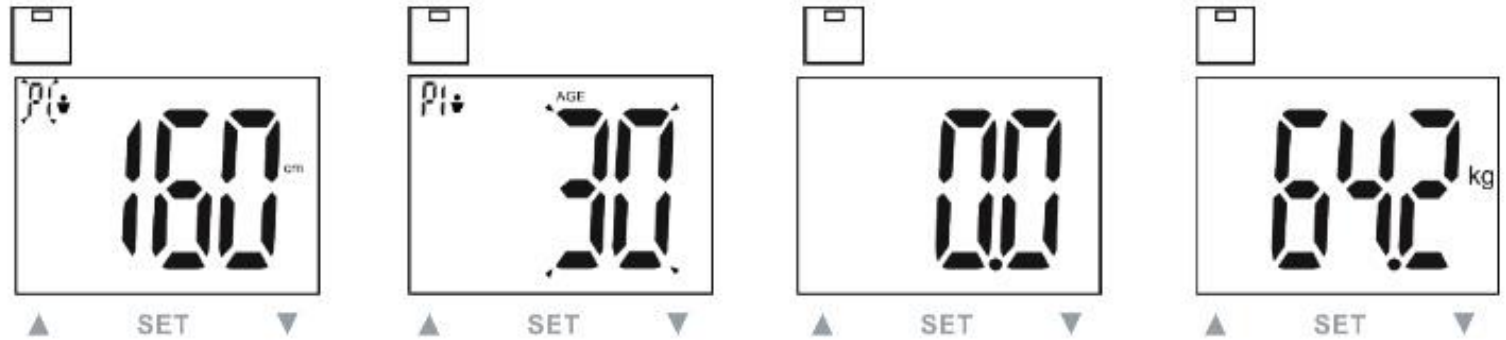

- 5) nuspauskite ir palaikykite SET kol ekrane sumirksės atminties simbolis
- 6) pasirinkite norimą atminties vietą naudojant ▲ / ▼ mygtukus.

- 4) nuspauskite SET išsaugoti pasirinkimą. Atlikite sekančius nustatymus naudodami 2 ir 3 nurodymus


- 2) po sėkmingai atliktų nustatymų ekrane matysite „0.0“ rodmenis
- 3) baigti nustatymus tiesiog užlipkite ant svarstyklių **basomis** (neavint kojinių)

- 6) po sėkmingo pasisvėrimo ekrane matysite šiuos rezultatus:

- **svoris**
- **procentinis kūno riebalų kiekis**
- **procentinis kūno skysčių kiekis**
- **procentinis raumenų masės kiekis**
- **kaulų masė**
- **suvartotinų kalorijų rekomendacija**
- **KMI**

## C) Sujunkite svarstyklės su savo išmaniuoju įrenginiu\*:

Prašome atlikti vartotojo nustatymo procesą svarstyklėse, kaip aprašyta B punkte. Svarstyklės ir išmanusis telefonas turi būti suporuoti **naudojant Bluetooth® 4.0/ Bluetooth Smart® ar naujesnes versijas**. Įdiekite VitaDock+ programėlę ir sekite instrukcijos veiksmus.

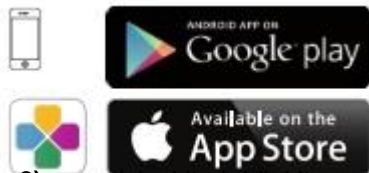



- 2) parsisiųskite ir įdiekite programėlę į savo išmanųjį įrenginį



- 1) aktyvuokite Bluetooth savo iOS arba Android įrenginyje

- 3) paleiskite programėlę. Užtikrinkite, kad būtų stabilus ryšys su internetu (3G arba WiFi). Prisijunkite su savo VitaDock paskyra.

Jeigu Jūs dar neturite savo paskyros užsiregistruokite dabar nemokamai VitaDock Online.

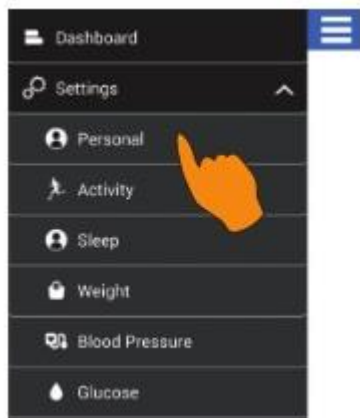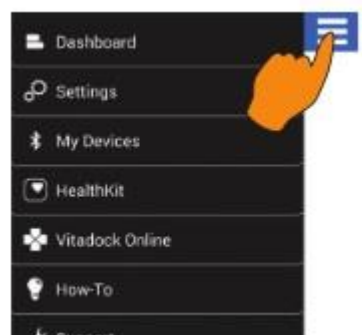

- 7) pasirinkite "Settings" ir "Personal". Įveskite savo asmeninius nustatymus ir paspauskite "Save", kai baigsite. Grįši atgal į pradinį meniu.



- 8) bakstelėkite simbolį "≡" viršutiniame dešiniajame kampe. Dabar pasirinkite "weight" ir įveskite informaciją. Galiausiai spustelėkite "Save".



- 6) dabar pasirinkite simbolį "⊕" viršuje, dešinėje pusėje. Tai nuves Jus į meniu "Mano įrenginius."


- 4) bakstelėkite simbolį "≡" viršutiniame dešiniajame kampe, patekti į nustatymus
- 5) Norėdami užmegzti ryšį tarp išmaniojo įrenginio ir svarstyklių paspauskite SET mygtuką ir pasirinkite savo atminties vietą. Atsistokite ant svarstyklių basomis (be kojinių) ir laukite kol bus atliktas pilnas matavimas (pabaigoje sėkmingas matavimas patvirtinamas pyptelėjimas).



- 9) po pyptelėjimo sąrašė atsiras Jūsų svarstyklės.

- 11) dabar pasirinkite mėlyną mygtuką "Connect" šalia "Medisana Analysis Scale".


**Pastaba:** Jeigu svarstyklės jau suporuotos su Jūsų išmaniuoju įrenginiu, mygtukas bus žalias.

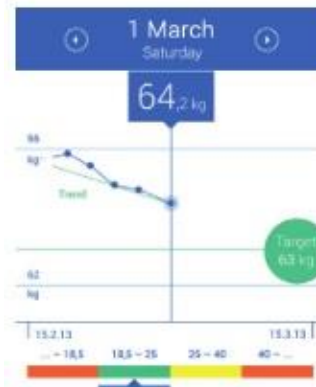


- 10) matavimo duomenys automatiškai perkeliami ir saugomi internetinėje VitaDock paskyroje.

**Pastaba:** Jei matavimo duomenys nebuvo perkelti į programą, pakartokite matavimą.  
**Pastaba:** stabilus interneto ryšys yra privalomas sėkmingam synchronizavimui.


#### D) Svorio matavimas naudojant savo išmanųjį įrenginį ir VitaDock+ programėlę

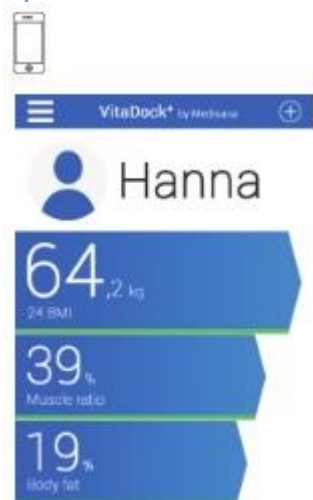

- 1) paleiskite programėlę

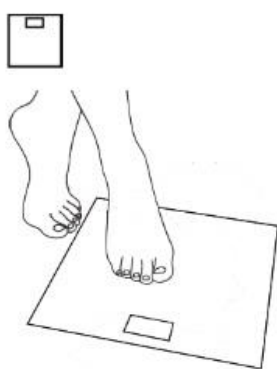

- 2) Atsistokite ant svarstyklių **basomis** (be kojinių) ir laukite kol bus atliktas pilnas matavimas (pabaigoje sėkmingas matavimas patvirtinamas pyptelėjimas).

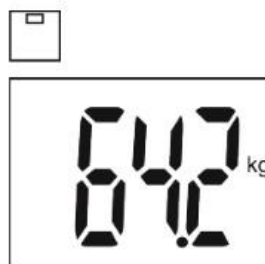

- 3) po sėkmingo pasisvėrimo ekrane matysite šiuos rezultatus:

- svoris
- procentinis kūno riebalų kiekis
- procentinis kūno skysčių kiekis
- procentinis raumenų masės kiekis
- kaulų masė
- suvartotinių kalorijų rekomendacija
- KMI



- 4) dabar pasirinkite simbolį "⊕". viršuje, dešinėje pusėje. Pasirinkite žalią mygtuką „Connect“ šalia „Medisana Analysis Scales“.
- 5) matavimo duomenys automatiškai perkeliami ir saugomi internetinėje VitaDock paskyroje.