

5 WORKING WITH THE DEVICE

5.1 MAIN MENU

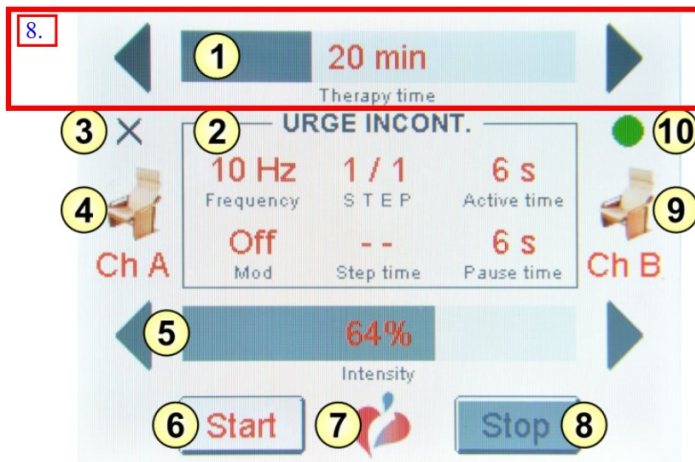


Fig. 4: Main menu

1. Set the therapy duration - To increase or decrease, press the left or right arrow. To quickly set the value, slide your finger along the rectangle.
2. Shows the selected program and its parameters.
3. Status of applicator on Channel A (X indicates the applicator is not connected).
4. Type of applicator on channel A
5. Set applicator intensity
6. START button – starts therapy
7. Press logo to enter the info menu
8. STOP button – stops therapy
9. Type of applicator on channel B
10. Status of applicator on Channel B (Green dot indicates the applicator is connected).

5.1.1 MAIN MENU - DETAILED DESCRIPTION



Fig. 5: Main menu - program and selected parameters

1. Selected program
2. Selected frequency
3. Step display
4. Active time in individual step
5. Selected modulation
6. Duration of an individual step
7. Pause time in individual step

5 DARBAS SU PRIETAISU

5.1 PAGRINDINIS MENIU



Fig. 4: Pagrindinis meniu

1. Nustatykite Gydomo trukmę - Norėdami padidinti arba sumažinti, spauskite kairę arba dešinę rodyklę. Norėdami greitai nustatyti vertę, braukite pirštu išilgai stačiakampį.
2. Rodo nustatytą programą ir jos parametrus.
3. Aplokatoriaus būklė kanale A (X rodo, kad aplikatorium yra neprijungtas).
4. Aplikatoriaus tipas kanale A
5. Nustatyti aplikatoriaus intensyvumą
6. START mygtukas – pradėti gydymą
7. Paspauskite logotipą norėdami įeiti į informacinį meniu
8. STOP mygtukas – gydymui sustabdyti
9. Aplikatoriaus tipas kanale B
10. Aplikatoriaus būklė kanale B (Žalias taškas rodo, kad aplikatorius yra prijungtas).

5.1.1 PAGRINDINIS MENIU –DETALUS APRAŠYMAS



Fig. 5: Pagrindinis meniu - programosirpasirenkamiparametrai

1. Pasirinkti programą
2. Pasirinkti dažnį
3. Žingsnis ekrane
4. Aktyvus laikas individualiame žingsnyje
5. Pasirinkti moduliaciją
6. Atskiro žingsnio trukmė
7. Pausės laikas atskirame žingsnyje

5.2 PROGRAM SETTINGS

2.4.

To change the parameters, use the left arrow (◀) to decrease and the right arrow (▶) to increase.

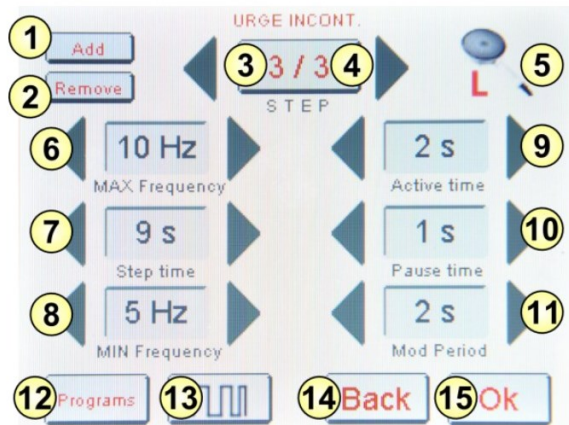


Fig. 6: Program settings

1. Add a step
2. Remove a step
3. Currently selected step
4. Total number of steps
5. Select the applicator or channel.
6. Set the frequency
7. Duration of individual step, the sum of active and pause time with repetitions
8. Modulation intensity (frequency: 10–50 Hz, amplitude 10-30%)
9. Active time of individual period, multiple of period (1–10 s)
10. Pause time of individual step
11. Modulation period is adjustable (1-5 s)
12. Program (Preset, Manually adjustable)
13. Select the modulation (waveform - amplitude modulation sine, amplitude modulation rectified sine, frequency modulation)
14. BACK - Cancel the settings
15. OK - Confirm (Save) the settings

5.3 PROGRAMS (manual view)

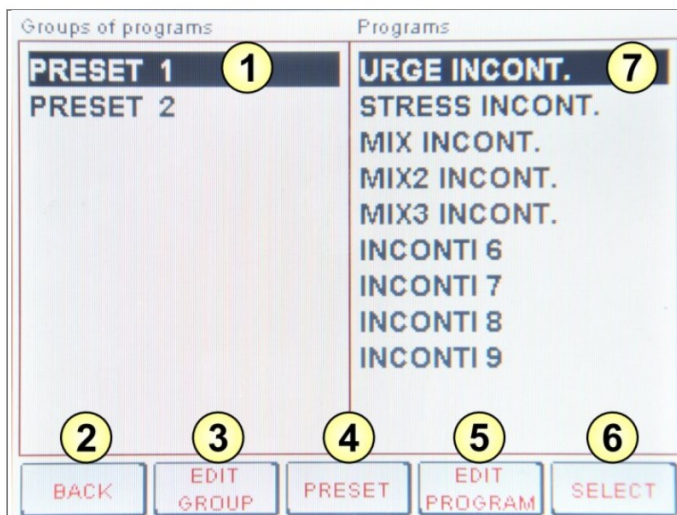


Fig. 7: Programs menu (manual view)

1. Name of program group (groups can be added, removed or renamed)
2. BACK – Return to main menu
3. EDIT GROUP opens edit group menu
4. Switches programs menu to preset view
5. EDIT PROGRAM opens edit program menu
6. SELECT opens currently selected program
7. Currently selected program

5.2 PROGRAMOS NUSTATYMAI

Norėdami pakeisti parametrus, naudokite kairiąją rodyklę, (◀) sumažinti, o padidinti dešiniąją rodyklę (▶).

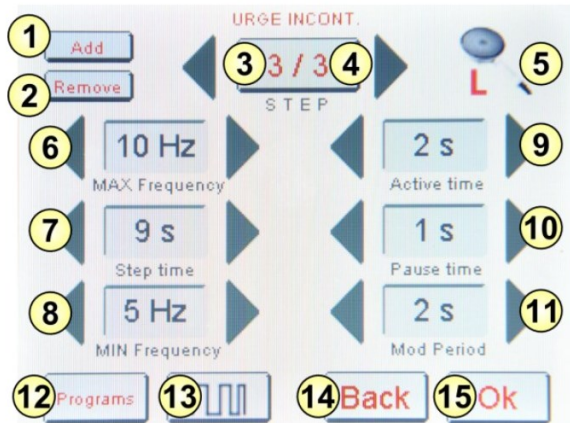


Fig. 6: Programos nustatymai

1. Pridėti veiksmą
2. Pašalinti veiksmą
3. Pasirinktas veiksmas
4. Bendras veiksmų skaičius
5. Pasirinkite aplikatorių ar kanalą.
6. Nustatyti dažnį
7. Individualaus veiksmo trukmė, bendras aktyvus ir pauzės laiko su pakartojimais laikas
8. Moduliacijos intensyvumas (dažnis: 10-50Hz, amplitudė 10-30%)
9. Atskiro periodo aktyvus laikas, kartotinis arba periodinis (1–10 s)
10. Individualaus veiksmo pertraukos laikas
11. Moduliacijos periodas yra reguliuojamas (1-5 s)
12. Programa (automatinė, nustatoma mechaniniu būdu)
13. Pasirinkti moduliaciją (bangos forma - amplitudės moduliacijos sinusas, amplitudės moduliacijos ištaisytas sinusas, dažnio moduliavimas)
14. BACK –atšaukti nustatymą
15. OK –patvirtinti (išsaugoti) nustatymą

5.3 PROGRAMOS (instrukcijos vaizdas)

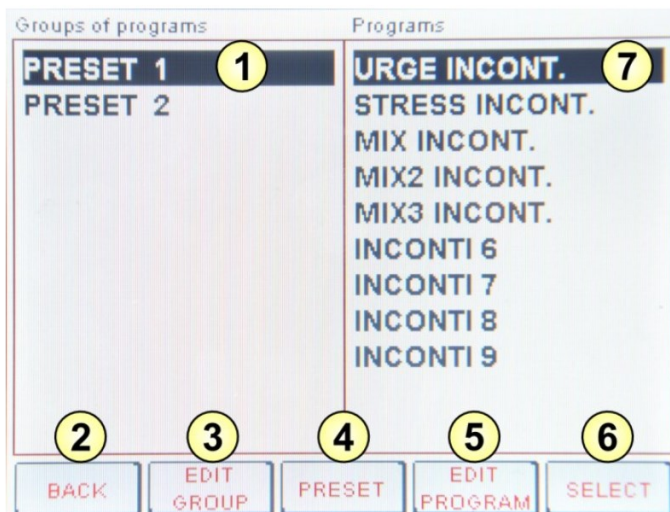


Fig. 7: Programų meniu (instrukcijos vaizdas)

1. Programos grupės pavadinimas (grupės gali būti pridėtos, pašalintos arba pervadintos)
2. BACK - Grįžti į pagrindinį meniu
3. EDIT GROUP redaguoti grupės meniu
4. Perjungia programas meniu automatiniam nustatymui
5. EDIT PROGRAM atidaro programos meniu redagavimą
6. SELET atidaro tuo metu pasirinktą programą
7. Pasirinkta programa