



AKTYVUS VALYMAS VEIKSMINGA DEZINFEKCIJA

Sekusept™ aktiv ir Sekusept™ aktiv testo juostelės

**PERACTO RŪGŠTIES PAGRINDU SUKURTA
DEZINFEKcinė PRIEMONė, PASIŹYMINTI
PUIKIOMIS VALYMO SAVYBėMIS.**

"Sekusept aktiv" sujungia aktyvų valymą, veiksmingą dezinfekciją ir puikų medžiagų suderinamumą viename gaminyje, kad būtų užtikrintos geriausios savybės naudotojui, pacientui ir jūsų instrumentui.

Sekusept aktiv taip pat pasiŹymi:

- Greita virucidinė galutinė dezinfekcija
- Aktyviu baltyminių dėmių šalinimu
- Nėra fiksavimo poveikio



Sekusept™ aktiv

Peracto rūgšties pagrindu sukurta dezinfekavimo priemonė, pasižyminti puikiomis valymo savybėmis

GAMINIO CHARAKTERISTIKOS

- Balti milteliai su mėlynomis granulėmis
- pH 2 % tirpalo vandentiekio vanduo 20 °C temperatūroje: apie 8,5 +/-0,5
- pH 1.1 % tirpalo vandentiekio vanduo 20. °C temperatūroje: apie 8,5 +/- 0,5

TS 1.2.3.

MIKROBIOLOGINĖS SAVYBĖS

REIKALAVIMAS / SĄLYGOS	KONCENTRACIJA	KONTAKTO LAIKAS
Baktericidinis pagal EN 13727/EN 14561 Švarios ir nešvarios sąlygos	1%	5 min.
Yeasticidal pagal EN 13624/EN 14562 Švarios ir nešvarios sąlygos	1%	5 min** 10 min*
Grybelinis pagal EN 13624/EN 14562 Švaros sąlygos	2%	30 min.
Tuberkulicidinis pagal EN 14348/EN 14563 Nešvarios sąlygos	1%	10 min.
Mikobaktericidinis pagal EN 14348/EN 14563 Švaros sąlygos	2%	15 min.
Ribotas virucidinis poveikis pagal EN 14476/EN 17111 Švarios ir nešvarios sąlygos	1%	10 min.
Viruscidinis pagal EN 14476/EN 17111 Švaros sąlygos	2%	15 min.
Sporicidinis pagal EN 17126 Švaros sąlygos	2%	30 min.
Sporicidinis prieš C. difficile pagal EN 17126 Švaros sąlygos	1%	15 min.
Pasak VAH (baktericidinis, mieliagrybinis ir tuberkuliozinis) Švarios ir nešvarios sąlygos	1% 2%	60 min* 5 min. **
Pagal VAH (mikobaktericidinis) Švarios ir nešvarios sąlygos	1%	60 min*

* = valymo-dezinfekcijos etapas (nešvarios sąlygos)
**= Dezinfekcijos etapas (švarios sąlygos)

PAKAVIMO IR UŽSAKYMO INFORMACIJA

PRODUKTAS	PAKUOTĖ	UŽSAKYMO KODAS
Sekusept aktiv kibiras su matavimo šaukštu	4 x 1,5 kg	XXXXXX
Sekusept aktiv kibiras su matavimo taure	6 kg	XXXXXX
Sekusept aktiv testo juostelės	4 tūbelės po 50 juostelių	XXXXXX

TAIKYMO SRITIS

Skirtas rankiniam medicinos prietaisų valymui ir dezinfekavimui, taip pat galutinei dezinfekcijai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Tirpalui ruošti naudokite pridedamą matavimo šaukštą ir (arba) matavimo indelį.

Maišydami įpilkite reikiamą miltelių kiekį, kad pasiektumėte reikalaujamą veiksmingumą, į vandenį (<30 °C) ir kelis kartus pakartokite per pirmąsias 15 minučių. Kai tirpalas pasigamina, susidaro veiklioji medžiaga peracto rūgšties. Panardinkite instrumentus, užtikrindami, kad visi paviršiai būtų visiškai drėgni.

Valykite daiktus pagal prietaiso gamintojo nurodymus, įskaitant mechaninius veiksmus (pvz., šepetėliu, šluoste), kol jie bus vizualiai švarūs. Praėjus reikiamam kontakto laikui, išimkite prietaisus ir kruopščiai nuplaukite bent jau geriamojo vandens kokybės vandeniu. Išorinius paviršius ir vidinius kanalus (pvz., endoskopų) po to nusauskinkite.

Galutinei dezinfekcijai paruoškite vieną vonelę valymo-dezinfekcijos etapui ir vieną vonelę dezinfekcijos etapui. Tirpalo liekamąjį veiksmingumą, pavyzdžiui, padidėjus temperatūrai, galima patikrinti naudojant "Sekusept™ aktiv" testines juosteles. Netinka instrumentams, pagamintiems iš žalvario ar vario, arba mechaniškai iš anksto pažeistiems chromuotiems ar nikeluotiems instrumentams. Tirpalą kiekvienai darbo dienai reikia paruošti naują. Pastebėjus matomą užterštumą, nedelsdami paruoškite šviežią tirpalą. Galimas nedidelis miltelių spalvos pakitimas, tačiau tai neturi įtakos gaminio veikimui.

SUEDAMOSIOS DALYS

Natrio perkarbonatas, nejoniniai tensidai, fosfonatai. Veikliosios medžiagos, esančios 2 % faktinio naudojimo tirpale: >1 000 ppm peracto rūgšties.

SANDĖLIAVIMAS

Pavojinga. Laikykites atsargumo priemonių (parengta pagal galiojančias Europos cheminių produktų klasifikavimo ir ženklavimo taisykles). Laikymas: nuo +0 °C iki +25 °C.

SERTIFIKATAI

Medicinos prietaisais. Visas "Sekusept aktiv" antimikrobinis aktyvumas yra įtrauktas į mokslinę dokumentaciją, kurią galima gauti paprašius.

SAUGIAI NAUDOTI MEDICINOS PRIETAISUS.




Perskaitykite etiketę ir gaminio informaciją.

Sekusept™ aktiv testo juostelės

INDIKACIJOS

Sekusept aktiv 50 testo juostelių.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

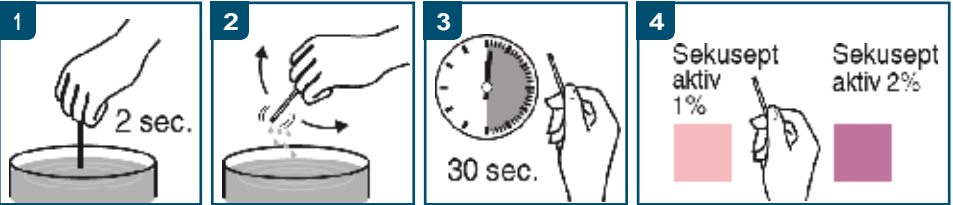

Panardinkite reakcijos zoną į tirpalą 2 sekundėms

Nuplaukite skysčio perteklių nuo juostelės

Palaukite 30 sekundžių, palyginkite reakcijos zoną su atitinkamos spalvos lauku

Interpretacija - palyginkite reakcijos zonos spalvą su pasirinkta koncentracija. Tokia pat arba intensyvesnė = visiškai aktyvus. Šviesesnė arba mažiau intensyvi = pakeisti tirpalą

LAIKYMO SĄLYGOS

Išėmę reikiamas testo juosteles, iš karto uždarykite tūbelę. Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Saugokite nuo saulės spindulių. Saugokite turinį nuo drėgmės. Tik vienkartiniam naudojimui.

NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS

Tik profesionaliam naudojimui.

INSTRUMENT
Ū APDOROJIMAS

VERTINTI PO 30
SEKUNDŽIŲ:
Sekusept aktiv 1%



Sekusept aktiv 2%



TIK PROFESIONALIAM