

WANCARE

## ONESEPT PA POWDER

### Medicininii instrumentų ir endoskopų AUKŠTO LYGIO DEZINFEKCIŲ PRIEMONĖ



EN 13624  
EN 13727  
EN 14476  
EN 14651  
EN 14563  
EN 14562  
EN 14348  
EN 17126  
EN 13704

#### Naudojimas

OneSept PA POWDER naudojami visų rūšių invazinių chirurginių instrumentų, dantų chirurgijos instrumentų, chirurginės laparoskopijos instrumentų, lanksčių ir standžių endoskopų aukšto lygio dezinfekcijai. Tai koncentruotas miltelių produktas.

#### Savybės

Tai koncentruoti milteliai profesionaliam naudojimui, antikorozinis. Vienu metu atlieka valymą ir dezinfekciją. Netinka naudoti su aliuminio, švino, cinko, chromo, vario ir nikelio/sidabro padengta medžiaga. Darbinis tirpalas gali būti naudojamas 1 darbo dieną.



99.9  
Effective

	Test Method	Microorganism	Effect Duration
Bactericidal	EN 13727	Staphylococcus	10 min
		Pseudomonas aeruginosa	
		Enterococcus hirae	
	EN 14651	Staphylococcus	
		Pseudomonas aeruginosa	
Tuberculocidal/ Mycobactericidal	EN 14563	Enterococcus hirae	
		Mycobacterium avium	
	EN 14348	Mycobacterium terrae	
		Mycobacterium avium	
Fungicidal/ Yeasticidal	EN 14562	Candida albicans	
		Aspergillus niger	
	EN 13624	Candida albicans	
		Aspergillus niger	
Virucidal	EN 14476	Poliovirus Type 1	
		Human Adenovirus Type 5	
		Murine Norovirus	
Sporicidal	EN 17126	Bacillus subtilis	
	EN 13704	Bacillus subtilis	

#### Mikrobiologinis efektyvumas

Baktericidinis, Fungicidinis, Virucidinis ir Sporicidinis efektyvumas.

#### Sudėtis

Peracto rūgštis (tirpalas, praskiestas % 2 vandens) 2250 ppm, Natrio perkarbonatas, TAED, antikorozinis, stabilizatorius, pagalbinės medžiagos.

#### ĮSPĖJIMAI IR LAIKYMO SĄLYGOS

Saugoti nuo vaikų. Saugokite nuo saulės spindulių ir aukštos temperatūros. Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje/talpoje, sausoje ir vėsioje vietoje. Laikyti atokiai nuo karščio, kibirkščių ir ugnies. Įprastomis sąlygomis tinkamumo laikas yra 2 metai. Atidarytą produktą sunaudoti per 3 mėnesius. Laikyti užrakintoje patalpoje.

KAF G26 - 1	2 KG
KAF G26 - 2	2,5 KG
KAF G26 - 3	5 KG



2250  
ppm

Peracetic  
Acid


It is a concen-  
trated powder for  
professional use

1

Solution  
can be used  
during 1  
working day

KAFGRUP  
SAĞLIK HİZMETLERİ

Ataşehir Mh. 221. Sk. No:3A Rota Office A Blok D.83  
K.Çekmece/İSTANBUL  
T: +90 212 471 4 200 (pbx) F: +90 212 471 4 201  
www.kafgrup.com / info@kafgrup.com

	<b>OneSept PA POWDER High Level Disinfectant For Medical Instruments And Endoscopes Instruction For Use</b>			
	<b>Document Number</b>	<b>Release date</b>	<b>Revision No</b>	<b>Revision date</b>
	TD.05.124	10.06.2019	06	24.05.2021



**ONESEPT PA POWDER**  
**HIGH LEVEL DISINFECTANT FOR MEDICAL**  
**INSTRUMENTS AND ENDOSCOPES**



**KAF GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

**Atakent Mah. 221 Sk. No:3A Rota Office A Blok Kat:14 D:82-83**  
**K.ÇEKMECE / İSTANBUL**

	<b>OneSept PA POWDER High Level Disinfectant For Medical Instruments And Endoscopes Instruction For Use</b>			
	<b>Document Number</b>	<b>Release date</b>	<b>Revision No</b>	<b>Revision date</b>
	TD.05.124	10.06.2019	06	24.05.2021

### General features

It is used to provide high level disinfection of all kinds of invasive surgical instruments, dental surgical instruments, surgical laparoscopy instruments, flexible and rigid endoscopes. It is a concentrated powder product. Our OneSept PA Powder products are offered for sale in powder form as 2 kg, 2.5 kg and 5 kg.

**Package content of our products;** OneSept PA POWDER-Transfer spoon\*/Product efficacy Control strip

\*The transfer spoon accessory is supplied with our powder product, it is used to transport the product while turning the product into solution, and it does not have any measurement function.

### Chemical Composition

Chemical Composition	Contents
Active ingredient	Peracetic Acid (a solution diluted with 2% water) 2250 ppm
Excipients	*Sodium Percarbonate *TAED *Citric Acid Anhydrate *Sodium carbonate *C10 Alcohol Ethoxylate *Ethylenediaminetetraacetic acid *Benzotriazole *Triple enzyme complex (Protease, amylase, lipase)

### Purpose of usage:

It is used to provide high level disinfection of interventional surgical instruments, dental surgical instruments, surgical laparoscopy instruments, endoscopes and heat sensitive instruments. It does not cause damage such as rusting, corrosion, softening of the endoscope covers, discoloration. It is anticorrosive. It is suitable for endoscope washing machines and manual use.

	<b>OneSept PA POWDER High Level Disinfectant For Medical Instruments And Endoscopes Instruction For Use</b>			
	<b>Document Number</b>	<b>Release date</b>	<b>Revision No</b>	<b>Revision date</b>
	TD.05.124	10.06.2019	06	24.05.2021

### Effect Mechanism

The mechanism of action of our products as disinfectants is bactericidal, mycobactericidal, virucidal, sporocidal and fungicidal. It denatures the proteins and enzymes of microorganisms contained in the medical device; It increases cell wall permeability by cleaving sulfhydryl(-SH) and sulfur (SS) bonds.

Products	Shelf Life	Tub Life Time	Usable surface materials	Microorganisms and Effect times
<b>OneSept PA POWDER</b>	2 years	12 hours	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Glass</li> <li>- Ceramic</li> <li>- Silicone</li> <li>- Plastic</li> <li>- PVC</li> <li>- Acrylic</li> <li>- polymer</li> <li>- Polycarbonate</li> <li>- Polystyrene</li> <li>- HDPE</li> <li>- Stainless steel</li> <li>- Porcelain</li> </ul>	<p><i>Bacillus subtilis</i> (EN 17126 and EN 13704) - 10 minutes</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i> (EN 13727) - 10 minutes</p> <p><i>Pseudomonas aeruginosa</i> (EN 13727) - 10 minutes</p> <p><i>Enterococcus hirae</i> (EN 13727) - 10 minutes</p> <p><i>Mycobacterium avium</i> (EN 14348) - 10 minutes</p> <p><i>Mycobacterium terrae</i> (EN 14348) - 10 minutes</p> <p><i>Candida albicans</i> (EN 13624) - 10 minutes</p> <p><i>Aspergillus niger</i> (EN 13624) - 10 minutes</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i> (EN 14651) - 10 minutes</p> <p><i>Pseudomonas aeruginosa</i> (EN 14651) - 10 minutes</p> <p><i>Enterococcus hirae</i> (EN 14651) - 10 minutes</p> <p><i>Mycobacterium avium</i> (EN 14563) - 10 minutes</p> <p><i>Mycobacterium terrae</i> (EN 14563) - 10 minutes</p> <p><i>Candida albicans</i> (EN 14562) - 10 minutes</p> <p><i>Aspergillus niger</i> (EN 14562) - 10 minutes</p> <p>Poliovirus Type 1 (EN 14476) -10 minutes</p> <p>Human Adenovirus Type 5 (EN 14476) -10 minutes</p> <p>Murine Norovirus (EN 14476) -10 minutes</p>

\*\* When our products were subjected to corrosion test according to TS 6773 standard, it was observed that they did not show any corrosion effect.

### Usage

OneSept PA POWDER (eg 100 gr for 5 L) solution is prepared with the transfer spoon of our product.



 SAĞLIK HİZMETLERİ	<b>OneSept PA POWDER High Level Disinfectant For Medical Instruments And Endoscopes Instruction For Use</b>			
	<b>Document Number</b>	<b>Release date</b>	<b>Revision No</b>	<b>Revision date</b>
	TD.05.124	10.06.2019	06	24.05.2021

- Disassembled medical instruments are immersed in the container/container filled with the product.
- It is kept for 10 minutes for the duration of the activity.
- Medical instruments are removed from the Container/Container.
- It is rinsed with distilled water.

#### Usage Concentration

It is a concentrated powder product and used by preparing a 2% solution. eg; 100 gr is used for 5 liters.

#### INDICATIONS-CONTRAINDICATIONS,SIDE EFFECTS, WARNINGS AND PRECAUTIONS

##### Indications

It contains parasetic acid and is indicated for high-level disinfection of the surfaces of invasive medical devices, Endoscopes, surgical-medical and heat-sensitive equipment.

*It is indicated for Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, Candida albicans, Aspergillus niger, Polyvirus type 1 virus, Human adenovirus type 5 virus, Murine norovirus microorganisms.*

##### Contraindications

- It should not be used directly (without pre-cleaning) on surfaces and instruments containing organic compounds (blood, tissue, urine, etc.).
- It should not be used together with other chemicals as it may react with chemicals.
- It should not be used by people who are sensitive to paracetic acid.

##### Side effects

Our products have no known side effects.

#### WARNINGS and PRECAUTIONS

- Be sure to read the instructions for use before using the product.
- Do not contact with eyes.
- Use protective clothing (gloves and eye/face protection) equipment.

	<b>OneSept PA POWDER High Level Disinfectant For Medical Instruments And Endoscopes Instruction For Use</b>			
	<b>Document Number</b>	<b>Release date</b>	<b>Revision No</b>	<b>Revision date</b>
	TD.05.124	10.06.2019	06	24.05.2021

- IF SWALLOWED: Rinse mouth, do not induce vomiting.
- In case of prolonged contact with skin, wash with plenty of soap and water. Get medical attention if skin irritation occurs.
- Do not reuse the packaging of the finished product .
- **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. In case of eye irritation, consult a doctor.
- Avoid spreading to the environment.
- Store in original container
- Dispose of waste and used packaging in accordance with official regulations.



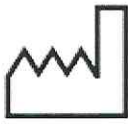

**Storage and Shipping Conditions:**

- Store at 0°C -25°C in its original packaging in a cool and dry place.
- The product shelf life is 2 years from the date of manufacture.
- Use the opened product within 6 (six) months.
- Keep out of reach of children.

**Sterilization**

Our products are used non-sterile.

- **Symbols Used on the Label and Their Meanings**

	Notified Body Number		Expiration date
	Production date		Non-sterile

**OneSept PA POWDER High Level Disinfectant For Medical Instruments  
And Endoscopes Instruction For Use**

**Document Number**

TD.05.124

**Release date**



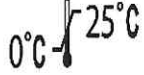




10.06.2019


**Revision No**

06

**Revision date**

24.05.2021

	Read the Instructions for Use.		Protect from sunlight.
	Store in dry place.		Do not use damaged package.
	Manufacturer Information		Do not use damaged package.
	Barcode number		Referance number
	Lot number		Caution (Warnings)

	<b>OneSept PA POWDER High Level Disinfectant For Medical Instruments And Endoscopes Instruction For Use</b>			
	<b>Document Number</b>	<b>Release date</b>	<b>Revision No</b>	<b>Revision date</b>
	TD.05.124	10.06.2019	06	24.05.2021



**KAF GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

**Merkez Adres: Atakent Mah. 221 Sk. No:3A Rota Office A Blok Kat:14 D:82-83  
K.ÇEKMECE / İSTANBUL**

**Üretim Adresi: Bardakçı Mah. Teknokent Sk. No:3 Tuşba/VAN**



/Vertimas iš anglų kalbos/

<i>/Logotipas: „KAF GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ“/</i>	<b>„OneSept PA POWDER“ aukšto lygio dezinfekavimo priemonė, skirta medicinos instrumentams ir endoskopams dezinfekuoti</b>			
	<b>Naudojimo instrukcijos</b>			
	<b>Dokumento Nr.</b>	<b>Leidimo data</b>	<b>Peržiūros Nr.</b>	<b>Peržiūros data</b>
	TD.05.124	2019-06-10	06	2021-05-24

/CE ženklavimas: 1783/

**„ONSEPT PA POWDER“**

**AUKŠTO LYGIO DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ,  
SKIRTA MEDICINOS INSTRUMENTAMS IR ENDOSKOPAMS  
DEZINFEKUOTI**

*/Logotipas: „KAF GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ“/*

**Atakent Mah. 221 Sk. No: 3A Rota Office A Blok Kat:14 D:82-83  
K.ÇEKMECE / İSTANBUL**

/Logotipas: „KAF GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ“/	„OneSept PA POWDER“ aukšto lygio dezinfekavimo priemonė, skirta medicinos instrumentams ir endoskopams dezinfekuoti			
	Naudojimo instrukcijos			
	<b>Dokumento Nr.</b>	<b>Leidimo data</b>	<b>Peržiūros Nr.</b>	<b>Peržiūros data</b>
	TD.05.124	2019-06-10	06	2021-05-24

### Bendrosios savybės

Naudojamas aukšto lygio dezinfekcijai įvairiems invaziniams chirurginiams instrumentams, chirurginiams stomatologijos instrumentams, chirurginiams laparoskopijos instrumentams, lankstiesiems ir standiesiems endoskopams. Tai koncentruotas miltelių pavidalo produktas. Mūsų „OneSept PA Powder“ produktai parduodami miltelių pavidalu 2 kg, 2,5 kg ir 5 kg pakuotėmis.

**Mūsų produktų pakuotės sudėtis:** „OneSept PA POWDER“ perkėlimo šaukštas\*/Produkto veiksmingumo kontrolės juostelė

\*Perkėlimo šaukšto priedas yra pridedamas prie mūsų miltelių pavidalo produkto ir yra naudojamas perkelti produktą gaminant tirpalą; jis neatlieka matavimo funkcijos.

### Cheminė sudėtis

Cheminė sudėtis	Medžiagos
Aktyvioji medžiaga	Peracto rūgštis (vandeniu praskiestas 2 % tirpalas) 2250 ppm
Pagalbinės medžiagos	*Natrio perkarbonatas *Tetraacetiletilendiaminas (TAED) *Citrinų rūgšties anhidridas *Natrio karbonatas *C10 alkoholio etoksilatas *Etilendiamintetraacto rūgštis *Benzotriazolas *Trijų fermentų kompleksas (proteazė, amilazė, lipazė)

### Naudojimo paskirtis:

Naudojamas aukšto lygio dezinfekcijai įvairiems intervenciniams chirurginiams instrumentams, chirurginiams stomatologijos instrumentams, chirurginiams laparoskopijos instrumentams, endoskopams ir karščiui neatspariems instrumentams. Nesukelia rūdžių, korozijos, nesuminkština endoskopo apvalkalų, nesukelia spalvos pakeitimo. Preparatas yra antikorozinis. Tinka naudoti su endoskopų plovimo mašinomis ir rankiniu būdu.

/Logotipas: „KAF GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ“/	<b>„OneSept PA POWDER“ aukšto lygio dezinfekavimo priemonė, skirta medicinos instrumentams ir endoskopams dezinfekuoti</b>			
	<b>Naudojimo instrukcijos</b>			
	<b>Dokumento Nr.</b>	<b>Leidimo data</b>	<b>Peržiūros Nr.</b>	<b>Peržiūros data</b>
	TD.05.124	2019-06-10	06	2021-05-24

### Veikimo mechanizmas

Mūsų dezinfekcinių produktų veikimo mechanizmas turi baktericidinį, mikrobaktericidinį, virucidinį, sporocidinį ir fungicidinį poveikį. Denatūruoja medicinos prietaise esančių mikroorganizmų baltymus ir fermentus; skaldo sulfhidrilų (-SH) ir sieros (SS) ryšius, bei taip padidina ląstelių sienų pralaidumą.

Produktai	Laikymo trukmė	Tirpalo galiojimo laikas	Naudojimui tinkami paviršiai	Mikroorganizmai ir poveikio laikas
„One Sept PA POWDER“	2 metai	12 valandų	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stiklas</li> <li>- Keramika</li> <li>- Silikonas</li> <li>- Plastiką</li> <li>- Polivinilchloridas (PVC)</li> <li>- Akrilas</li> <li>- Polimeras</li> <li>- Polikarbonatas</li> <li>- Polistirenas</li> <li>- Didelio tankio polietilenas (HDPE)</li> <li>- Nerūdijantis plienas</li> <li>- Porcelianas</li> </ul>	<p><i>Bacillus subtilis</i> (EN 17126 ir EN 13704) – 10 min.</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i> (EN 13727) – 10 min.</p> <p><i>Pseudomonas aeruginosa</i> (EN 13727) – 10 min.</p> <p><i>Enterococcus hirae</i> (EN 13727) – 10 min.</p> <p><i>Mycobacterium avium</i> (EN 14348) – 10 min.</p> <p><i>Mycobacterium terrae</i> (EN 14348) – 10 min.</p> <p><i>Candida albicans</i> (EN 13624) – 10 min.</p> <p><i>Aspergillus niger</i> (EN 13624) – 10 min.</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i> (EN 14651) – 10 min.</p> <p><i>Pseudomonas aeruginosa</i> (EN 14651) – 10 min.</p> <p><i>Enterococcus hirae</i> (EN 14651) – 10 min.</p> <p><i>Mycobacterium avium</i> (EN 14563) – 10 min.</p> <p><i>Mycobacterium terrae</i> (EN 14563) – 10 min.</p> <p><i>Candida albicans</i> (EN 14562) – 10 min.</p> <p><i>Aspergillus niger</i> (EN 14562) – 10 min.</p> <p>1 tipo poliovirusas (EN 14476) – 10 min.</p> <p>5 tipo žmogaus adenovirusas (EN 14476) – 10 min.</p> <p>Pelių norovirusas (EN 14476) – 10 min.</p>

\*\*Su produktais atlikus korozijos testą pagal TS 6773 standartą buvo pastebėta, kad jie nesukelia jokios korozijos.

### Naudojimas

„OneSept PA POWDER“ (pvz., 100 g 5-iems litrams) tirpalas yra paruošiamas naudojant mūsų preparato perkėlimo šaukštą.



/Logotipas: „KAF GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ“/	„OneSept PA POWDER“ aukšto lygio dezinfekavimo priemonė, skirta medicinos instrumentams ir endoskopams dezinfekuoti			
	Naudojimo instrukcijos			
	<b>Dokumento Nr.</b>	<b>Leidimo data</b>	<b>Peržiūros Nr.</b>	<b>Peržiūros data</b>
	TD.05.124	2019-06-10	06	2021-05-24

- Išardyti medicinos instrumentai yra panardinami į talpą/preparato pripildytą talpą.
- Instrumentai taip laikomi veikimo laiką – 10 minučių.
- Medicinos instrumentai yra išimami iš Talpos/Talpos.
- Nuskalaujama distiliuotu vandeniu.

### Naudojimo koncentracija

Tai yra koncentruotas miltelių pavidalo preparatas, kuris naudojamas paruošiant 2 % tirpalą, pvz., 100 g 5-iems litrams.

## INDIKACIJOS, KONTRAINDIKACIJOS, ŠALUTINIAI POVEIKIAI, ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

### Indikacijos

Produkto sudėtyje yra peracto rūgšties ir jis yra skirtas invazinių medicinos prietaisų, endoskopų, chirurginių-medicininių ir karščiui neatsparių įrenginių paviršių aukšto lygio dezinfekcijai.

Produktas skirtas *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*, *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium terrae*, *Candida albicans*, *Aspergillus niger*, 1 tipo polioviruso, 5 tipo žmogaus adenoviruso, pelių noroviruso mikroorganizmams.

### Kontraindikacijos

- Nenaudoti tiesiai (neatlikus pirminio valymo) ant paviršių ir instrumentų, ant kurių yra organinių junginių (kraujo, audinių, šlapimo ir t. t.)
- Nenaudoti kartu su kitais chemikalais, nes gali įvykti reakcija.
- Produkto negali naudoti peracto rūgščiai jautrūs žmonės.

### Šalutiniai poveikiai

Mūsų produktai neturi žinomų šalutinių poveikių.

## ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Prieš naudodami produktą būtinai perskaitykite instrukcijas.
- Neleiskite produktui patekti į akis.
- Dėvėkite apsauginę aprangą (pirštines ir akių arba veido apsaugą).



/Logotipas: „KAF GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ“/	„OneSept PA POWDER“ aukšto lygio dezinfekavimo priemonė, skirta medicinos instrumentams ir endoskopams dezinfekuoti			
	Naudojimo instrukcijos			
	<b>Dokumento Nr.</b>	<b>Leidimo data</b>	<b>Peržiūros Nr.</b>	<b>Peržiūros data</b>
	TD.05.124	2019-06-10	06	2021-05-24

- PRARIJUS: išskalaukite burną, neskatininkite vėmimo.
- Ilgo sąlyčio su oda atveju, gausiai plaukite muilu ir vandeniu. Esant odos sudirgimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
- Iš naujo nenaudokite pasibaigusio produkto pakuotės.
- **PATEKUS Į AKIS:** kelias minutes atsargiai plaukite vandeniu. Esant akių sudirgimui, kreipkitės į gydytoją.
- Venkite išplitimo į aplinką.
- Laikykite originalioje pakuotėje.
- Atliekas ir panaudotą pakuotę šalinkite pagal oficialius reikalavimus.

#### Laikymo ir transportavimo sąlygos:

- Laikykite 0 °C–25 °C temperatūroje originalioje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje.
- Produkto laikymo trukmė yra 2 metai nuo pagaminimo datos.
- Atidarytą produkto pakuotę sunaudokite per 6 (šešis) mėnesius.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.


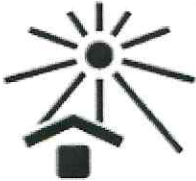

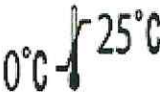

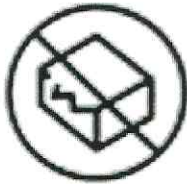




#### Sterilizavimas

Mūsų produktai yra naudojami nesterilizuoti.

- Etiketėje nurodomi ženklai ir jų reikšmės

	Notifikuotosios įstaigos numeris		Galiojimo pabaigos data
	Pagaminimo data		Nesterilus

/Logotipas: „KAF GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ“/	<b>„OneSept PA POWDER“ aukšto lygio dezinfekavimo priemonė, skirta medicinos instrumentams ir endoskopams dezinfekuoti</b>			
	<b>Naudojimo instrukcijos</b>			
	<b>Dokumento Nr.</b>	<b>Leidimo data</b>	<b>Peržiūros Nr.</b>	<b>Peržiūros data</b>
	TD.05.124	2019-06-10	06	2021-05-24

	Skaitykite naudojimo instrukcijas		Saugokite nuo saulės spindulių
	Laikykite sausoje vietoje		Laikymo temperatūra
	Gamintojo informacija		Nenaudokite, jei pakuotė pažeista
	Brūkšninio kodo numeris		Registracijos numeris
	Serijos numeris		Atsargiai (įspėjimai)

/Logotipas: „KAF GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ“/	<b>„OneSept PA POWDER“ aukšto lygio dezinfekavimo priemonė, skirta medicinos instrumentams ir endoskopams dezinfekuoti</b>			
	<b>Naudojimo instrukcijos</b>			
	<b>Dokumento Nr.</b>	<b>Leidimo data</b>	<b>Peržiūros Nr.</b>	<b>Peržiūros data</b>
	TD.05.124	2019-06-10	06	2021-05-24

/Logotipas: „KAF GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ“/



**„KAF GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.“**

**Merkez Adres: Atakent Mah. 221 Sk. No: 3A Rota Office A Blok Kat:14 D:82-83  
K.ÇEKMECE / İSTANBUL**

**Üretim Adresi: Bardakçı Mah. Teknokent Sk. No:3 Tuşba/VAN**