

Tan Big Bubble (DALK*) Set



Prof. Donald Tan
Singapore

*Deep Anterior Lamellar Keratoplasty

The original Anwar Big Bubble technique has been modified to ensure a higher rate of success in air delivery to the posterior stroma- Descemet's membrane interface while reducing the risk of inadvertent perforation.


Tan Micro Lamellar Dissector: AE-2541

- Used to initiate dissection of the anterior 1/2 corneal stroma after partial trephination of about 2/3 corneal thickness
- Also used to dissect along the periphery
- Blade contours to the curve of the cornea



Tan Large Lamellar Dissector: AE-2547

- Used to complete dissection of the anterior 1/2 corneal stroma after initial dissection with the micro dissector
- Large surface area keeps dissection along the lamellar plane
- Blade contours to the curve of the cornea

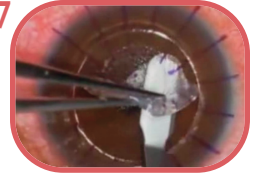

14. 4., 5. Tan DALK žirklys

Tan DALK Scissors


* Naudojamos pašalinti priekinį ragenos stromos sluoksnį ir atverti stromą prieš oro injekciją

* Naudojamos padalinti stromos lamelą į 4 ketvirčius bei pašalinti po didelio burbulo sudarymo



- Used to remove the anterior layer of corneal stroma to expose the stromal bed prior to air injection
- Used to cut the posterior stroma lamella into 4 quadrants and remove after big bubble formation
- Jaws are highly polished to glide across the Descemet's membrane
- Unique safety platform on the lower tine ensures blades are well separated from Descemet's membrane when cutting the stroma
- Available in both left (AE-5667) and right (AE-5666) configurations

* Unikali saugos platforma ant apatinio geležtės krašto užtikrina, kad žirklys geležtės būtų gerai atskirtos nuo descemeto membranos, kerpant stromą.

* Galimos tiek kairės (AE-5667), tiek ir dešinės (AE-5666) konfigūracijos

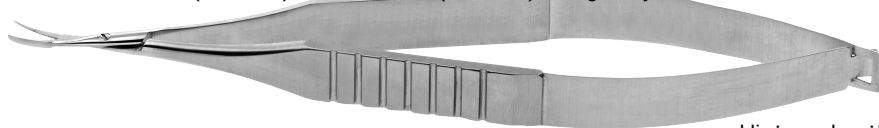

- spyruoklinės rankenėlės

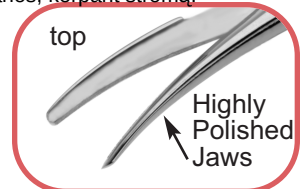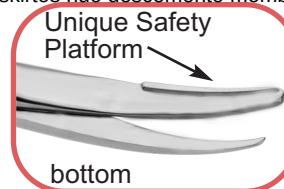

14. 1.


Tan DALK Cannula: AE-7803

- Used to create an ideal big bubble when attached to a 5mm air-filled syringe
- Tip is blunt and smooth to prevent inadvertent perforation
- Curved shaft for easy tunneling through deep stroma

Naudojama suformuoti idealiai dideliame burbului, prijungus prie 5mm oru užpildyto švirkšto


Antgalis yra bukas ir glotnus tam, kad būtų išvengta netyčinės perforacijos

Lenktas galiukas lengvam tuneliavimui per gilią stromą

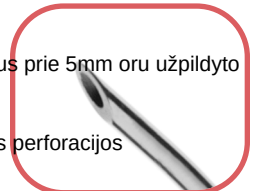

Tan Marginal Dissector: AE-2549

- Used to effectively separate any remaining stromal attachments from the Descemet's membrane at the periphery of the big bubble
- T-shaped design dissects in such a manner which allows better fitting between the donor-host interface
- Edges are highly polished to prevent inadvertent perforation

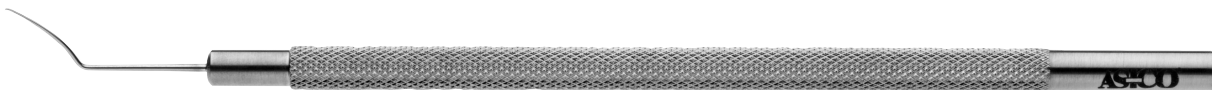

ASICO[®]

Today's Precision... Tomorrow's Vision™

© 2009 ASICO LLC



BR344-09

26 Plaza Drive :: Westmont, IL 60559
1.630.986.8032 :: 1.800.628.2879 (toll free)
1.630.986.0065 (fax) :: info@asico.com :: www.asico.com