

A.4081

VALVA

poz. 1.1



The disposable and self-lighting anal retractor is suitable for all proctological interventional procedures, including those carried out in a nonspecialist outpatients' department.

vienkāršs retraktors ar šviesas šaltinā tīkams visoms proktoloģiskām intervencijām procedūroms



CE

Disposable, self-lighting anal Valva-retractor.

The anal Valva-retractor is an evolution of the Self-light® proctoscope range, developed specifically for surgical use. Its characteristics are similar to those of models A.4023 and A.4024: disposable, self-lighting with pen light or Sapi Med

cold light generators.


Its curved shape, transparency and length are suitable for open and closed haemorrhoidectomy, sphincterotomy, colo/leo-anal anastomosis, anoplasty, etc.



TECHNICAL FEATURES


- Flash-free
- Guaranteed atraumatic
- Compatible with all Sapi Med light sources or pen-light
- Conforms fully with essential requirements of European Council Directive 93/42/EU
- Latex free
- Non sterile / Sterile

REF A.4081 CE

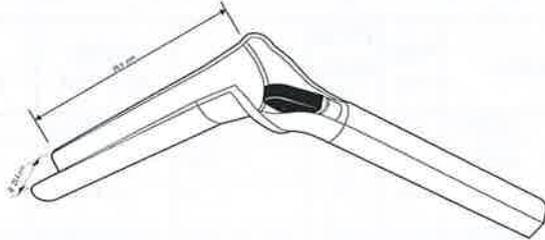


ilgus
Valva length: 98,3mm
Tube diameter: 22,4mm
 diametras
Quantity per box: 25 pcs. + 1 pen-light.

REF A.4081ST CE

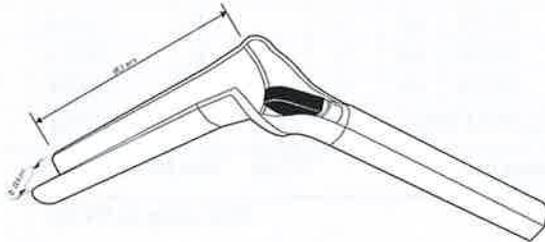


Sterile.
Sterilised by: ETO
Quantity per box: n° 25 pz.

REF A.4081L CE

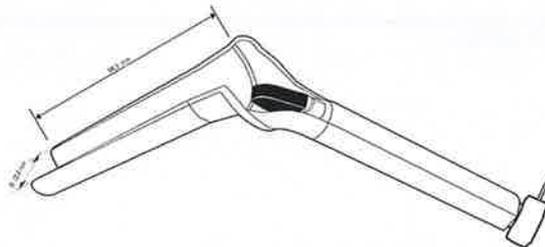

LED self-lighting version.
Quantity per box: n° 25 pz.

REF A.4081LST CE

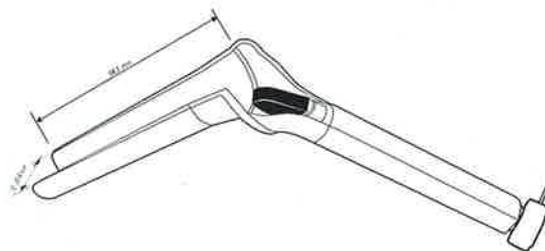

LED self-lighting sterile version.
Sterilised by: ETO
Quantity per box: n° 25 pz.

KOPIJA TIKRA
 2019-07-16
 Uģe Armonaitienē
 par ārstu pirkumu
 speciālistē

Pen-Light per dispositivi SAPI MED.

Pen-Light for SAPI MED range of scopes.

šviesos žaltinis

p02.1.2



CE

DATI TECNICI

Adattatore LED

Luminosità: 20 lm
 Colore: bianco caldo
 Angolo del raggio: 15°
 Consumo: 0.5 Watt
 Voltaggio del LED: 3.0V. – 3.2V.

Batteria

Modello: LR03 AM4 Alkaline
 Tipologia: AAA 1.5v
 Durata: ~ 42 ore
 Senza mercurio e cadmio.

TECHNICAL FEATURES

Adapter LED

Brightness: 20lm
 Colour: warm white
 Beam angle: 15°
 Power consumption: 0.5 Watt
 LED Voltage: 3.0V. – 3.2V

Battery

Model: LR03 AM4 Alkaline
 Size: AAA 1.5v
Light life: ~ 42 hours
 Mercury & Cadmium free

šviesos šaltinis
20 lumens

veikimo laikas

ISTRUZIONI

Aprire la confezione.
 Svitare il pulsante di accensione e inserire la pila dentro la pen-light.
 Fare riferimento al disegno sulla pen-light per la corretta posizione della pila.
 Inserire la pen-light dentro la cavità dell'impugnatura degli anoscopi, retrattori e rettoscopi SAPI MED.
 Accendere la luce premendo sul pulsante di accensione. Al termine della visita rimuovere la pen-light dall'impugnatura.

PULIZIA

Usare un panno soffice e qualunque disinfettante.
 Non immergere il dispositivo in acqua.
 Non mettere il dispositivo in autoclave.

INSTRUCTIONS FOR USE

Open the blister.
 Unscrew the switch button and insert the battery into the pen-light.
 Please make reference to the drawing on the pen-light for the right position of the battery.
 Insert the pen-light into the cavity of the handle of SAPI MED anoscopes, retractors, rectoscopes.
 Switch on the light pressing on the switch button. At the end of the examination remove the pen-light from the handle.

CLEANING

Use a soft tissue and any disinfectant.
 Do not immerse the device.
 Do not autoclave the device.