

scaling

Scaling

	N°1 F00246 Universal	15.
	N°2 F00247 High power	
	N°3 F00248 Removing stains	
	10P F00253 Supra and sub- gingival < 3mm	
	10X F00359 Interproximal	
	10Z F00254 Subgingival	
	N°15 F00245 Supra and sub- gingival	

periodontics

Curettes & debridement

	H1 F00366 Anterior teeth, diamond- coated	16.
	H2L F00367 Premolars & molars, l eft-angled	
	H2R F00368 Premolars & molars, right-angled	
	H3 F00369 Anterior teeth, curette	17.
	H4L F00114 Premolars & molars, left-angled	
	H4R F00115 Premolars & molars, right-angled	

perioFine

Periofine

	PFU F02170 Universal
	PFL F02171 Left-angled
	PFR F02172 Right-angled

implantProtect

Pure Titanium

Peri-implantitis treatment

	IP1 F02121 Implant abutments and wide threads
	IP2L F02122 Medium implant threads, left-angled
	IP2R F02123 Medium implant threads, right-angled
	IP3L F02124 Narrow implant threads, left-angled
	IP3R F02125 Narrow implant threads, right-angled

perioSoft

implant maintenance

	PH1 (x4) F00702 Anterior teeth
	PH2L (x4) F00705 Premolars & molars, left-angled
	PH2R (x4) F00706 Premolars & molars, right-angled

perioPrecision

PerioPrecision

	P2L F00090 Narrow pockets debridement, left-angled
	P2R F00091 Narrow pockets debridement, right-angled

periomaintenance

BDR

Periodontal maintenance (BDR)

	TK1-1S F01001 Short probe
	TK1-1L F01004 Long probe
	TK2-1L F02162 Premolars & molars, left-angled
	TK2-1R F02161 Premolars & molars, right-angled


endodontics

Endodontics - Irrigation




irrisafe

Passive Ultrasonic Irrigation

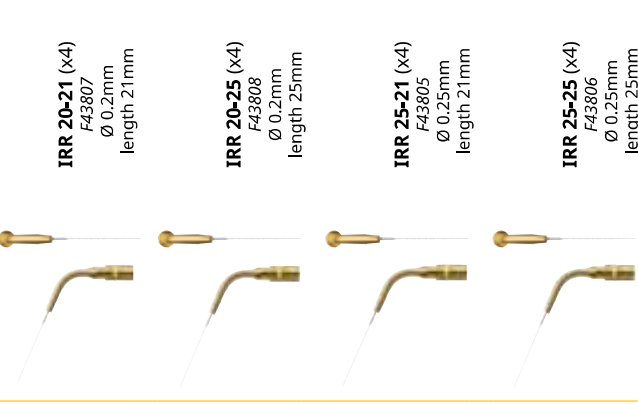


endosurgery

Apical surgery

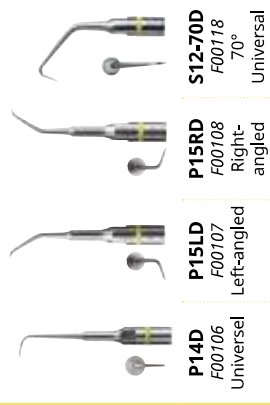


endodontics

Retreatment

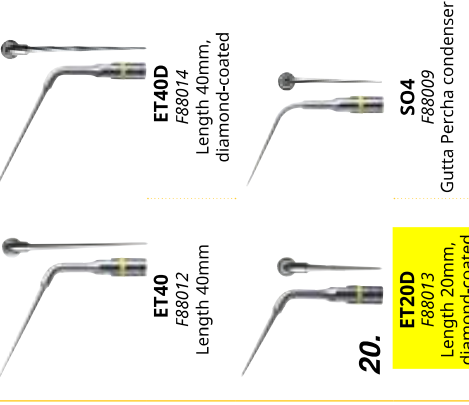


endosuccess

Apical surgery

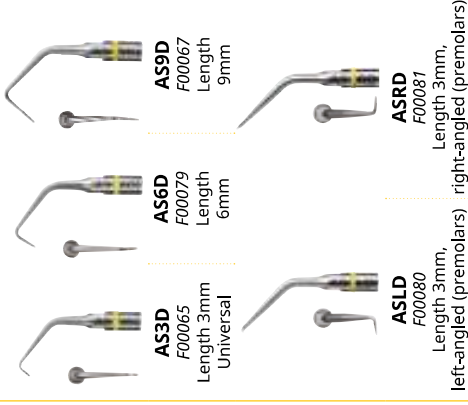


endosuccess

Retreatment

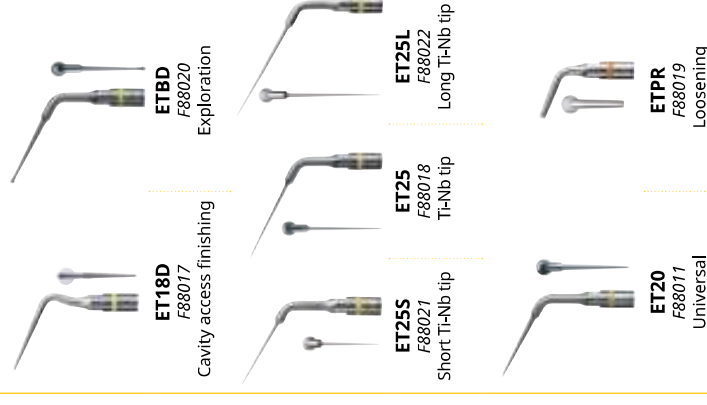

endosuccess

Canal Access Prep

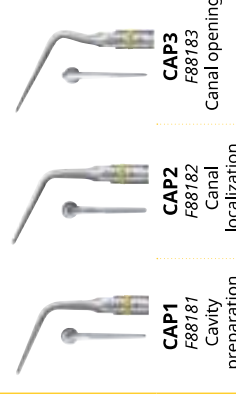


Ease of use

For smooth and safe procedures



SIMPLE AND INTUITIVE SETTINGS WITH THE COLOR CODING SYSTEM

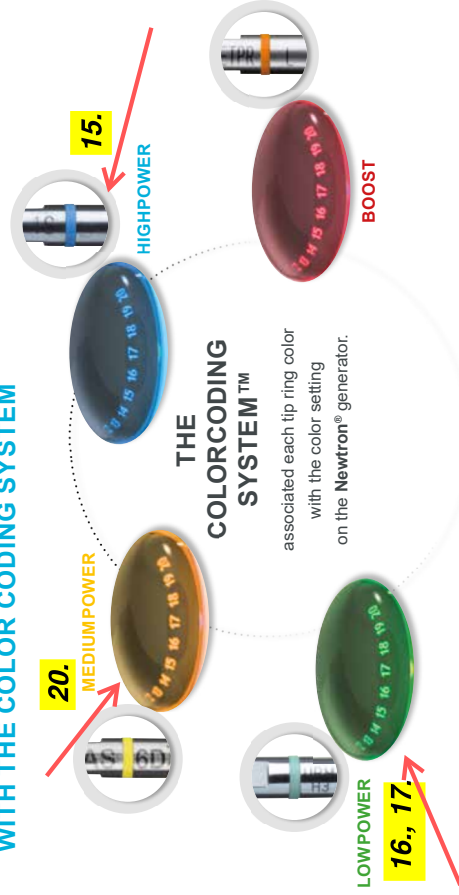

F.L.A.G.™ FOR B.LED GUIDES THE PRACTITIONER FOR A PRECISE AND ACCURATE TREATMENT

Applied on teeth, F.L.A.G.™ for B.LED highlights the dental plaques when used under the **Newtron®** slim B.LED handpiece and guides the practitioner in his procedure.

FLAG
FOR B.LED

- Enhances treatment accuracy and avoids the overuse of instruments, thus preserving healthy tissues.
- Enables practitioners to educate patients and to encourage compliance.



IRRIGATION SYSTEM OPTIMIZED TO ALL THE PROCEDURES

Limit cross-contamination with **2 graduated tanks** (300 mL or 500 mL) to add and mix disinfectant solutions directly, and to fill in during procedures.

Easy and precise flow adjustment for a powerful cavitation and the maximum tip efficiency: **deposits fragmentation**, disinfecting effect.

Thanks to the **inner part of the handpiece in titanium**, any type of irrigation solution including water, sodium hypochlorite and chlorhexidine, can be used.



A DESIGN RESPONDS TO ERGONOMICS AND HYGIENE

- Elegant device:** flat glass surface, clean line and luminous power dial.
- Adapted to practice:** inclined front panel for better interaction with the practitioner and accessibility to the settings and the handpiece.
- Meeting hygiene requirements:** total hygiene watertightness, removable power adjustment knob for easy decontamination.



LET'S FIGHT CORONAVIRUS TOGETHER

First step

supra-gingival scaling

Prophylaxis

scaling



15.

Ref. F00246

Universal tip

Recommended for simple cases:
gross supra-gingival scaling.



- Tangential orientation to the surface.
- To-and-fro sweeping to "detach" the tartar whilst respecting the enamel.



Ref. F00247

Voluminous calculus

Indicated for the removal of significant supra-gingival deposits. Apply the flat part to the tooth surfaces.



2



Ref. F00245

Slim tip

Developed for supra- and sub-gingival scaling. Its more active lateral edges make it suitable for scaling the interproximal spaces.



15

Finer and longer than tip No.1, it is also powerful and robust.



Ref. F00359

Interproximal

With its flat active part, it is particularly suitable for the interproximal spaces and supra-gingival scaling. Its anatomical shape allow fast and efficient procedure.



10X



Ref. F00248

Stains

Removal of marks and stains (tobacco, tea, coffee, etc.). The tip is used by applying the rounded extremity to the surface to be treated.

Scaling Kit (Ref. F00900): supplied with tips No.1, No.2, No.10X and No.10Z, an autoclavable plastic box and 4 autoclavable blue torque wrenches.

Versatile, gentle hygiene treatment

hygiene

Prophylaxis

Scaling Kit (Ref. F00934): supplied with tips No.1, No.1S, No.10X and H3, an autoclavable plastic box, 3 blue and one green autoclavable torque wrenches.

Root planing

Periodontics

periodontics



16.

Ref. F00366

Anterior tooth root planing, diamond-coated tip 30 µm

- Diamond-coated mini-tip recommended for simple cases in the cervical area.
- Also effective for the withdrawal of granulation tissue.



The H1 tip should be used without pressure and above the epithelial attachment because it is abrasive.



Ref. F00368

Root planing of the premolar and molar sectors, right-oriented, diamond-coated tip 30 µm

- Diamond-coated micro-probe recommended for the treatment of furcations and narrow spaces.



The H2 tips are also effective for the treatment of abscesses.

Intro Perio Kit (Ref. F00718): supplied with H1, H2L, H2R and H3 tips, an autoclavable plastic box and 4 green autoclavable torque wrenches.

Periodontal maintenance

perioPrecision



Ref. F00090

Debridement of the premolar and molar sectors, left-oriented

Round micro-tip recommended for periodontal debridement in the presence of a fine periodontium and in narrow areas.

- Maxillary: buccal and distal surfaces of sector 2, pivots at 13, then the palatine and mesial surfaces of sector 1.
- Mandibular: buccal and distal surfaces of sector 4, pivots at 43, then lingual and mesial surfaces of sector 3.



Ref. F00091

Debridement of the premolar and molar sectors, right-oriented


Second instrument in the sequence, it follows the use of the P2L tip.

The double bend makes it possible to treat areas that are difficult to access (inter-radicular spaces, deep pockets).

- Maxillary: buccal and mesial surfaces of sector 2, pivots at 13, then buccal and distal surfaces of sector 1.
- Mandibular: lingual and mesial surfaces of sector 4, pivots at 43, then buccal and distal surfaces of sector 3.



The P2 tips can also be used to remove small amounts of excess cement when bonding fixed prosthesis.

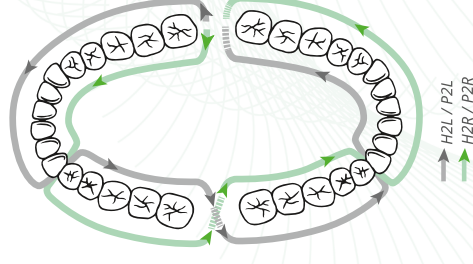

PerioPrecision Kit (Ref. F00739): supplied with P2L, P2R and TK1-15 tips, an autoclavable plastic box and 3 green autoclavable torque wrenches.



17.

Ref. F00369

H3

Initial periodontics, anterior sector

Ideal instrument for initial treatment. It makes treatment of the incisor-canine block possible. The guide edge is oriented parallel to the pocket.

The H3 tip is descended into the periodontal pocket without risk of injury to the ligament. The cavitation will lift the debris out.



Ref. F00114

H4L

Periodontics for the premolar and molar sectors, left-oriented

First instrument in the sequence for treating all the surfaces and the furcations.

- Maxillary: buccal and distal surfaces of sector 2, pivots at 13, then the buccal and mesial surfaces of sector 1.
- Mandibular: buccal and distal surfaces of sector 4, pivots at 43, then lingual and mesial surfaces of sector 3.



Ref. F00115


H4R

Periodontics for the premolar and molar sectors, right-oriented

Second instrument in the sequence, it follows the use of the H4L tip.

- Maxillary: palatine and mesial surfaces of sector 2, pivots at 13, then buccal and distal surfaces of sector 1.
- Mandibular: lingual and mesial surfaces of sector 4, pivots at 43, then buccal and distal surfaces of sector 3.

The H4L and H4R tips make it possible to treat the whole mouth in a single session.

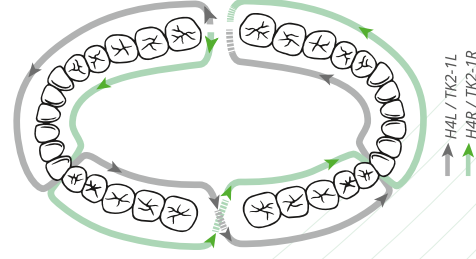

Ref. F01001

TK1-1S

Short probe

Graduated every 3mm, the TK1-1S tip is recommended for examining shallow and medium pockets (< 4mm) and for the maintenance of simple cases.



Ref. F01004

TK1-1L

Long probe

Recommended for examining and maintenance of medium to deep pockets (> 4mm). It is a diagnosis aid during the debridement and irrigation of pockets.



The TK1 probe tips are used without pressure following the contour of the pockets and skimming over the root surface.



Ref. F02162

TK2-1L

Maintenance of the premolar and molar sectors, left-oriented

Recommended for the maintenance of moderate to deep pockets and furcations. Equivalent to the Nabers probe.



Ref. F02161

TK2-1R

Maintenance of the premolar and molar sectors, right-oriented

It is complementary to the TK2-1L tip and is recommended for the maintenance of moderate to deep pockets and furcations. Equivalent to the Nabers probe.



Canal Retreatment

endosuccess
Retreatment



Ref. F88011 **ET20**

Retreatment tip, length 20mm, taper 6%

The ET20 steel tip is used in the 1st coronal third:

- Extraction of filling material, silver points, broken instruments,
- Removal of debris and the smear layer.



Ref. F88013 **ET200**

Diamond-coated retreatment tip, 30 µm, length 20mm, taper 5%

The ET200 tip in diamond-coated steel is used in the 1st coronal third to remove very hard materials by brushing the walls.



Ref. F88018 **ET25**

Titanium-Niobium tip, length 20mm, taper 3%

Suggested tip for retreatment in the middle and apical thirds and the extraction of broken instruments.



Ref. F88021 **ET25S**

Short Titanium-Niobium tip, length 15mm, taper 4%

The ET25S (short) tip is designed for retreatment in the coronal third and the isthmuses.



Ref. F88022 **ET25L**

Long Titanium-Niobium tip, 25mm, taper 3%

The ET25L (long) is suitable for retreatment in the apical third and long, straight canals.

The Titanium-Niobium alloy of the ET25 range allows perfect transmission of the ultrasonic vibrations and tip flexibility.



EndoSuccess Retreatment Kit (Ref. F00737): supplied with ET18D, ET20, ET25, ET25S, ET26D and ET28 tips, a metal holder and an autoclavable universal wrench.

* E.W. Collings "Applied superconductivity, metallurgy and physics of titanium alloys" 1985

Retreatment and obturation

endodontics



Ref. F88014 **ET40D**

Long retreatment tip, 40mm, diamond-coated 30 µm, taper 4%

The ET40D is a diamond-coated steel tip for retreatment of very hard material in the middle third.



Ref. F88012 **ET40**

Long retreatment tip, 40mm, taper 4%

The ET40 is a steel tip for rapid removal of broken instruments in the middle third of wide, straight canals.



Ref. F88009 **SO4**

Fine condenser, length 40mm, taper 4%

The SO4 tip is designed for lateral condensation of gutta percha by heating effect. It is used dry, without irrigation.



ET25 tips can be pre-formed for the treatment of curved canals.

Endo Kit (Ref. F00925): supplied with ET20D and ET40D tips, a blister pack of 4 K15-21 files, a blister pack of 4 K15-25 files, an autoclavable plastic box and an autoclavable universal wrench.

POWER SETTINGS - TABLE-TOP DEVICES / TABLEAU DE REGLAGES - APPAREILS DE TABLE

	Tips / Inserts	NEWTRON® BOOSTER NEWTRON® P5 NEWTRON® P5XS	PMax XS P5 NEWTRON® P5 NEWTRON® XS	SUPRASSON® PMAX PROPHY MAX	P5 BOOSTER	PIEZOTOME®** IMPLANTCENTER™** PIEZOTOME® 2* IMPLANTCENTER™ 2*	IRRIGATION	
PROPHYLAXIS PROPHYLAXIE	1 / 2 / 3 / 1S	14	14	5	10	5		15.
	10P	14	14	5	10	5		
	10X / 10Z	12	12	2	9	2		
	EX1 / EX2 / EX3 / EXL / EXR	12	12	2	9	2		
PERIODONTICS PARODONTIE	H1 / H2L / H2R / H3 / H4L / H4R	2	2	2	1	2		16. 17.
	P2L / P2R	3	3	3	2	3		
	TK1-1S	2	2	2	1	2		
	TK1-1L / TK2-1L / TK2-1R	2	2	2	1	2		
IMPLANT CARE SOINS DE L'IMPLANT	PH1 / PH2L / PH2R	2	2	3	2	3		
	IP1	3	3	3	N/A	3		
	IP2L / IP2R / IP3L / IP3R	5	5	4	N/A	4		
ENDODONTICS ENDODONTIE	CAP1	10	10	6	7	6		20.
	CAP2 / CAP3	10	10	6	7	6		
	ET18D	10	10	6	7	6		
	ET20 / ET25 / ET25S / ETBD	7	7	3	5	3		
	ET20D / ET25L / ET40 / ET40D	7	7	3	5	3		
	IRR20-21 / IRR20-25 / IRR25-21 / IRR25-25	9	9	5	7	5		
	K10 / K15 / K25 / K30	6	6	1	4	1		
	AS3D / AS6D	7	7	3	5	3		
	AS9D	6	6	1	4	1		
	ASLD / ASRD	7	7	3	5	3		
	P14D / S12-70D	7	7	3	5	3		
	P15LD / P15RD	7	7	3	5	3		
PROSTHESIS & ESTHETICS PROTHESES & ESTHETIQUE	SO4	7	7	3	5	3		
	PM1 / PMS1	15	15	6	11	6		
	PM2 / PMS2	10	10	6	7	6		
	PM3 / PMS3	8	8	4	6	4		
	PM4	15	15	5	10	5		
	PMV1 / PMV2 / PMV3	15	15	5	10	5		
	PMV4 / PMV5 / PMV6	10	10	6	7	6		
	SAE / ETPR	20	20	10	14	10		
C20	11	11	1	8	1			

*Medical devices equipped with Newtron® handpiece and used in Newtron® mode / Dispositifs médicaux équipés d'une pièce à main Newtron®, à utiliser en mode Newtron®

Power Modes / Modes de Puissance 20. 15.

NEWTRON®: Low / Basse - Medium / Moyenne - High / Haute - Very high / Très haute

16., 17.

Power Settings Scale / Echelle de Réglages

NEWTRON® BOOSTER / NEWTRON® P5 / NEWTRON® P5XS / P5 NEWTRON® (LED) / P5 XS NEWTRON® (LED) / P-Max XS / IMPLANTCENTER™ Cube: from 1 to 20 depending on clinical range / de 1 à 20, couvre toutes les gammes

SUPRASSON P-Max / PROPHYMax / PIEZOTOME® / IMPLANTCENTER™ / PIEZOTOME® 2 / IMPLANTCENTER™ 2: from 1 to 10 in each clinical range / de 1 à 10 dans chaque gamme

P5 BOOSTER: from 1 to 14 depending on clinical range / de 1 à 14, couvre toutes les gammes

See individual medical device instructions manuals for further informations on satelec.com/documents.

Lire attentivement le manuel d'utilisation du dispositif médical, pour de plus amples informations sur satelec.com/documents.












YouTube



www.youtube.com/user/acteonatelec

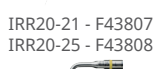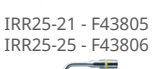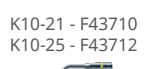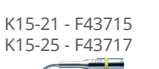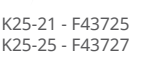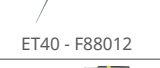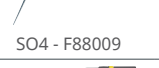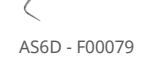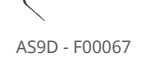

PROPHYLAXIS PROPHYLAXIE 	Scaling Détartrage					
	Hygiène Hygiène					
	Excavus					
PERIODONTICS PARODONTIE 	Periodontics Parodontie					
	Periomaintenance BDR					
	PerioPrecision					
IMPLANT CARE SOINS DE L'IMPLANT 	PerioSoft					
	ImplantProtect					
ENDODONTICS ENDODONTIE 	Endosuccess Canal Access Prep					
	Endosuccess Retreatment					
	IrriSafe K Files / Limes K					
						
	Endodontics Endodontie					
	Endosuccess Apical Surgery					
PROSTHESIS & ESTHETICS PROTHÈSES & ESTHÉTIQUE 	Endosurgery					
	PerfectMargin Rounded					
	PerfectMargin Shoulder					
	PerfectMargin Veneers					
	Loosening & Condensation Descellement & Condensation					



ATTESTATION / CERTIFICATE N° 21427 rev. 11

Délivrée à Paris le 03 avril 2020

Issued in Paris on April 3rd, 2020

ATTESTATION CE / EC CERTIFICATE

Approbation du Système Complet d'assurance Qualité / Approval of full Quality Assurance System

ANNEXE II excluant le point 4 Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

ANNEX II excluding section 4 Directive 93/42/EEC concerning medical devices

Pour les dispositifs de classe III, un certificat CE de conception est requis

For class III devices, a EC design certificate is required

Fabricant / Manufacturer

SATELEC, a Company of ACTEON Group

17 av. Gustave Eiffel, ZI du Phare

33700 MERIGNAC FRANCE

Catégorie du(des) dispositif(s) / Device(s) category

Dispositifs médicaux et dispositifs électro médicaux pour l'art dentaire, l'électro chirurgie et les équipements de chirurgie des os et substituts osseux, avec leurs accessoires stériles et non stériles

Medical devices and electromedical devices for dental art, electrosurgery and bone and bone substitute surgery equipments, with associated sterile and non-sterile accessories

Voir détails sur addendum / See attachment for additional information

GMED atteste qu'à l'examen des résultats figurant dans le rapport référencé P159650 / P601259, le système d'assurance qualité - pour la conception, la production et le contrôle final - des dispositifs médicaux énumérés ci-dessus est conforme aux exigences de l'annexe II excluant le point 4 de la Directive 93/42/CEE.

GMED certifies that, on the basis of the results contained in the file referenced P159650 / P601259, the quality system - for design, manufacturing, and final inspection - of medical devices listed here above complies with the requirements of the Directive 93/42/EEC, annex II excluding section 4

La validité du présent certificat est soumise à une vérification périodique ou imprévue

The validity of the certificate is subject to periodic or unexpected verification

Début de validité / Effective date : April 3rd, 2020 (included)

Valable jusqu'au / Expiry date : May 26th, 2024 (included)



On behalf of the President

Béatrice LYS

Technical Director



Addendum au certificat n° 21427 rev. 11 page 1/5
Addendum of the certificate n° 21427 rev. 11
 Dossiers / Files N° P159650 / P601259

Identification des dispositifs / Identification of devices

Désignation du dispositif / Accessoires marqués CE <i>Device designation / CE marked accessories</i>	Réf commerciale du dispositif ou code article <i>Device commercial reference or article code</i>	Code NBOG NBOG code	Classe du DM MD class
Consoles de commande (ultrasonique, d'aéropolissage et / ou moteur) avec leurs accessoires stériles et non stériles destinées à l'art dentaire (soins conventionnels et/ou de chirurgie intra-orale) -- <i>Control consoles (ultrasonic, air polishing and / or motor) with associated sterile and non-sterile accessories for dentistry (conventional and or intraoral surgery)</i>			
SUPRASSON P5 BOOSTER	TA10	MD 1106	Ila
P5 NEWTRON -- P5 NEWTRON LED -- P5 NEWTRON XS - - P5 NEWTRON XS LED -- ULTRAWAVE -- ULTRAWAVE XS LED	TF48	MD 1106	Ila
NEWTRON BOOSTER	TBAB	MD 1106	Ila
NEWTRON P5 B.LED -- NEWTRON P5 XS B.LED	TBAC	MD 1106	Ila
VDW.ULTRA Standalone Ultrasonic -- P5 PRO Ultra Piezo Ultrasonic	TF50	MD 1106	Ila
PROPHYMAX	TC21	MD 1106	Ila
AIR MAX	TC20	MD 1106	Ila
GENIUS -- ENDO DUAL	TO69	MD 1106	Ila
PIEZOTOME SOLO LED	TO23	MD 1106	Ila
PIEZOTOME 2 -- IMPLANTCENTER 2	TO24	MD 1106	Ila
PIEZOTOME CUBE	TO37	MD 1106	Ila
Modules de commande (ultrasonique, moteur) destinés à être intégrés dans un système électronique de soins dentaires avec leurs accessoires stériles et non stériles -- <i>Control modules (ultrasonic, motor) intended to be integrated in dental care electronic system with associated sterile and non-sterile accessories</i>			
SP NEWTRON -- SP 4055 NEWTRON -- SP NEWTRON LED	TM07	MD 1106	Ila
XINETIC	TBAA	MD 1106	Ila
Consoles de commande d'électrochirurgie avec leurs pièces à main et leurs électrodes d'électrochirurgie stériles et non stériles et leurs accessoires stériles et non stériles -- <i>Electro surgery control consoles with handpiece holder, electrosurgery electrodes with associated sterile and non-sterile accessories</i>			
SERVOTOME -- Electrode Holder -- Neutral electrode (Bracelet) Active Electrodes: I22S -- I22CA -- TR22L -- TR22R -- TR22T -- FC25B -- FC32B -- FC10N -- I40S -- I40CA	TB15	MD 1106	Ilb
Consoles de commande (ultrasonique, moteur) avec leurs accessoires stériles et non stériles destinées à la chirurgie des os et substituts osseux -- <i>Control consoles (ultrasonic, motor) with associated sterile and non-sterile accessories for bone and bone substitute surgery</i>			
PIEZOTOME SOLO M+	TO27	MD 1104	Ilb
PIEZOTOME M+ -- IMPLANTCENTER M+	TO26	MD 1104	Ilb
PIEZOELECTRIC SYSTEM	TO22	MD 1104	Ilb
Pièces à main ultrasoniques dentaires stériles et non stériles -- <i>Sterile and non-sterile dental ultrasonic handpieces</i>			
NEWTRON (Handpiece) -- SUPRASSON (Handpiece)	TG42	MD 1106	Ila
NEWTRON LED (Handpiece)	TG46	MD 1106	Ila
NEWTRON SLIM (Handpiece) -- NEWTRON SLIM B.LED (Handpiece)	TBAE	MD 1106	Ila

GMED 0459


 DocuSigned by:
Béatrice LYS
On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director



Addendum au certificat n° 21427 rev. 11 page 2/5
Addendum of the certificate n° 21427 rev. 11
 Dossiers / Files N° P159650 / P601259

Désignation du dispositif / Accessoires marqués CE <i>Device designation / CE marked accessories</i>	Réf commerciale du dispositif ou code article <i>Device commercial reference or article code</i>	Code NBOG NBOG code	Classe du DM MD class
Pièces à main ultrasoniques de chirurgie intra-orale stériles et non stériles -- <i>Sterile and non-sterile ultrasonic handpieces for intraoral surgery</i>			
PIEZOTOME LED (Handpiece) -- PIEZOTOME SOLO (Handpiece) -- CUBE LED (Handpiece)	TE10	MD1106	Ila
Pièces à main ultrasoniques destinées à la chirurgie des os et substituts osseux stériles et non stériles -- <i>Sterile and non-sterile ultrasonic handpieces for bone and bone substitute surgery</i>			
PIEZOTOME M+ LED (Handpiece) -- PIEZOELECTRIC SYSTEM (Handpiece)	TO42	MD 1104	Ilb
Pièces à main d'aéropolissage dentaire stériles et non stériles et leurs accessoires stériles et non stériles -- <i>Sterile and non-sterile Dental air polishing handpiece with associated sterile and non-sterile accessories</i>			
AIR-N-GO EASY	TC07	MD 1106	Ila
PROPHYEN	TC22	MD 1106	Ila
Inserts dentaires stériles et non stériles -- <i>Sterile and non-sterile dental tips</i>			
1 -- 1S -- 2 -- 3 -- 10P -- 10X -- 10Z -- P14D -- P15LD -- P15RD -- S12-70D -- AS3D -- AS6D -- AS9D -- ASLD -- ASRD -- 5AE -- PM1 -- PM2 -- PM3 -- PM4 -- C20 -- EX1 -- EX2 -- EX3 -- EXL -- EXR -- PMS1 -- PMS2 -- PMS3 -- PMV1 -- PMV2 -- PMV3 -- PMV4 -- PMV5 -- PMV6 -- H1 -- H2L -- H2R -- H3 -- H4L -- H4R -- PH1 -- PH2L -- PH2R -- P2L -- P2R -- PFU -- PFL -- PFR -- TK1-1S -- TK1-1L -- TK2-1L -- TK2-1R -- IP1 -- IP2L -- IP2R -- IP3L -- IP3R -- ET18D -- ET20 -- ET20D -- ET25 -- ET25S -- ET25L -- ET40 -- ET40D -- ETBD -- ETPR -- SO4 -- CAP1 -- CAP2 -- CAP3 -- K10/21 -- K15/21 -- K25/21 -- K30/21 -- K10/25 -- K15/25 -- K25/25 -- K30/25 -- IRR 25/21 -- IRR 25/25 -- IRR 20/21 -- IRR 20/25 -- CAVI 1-BD -- CAVI 2-DC -- CAVI 3-DF -- REDO 1 -- REDO 2 -- REDO 5 -- MAXI MPR	TG30	MD 0401	Ila
Inserts de chirurgie dentaire (intra-orale) stériles et non stériles -- <i>Sterile and non-sterile tips for intraoral surgery</i>			
BS2L II -- BS2R II -- BS4 II -- BS5 II -- BS6 II -- LC1 II -- SL1 II -- SL2 II -- SL3 II -- SL4 II -- SL5 II -- BS1S II -- BS1L II -- TKW1 II -- TKW2 II -- TKW3 II -- TKW4 II -- TKW5 II -- LC2 II -- LC2L II -- LC2R II -- NINJA II -- CE1 II -- CE2 II -- CE3 II -- BS1RD II -- CS1 II -- CS2 II -- CS3 II -- CS4 II -- CS5 II -- CS6 II -- PZ1 II -- PZ2R II -- PZ2L II -- PZ3 II	TE25	MD 0401	Ila
Inserts de chirurgie des os et substituts osseux non stériles -- <i>Non-sterile tips for bone and bone substitute surgery</i>			
Saw 20.9 x 14.1 x 4.0 x 0.6mm for Piezoelectric System (03.000.401) -- Saw 20.1 x 21.4 x 4.0 x 0.6mm for Piezoelectric System (03.000.402) -- Saw Left 17.8 x 15.2 x 4.0 x 0.6mm for Piezoelectric System (03.000.403) -- Saw Right 17.8 x 15.2 x 4.0 x 0.6mm for Piezoelectric System (03.000.404) -- Scalpel round 22.45 x 12.6 x 3.9 dia x 0.7mm for Piezoelectric System (03.000.405) -- Scalpel Flat 21.6 x 11.1 x 3.0 x 0.5mm for Piezoelectric System (03.000.406) -- Scalpel 17.7 x 15.5 x 1.2 x 0.5mm for	TO49	MD 1104	Ilb

GMED 0459



On behalf of the President
Béatrice LYS
 Technical Director



Addendum au certificat n° 21427 rev. 11 page 3/5
Addendum of the certificate n° 21427 rev. 11
 Dossiers / Files N° P159650 / P601259

Désignation du dispositif / Accessoires marqués CE <i>Device designation / CE marked accessories</i>	Réf commerciale du dispositif ou code article <i>Device commercial reference or article code</i>	Code NBOG <i>NBOG code</i>	Classe du DM <i>MD class</i>
Piezoelectric System (03.000.407) -- Spade round 24 x 11.05 x 4.0 x 0.65mm for Piezoelectric System (03.000.408) -- Lift 22.9 x 10.1 x 5.0 mm dia x 0.4mm for Piezoelectric System (03.000.411)			
BS1 XXL M+ -- BS1L M+ -- BS1RD M+ -- BS2L XL M+ -- BS2R XL M+ -- BS4 M+ -- BS6 XXL M+ -- RHL5 M+ -- RHS1 M+ -- RHS2Fb M+ -- RHS2Hb M+ -- RHS3L M+ -- RHS3R M+ -- RHS4L M+ -- RHS4R M+ -- RHS5 M+ -- RHS6 M+ -- RHS2F M+ -- RHS2H M+ -- SL1 M+ -- SL2 M+ -- SL3 M+ -- SL4 M+ -- SL5 M+ -- BS1S M+ -- BS2R M+ -- BS2L M+ -- BS5 M+ -- BS6 M+ -- LC1 M+ -- LC1 XL M+ -- LC2 M+ -- LC2 L M+ -- LC2 R M+ -- NINJA M+ -- CE1 M+ -- CE2 M+ -- CE3 M+ -- TKW1 M+ -- TKW2 M+ -- TKW3 M+ -- TKW4 M+ -- TKW5 M+ -- CS1 M+ -- CS2 M+ -- CS3 M+ -- CS4 M+ -- CS5 M+ -- CS6 M+ -- DB1 M+ -- DB2 M+	TO51	MD 1104	Iib
Inserts de chirurgie des os et substituts osseux stériles -- <i>Sterile tips for bone and bone substitute surgery</i>			
Saw 20.9 x 14.1 x 4.0 x 0.6 mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.401S) -- Saw 20.1 x 21.4 x 4.0 x 0.6 mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.402S) -- Saw left, 17.8 x 15.2 x 4.0 x 0.6 mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.403S) -- Saw, right, 17.8 x 15.2 x 4.0 x 0.6 mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.404S) -- Scalpel round, 22.45 x 12.6 x 3.9 mm dia x 0.7 mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.405S) -- Scalpel flat, 21.6 x 11.1 x 3.0 x 0.5 mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.406S) -- Scalpel 17.7 x 15.5 x 1.2 x 0.5 mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.407S) -- Spade round, 24 x 11.05 x 4.0 x 0.65 mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.408S) -- Diamond, 24.6 x 12.85 x 2.6 x 0.6 mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.409S) -- Diamond round, 21.9 x 12.4 x 1.8 mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.410S) -- Sinus Lift, 22.9 x 10.1 x 5.0 mm dia x 0.4 mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.411S) -- Saw 105.7 x 4.0 x 0.6mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.412S) -- Saw left 39.5 x 4.0 x 0.8mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.418S) -- Saw right 39.5 x 4.0 x 0.8mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.419S) -- Scalpel flat 105.1 x 3.0mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.421S) -- Scalpel 32.1 x 1.2mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.423S) -- Saw round 38.9 x 5.0mm dia x 0.6mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.424S) -- Diamond cylindrical, 30.7 x 4.7 x 2.3mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.425S) -- Diamond conical 26.8 x 11.0 x 0.5mm for Piezoelectric System, sterile (03.000.426S)	TO50	MD 1104	Iib

GMED 0459



DocuSigned by:

On behalf of the President
 Béatrice LYS
 EF33BDA9BA04A3...
 Béatrice LYS
 Technical Director



Addendum au certificat n° 21427 rev. 11 page 4/5
Addendum of the certificate n° 21427 rev. 11
 Dossiers / Files N° P159650 / P601259

Désignation du dispositif / Accessoires marqués CE <i>Device designation / CE marked accessories</i>	Réf commerciale du dispositif ou code article <i>Device commercial reference or article code</i>	Code NBOG <i>NBOG code</i>	Classe du DM <i>MD class</i>
BS1 XXL M+ -- BS1L M+ -- BS1RD M+ -- BS2L XL M+ -- BS2R XL M+ -- BS4 M+ -- BS6 XXL M+ -- RHL5 M+ -- RHS1 M+ -- RHS2Fb M+ -- RHS2Hb M+ -- RHS3 LM+ -- RHS3 R M+ -- RHS4L M+ -- RHS4R M+ -- RHS5 M+ -- RHS6 M+ -- SL1 M+ -- SL2 M+ -- SL3 M+	TO52	MD 1104	Ilb
Poudres pour dispositif d'aéropolissage dentaire -- <i>Powders for dental air polishing device</i>			
AIR-N-GO "CLASSIC"	TC10	MD 0401	Ila
AIR-N-GO "PERIO"	TC12	MD 0401	Ila
Moteurs avec leurs accessoires stériles et non stériles destinées à l'art dentaire -- <i>Motors with associated sterile and non-sterile accessories for dentistry</i>			
U.N.I MT	TF31	MD 1106	Ila
U.N.I MT.BL	TF34	MD 1106	Ila
Genius motor -- ENDO DUAL motor	TO68	MD 1106	Ila
Moteurs avec leurs accessoires stériles et non stériles destinés à la chirurgie intra-orale et/ou des os et substituts osseux -- <i>Motors with associated sterile and non-sterile accessories for intraoral surgery and / or bone and bone substitute surgery</i>			
I-SURGE -- I-SURGE LED	TF18	MD 1106	Ila
Nécessaire d'Inserts dentaires stériles et non stériles -- <i>Sterile and non-sterile dental tips Procedure Packs</i>			
Kit Détartrage (F00934) -- Kit Hygiène (F00935) -- Kit Paro (F00936) -- Kit Maintenance (F00937) -- Kit Perio Précision (F00939) -- Kit Excavus (F00739) -- Kit Endo One (F00732) - - Kit Implant Protect (F02120) -- Kit Endo success retreatment (F00737) -- Kit Endo success canal access prep (F88180) -- Kit Endo success apical surgery (F00069) -- Kit Perfect margin rounded (F00738) -- Kit Perfect margin shoulder (F00736) -- Kit Perfect Margin Veneers (F02020) -- Kit Newtron paro (F87321) -- Kit Newtron micro-retro (F87325) -- Kit Newtron retro (F87326)	TG30	MD 0401	Ila
Pack Newtron Paro (F87320) -- Pack Newtron Paro 2 (F87520) -- Pack Newtron Retro (F87322) -- Pack Newtron (F87324) -- Pack Newtron 2 (F87524)	TA16	MD 0401	Ila
Nécessaires d'Inserts de chirurgie dentaire (intra-orale) stériles et non stériles -- <i>Sterile and non-sterile tips for intraoral surgery Procedure Packs</i>			
Kit Bone Surgery 2 (F87509) -- Kit Sinus Lift 2 (F87519) -- Kit Intralift 2 (F87536) -- Kit LC Extraction 2 (F87546) -- Kit Crown Extension 2 (F87554) -- Kit Crest Splitting 2 (F87567) -- Kit Piezocision II (F87576) -- Kit Essential II (F87528) -- BS1L II + Key (F87527)	TE25	MD 0401	Ila
Pack Piezotome 2 (F87523) -- Pack Bone Surgery 2 (F87500) -- Pack SL Sinus Lift 2 (F87510) -- Pack Intralift 2 (F87530) -- Pack Extraction 2 (F87540) -- Pack Crown Extension 2 (F87550) -- Pack Crest Splitting 2 (F87560) -- Pack Piezocision II (F87570) -- Pack Essential II (F87529)	TE26	MD 0401	Ila

GMED 0459



On behalf of the President
Béatrice LYS
 Technical Director



Addendum au certificat n° 21427 rev. 11 page 5/5
Addendum of the certificate n° 21427 rev. 11
 Dossiers / Files N° P159650 / P601259

Désignation du dispositif / Accessoires marqués CE <i>Device designation / CE marked accessories</i>	Réf commerciale du dispositif ou code article <i>Device commercial reference or article code</i>	Code NBOG <i>NBOG code</i>	Classe du DM <i>MD class</i>
Nécessaires d'Inserts de chirurgie des os et substituts osseux non stériles – <i>Non-sterile tips for bone and bone substitute surgery Procedure Packs</i>			
KIT CMF NON STERILE (F57803) -- KIT RHS BASIC M+ N STER (F87681) -- KIT RHS EXPERT M+ N STER (F87689) -- KIT PRE-IMPLANTAIRE M+ (F57805) -- KIT SINUS LIFT M+ (F57806) -- KIT INTRALIFT M+ (F57807) -- KIT CREST SPLITTING M+ (F57808) -- KIT EXTRACTION M+ (F57809) -- KIT M+ CROWN EXTENSION N STER (F57810)	TO51	MD 1104	IIb
PIEZOTOME M+ PACK (F57802)	TO53	MD 1104	IIb
Nécessaire d'Inserts de chirurgie des os et substituts osseux stériles – <i>Sterile tips for bone and bone substitute surgery Procedure Packs</i>			
KIT CMF STERILE (F57804) -- RHINOPLASTY ESSENTIAL KIT STERILE (F87999) -- RHINOPLASTY EXPERT KIT STERILE (F88000)	TO52	MD 1104	IIb

Identification du site couvert et des activités
Identification of location and activities

SATELEC - A Company of ACTEON Group - 17 av. Gustave Eiffel – ZI du Phare - 33700 MERIGNAC - FRANCE

Conception, fabrication et contrôle final
Design, manufacture and final control

GMED 0459


 DocuSigned by:

 On behalf of the President
Béatrice LYS
 Technical Director