



INSTRUMENTŲ VALYMAS IR IŠANKSTINĖ DEZINFEKCIJA

Aniosyme XL3

XL3 FERMENTINĖ IŠANKSTINIO DEZINFEKCIJOS VALYMO GALIA, SKIRTA IŠPLĖSTINIAM RANKINIAM APDOROJIMUI

Aniosyme XL3 yra neutrali fermentinė išankstinio dezinfekavimo priemonė, skirta rankiniam instrumentų apdorojimui. Užtikrina stiprų valymo efektyvumą, jo specialiai sukurta trifermentinė formulė užtikrina puikų medžiagų suderinamumą dėl mažiausios koncentracijos per trumpiausią sąlyčio laiką.

- **UNIKALUS** – Patentuota formulė
- **STIPRUS** – Labai efektyvus ploviklis
- **GREITAS** – Optimizuotas antimikrobinis veiksmingumas nuo 5 minučių
- **SUBALANSUOTA** – Neėsdina medžiagų



Aniosyme XL3

XL3 fermentinė išankstinio dezinfekavimo galia, skirta pažangiam rankiniam perdirbimui

TS 17.1.

TAIKYMO SRITIS


Medicinos prietaisų valymas ir dezinfekavimas: chirurginiai ir medicinos instrumentai, karščiui jautrūs instrumentai ir endoskopinė įranga, prieš sterilizaciją.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

- Skaidrus oranžinis tirpalas
- Tankis 20°C 1,18g/ml
- pH vertė* (koncentratas) 20°C: 7.84
- pH praskiestas 1%: 7.96
- Laidumas esant 0,5%, 1% ir 2%: 0.72 - 1.30 - 2.33 mS/cm
- pH praskiestas 0.5%: 8.06

* pH vertės matavimai darbo sąlygomis visada naudojant pH matuoklį su temperatūros kompensavimu.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

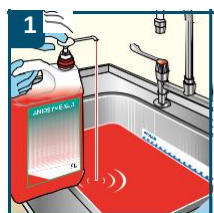

Koncentruotas tirpalas profesionaliam naudojimui. Naudokite mirkymui reikiamu tirpalu, laikantis sąlyčio laiko.



Visiškai panardinkite medicinos prietaisą. Uždenkite. Nuvalykite šepetiu, jei yra matomų nešvarumų.



Krupščiai nuplaukite apdorotus medicinos prietaisus vandeniu iš čiaupo, kad pašalintumėte visus produkto pėdsakus ir organinius nešvarumus.



Pakeiskite tirpalą, kai tik jis matomai užterštas, ir bent kartą per dieną, kad išlaikytumėte produkto veiksmingumą. Prieš naudodami pirmą kartą, užpildykite susietą pompą.

DOZAVIMO LENTELĖ

TS 17.1.

LITRŲ SPRENDIMAS	TAIKYMO SPRENDIMO KONCENTRACIJA	
	0.5%	1%
1 litras	5 ml	10 ml
2 litras	10 ml	20 ml
4 litras	20 ml	40 ml
8 litras	40 ml	80 ml

MIKROBIOLOGINĖS SAVYBĖS

PAREIŠKIMAS/SĄLYGOS	TS 17.1.	
Instrumentų dezinfekcija – pagal VAH (baktericidinis ir mieliacidinis), nešvarių sąlygų	0.5%	15 min
Baktericidinis – pagal EN 13727 ir EN 14561, nešvarios sąlygos	0.5%	5 min
Mielas naikinantis – pagal EN 13624 ir EN 14562, nešvarios sąlygos	0.5%	5 min
Tuberkulocidas – pagal EN 14348 ir EN 14563, nešvarios sąlygos	1.0%	30 min
Veiksmingas prieš apvalkalą turinčius virusus – pagal EN 14476 / EN 17111, nešvariomis sąlygomis	0.5%	15 min

PAKUOTĖS IR UŽSAKYMO INFORMACIJA

PRODUKTAS	PAKUOTĖS VIENETAS	UŽSAKYMO KODAS
Aniosyme XL3	12 x 1 L butelis	XXXXXX
Aniosyme XL3	2 x 5 L skardinės	XXXXXX



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distributed by:
ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany



TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI.

SANDĖLIAVIMAS

Pavojinga. Laikykites naudojimo atsargumo priemonių (surašytos pagal

galiojančios Europos taisyklės dėl cheminių produktų klasifikavimo ir ženklinimo). Sandėliavimas: nuo +5°C iki +25°C.

SERTIFIKATAS

Medicininis prietaisas. Visas Aniosyme XL3 antimikrobinis aktyvumas įtrauktas į mokslinę dokumentaciją, kurią galima gauti paprašius.

MEDICINOS PRIETAISAS NAUDOKITE SAUGIAI

Perskaitykite etiketę ir gaminio informaciją.



www.ecolab.com