


LEO PLUS

Nauja karta savaime išsiplečiančių intrakranialinių stentų

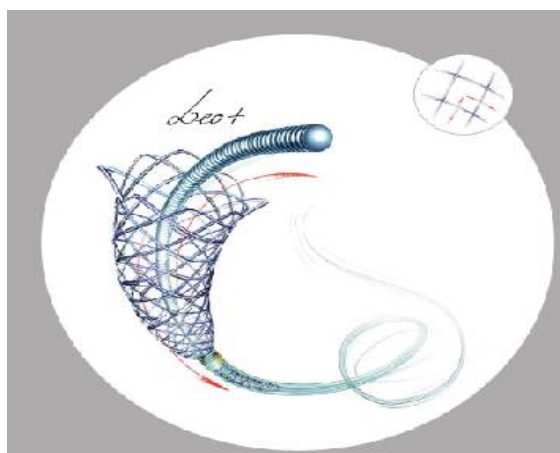


Navigacijos vingiuotai kraujagyslių anatomijai plus: smulkiai apipinti laidai
Savarankiškai plečiant LEO PLUS intrakranijinis stentas specialiai plačiu kakleliusifono po miego arterijos aneurizmų rekonstrukcijos. Skirtingai nei atviri ar uždaristentai, ji yra pagaminta iš labai smulkių, pintų nitinol, laidų, kad skaidrėssklandžiai ant viena kitos, kai stentas sulenkiamas arba suspaustas, net staigiukampų. Šis ir 30% didesnė radialinė jėga – užtikrina nepertraukiamą sienos prispaudžiamumą ir onforability, ”.


LEO PLUS privalumas yra tai, kad labai smulkūs pakeliamieji apipinti laidai negali sudaryti jagged prolapsas Iškilioji arba verbuotojas į concavity, kai sulenktakampu.



Open-cells stents

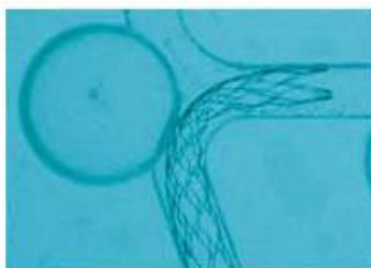

Closed-cells stents

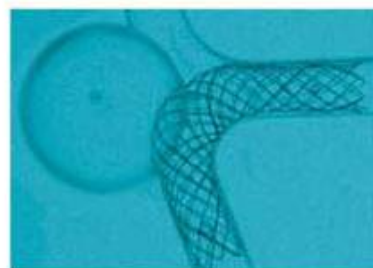

LEO PLUS

Stenozės gydymo ir ričių paramos plus: 30% didesnė radialinė jėga
30% didesnė radialinė jėga, taip pat suteikia išskirtinį ritė masės paramą irreduses,, stentas poslinkio po diegimo galimybės. Patobulinta radialinės jėgosdėka, LED Plus taip pat nurodyta intrakranijinis stenozės gydymo ir turi CE sertifikatą pagal šią indikaciją.

Naudojimo paprastumas plus: guidewire

LEO PLUS stentas iš anksto, pakrautas ant jo guidewire, viduje

supristatančiai. Guidewire leidžia atlikti manipuliacijų distalinių stentas. , Nes jis lieka vietoje po stento pozicionavimo, galite naudoti, guidewire įvesti rekonstrukcinį balioną arba įdiegti antrą stentą.

Ultra plus – tikslaus rodymo: lengva stentą atkovoti

LEO PLUS pristatymas procedūra yra panaši į ritės pristatymo: pakrauta ir stumtiant jo guidewire stentą į pristatymo kateterį po navigacijos, todėl navigacijos, kad būtų daug paprasčiau. Dar svarbiau, guidewire ir pristatymo sistema leidžia susigrąžinti ir iš naujo LEO PLUS stentą, kai jis yra iki 90% dislokuotas.

Geriau homodynamics plus: sudegintasis baigiasi

LEO PLUS galūnių įsiliepsnojo padidinti implantuoto stento prispaudžiant prie indosienelių. Jei implantuojamas stentas per mažo skersmens veselio deglo išvengiama "Tulpės" poveikio, žymiai mažinant trombozės riziką. Ir palengvinant prieigą per stentą . Dėl apipintų laidų technologijos. LEO PLUS galai yra suapvalinti, o todėl, atraumatiniai.

Geriau kontroliuoti plus: didesnis matomumas

Du išilginiai radijo nepermatomos Platinium laidai paleisti LEO PLUS per visą ilgį. Tai tik nitinol stentas rinkoje, kurio pilnas kūnas yra matoma nuo vieno galo iki kito, naudojant tradicinę fluoroskopiją. Geriau matote, daugiau kontrolės, turite.


Paspartinti procedūras plus: sklandžiau vielos paviršiaus

Žymiai daugiau lubriciuos paviršius – be paviršiaus priedų - pagerina visus stentofunkcionavimo aspektus. Sumažinta trintis:

Padidina lankstumą, , tortous veselių.

Leidžia dar tvirčiau prisitvirtinti prie patronuojančių kraujagyslių sienelių.

Palengvina pakartotinę prieigą

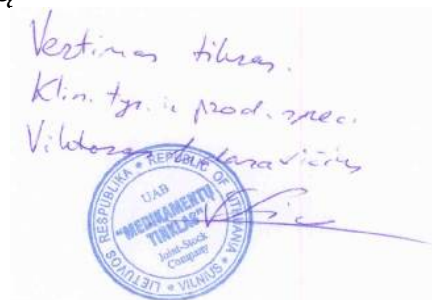

	REFERENCE	ARTERY DIAMETER (MM)	STENT'S LENGTH (AT NOMINAL DIAMETER) (MM)	DELIVERY CATHETER	STENT'S MESH SIZE
LEO.2,5	LEO.2,5 x 12	2,00 to 3,10	12	VASC0+21 (2,4F)	1,9F
	LEO.2,5 x 18		18		
	LEO.2,5 x 25		25		
LEO.3,5	LEO.3,5 x 12	3,10 to 4,25	12	VASC0+21 (2,4F)	1,9F
	LEO.3,5 x 18		18		
	LEO.3,5 x 25		25		
	LEO.3,5 x 30		30		
	LEO.3,5 x 35		35		
	LEO.3,5 x 50		50		
LEO.4,5	LEO.4,5 x 15	4,25 to 5,30	15	VASC0+25 (3,0F)	2,1F
	LEO.4,5 x 20		20		
	LEO.4,5 x 25		25		
	LEO.4,5 x 30		30		
	LEO.4,5 x 40		40		
	LEO.4,5 x 50		50		
	LEO.4,5 x 75		75		
LEO.5,5	LEO.5,5 x 25	5,30 to 6,50	25	VASC0+28 (3,3F)	2,7F
	LEO.5,5 x 30		30		
	LEO.5,5 x 35		35		
	LEO.5,5 x 50		50		
	LEO.5,5 x 60		60		
	LEO.5,5 x 75		75		

Kiekviena nuoroda yra rinkinys, kuriame yra: 1 stentas + pristatymo kateteris +priedai.
Kaip ir bet kuris kitas savaime besiplečiantis stentas, LEO plus stento skersmuo turi būti didesnis negu arterijos tai jau atsižvelgta į orientacinę sumą
Pavyzdžiui, LEO4, 5x25 turi 5,5 mm skersmens