

ALUSTAT

Liquid for staunching the bleeding



BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY
PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY

COMPOSITION: aluminium chloride, water Ph.Eur.

INTENDED USE

Product ALUSTAT is intended for use during dental treatment to staunch slight gingival bleedings. Aluminium chloride contained in the product acts vasoconstrictively on tiny blood vessels, as a result the gingival swelling and slight bleedings decrease.

INSTRUCTIONS FOR USE

Swollen or injured gingiva rub gently with cotton wool tampon impregnated with ALUSTAT, next rinse it with clean water. Repeat action if necessary.

CONTRAINDICATIONS

Do not use the product for patients with hypersensitivity to the product's components.

CAUTIONS

It is irritating to the mucous membrane of the oral cavity, skin and eyes.
In case of contact rinse immediately with copious amount of water and seek medical advice.
In case of consumption do not extract emesis. Drink copious amount of water. Seek medical advice.
Necessary use of disposal gloves and protective glasses while working with the product.

STORAGE

Store in original packaging at temperature below 25 °C.
Store out of reach of children.
Expiry date is placed on the main container.
Once container is open, the expiry date doesn't change if it is securely closed after each use.

HANDLING THE PRODUCT CONTAINER

Empty containers should be disposed of responsibly.

PACKAGING

Bottle of 10g with dropper.



Last update: 18.04.2012



PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Phone/fax 0048 15 842-35-85

ALUSTAT

CE1011

Kraujavimo stabdymo skystis

**PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
NAUDOTI TIK ODONTOLOGIJOJE**

SUDETIS: aliuminio chloridas, vanduo Ph. Eur.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Gaminys ALUSTAT skirtas stabdyti negausų gleivinės kraujavimą gydymo metu. Sudėtyje esančio aliuminio chlorido vazokonstriktinis poveikis padeda sustiprinti plonas kraujagysles, todėl sumažėja gleivinės tinimo ir negausaus kraujavimo tikimybė.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Švelniai valykite patinusias ar pažeistas dantenas ALUSTAT sumirkytu vatos tamponėliu, tada perplaukite jas švariu vandeniu. Jei reikia, pakartokite.

KONTRAINDIKACIJOS

Nenaudokite, jei pacientas alergiškas jo sudėtinėms dalims.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Dirgina burnos ertmės gleivinę, odą ir akis.
Patekus į akis ar ant odos, plauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją.
Prarijus, nesukelti vėmimo. Gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją.
Būtina mūvėti vienkartinės pirštines ir užsidėti apsauginius akinius.

LAIKYMO SĄLYGOS


Laikyti originalioje pakuotėje, temperatūroje neaukštesnėje kaip 25°C.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Galiojimo laikas nurodytas ant pagrindinės pakuotės.
Atidarius galiojimo laikas nesikeičia, jei po naudojimo pakuotė sandariai uždaroma.

PAKUOTĖS ATLIKU TVARKYMAS

Tuščią pakuotę tvarkyti pagal bendrus reikalavimus.

PAKUOTĖ

10 g buteliukas su lašintuvu.

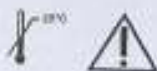

PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski
37-450 Stalowa Wola, Lenkija
Kwiatkowskiego g. 1
tel./faks. 0048 15 842-35-85

Paskutinis atnaujinimas: 2012-04-18

Vertė vertimų biuras "RIVYDA"
Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius
Tel.: +370 5 273 05 87
Mobilus: +370 699 64484

Vertėja susipažinusi su LR BK 235 straipsniu.

Vertėja
Sonata Juškevičienė

2013-01-02



