

Oper cat classic

Kateterių apsaugai



Laikinių ar ilgalaikių kateterių apsauga

Saviklijis tvarstis su maišeliu kateterių apsaugai

Oper cat classic yra sterilus vienkartinis saviklijis tvastis su maišeliu trumpalaikių ir ilgalaikių kateterių apsaugai.

Oper cat classic yra neaustinės medžiagos tvarstis, leidžiantis pacientui atlikti kasdienę higieną. Šis tvarstis pagerina aseptinę kateterio priežiūrą ir paciento gyvenimo kokybę.

Oper cat tvarstį medicinos personalui uždėti yra labai paprasta. Tvarsį uždedant ir nuimant pacientas nejaučia jokie diskomforto.



- 1 Apsauginiai lapeliai padeda **greitai ir steriliai** uždėti tvarstį, taip pat saugo kateterio įvedimo vietą dengiančią kateterio dalį.
- 2 **Stipriai sugeriantis drėgmę, nelipnus** neaustinės medžiagos padas.
- 3 Lipni, labai porėta ir tampri neaustinės medžiagos joustelė puikiai fiksuoja tvarstį.
- 4 **Labai laidi orui ir tampri neaustinė medžiaga.** Pacientas gali atlikti kasdienę asmens žigieną nenusiimdamas tvarsčio.
- 5 **Laidus orui, gausiai sugeriantis skysčius ir minkštai** apgaubiantis kateterį, maksimaliai išlaikantis aseptines sąlygas kateterio maišelis. Išorinis maišelio sluoksnis yra atsparus vandeniui.

Ypatingai laidus orui tvarstis su maišeliu

Oper cat classic

Kateterių apsauga

Ypatingai laidus orui tvarstis su maišeliu

Galimi produkto variantai

Produkto kodas	Matmenys	Kiekis dėžutėje	Dėžučių kiekis dėžėje	Kiekis dėžėje
0037438	8 x 7.5 cm	25	15	375
0037448	16 x 5 cm	25	14	350

Sudėtis: Viršutinis ir apatinis tvirtinimas: lipni neaustinė medžiaga.

Padas: polipropilenas, poliesterio ir viskozės mišinys.

Skirtas naudoti:

Trumpalaikių, ilgalaikių ir nuolatinių kateterių, heparino vartų, jejunostomų ir gastrostomų vamselių apsaugai.

Naudojimo būdas

1 Išimkite Oper Cat Classic iš pakuotės

2 Įkiškite į maišelį kateterį.




Atvira maišelio pusė turi būti nukreipta į pacientą.

3 Nuo viršutinio neaustinės medžiagos tvarsčio nuimkite apatinę silikonu dengtą apsaugą ir pritvirtinkite prie paciento kūno.

4 Nuo viršutinio neaustinės medžiagos tvarsčio nuimkite viršutinę silikonu dengtą apsaugą ir galutinai pritvirtinkite prie paciento kūno.

5 Prie paciento kūno pritvirtinus viršutinį neaustinį tvarstį, tvirtinamas apatinis neaustinis tvarstis:

- Jei katerio ilgis yra panašus į maišelio ilgį, nuimkite silikonu dengtą apsaugą nuo tvarsčio ir priklijuokite juostelę prie paciento kūno.
- Jei kateteris yra trumpesnis už maišelį, pastarąjį galima sulenkti iki reikiamo ilgio. Po to nuimkite silikonu dengtą apsaugą ir pritvirtinkite juostelę prie paciento kūno.

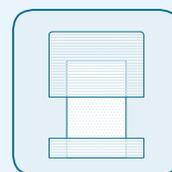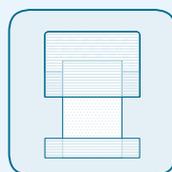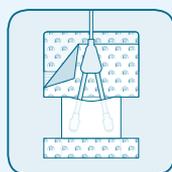

Rev.: 2017-03-06

Techninės savybės

Atrama		Lipni medžiaga	
Medžiaga	100% neaustinė poliesterio medžiaga	Medžiaga	Lipni eautinė medžiaga
Gramatūra	47 ± 5 g / m ²	Klijų gramatūra	25 ± 5 g / m ²
Spalva	Balta	Lipnumas	750 - 1,250 g / 25 mm
		Pralaidumas (MVTR)	≥ 1,400 g · m ² · 24 h ⁻¹ prie 37 °C
Viršutinis padas		Apatinis padas	
Medžiaga	Neaustinė medžiaga	Medžiaga	Neaustinė medžiaga
Gramatūra	90 ± 10% g / m ²	Gramatūra	154 ± 10% g / m ²
Absorbavimas	> 250 %	Absorbavimas	> 710 %

Gamintojas ir rinkodaros teisių turėtojas

Information intended exclusively for healthcare professionals



Iberhospitex S.A. Avda. Catalunya, 4 - 08185 Lliçà de Vall, Barcelona, Spain Tel +34 93 843 60 34 - Fax +34 93 843 61 11 - info@iht.es - www.iht.es



Įgaliotas atstovas Lietuvoje: UAB "Aptierapija" Daugėlišio g. 32-301 LT-09300 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 2450 415 Faks.: +370 5 2706 201 www.apiterapija.lt Info@apiterapija.lt



Oper cat classic

Catheter protection



Protection of temporary or permanent catheters

Self-adhesive dressing pouch for catheter protection

Oper cat classic is a sterile, disposable, self-adhesive dressing pouch for the **protection of temporary and permanent catheters**.

Oper cat classic is a **non-woven dressing** that enables daily hygiene. It improves patients' asepsis and quality of life.

Oper cat is **easily applied** by healthcare personnel. Patients undergo no discomfort when it is applied and removed.



- 1** Protective sheets to facilitate **rapid and sterile application**, protecting the part of the dressing that covers the catheter outlet.
- 2** **Highly absorbent, non-adhesive** non-woven fabric pad.
- 3** Non-woven fabric, self-adhesive, extensible, highly porous strip ensuring **perfect fixation**.
- 4** **Highly transpirable and extensible non-woven fabric**. The patient's daily hygiene is ensured without having to change the dressing.
- 5** **Transpirable**, highly absorbent pouch, suitable for **maximum asepsis** and cushioning the catheter. The outer layer is water-repellent.

Highly transpirable dressing pouch

Oper cat classic

Catheter protection

Highly transpirable dressing pouch

Presentations

Reference	Measurements	Units per pack	Packs per box	Selling units
0037438	8 x 7.5 cm	25	15	375
0037448	16 x 5 cm	25	14	350

Composition: Upper and lower fixation: adhesive non-woven fabric.
Pad: polypropylene, polyester and viscose mix.

Application for:

Temporary, long-term and permanent catheters, heparin locks, jejunostomy and gastrostomy feeding tubes.

Method of application

1 Remove Oper Cat Classic from individual pack.

2 Insert catheter in pouch.




The open part of the pouch should be towards the patient.

3 Remove the lower silicon-coated protector from the upper non-woven fabric dressing and fix to patient's body.

4 Remove the upper silicon-coated protector from the top of the non-woven fabric dressing and fix completely to patient's body.

5 Once the non-woven fabric dressing is fixed to the patient's body, the lower non-woven fabric dressing is applied:

- If the length of the catheter is similar to the length of the pouch, remove the silicon-coated protector from the non-woven fabric strip and fix to patient.
- If the catheter is shorter, it can be folded to the right size; remove the silicon-coated protector from the strip and fix to patient.

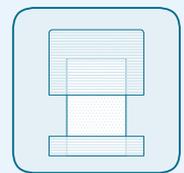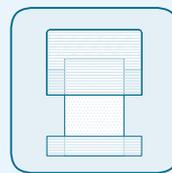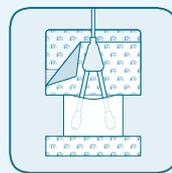

Rev.: 2017-03-06

Technical characteristics

Support		Self-adhesive fabric	
Material	100% polyester non-woven fabric	Material	Adhesive non-woven fabric
Grammage	47 ± 5 g / m ²	Adhesive grammage	25 ± 5 g / m ²
Colour	White	Adhesiveness	750 - 1,250 g / 25 mm
		Permeability (MVTR)	≥ 1,400 g · m ⁻² · 24 h ⁻¹ at 37 °C
Upper pad		Lower pad	
Material	Non-woven fabric	Material	Non-woven fabric
Grammage	90 ± 10% g / m ²	Grammage	154 ± 10% g / m ²
Absorption	> 250 %	Absorption	> 710 %

Manufactured and marketed by _____



Iberhospitex S.A. Avda. Catalunya, 4 - 08185 Lliçà de Vall, Barcelona, Spain
Tel +34 93 843 60 34 - Fax +34 93 843 61 11 - info@iht.es - www.iht.es



Information intended exclusively for healthcare professionals