

DILUYENTE DE ORINA ISE

Ise šlapimo skiedimo tirlapas

REF IN 0300


IVD

Uso Previsto: Soluciones diseñadas para realizar la dilución de las muestras de orina a ser procesadas. La solución diluyente de orina, esta destinada al uso en los analizadores marca DIESTRO únicamente.	Numatyta paskirtis: Tirpalai, skirti šlapimo mėginio skiedimui. Tai šlapimo skiedimo tirpalas skirtas naudojimui tik su DIESTRO prekės ženklo analizatoriumi.
Presentación del Producto: Solución Diluyente: 1 botella x 150 ml.-	Produkto aprašymas: Skiediklio tirpalas: 1 buteliukas x 150 ml.
Principios Activos: El diluyente de orina, es una solución no biológica de formulación especial que se utiliza para la dilución de la muestra. No contiene suero humano ni Bovino ni Potasio, es una solución acuosa salina.	Aktyvūs ingredientai: Šlapimo mėginio skiedimo tirpalas yra specialiai parengtas nebiologinis tirpalas, naudojamas kaip DIESTRO prekės ženklo elektrolitų analizatoriaus kalibratorius. Tirpale nėra žmogaus arba galvijų serumo, tai yra vandeninis tirpalas
Conservación y manipulación: Conservar los frascos cerrados, sin exceder la fecha de vencimiento, en un rango de temperatura de 5°C a 35°C. No Congelar! USAR A TEMPERATURA AMBIENTE!	Sandėliavimas ir tvarkymas: Buteliai turi būti saugomi neatidaryti, negalima vartoti pasibaigus galiojimo terminui, turi būti laikomi 5°C - 35°C temperatūroje. Nešaldyti. NAUDOJAMAS KAMBARIO TEMPERATŪROJE
Procedimiento: 1.- Tomar la muestra de orina 2.- Usar a Temperatura ambiente 3.- Realizar la dilución de la siguiente manera, 1 parte de orina y 4 partes de diluyente 4.- Se recomienda realizar un control previo del equipo con controles de orina 5.- Proceder con las mediciones	Procedūra: 1- Paimkite šlapimo mėginį. 2- Naudoti aplinkos temperatūroje 3- Skiedžiama taip: 1 (viena) dalis šlapimo ir 4 (keturias) skiediklio dalys. 4- Rekomenduojama naudoti ankstesnę šlapimo kontrolės priemonę. 5- Atlikite matavimus.
Precaución: Mantener correctamente cerrado el recipiente de desechos y realizar los lavados solicitados por el equipo	Perspėjimas: Laikykite atliekų konteinerį tinkamai uždarytą ir atlikite reikiamus analizatoriaus plovimus.
Limitaciones: 1.- Estos productos están previstos para ser utilizados en los equipos marca Diestro.	Apribojimai: 1. - Šie produktai skirti naudoti tik DIESTRO prekės ženklo analizatoriuose.
Valores esperados y resultados: Valores normales clínicos o patológicos del paciente.	Laukiamos vertės ir rezultatas: Normalios paciento klinikinės ar patologinės vertės.
Precaución: Siempre pasar la solución de lavado intensivo posterior a la determinación	Perspėjimas: Visada paeleisti ISE valymo tirpalą matavimų.
Descarte: Elimine según las normas de higiene y seguridad ambientales vigentes en su laboratorio.	Utilizavimas: Utilizuokite pagal savo laboratorijoje taikomus saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.
Rendimiento: Depende del modo de uso.	Veikimo savybės: Tai priklauso nuo naudojimo būdo.



IVD

50

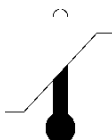

35°

EC

REP



Fabricado por / Manufactured by
JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina
Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@jsweb.com.ar - Web: www.jsweb.com.ar
Dirección Técnica: Farm. Marcelo Miranda - Matrícula Nacional N°13104 - Matrícula Provincial N°15964
Industria Argentina / Made in Argentina

Paskutinė peržiūros data: 2016 m. sausis