

DIESTRO-TRILEVEL

Soluciones de control de calidad

Kokybės kontrolės tirpalai

REF IN 0750


IVD

Nivel 1-2-3 Contenido: 3 niveles. Un frasco x 15 ml para cada nivel

Lygiai 1-2-3 Susideda iš 3 lygių. Po vieną 15 ml mėgintuvėlį kiekvienam lygiui.

Uso Previsto: DIESTRO-TRILEVEL es un control de electrolitos previsto para uso como material de control de las determinaciones de Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ - Li⁺. El material de control Diestro-Trilevel esta destinado al uso en los analizadores marca DIESTRO únicamente.	Intended Use: DIESTRO-TRILEVEL elektrolitų kontrolė skirta naudoti kaip kontrolinė medžiaga Na⁺ - K⁺ - Cl⁻ - Ca²⁺ - Li⁺ matavimui stebėti. DIESTRO-TRILEVEL kontrolinė medžiaga skirta naudoti tik su Diestro elektrolitų analizatoriais.
Descripción del Producto: Los controles de electrolitos DIESTRO-TRILEVEL están disponibles en tres (3) niveles: Nivel 1: Valores bajos para Na⁺ - K⁺ - Li⁺ - Cl⁻; valores altos para Ca²⁺ (Etiqueta roja) Nivel 2: Valores normales (Etiqueta amarilla) Nivel 3: Valores altos para Na⁺ - K⁺ - Li⁺ - Cl⁻; valores bajos para Ca²⁺ (Etiqueta azul)	Prekės aprašymas: DIESTRO-TRILEVEL elektrolitų kontrolė yra trijų (3) lygių: 1 lygis: mažos Na-K - Li + CL- vertės; didelės Ca2 vertės (raudona etiketė) 2 lygis: normaliosios vertės (geltona etiketė) 3 lygis: didelės Na-K - Li + CL- vertės; mažos Ca2 vertės (mėlyna etiketė)
Principios Activos: El control de electrolitos DIESTRO-TRILEVEL, es una solución no biológica de formulación especial que simula niveles de actividad de electrolitos en plasma humano. No contiene suero humano ni Bovino, es una solución acuosa.	Aktyvūs ingredientai: DIESTRO-TRILEVEL elektrodų kontrolės yra specialiai parengtas nebiologinis tirpalas, naudojamas kaip „DIESTRO“ prekės ženklo elektrolitų analizatoriaus kontrolės. Tirpale nėra žmogaus arba galvijų serumo, tai yra vandeninis tirpalas.
Conservación y manipulación: Conservar los frascos cerrados, sin exceder la fecha de vencimiento, en un rango de temperatura de 5°C a 35°C. No Congelar! Una vez abiertos conservar en heladera y consumir dentro de los 30 días. USAR A TEMPERATURA AMBIENTE!	Sauojimas ir tvarkymas: Buteliai turi būti saugomi neatidaryti, negalima vartoti pasibaigus galiojimo terminui, turi būti laikomi 5°C - 35°C temperatūroje. Nešaldyti. Atidarius laikyti šaldytuve ir suvartoti per 30 d. NAUDOJAMAS KAMBARIO TEMPERATŪROJE!
Procedimiento: 1.- Antes de su uso agitar levemente el frasco 2.- Usar a Temperatura ambiente 3.- Dosifique en un tubo de ensayo la cantidad que va a usar y vuelva a cerrar el frasco. No regrese el excedente de solución al frasco original. 4.- Realice las mediciones desde el tubo en el modo Control de Calidad, siguiendo las instrucciones de uso del Manual del operador del Analizador de Electrolitos DIESTRO.	Procedūra: 1- Prieš naudodami kolbą šiek tiek suplakite. 2 - Naudoti aplinkos temperatūroje. 3- Paimkite reikiamą kiekį medžiagos ir uždarykite mėgintuvėlį. Paimto medžiagos pertekliaus negražinkite į mėgintuvėlį. 4- Atlikite matavimus iš mėgintuvėlio kokybės kontrolės režimu, vadovaudamiesi Diestro analizatoriaus vadovo instrukcijomis.
Precaución: El uso de recipientes de muestra heparinizados para la introducción de DIESTRO-TRILEVEL puede originar valores de electrolitos ligeramente diferentes de los valores esperados.	Perspėjimas: Naudojant heparinizuotus mėgintuvėlius DIESTRO TRILEVEL įvedimui gali atsirasti šiek tiek kitokių elektrolitų verčių nei tikslinės vertės.
Limitaciones: 1.- Estos productos están previstos para su uso como control de calidad y no deben usarse como patrones de calibración. 2.- Los valores enumerados solo se aplican a los valores de lote indicados. 3.- Estos controles se utilizan como ayuda en la evaluación del rendimiento de la instrumentación para medir electrolitos y no deben considerarse sustitutos de otros aspectos del control de calidad.	Apribojimai: 1. - Šie produktai skirti naudoti kaip kokybės kontrolė ir negali būti naudojami kaip kalibravimo standartai. 2. - Nurodytos vertės taikomos tik nurodytiems partijų numeriams. 3. - Šios kontrolės priemonės padeda įvertinti elektrolitų matavimo prietaisų veikimą ir neturėtų būti laikomos kitų kokybės kontrolės aspektų pakaitalu.
Valores esperados y resultados: Los intervalos esperados, impresos y contenidos en cada caja de material de control, representan el intervalo esperado dentro del 95% de los resultados medios en el que deben situarse todos los analizadores.	Laukiamos vertės ir rezultatas: Tikėtini diapazonai, atspausdinti ir pateikti kiekvienoje kontrolinės medžiagos dėžutėje, rodo numatomą intervalą 95% vidutinių rezultatų, kai visi analizatoriai turėtų nukristi.
Precaución: Los intervalos esperados para los tres (3) niveles de controles son específicos de cada lote. Asegúrese de que los números de lote de la hoja prospecto concuerdan con los del frasco de control de calidad.	Atsargumo priemonės: Tikėtini visų 3 (trijų) kontrolinių lygių intervalai yra specifiniai. Įsitikinkite, kad partijos numeriai ant lapo atitinka kokybės kontrolės mėgintuvėlių numerius.
Descarte: Elimine según las normas de higiene y seguridad ambientales vigentes en su laboratorio.	Utilizavimas Utilizuokite pagal savo laboratorijoje taikomus saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.
Rendimiento: Depende de la cantidad de electrolitos configurados y del modo de uso.	Veikimo savybės: Veikimo savybės priklauso nuo sukonfigūruotų elektrolitų kiekio ir naudojimo būdo.

	Analizador / Analizatorius	Na⁺ mmol/L	K⁺ mmol/L	Cl⁻ mmol/L	Ca⁺⁺ mmol/L	Li⁺ mmol/L
Nivel / Lygis 1	Diestro 103 / 103+	116 - 126	1.7 - 2.3	74 - 86	1.40 - 1.62	0.22 - 0.36
 LOT 016	Diestro 103A / 103A+	116 - 126	1.7 - 2.3	74 - 86	1.40 - 1.62	0.22 - 0.36
 2018-01	Diestro 103AP V2, V3, V4	116 - 126	1.7 - 2.3	74 - 86	1.40 - 1.62	0.22 - 0.36
Nivel / Lygis 2	Diestro 103 / 103+	136 - 146	3.5 - 4.5	93 - 105	0.90 - 1.10	0.81 - 1.17
 LOT 016	Diestro 103A / 103A+	136 - 146	3.5 - 4.5	93 - 105	0.90 - 1.10	0.81 - 1.17
 2018-01	Diestro 103AP V2, V3, V4	136 - 146	3.5 - 4.5	93 - 105	0.90 - 1.10	0.81 - 1.17
Nivel / Lygis 3	Diestro 103 / 103+	154 - 166	7.4 - 8.6	112 - 124	0.45 - 0.61	1.17 - 1.77
 LOT 016	Diestro 103A / 103A+	154 - 166	7.4 - 8.6	112 - 124	0.45 - 0.61	1.17 - 1.77
 2018-01	Diestro 103AP V2, V3, V4	154 - 166	7.4 - 8.6	112 - 124	0.45 - 0.61	1.17 - 1.77

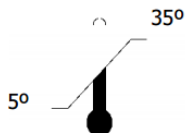

Obelis s.a
53 Boulevard Général Wahis
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail : mail@obelis.net



Fabricado por / Manufactured by
JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) - Villa Martelli - Provincia de Buenos Aires - República Argentina
Tel/Fax.: (54 11) 4709-7707 - Email: info@isweb.com.ar - Web: www.jsweb.com.ar
Dirección Técnica: Farm. Marcelo Miranda - Matrícula Nacional N°13104 - Matrícula Provincial N°15964
Industria Argentina / Made in Argentina

Paskutinė peržiūra: 2016 m. sausis