



Instructions for use (English)

coltene®

Speedex Universal Activator

Definition

Speedex Universal Activator is a silicone-based impression material.

Material type


Polysiloxane, condensation-type silicone elastomer.

Universal activator: green


Indications

Universal Activator for Speedex putty (tray-material), Speedex light body (washmaterial) and Speedex medium (washmaterial).

Clinical Time (Traymaterial)

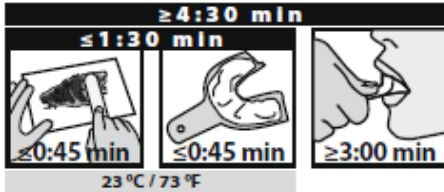

Clinical Time (Washmaterial)

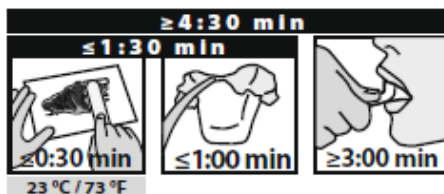

Contra-indications

Provided that the product is used as directed, there are no known contra-indications.

In case of contact of the catalyst with the eyes, wash out with plenty of water and then consult the ophthalmologist.

Usage

Only use together with Speedex putty / light body / medium. Please carefully read instructions for use of base materials.

Shelf life and storage

Speedex fulfils the intended purpose at least until the expiry date, which is displayed on the containers, in well sealed containers at temperatures 15–23 °C / 59–73 °F and 50 % relative air humidity. Impressions should be stored at normal room temperature, avoid exposure to heat and sun.

All C – silicone activators are moisture sensitive. Please ensure cap is replaced promptly after use to prevent crystallisation.

Caution

Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Marking

The expiry date and LOT number are shown on the package and cartridge.

Instructions for use date

October 2008

Only supplied to dentists and dental laboratories or upon their instructions.

For MSDS see

www.coltenewhaledent.com/msds.htm

coltene®
whaledent

Coltene/Whaledent AG (Manufacturer)

Feldwiesenstrasse 20

9450 Altstätten/Switzerland

Tel. +41 (0)71 757 53 00

Fax +41 (0)71 757 53 01

office@coltenewhaledent.ch

Naudojimo instrukcija

coltene®

Speedex Universalus aktyvatorius

Apibrėžimas

Speedex bazė yra silikoninė atspaudinė medžiaga, skirta naudoti odontologijoje.

Medžiagos tipas


Polisiloksanas, kondensuojamo tipo silikono elastomas.

Universalus aktyvatorius: žalias


Indikacijos

Universalus aktyvatorius Speedex bazinei medžiagai (medžiagai šaukštams), Speedex light body (korekcinė medžiagai) ir Speedex medium (korekcinė medžiagai).

Klinikinis laikas: (bazinė medžiaga šaukštams)

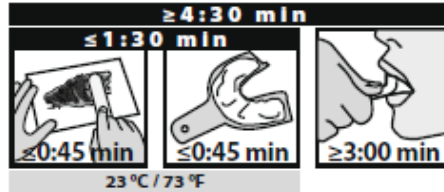

Klinikinis laikas: (korekcinė medžiaga)

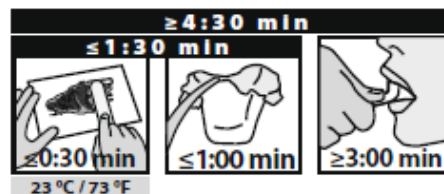

Kontraindikacijos

Naudojant produktą pagal instrukciją, žinomų kontraindikacijų nėra.

Katalizatoriui patekus į akis, gausiai skalaukite vandeniu vandeniu ir po to būtinai pasikonsultuokite su oftalmologu.

Naudojimas

Naudoti tik su Speedex bazine medžiaga ir korekcinėmis medžiagomis (Speedex light body / medium). Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šių medžiagų naudojimo instrukcijas.

Galiojimo laikas ir sandėliavimas

SPEEDEX bazinė medžiaga yra tinkama naudoti pagal paskirtį iki ant pakuotės nurodytos galiojimo datos, ją laikant gerai uždarytuose induose, esant 15–23 °C / 59–73 °F temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei. Atspaudus laikykite kambario temperatūroje, venkite tiesioginių saulės spindulių ir karščio.

Visi C-silikonų aktyvatoriai yra jautrūs drėgmei. Po naudojimo iš karto uždėkite kamštėlį, kad išvengtumėte kristalizacijos.

Įspėjimas

Valstybės įstatymai leidžia parduoti šią medžiagą tik gydytojui odontologui arba pagal jo nurodymą.

Žymėjimas

Galiojimo laikas ir LOT numeriai pažymėti ant įpakavimo bei kartridžo.

Naudojimo instrukcijų sudarymo data

2008 m. spalio

Tiekiamas tik odontologams ir dantų laboratorijoms arba pagal jų nurodymą.

Saugos darbe lapus galite rasti:

www.coltenewhaledent.com/msds.htm



Coltene/Whaledent AG (Gamintojas)

Feldwiesenstrasse 20

9450 Altstätten/Šveicarija

Tel. +41 (0)71 757 53 00

Fax +41 (0)71 757 53 01

office@coltenewhaledent.ch