




Speedex

Bazinė masė (910ml),
korekcinė masė
(140ml)
ir aktyvatorius (60ml).
Iš viso – **tik 140Lt!**

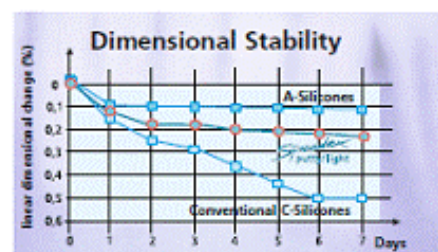

SPEEDEX

Speedex - C-Silikonas su A-Silikono savybėmis. Speedex fizinės savybės labai artimos sudėtinės polimerizacijos silikonams – polivinilsiloksanams. "DCP" (Dimension Controlling Precondensate) – matmenis kontroliuojantis prekondensatas (sukurtas ir naudojamas tik Coltène/Whaledent) – padaro medžiagą labai elastingą, tikslia ir stabilių matmenų. Skirtingai nuo įprastų c-silikoninių atspaudinių medžiagų, modelius galima išlieti per septynias dienas po atspaudų nuėmimo.

GREITAS IR PAPRASTAS – GERESNIS C-SILIKONAS

- Darbinis laikas gali būti reguliuojamas nuo vienos iki dviejų minučių padidinant arba sumažinant aktyvatoriaus kiekį.
- Dėl Speedex terminio jautrumo, medžiaga burnoje pilnai sukietėja tik per dvi minutes.
- Modelius galima išlieti per septynių dienų po atspaudų nuėmimo.
- Speedex korekcinė medžiaga Light Body yra paviršiaus aktyvuojama.
- Paprastas dezinfekavimas, be medžiagos brūkimo.
- Medžiaga biosuderinama - nesukelia alerginių reakcijų.
- Maloni pacientui.
- Speedex aktyvatorius tinka tiek bazinei medžiagai Speedex Putty tiek korekcinėms medžiagoms Light Body ir Medium.
- Speedex Medium gali būti naudojama:
 - Korekcinė medžiaga imant dvisluoksnius dvimomenčius atspaudus;
 - Monofazinė atspaudų medžiaga, medžiaga švirkštams imant vienmomenčius atspaudus;
 - Atspaudinė medžiaga perbazavimui.