

STERILIZUOTŲ MEDICINOS PRIETAISŲ GABENIMO TALPA

Skirta sterilizuotiems paketams gabenti ir laikyti iki panaudojimo, apsaugant viduje esančius paketus nuo neigiamo aplinkos ir išorės veiksnių poveikio.

Talpa pagaminta iš atsparaus plastiko, kuris gali būti valomas ir dezinfekuojamas.

Rekomenduojama naudoti dezinfekcinius preparatus skirtus plastikui, paviršiams dezinfekuoti.

Po dezinfekcijos talpos paviršiai (vidiniai ir išoriniai) perplaunami švariu vandeniu.

Talpa atspari drėgmei ir išorės veiksniams.

Talpa susideda iš dviejų dalių: konteineris ir dangtis

Talpos dangtis saugiai sandarinamas ir pritaikytas kilnojimui, gabenimui.

| Galima rinktis iš kelių talpų rūšių – 2 litrų, 3,4 litrų, 3,6 litrų, 4,8 litrų, 6,5 litrų, 9 litrų, 10 litrų, 30 litrų



Gamintojas/Tiekėjas: Key Surgical GmbH, Zum Windpark 1, 23738 Lensahn, Vokietija



Platintojas: L.R. Tamulio firma "Meditalika", Radvilų dvaro g.4, LT-48320 Kaunas, Lietuva
tel.: +370 37 22 22 23 e-paštas: info@meditalika.lt www.meditalika.lt

94 -

Plastikinės instrumentų aštrių dalių apsaugos (dydžiai pagal katalogą)

Paskirtis: skirtos profesionaliam naudojimui sveikatos priežiūros įstaigose, medicinos instrumentų aštrioms dalims uždengti prieš sterilizacijos procesą pakuojuant į neatsparias dūriams pakavimo medžiagas.

Naudojimas: parinkti apsaugą atitinkančią instrumento dydį. Sulankstyti apsaugą vadovaujantis paveikslėliais (pav. 1,2). Užmauti apsaugą ant instrumento aštrios dalies (kaip parodyta pav.3). Dabar instrumentą galima pakuoti tolimesnei sterilizacijai.

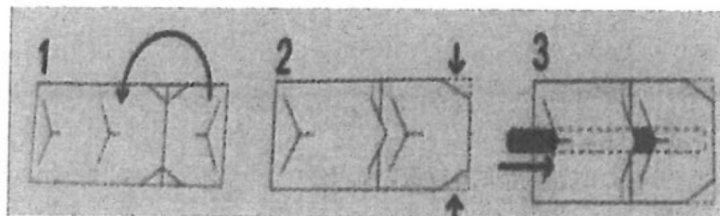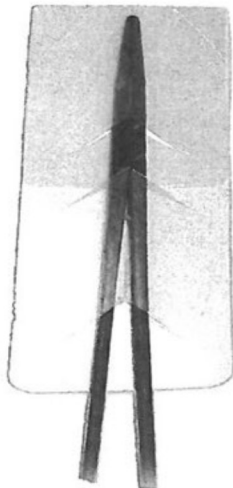

Priežiūra: prieš naudojimą suterštas apsaugas rekomenduojama plauti ir dezinfekuoti pagal įstaigoje numatytą tvarką. Apsaugos skirtos sterilizuoti garuose, esant 134°C temperatūrai.

Šalinimas: Netinkamos naudoti apsaugos šalinamos kaip nepavojingos medicininės atliekos.

Klasifikavimas: instrumentų aštrių dalių apsaugos klasifikuojami kaip I klasės medicinos prietaisai pagal MDD 93/42/EEC.



Gamintojas/Tiekėjas: Key Surgical GmbH, Zum Windpark 1, 23738 Lensahn, Vokietija

Platintojas: L.R. Tamulio firma "Meditalika"
www.meditalika.lt

Leonardo-Wet-Set

REF


pack. unit

NEW

50055

For transport storage of EndoWrist® instruments, keeps the distal end moist and facilitates the reprocessing. Protects the instrument tip during transport.

1 set

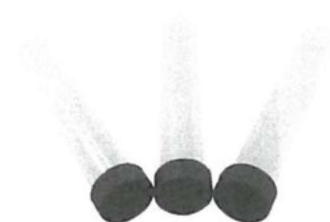

Set consisting of:

- 3 tubes
- 3 caps

50058

Set consisting of:

- 20 tubes
- 20 caps

1 set

Single use tip protectors, made of transparent film

How to use: First, the shorter flap is folded to the back and then pushed beneath the V-shaped opening. For narrow instruments the folding borders on each side can be folded inwards to prevent the instruments from slipping out. Lastly, the instruments are pushed through the punched openings, as shown in Figure 3.

heat resistant: up to 134 °C

maximum

instrument width

working length

01477

up to 50 mm

140 mm

100 pieces

01471

up to 25 mm

105 mm

1000 pieces

01476

up to 10 mm

60 mm

1000 pieces

Single use tip protectors, made of carton

heat resistant: up to 134 °C

maximum

instrument width

working length

01492

up to 50 mm

140 mm

100 piece

01469

up to 25 mm

105 mm

1000 piece

01470

up to 10 mm

60 mm

1000 piece

Single use tip protectors, made of carton

The tip protector is already folded and glued. Suitable for: slender hooks, slitting knives, sickle knives and septum knives.

heat resistant: up to 134 °C

maximum

instrument width

working length

01499

up to 20 mm

105 mm

100 piece

01496

up to 20 mm

105 mm

1000 piece