

3M

Filtek™

One
Bulk Fill
Storo sluoksnio kompozitas



Mėgstate
greitį.
O grožį?



Jums patiks paprastumas. Pacientai įvertins grožį.



3M™ Filtek™ One Bulk Fill Storo sluoksnio kompozitas

Tai tiesa. Dabar plombuoti vienu sluoksniu galima greitai ir gražiai.

Krūminių dantų atstatymas sudėtingas, todėl storo sluoksnio kompozitai, kurių dėka procedūra tampa paprasta ir greita, yra tokie populiarūs.


Kita vertus, iki šiol naudojant storo sluoksnio kompozitus buvo aukojama estetika. Dėl to mes, pasauliniai estetinių ir atstatymo technologijų lyderiai, savo ekspertų prašėme sprendimo, kuris jums labai patiks:

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Storo sluoksnio kompozitas

Sukurtas krūminiams dantims: dėl unikalių optinių savybių ir patobulinto opakiškumo, galite dirbti greitai ir paprastai vieno sluoksnio iki 5 mm metodika neaukodami estetinio rezultato.

Dabar jūs šypsotės kartu su pacientais.

- Greita ir paprasta vieno žingsnio procedūra
- Didesnis opakiškumas geresnei estetikai
- Įtampos atpalaidavimas, leidžiantis sukietinti 5 mm sluoksnį
- Puiki adaptacija
- Nereikia sluoksniavimo ar brangių įvedimo instrumentų
- Puikios darbinės ir modeliavimo savybės
- 3M tikroji nanotechnologija suteikia aukštą atsparumą dėvėjimuisi ir puikų blizgesio išlaikymą
- Aukštas rentgenokonstrastingumas
- Unikalus antgaliukas gilioms ertmėms lengviau pasiekti
- 5 atspalviai

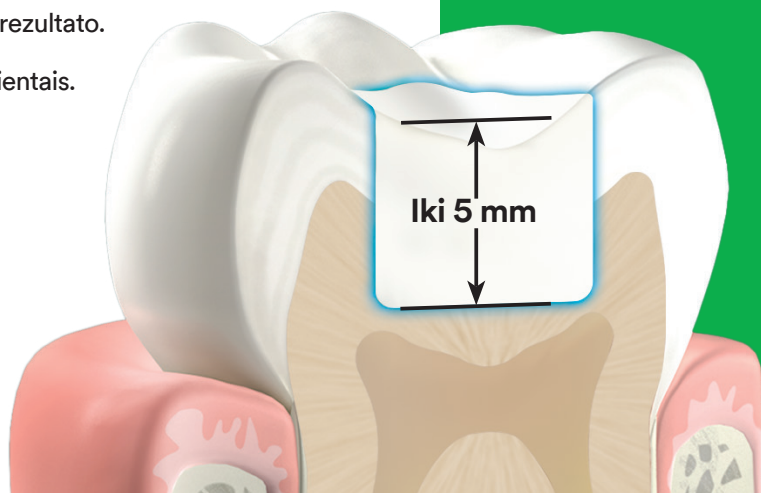

Kaip 3M Mokslas suderina paprastą vieno žingsnio plombavimą storu sluoksniu ir gerą estetiką?

3M™ Filtek™ One Bulk Fill Storo sluoksnio kompozito technologijos

NAUJA!

Išmanus kontrasto santykio valdymas

Padidintas opakiškumas nemažėjant kietinimo gyliui


Tobulindami 3M nanotechnologiją galime išmaniau valdyti opakiškumą ir kietinimo gylį. Naudojant išmanią kontrasto santykio (angl. Smart Contrast Ratio Management) technologiją sumažinome skaidrumą ir išlaikėme tą patį kietinimo gylį.

Sukietinto 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Storo sluoksnio kompozito opakiškumas didesnis nei 3M™ Filtek™ Bulk Fill Posterior kompozito, todėl estetika geresnė.

Ar žinojote?

Kontrasto santykis yra medžiagos skaidrumo arba opakiškumo matas.


Kontrasto santykis

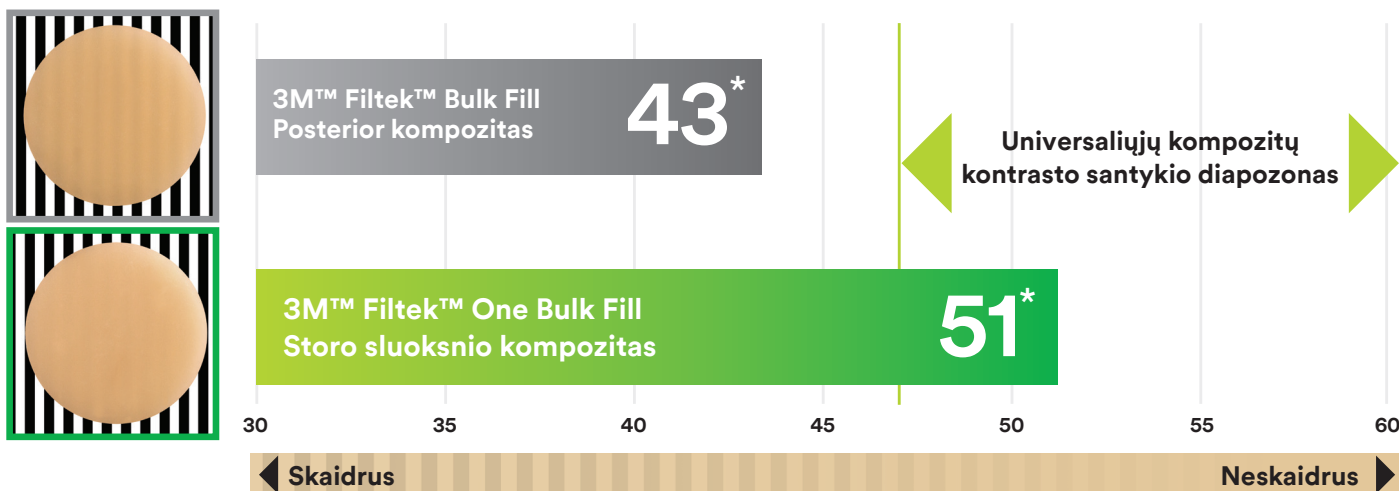

*Visų atspalvių kontrastingumo santykio vidurkis.

Modernūs AUDMA ir AFM monomerai


- Sumažina susitraukimą ir atpalaiduoja įtampą, leidžia dėti iki 5 mm storio sluoksnį.
- Pridėtinės fragmentacijos monomeras (AFM) sumažina įtampą polimerizuojant.
- Aromatinis uretano dimetakrilatas (AUDMA) leidžia sumažinti susitraukimą ir įtampą, atsirandančią polimerizuojant.

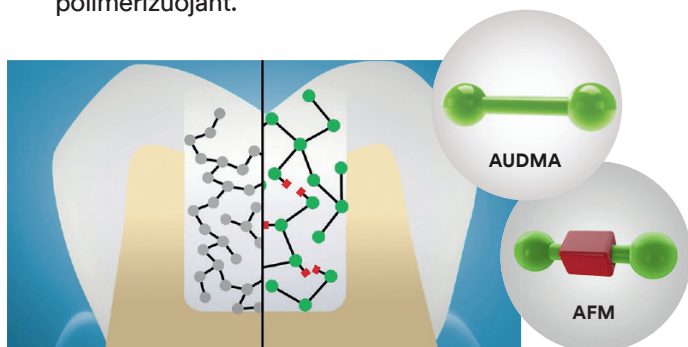


3M TRUE nanoužpildo technologija

Suteikia aukščiausią atsparumą dėvėjimuisi ir puikų blizgesio išlaikymą.

Nanoklasterio 5000X didinimas

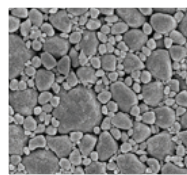

Nanoklasterio 50000X didinimas

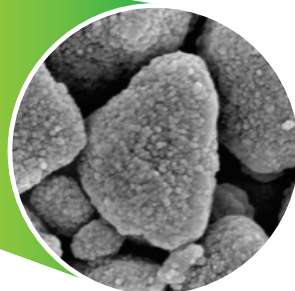



3M™ Single Bond™ Universal surišiklis

Universalus. Labai tvirtas surišimas. Viena paprasta technika ir trumpa 35 sekundžių procedūra. Beveik jokio pooperacinio jautrumo.



3M™ Filtek™ One Bulk Fill Storo sluoksnio kompozitas

Paprasta vieno storo sluoksnio iki 5 mm procedūra. Ilgalaikis rezultatas dėl mažo dėvėjimosi ir įtampos atpalaidavimo. Optimalus opakiškumas geresnei estetikai.



3M™ Elipar™ DeepCure-S diodinis švitintuvas

Prognozuojamas, patikimas kietinimas. Optimalus šviesolaidis yra patogesnis pacientams ir leidžia lengviau pasiekti krūminius dantis.



3M™ Sof-Lex™ Diamond poliravimo sistema

Lengvai prisitaiko prie nelygių, įgaubtų ir išgaubtų dantų paviršių, suteikia į poliravimo pastų panašų blizgesį naudojant patogius guminius instrumentus. Greita ir paprasta naudoti.



Užsakymo informacija



3M™ Filtek™ One Bulk Fill Storo sluoksnio kompozitas

Papildymas	Gaminio Nr. #	Gaminio Nr. #
ATSPALVIS	ŠVIRKŠTAS	KAPSULĖ
A1	4866A1	4867A1
A2	4866A2	4867A2
A3	4866A3	4867A3
B1	4866B1	4867B1
C2	4866C2	4867C2

ATSPALVIŲ PAPILDYMUOSE ŠVIRKŠTAIS yra: 1 – 4g švirkštas; technikos vadovas; naudojimo instrukcijos.

ATSPALVIŲ PAPILDYMUOSE KAPSULĖMIS yra: 20 kapsulių po 0,2 g; technikos vadovas; naudojimo instrukcijos.



www.3M.com/FiltekOne

3M Lietuva UAB
A. Goštauto g. 40 A
Vilnius, LT-03163
+370 5 216 07 80
www.3mlietuva.lt

3M, ESPE, Clinpro, Elipar, Filtek, Scotchbond ir Sof-Lex yra 3M arba 3M Deutschland GmbH prekės ženklai. Kanadoje naudojama pagal licenciją. © 3M, 2016 m. Visos teisės saugomos.