


4 Didelio diametro ilgi padidinto atsparumo perlinkimams kraujagysli introduseriai skirti vaik intervencijoms



Flexor[®] Ansel

NUKREIPIAMIEJI KATETERIAI / INTRODUSERIAI

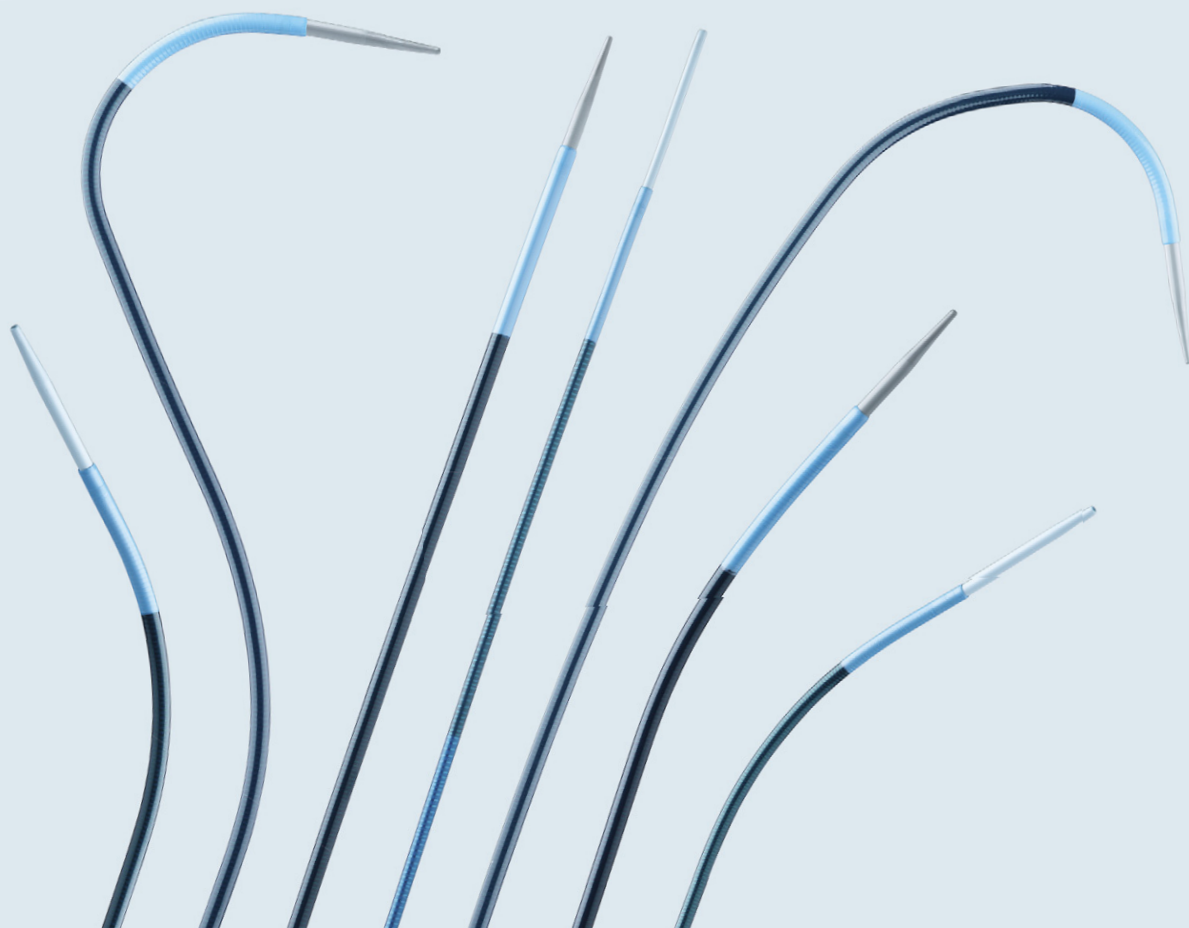

Pasiekite ir gydykite su pasitikėjimu

TIKRAS MANEVRINGUMAS

- Sukurta patikimas atsparumas spindžio užlenkimams
- Hidrofilinė danga lengvam pasiekimui
- Minkšto galiuko dilatatoriai sustiprina anatomijos vingių sekamumą

FLEXOR ANSEL

- Komplekte 0,018" ir 0,038" tinkami dilatatoriai
- Galimos tiesaus, universalios, renalinio ir cobros konfigūracijos
- Galimi įvairaus dydžio ilgio ir 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12Fr diametro

LABAI LANKSTUS ANSEL


- Standesnės konstrukcijos sukurtos geresniems postūriams
- Minkštesnis, lankstesnis dilatatorius geresniam anatomijos vingių sekamumui
- Tiesūs ir multifunkciniai galiuko formos
- Galimi 4, 5, 6, 7, 8, 10 ir 12 Fr dydžiai bei įvairūs ilgi

Pirmasis novatoriškas vedimas

Kai pasiekimas yra sudėtingas, Flexor prisitaiko. Kai priemoni vedimas ypatingai sunkus, Flexor priima iššūkį.

Neužlinkstantis

Patentuotas spiralės vijų konstrukcija suteikia lankstumą ir maksimali apsaugą nuo užlinkimo ir suspaudimo.

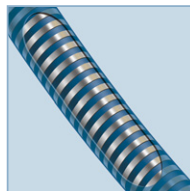


Mažo pasipriešinimo

Didelio spindžio, mažo pasipriešinimo teflonu dengtas vidinis paviršius, palengvina priemoni vedimą ir pristatymą.

Geresnis matomumas

Rentgenokontrastinis žymuo integruotas sienelėje, suteikiantis distalinio galiuko tikslios vietos lokaciją.

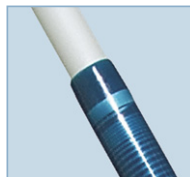

Patobulintas sekimas anatomijos formomis

Galimybė pasirinkti su hidrofiline danga AQ, siekiant maksimaliai sumažinti trintą ir padidinti anatomijos vingių sekamumą.

Konfiguracijos

ANL 0
Tiesus




ANL1
Multifunkcinis



ANL2
Renalinis



ANL3
Cobra

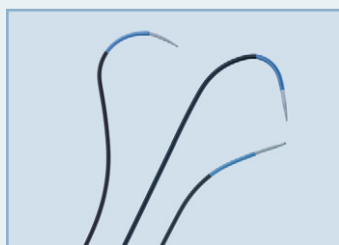


Flexor Ansel nukreipiamasis introduiseris Su Tuohy-Borst hemostatinio vožtuvu

Komplektacijoje su 0,018" ir 0,038" tinkamai dilatatoriais



Tuohy-Borst Valve

Užsakymo kodas	Prekės kodas	Introduiserio diametras, Fr	Introduiserio vidinis diametras, coliais/mm	Tinkamos vielos pravedimo diametras, coliais	Introduiserio ilgis, cm	Galiuko konfigūracija
G29995	KSAW-5.0-18/38-55-RB-ANL1-HC	5.0	.074/1.9	.018/.038	55	multipurpose
G30120	KSAW-5.0-18/38-55-RB-ANL2-HC	5.0	.074/1.9	.018/.038	55	renal double
G30121	KSAW-5.0-18/38-55-RB-ANL3-HC	5.0	.074/1.9	.018/.038	55	cobra
G29996	KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL1-HC	6.0	.087/2.2	.018/.038	55	multipurpose
G29997	KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL2-HC	6.0	.087/2.2	.018/.038	55	renal double
G29999	KSAW-7.0-18/38-55-RB-ANL1-HC	7.0	.100/2.5	.018/.038	55	multipurpose
G30000	KSAW-7.0-18/38-55-RB-ANL2-HC	7.0	.100/2.5	.018/.038	55	renal double

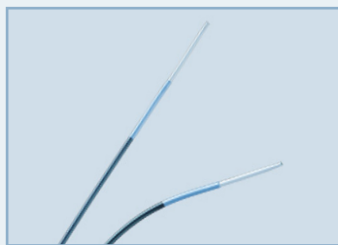

Flexor Ansel nukreipiamasis introduiuseris su Check-Flo hemostatiniu vožtuvu ir labai lanksiais dilatatoriais

Kompletacijoje 0,035" tinkamas dilatatorius



Check-Flo Valve

Užsakymo kodas	Prekės kodas	Introduiuserio diametras, Fr	Introduiuserio vidinis diametras, coliais/mm	Tinkamos vielos pravedimo diametras, coliais	Introduiuserio ilgis, cm	Galiuko konfigūracija
G56229	KCFW-4.0-35-55-RB-HFANL0-HC	4.0	.059/1.5	.035	55	straight
G56234	KCFW-4.0-35-55-RB-HFANL1-HC	4.0	.059/1.5	.035	55	multipurpose
G56219	KCFW-4.0-35-70-RB-HFANL0-HC	4.0	.059/1.5	.035	70	straight
G56224	KCFW-4.0-35-70-RB-HFANL1-HC	4.0	.059/1.5	.035	70	multipurpose
G56230	KCFW-5.0-35-55-RB-HFANL0-HC	5.0	.074/1.9	.035	55	straight
G56235	KCFW-5.0-35-55-RB-HFANL1-HC	5.0	.074/1.9	.035	55	multipurpose
G56220	KCFW-5.0-35-70-RB-HFANL0-HC	5.0	.074/1.9	.035	70	straight
G56225	KCFW-5.0-35-70-RB-HFANL1-HC	5.0	.074/1.9	.035	70	multipurpose
G56231	KCFW-6.0-35-55-RB-HFANL0-HC	6.0	.087/2.2	.035	55	straight
G56236	KCFW-6.0-35-55-RB-HFANL1-HC	6.0	.087/2.2	.035	55	multipurpose
G56221	KCFW-6.0-35-70-RB-HFANL0-HC	6.0	.087/2.2	.035	70	straight
G56226	KCFW-6.0-35-70-RB-HFANL1-HC	6.0	.087/2.2	.035	70	multipurpose
G56232	KCFW-7.0-35-55-RB-HFANL0-HC	7.0	.100/2.5	.035	55	straight
G49043	KCFW-7.0-35-55-RB-HFANL1-HC	7.0	.100/2.5	.035	55	multipurpose
G56222	KCFW-7.0-35-70-RB-HFANL0-HC	7.0	.100/2.5	.035	70	straight
G56227	KCFW-7.0-35-70-RB-HFANL1-HC	7.0	.100/2.5	.035	70	multipurpose
G56233	KCFW-8.0-35-55-RB-HFANL0-HC	8.0	.113/2.9	.035	55	straight
G49045	KCFW-8.0-35-55-RB-HFANL1-HC	8.0	.113/2.9	.035	55	multipurpose
G56223	KCFW-8.0-35-70-RB-HFANL0-HC	8.0	.113/2.9	.035	70	straight
G56228	KCFW-8.0-35-70-RB-HFANL1-HC	8.0	.113/2.9	.035	70	multipurpose
G56278	KCFW-10.0-35-45-RB-HFANL0-HC	10.0	.134/3.4	.035	45	straight
G47700	KCFW-10.0-35-45-RB-HFANL1-HC	10.0	.134/3.4	.035	45	multipurpose
G56279	KCFW-12.0-35-45-RB-HFANL0-HC	12.0	.162/4.1	.035	45	straight
G47701	KCFW-12.0-35-45-RB-HFANL1-HC	12.0	.162/4.1	.035	45	multipurpose



Flexor Ansel nukreipiamasis introduiseris su Check-Flo hemostatiniu vožtuvu

Komplektacijoje su 0,018", 0,035" ir 0,038" tinkamai dilatatoriais



Check-Flo Valve

Užsakymo kodas	Prekės kodas	Introduiserio diametras, Fr	Introduiserio vidinis diametras, coliais/mm	Tinkamos vielos praved. jos diametras, coliais	Introduiserio ilgis, cm	Galiuko konfigūracija
G48186	KCFW-4.0-18/35-45-RB-ANL0-HC	4.0	.059/1.5	.018/.035	45	Straight
G48188	KCFW-4.0-18/35-90-RB-ANL0-HC	4.0	.059/1.5	.018/.035	90	Straight
G48191	KCFW-4.0-18/35-110-RB-ANL0-HC	4.0	.059/1.5	.018/.035	110	Straight
G44153	KCFW-5.0-18/38-45-RB-ANL0-HC	5.0	.074/1.9	.018/.038	45	Straight
G29981	KCFW-5.0-18/38-45-RB-ANL1-HC	5.0	.074/1.9	.018/.038	45	Multipurpose
G30117	KCFW-5.0-18/38-45-RB-ANL2-HC	5.0	.074/1.9	.018/.038	45	Renal Double
G48189	KCFW-5.0-18/38-90-RB-ANL0-HC	5.0	.074/1.9	.018/.038	90	Straight
G29988	KCFW-5.0-18/38-90-RB-ANL1-HC	5.0	.074/1.9	.018/.038	90	Multipurpose
G48192	KCFW-5.0-18/38-110-RB-ANL0-HC	5.0	.074/1.9	.018/.038	110	Straight
G44154	KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL0-HC	6.0	.087/2.2	.018/.038	45	Straight
G29982	KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL1-HC	6.0	.087/2.2	.018/.038	45	Multipurpose
G29983	KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL2-HC	6.0	.087/2.2	.018/.038	45	Renal Double
G29984	KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL3-HC	6.0	.087/2.2	.018/.038	45	Cobra
G29989	KCFW-6.0-18/38-90-RB-ANL1-HC	6.0	.087/2.2	.018/.038	90	Multipurpose
G44155	KCFW-7.0-18/38-45-RB-ANL0-HC	7.0	.100/2.5	.018/.038	45	Straight
G29985	KCFW-7.0-18/38-45-RB-ANL1-HC	7.0	.100/2.5	.018/.038	45	Multipurpose
G29986	KCFW-7.0-18/38-45-RB-ANL2-HC	7.0	.100/2.5	.018/.038	45	Renal Double
G49099	KCFW-8.0-18/38-45-RB-ANL0-HC	8.0	.113/2.9	.018/.038	45	Straight
G49100	KCFW-8.0-18/38-45-RB-ANL1-HC	8.0	.113/2.9	.018/.038	45	Multipurpose
G49101	KCFW-9.0-18/38-45-RB-ANL0-HC	9.0	.126/3.2	.018/.038	45	Straight
G49102	KCFW-9.0-18/38-45-RB-ANL1-HC	9.0	.126/3.2	.018/.038	45	Multipurpose

Customer Service Centers

EMEA: EDI - www.cookmedical.com/edi.do
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

www.cookmedical.com

Americas: EDI - www.cookmedical.com/edi.do
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335,
E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 738411188, 1800777222, Fax: +61 738411288, 1800077283,
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

AORTIC INTERVENTION
CRITICAL CARE
ENDOSCOPY
INTERVENTIONAL RADIOLOGY
LEAD MANAGEMENT
PERIPHERAL INTERVENTION
SURGERY
UROLOGY
WOMEN'S HEALTH

