


PowerCross™

.018 PTA balionas

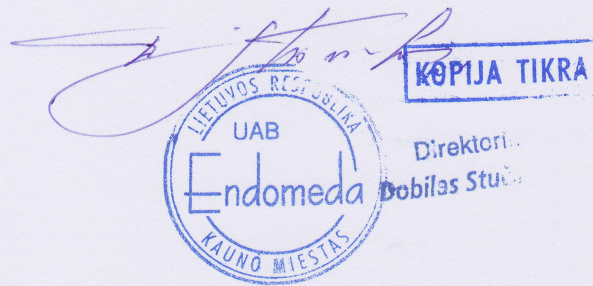

Patirkit tobulo stūmimo jėgą.

Naujos kartos .018" PTA balionai

Pristatome PowerCross™

Nauja karta PTA balionų technologijoje iš ev3.

Patirkite tobulo stūmimo jėgą su pagerintu OTW .018" balionu skirtu skalndžiam praėjimui ir greitam oro išleidimui.

Ypatingai žemas praėjimo profilis

- ThermoFlex™ baliono medžiaga skirta tvirtumui ir praeinamumui
- Bevel 360™ galiukas suteikia ypatingai sklandų perėjimą nuo vielos iki galo

Žymeklių juostos

- Turi dvi papildomas žyminčias juostas tiek ant 150mm tiek ant 200 mm balionų, kurios suteikia papildomą matomumą

Pagerintas įvedimas

- Tvirtas kateterio dizainas pagerina stūmimą ir praėjimą
- CrossCoat™ hidrofilinis padengimas sumažina trintį

Žymiai sumažina oro išleidimo laiką

- Didelis vidinis spindis sąlygoja sumažintą oro išleidimo laiką.

Yra iki 200mm ilgio

- Mažas oro išleidimo laikas 200mm ilgio balionams ant ilgo 150cm korpuso

Tikslumas. Kontrolė. Patikimumas.

Protégé® GPS™ stento sistema – ten, kur jūs norite būti

stento sistema: tikslus patalpinimas, kuomet jis reikalingas labiausiai

Stento patalpinimas ten, kur norite

Unikali nulinio sutrumpėjimo, EX.P.R.T.™ sistemos ir GPS rentgenokontrastinių markerių kombinacija leidžia įdėti stentą kada ir kur jūs norite.

Protégé GPS stentai niekada nesutrumpėja

Kuomet kiti nitinoliniai stentai gali sutrumpėti iki 6% ar daugiau, visų išskleidimų diametrų Protege GPS stentai nesutrumpėja. Nulinis sutrumpėjimas padeda iksliau paalpini steną ir numatyti spindžio padengimą.

Pasitikėkite EX.P.R.T. sistemos patlpinimu

EX.P.R.T (tikslaus patalpinimo išskleidimo technologija) padarė gal pirmalaikiam stento išsiskleidimui ar iššokimui. EX.P.R.T. system veikia prikabindama proksimalius stento galiukus prie apsauginio žiedo, atpalaiduodama stentą tik po išorinio kateterio visiško atitraukimo atgal pro proksimalų stento galą.

Stento dizainas kaip niekieno kito

Protege GPS skiriasi savo dizainu, kuris nustato standartus veikimui. Tantalo žymekliai ant kiekvieno stento galo suteikia pagerintą matomumą ir puikų patalpinimą.

Nėra išplatėjančių galų

Stentas neturi išplatėjančių galų ir sumažintas atstumas tarp markerių ir pačio stento. Tai sumažina kraujagyslės sudirginimo ar pažeidimo riziką ir padeda išlaikyti radialinę jėgą sento galuose.

Pamatykite ir pajauskite skirtumą su StarPort™ įvedimo technologija

Matykite aiškiau. Patentuotos StarPort technologijos dėka galima įšvirkšti kontrastą per kateterio korpusą, taip leidžiant atlikti vizualizaciją prieš stento patalpinimą.

Pajauskite kontrolę.

Unikalus Protege sistemos kateteio dizainas sumažina kontaktinių taškų skaičių tarp vidinio ir išorinio kateterio, kas sumažina trintį išskleidimo metu. Šis dizainas, kartu su paprasta elegantiška ir patogia ergonomiška rankena, leodžia atlikti judesį skalndžiai ir kontroliuojamai, kas reikalinga tiksliam stento išskleidimui.

[Signature]

KOPIJA TIKRA

