



VITALITEC
INTERNATIONAL

KOPIJA TIKRA

Vady bininkus
Edvinas Lekas


Edvinas
2014-11-27




SLS-CLIP™

SOFT LOADING SYSTEM

Titanium haemostatic Clip

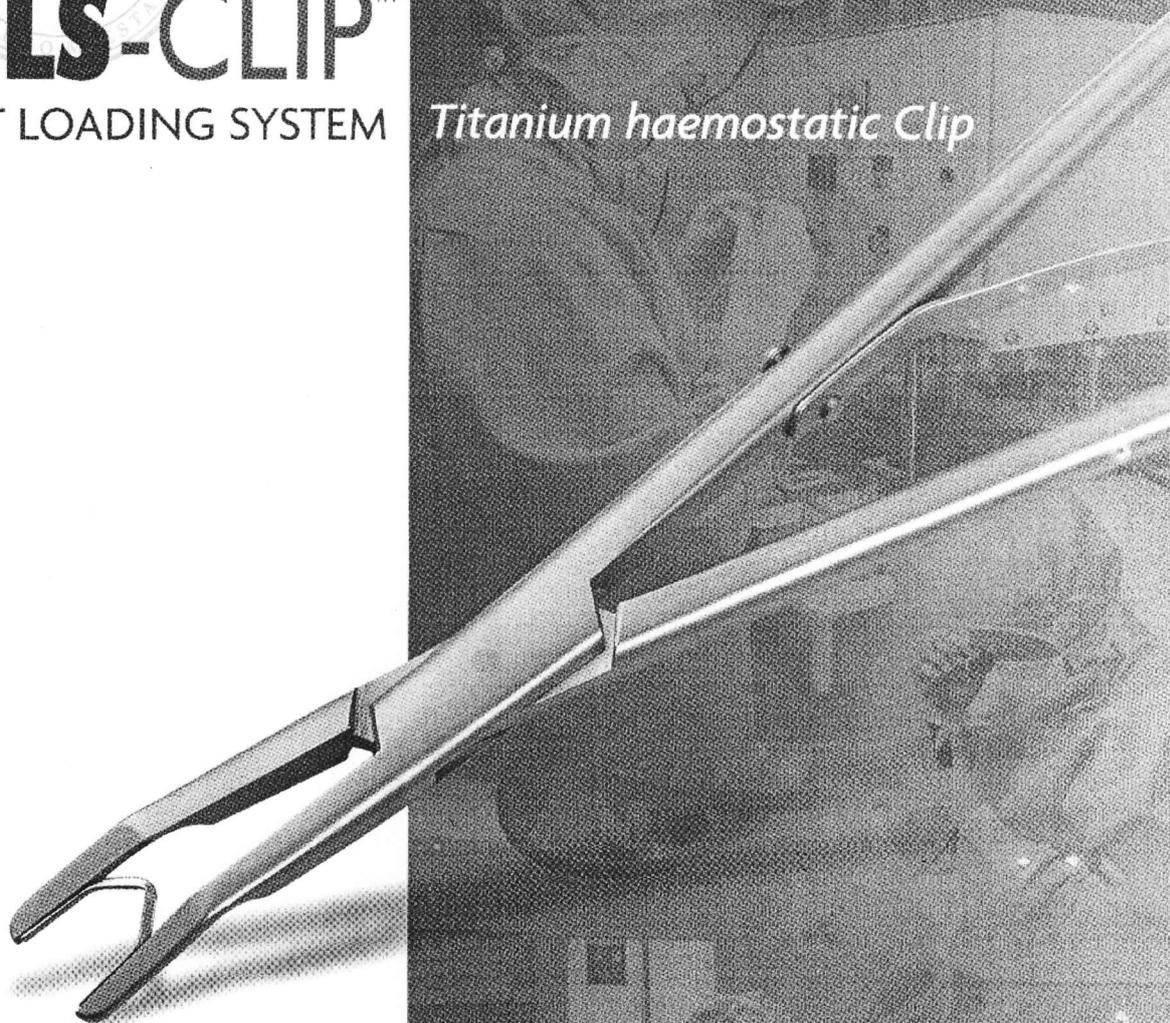

A European haemostatic clip manufacturer

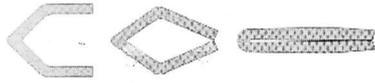

Pure titanium

Pure titanium annealed to a malleable consistency providing maximum vessel occlusion and zero memory to prevent tip opening after application. Biologically inert, radiolucent and non magnetic for use with MRI or related scanning equipment.


Chevron shape

Chevron shape provides progressive and encompassing tip to tip closure before complete and secure occlusion of tissue or vessel.



Diamond shape grooving

Diamond grooving and interlocking atraumatic teeth design of the clip ensures enhanced security in vessel closure : striation is composed of small pyramidal heads, similar to tungsten inserts from needle-holders, insuring a firm multi-directional non hurting vessel grip.

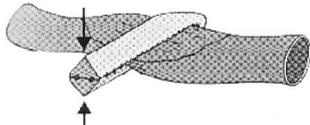

Triangular shaped wire


Shaped Wire fits perfectly into the custom grooves of our appliers to provide mechanical power during application of the clip.

Atraumaticity

Special surface treatment and annealing provide a secure atraumaticity.

6 sizes available, 2 exclusive sizes

Our exclusive small/medium and micro sizes have been designed at the request of surgeons, to match specific vessel sizes.

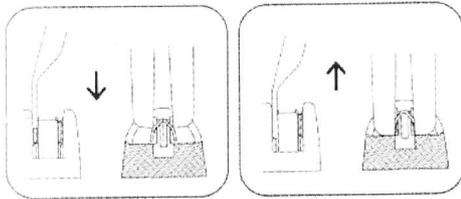

Effective clip retention


Adhesive cartridge backing

Precise and effortless clip loading

Ergonomic cartridge design


KOPIJA TIKRA

Vadybininkas
Edvinas Lokas
Uzdaroji
akcinė bendrovė
2009-11-28
PRINCIPALMED 1L

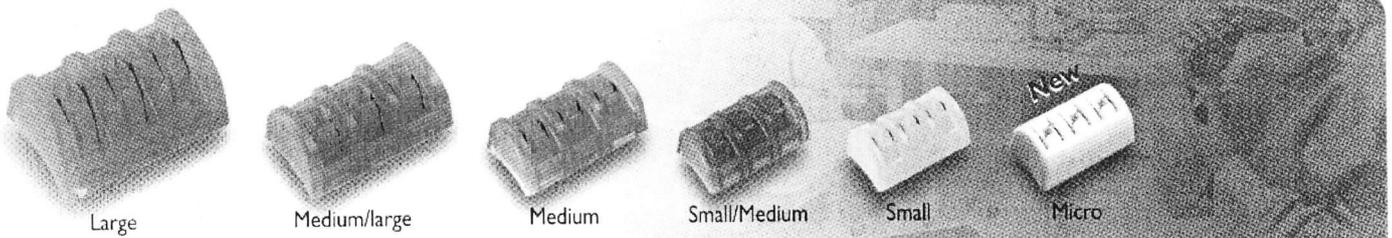


Complete range

Vitalitec clip appliers are available in 15 cm, 19 cm, 28 cm, 28 cm angled models. For Minimally-Invasive Surgery, Vitalitec has developed a special laparoscopic range in 5.0 mm, 6.5 mm, 10.0 mm and 12.5 mm diameter.

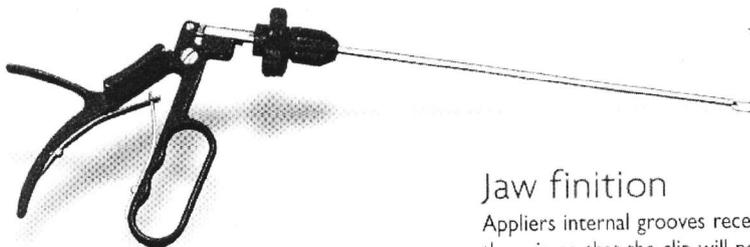

Jaw finition

Appliers internal grooves receive a specific treatment to increase the grip so that the clip will not slip from the applier.

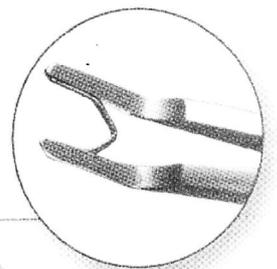

Clip appliers are color coded to match clip sizes

Vadybininkas
Edvinas Lekas
2014-11-22

KOPIJA TIKRA

Ordering information

Cartridges

Size	Reference cartridge / unit	Reference SLS Pack / pouch	Color	Height Clip closed	Height Clip opened	Width
Micro	W 6060 • 1		White	2.6 mm	2.2 mm	3.1 mm
Small	J 1180 • 1	J 1120 • 1	Yellow	3.6 mm	3.0 mm	4.2 mm
Small/Medium	L 5180 • 1	L 5120 • 1	Lilac	4.7 mm	4.1 mm	4.5 mm
Medium	B 2180 • 1	B 2120 • 1	Blue	5.6 mm	4.8 mm	5.8 mm
Medium/large	V 3120 • 1	-	Green	9.0 mm	7.8 mm	8.4 mm
Large	O 4120 • 1	-	Orange	12.3 mm	10.7 mm	11.0 mm

Packaging

Size	Reference	Packaging
Micro	W 6060 • 1	30 cartridges of 6 clips / 180 clips
Small	J 1180 • 1 <i>23.2 puz.</i>	30 cartridges of 6 clips / 180 clips
Small	J 1120 • 1	5 pouches of 4 cartridges / 120 clips
Small/Medium	L 5180 • 1	30 cartridges of 6 clips / 180 clips
Small/Medium	L 5120 • 1	5 pouches of 4 cartridges / 120 clips
Medium	B 2180 • 1 <i>23.3. puz.</i>	30 cartridges of 6 clips / 180 clips
Medium	B 2120 • 1	5 pouches of 4 cartridges / 120 clips
Medium/large	V 3120 • 1 <i>23.4 puz.</i>	20 cartridges of 6 clips / 120 clips
Large	O 4120 • 1	20 cartridges of 6 clips / 120 clips

*Appliers

Size	Color	15 cm	19 cm	28 cm	28 cm right angled jaws
Micro	White	PW 615 • 1	PW 619 • 1		
Small	Yellow	PJ 115 • 1	PJ 119 • 1		
Small/Medium	Lilac	PL 515 • 1	PL 519 • 1		
Medium	Blue	PB 215 • 1	PB 219 • 1	PB 228 • 1	PBC 228 • 1
Medium/large	Green		PV 319 • 1	PV 328 • 1	PVC 328 • 1
Large	Orange		PO 419 • 1	PO 428 • 1	POC 428 • 1

*Laparoscopic clip appliers

Size	Reference	Trocar Ø required	Length
Small	LCA SLS 1	5.0 / 5.5 mm	33 cm
Small / Medium	LCA SLS 2	5.5 mm	33 cm
Medium	LCA SLS 3	6.5 mm	33 cm
Medium	LCA SLS 4	10.0 mm	33 cm
Medium/large	LCA SLS 5	10.0 mm	33 cm
Large	LCA SLS 6	12.5 mm	33 cm

* Special length on request



Manufactured by
VITALITEC INTERNATIONAL
 Z.A. Vague de La Noë • 35680 Domalain • FRANCE
 Tel. : + 33(0)2 99 96 76 76
 Fax : + 33(0)2 99 96 59 68 • e-mail : vitalitec@aceli.com
 VITALITEC SURGICAL GROUP





VITALITEC
INTERNATIONAL

VEIKIANTIS TURTAS

Vadybininkas
Edvinas Lekas

Edl
2014-11-28

Uždaroji
akcinė bendrovė

PRINCIPALINIS


SLS-CLIP™

SOFT LOADING SYSTEM

Titaninės hemostatinės kabutės



Europos hemostatinių kabučių gamintojas

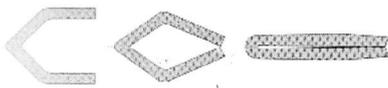


TITANO LYDINYS

Titano lydinys yra parenkamas tokios konsistencijos, kuri užtikrintų maksimalų kraujagyslės užspaudimą ir visiškai neturėtų atminties, kuri galėtų sąlygoti kabutės atsідarymą po uždėjimo. Biologiškai neaktyvus, gerai matomas rentgeno spindulių nuotraukose, ne magnetinis atliekant BMR tyrimą ar kitą peržiūros procedūrą.

SHEVRON PAVIDALO DARBINIS PAVIRŠIUS

Šio pavidalo darbinis paviršius pateikiamas kaip labai patikimas ir suspaudžiant instrumentą pirma suglaudžiamas galiukas su galiuku, po ko seka visos kabutės užspaudimas nuo galiukų iki lenkiamosios dalies, kas sąlygoja saugų ir visišką kraujagyslės ar audinio perspaudimą.

Darbinis paviršius

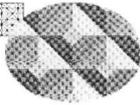

DEIMANTO FORMOS GROIOVELIAI

Deimanto formos grioveliai ir surakinimo dantukų dizainas kabutės darbiniam paviršiuje garantuoja kokybę perspaudžiant kraujagyslę: grioveliu sudaro mažų piramidžių dantukai, tokie kaip adatkočių darbinis paviršius o užspaudžiant kabutę darbiniai paviršiai sugula vienas į kito griovelius bet nepažeidžia kraujagyslės.

TRIKAMPIO FORMOS KABUTĖ



Kabutės tobulai tinka mūsų instrumentams ir pritaikytos maksimalia jėga užspausti ją.

ATRAUMATIŠKUMAS

Specialus paviršiaus apdorojimas ir kabučių medžiaga garantuoja atraumatiškumą ir saugumą

6 GALIMI DYDŽIAI, 2 IŠ KURIŲ IŠSKIRTINIAI

Mūsų išskirtiniai mažas/vidutinis ir mikro kabučių dydžiai buvo sukurti pagal chirurgų prašymą, parenkant juos pagal klipuojamų kraujagyslių dydžius.

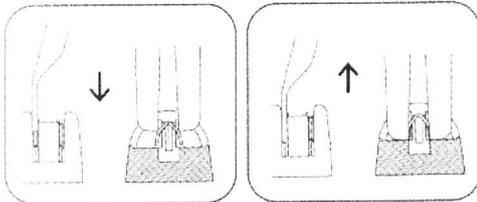
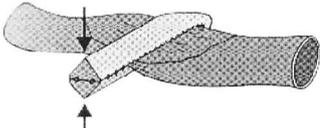


Saugi kabučių fiksacija

Limpanti dėžutės nugarėlė


Tikslus ir lengvas kabutės paėmimas

Ergonominis dėžutės dizainas

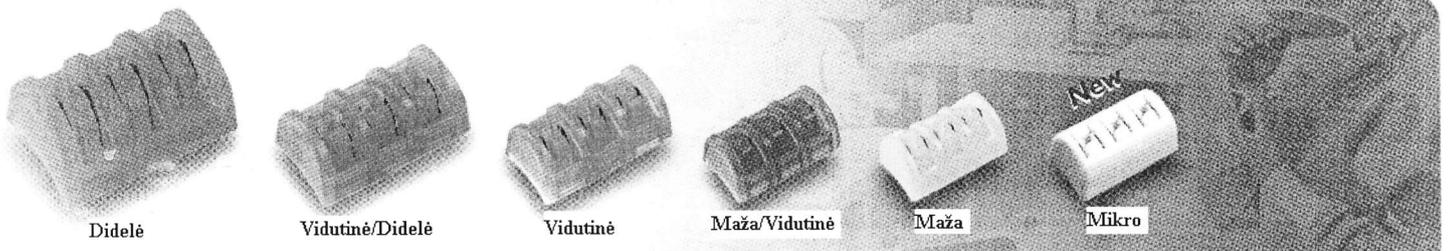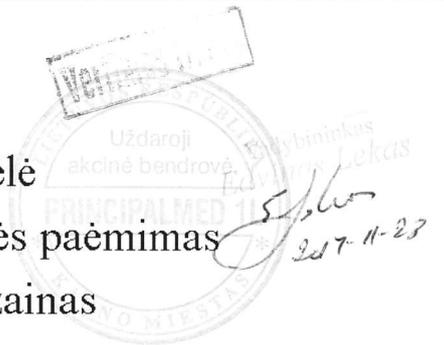


Gaminių spektras

Vitalitec klipavimo instrumentai gaminami 15 cm, 19 cm, 28 cm ir 28 cm su lenktu galu ilgų modelių. Laparoskopinėms operacijoms yra gaminami specialūs instrumentai 5.0 mm, 6.5 mm, 10.0 mm ir 12.5 mm diametro.

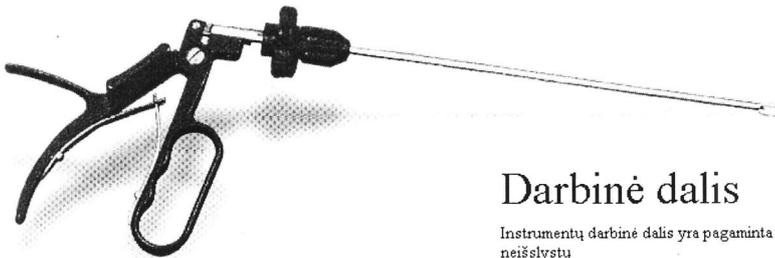

Darbinė dalis

Instrumentų darbinė dalis yra pagaminta taip, kad kabutė stabiliai fiksuotųsi instrumente ir neišslystų

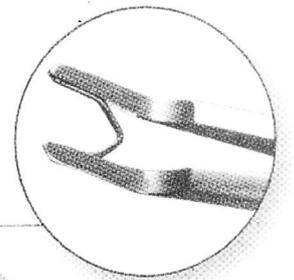

Kiekvienas instrumentas ir to pačio dydžio kabutės yra koduoti ta pačia spalva

E. Jekas
2014-11-28

VITALITEC

Dėžutės

Dydis	Nuoroda Dėžutė/Vnt.	Katalogo kodas	Spalva	Uždaros kabutės aukštis	Atviros kabutės aukštis	Plotis
Mikro	W 6060 • 1		Balta	2.6 mm	2.2 mm	3.1 mm
Maža	J 1180 • 1	J 1120 • 1	Geltona	3.6 mm	3.0 mm	4.2 mm
Maža/Vidutinė	L 5180 • 1	L 5120 • 1	Violetinė	4.7 mm	4.1 mm	4.5 mm
Vidutinė	B 2180 • 1	B 2120 • 1	Mėlyna	5.6 mm	4.8 mm	5.8 mm
Vidutinė/Didelė	V 3120 • 1	-	Žalia	9.0 mm	7.8 mm	8.4 mm
Didelė	O 4120 • 1	-	Oranžinė	12.3 mm	10.7 mm	11.0 mm

Pakuotės

Dydis	Katalogo kodas	Pakuotė
Mikro	W 6060 • 1	30 Dėžučių po 6 kab. / 180 kab.
Maža	J 1180 • 1 <i>23.2 poz.</i>	30 Dėžučių po 6 kab. / 180 kab.
Maža	J 1120 • 1	5 maišiuk. po 4 dėžutes / 120 kab.
Maža/Vidutinė	L 5180 • 1	30 Dėžučių po 6 kab. / 180 kab.
Maža/Vidutinė	L 5120 • 1	5 maišiuk. po 4 dėžutes / 120 kab.
Vidutinė	B 2180 • 1 <i>23.3 poz.</i>	30 Dėžučių po 6 kab. / 180 kab.
Vidutinė	B 2120 • 1	5 maišiuk. po 4 dėžutes / 120 kab.
Vidutinė/Didelė	V 3120 • 1 <i>23.4 poz.</i>	20 Dėžučių po 6 kab. / 120 kab.
Didelė	O 4120 • 1	20 Dėžučių po 6 kab. / 120 kab.

Instrumentai

Dydis	Spalva	15 cm	19 cm	28 cm	28 cm <small>Traukos su išsiplėtimo galia</small>
Mikro	Balta	PW 615 • 1	PW 619 • 1		
Mažas	Geltona	PJ 115 • 1	PJ 119 • 1		
Mažas/vidutinis	Violetinė	PL 515 • 1	PL 519 • 1		
Vidutinis	Mėlyna	PB 215 • 1	PB 219 • 1	PB 228 • 1	PBC 228 • 1
Vidutinis/didelis	Žalia		PV 319 • 1	PV 328 • 1	PVC 328 • 1
Didelis	Oranžinė		PO 419 • 1	PO 428 • 1	POC 428 • 1

Laparoskopiniai instrumentai

Dydis	Katalogo kodas	Reikalingas troakaro diametras	Ilgis
Mikro	LCA SLS 1	5.0 / 5.5 mm	33 cm
Mažas	LCA SLS 2	5.5 mm	33 cm
Mažas/vidutinis	LCA SLS 3	6.5 mm	33 cm
Vidutinis	LCA SLS 4	10.0 mm	33 cm
Vidutinis/didelis	LCA SLS 5	10.0 mm	33 cm
Didelis	LCA SLS 6	12.5 mm	33 cm

CE 0197

pagaminta:

VITALITEC INTERNATIONAL
Z.A. Vague de La Noë • 35680 Domalain • FRANCE
Tel.: + 33(0)2 99 96 76 76
Fax: + 33(0)2 99 96 59 68 • e-mail: vitalitec@aceli.com
VITALITEC SURGICAL GROUP

VITALITEC
INTERNATIONAL