

CryoIce™ krioabliacijos zondas



NAUDOJIMO INDIKACIJA

Cryo Ice krioabliacijos zondas skirtas naudoti krio chirurginiam širdies aritmijų gydymui . Zondas užšaldo tikslinius audinius, sukurdamas uždegiminį atsaką (krionekrozę), kuris blokuoja elektros laidumo kelią.

4.1.4

4.2.4

PRODUKTO PRIVALUMAI

4.3.4

4.1.3

CryoICE _ krioabliacijos zondas yra sterilus vienkartinis krio chirurginis instrumentas, skirtas naudoti su CryoICE BOX ACM2.

4.2.3

Šis 10 cm ilgio lankstus zondas krioabliacijai yra 3 formų, kurių kiekviena turi savo lankstumo lygį,

4.3.3

kad tiksliai atitiktų chirurgo poreikius. Krioabliacijos zondas turi vienintelę pasaulyje greito atšildymo sistemą, kuri leidžia saugiai ir greitai pašalinti zondą iš audinių, todėl nereikia drėkinti audinių. Azoto oksidas (N2O), naudojamas kaip zondo kriogeninės dujos, kurios yra plačiai prieinamos.


3.5

Sterilumas garantuojamas, nebent pakuotė būtų atidaryta ar pažeista. Negalima pakartotinai sterilizuoti .

Kiti komponentai (ASU ir ASB3) nėra sterilūs ir gali būti naudojami pakartotinai

funkcijos	Cryo2	Cryo3	CryoF
Zondo medžiaga	4.1.1 Aliuminis	4.2.1 Aliuminis 4.3.1	Nerūdijantis plienas
Zondo paviršius	Lygus	Lygus	Gofruotas
Zondo ilgis	4.1.2 10 cm	4.2.2 10 cm	4.3.2 10 cm
Zondas lankstumas	Lankstus zondas	Patobulintas lankstus zondas; Formai reikia 25 % mažiau lenkimo jėgos, palyginti su CRYO2	Didžiausias lankstumas

PRODUKTO ILIUSTRACIJA

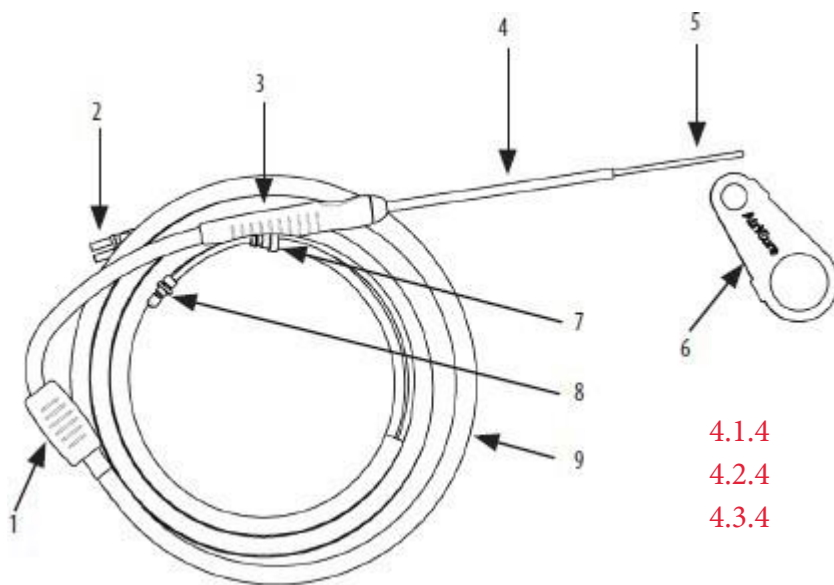

1. Kolektorius
2. Temperatūros jungtys
3. Ištraukiama rankena
4. Tvirtas velenas
5. Kalus antgalis
6. Formos įrankis
7. Dujų įleidimo jungtis
8. Dujų išmetimo jungtis
9. Lankstus vamzdelis

4.1.4

4.2.4

4.3.4