



„Next generation care™“

Supažindinimas su „**Optiflow™** Junior 2“




Kitos kartos naujagimių, kūdikių ir vaikų priežiūra.

„F&P Optiflow™ Junior 2“ yra nosies adapteris, sukurtas kaip savita naujagimių, kūdikių ir vaikų tėkmės reikalavimus ir anatomines ypatybes tiekiant didelį srautą per nosį (Nasal High Flow, NHF) atitinkanti priemonė.

Šis prietaisas naudoja „Waveflex™“ technologiją, todėl galima geriau pritaikyti, stabilizuoti atšakas, lengviau sureguliuoti; pateikia dydžius, tinkančius plačiam pacientų diapazonui, išlaikant visą originalaus „Optiflow Junior“ naudą.


Tai yra kitos kartos priežiūra.

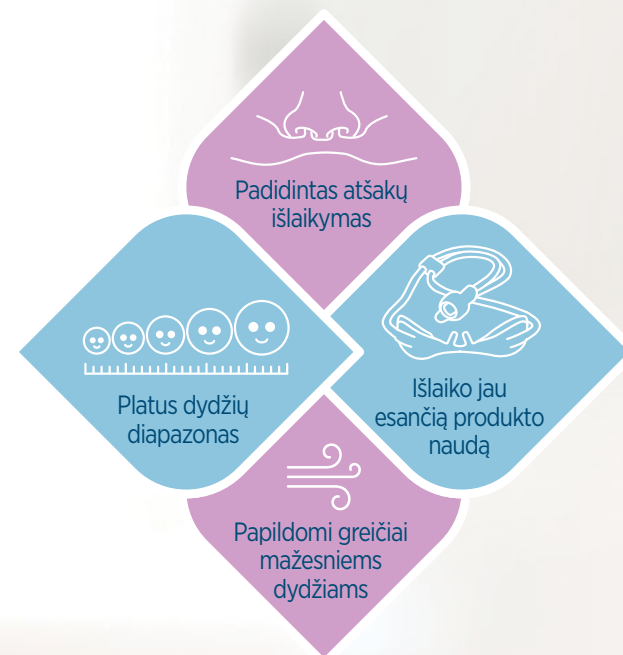

F&P Optiflow Junior 2

Padidintas atšakų išlaikymas



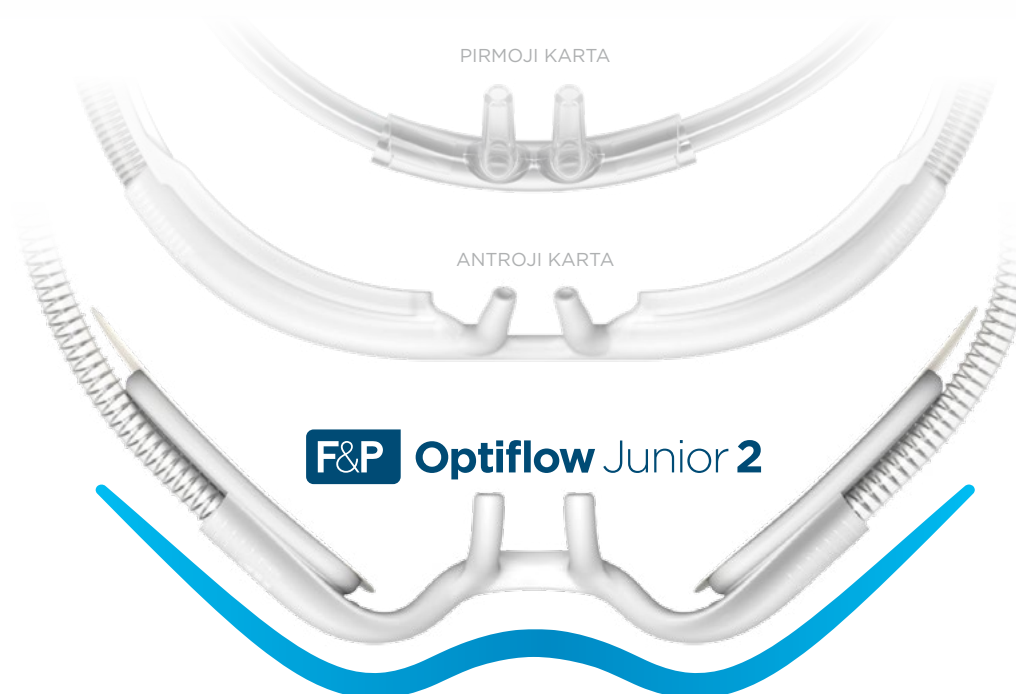

Galimi natūralūs veido judesiai, kai
paciento skruostai yra suspausti

Waveflex™
TECHNOLOGY




Pagerina atšakų stabilumą
nosies šnervėse



Lengvesnis suregulavimas ir
priežiūra prižiūrėtojams

Platus dydžių diapazonas

Parinkite tinkamą kaniulės dydį; turi būti matomas aiškus tarpas aplink kiekvieną atšaką.

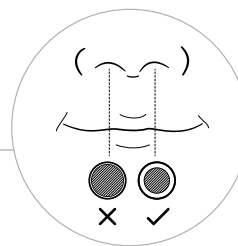


XS




APYTIKSLIS AMŽIUS IR SVORIS


Amžiaus ir svorio informacija turi būti naudojama tik kaip orientyras. Pritaikydami dydį vadovaukitės klinikinio vertinimu.

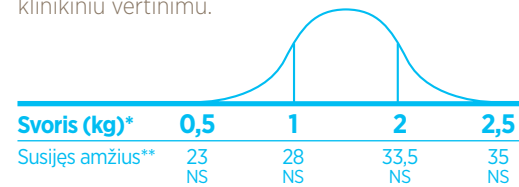



S

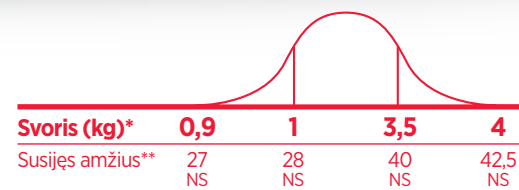


M

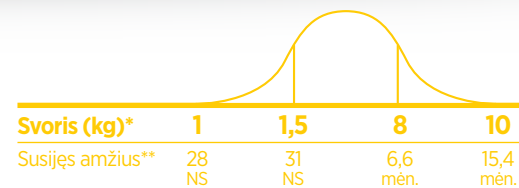

L

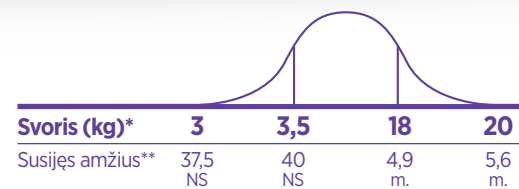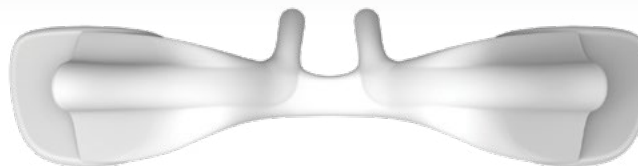


XL

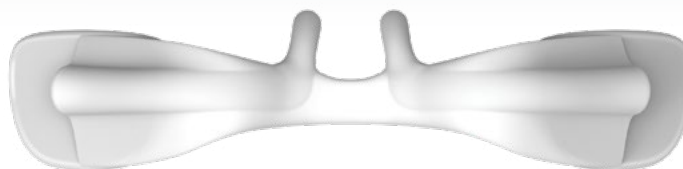

Kaniulės nuotraukos yra teisingos pagal mastelį.

25,4 mm = 1 colis

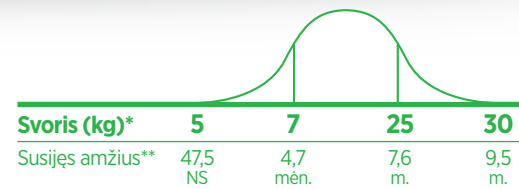

NS = nėštumo savaitės; mėn. = mėnuo; m. = metai

* Informacija apie svorį yra pagrįsta remiantis „Fisher & Paykel Healthcare“ patvirtinimo tyrimais.

** Informacija apie amžių yra susijusi su svorio informacija, remiantis Fenton, Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) ir JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) augimo kreivių kombinacija.



Išlaiko jau esančią produkto naudą



Dydžiai,
tinkantys
plačiam
pacientų
diapazonui

Padidintas atšakų
išlaikymas su
„Waveflex“
technologija

Platus tėkmės
diapazonas
(0,5–25 L/min)

Švelnus,
anatominės formos
atšakų dizainas

Lengvas
uždėjimas ir
priežiūra su
„Wigglepads™ 2“

Sumažinta
kondensacija
ir persisukimas
su „FlexiTube™“



Tėkmės greičiai (L/min)



PLATFORMA:
MR850















PLATFORMA:
„Airvo 2“



„F&P Wigglepads 2“

KONTŪRAS:
**RT330
RT331**


KONTŪRAS:
**900PT531
900PT561**

  XS OJR410	<p>19.</p>  <p>WJR110</p>	<p>0,5–8</p>	
  S OJR412		<p>0,5–9</p>	<p>NETAIKOMA</p>
  M OJR414		<p>0,5–10</p>	
  L OJR416	 <p>WJR112</p>	<p>0,5–23</p>	<p>2–20</p>
  XL OJR418		<p>0,5–25</p>	<p>2–25</p>


Viršuje nurodyti tėkmės greičiai apibrėžia produkto technines galimybes, kai naudojama jūros lygyje. Nurodydami srauto greitį, vadovaukitės klinikinio vertinimo.



„F&P“ kūdikiams skirto nosies adapterio evoliucija

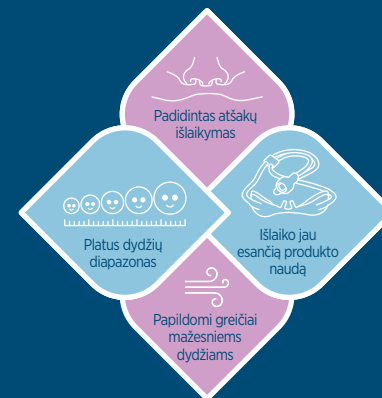

PIRMOJI KARTA

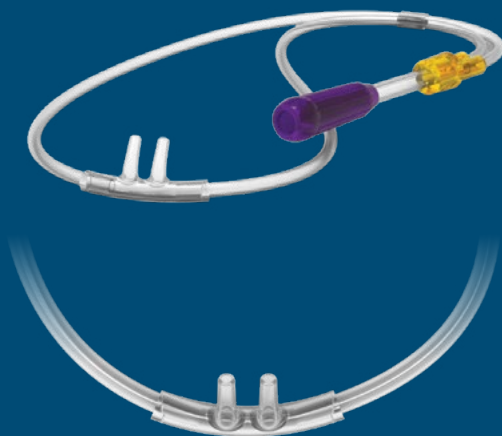

Nosies kaniulė kūdikiams

ANTROJI KARTA



F&P Optiflow junior

TREČIOJI KARTA



F&P Optiflow Junior 2

Dėl įvertinimo ar tolimesnės informacijos galite kreiptis į „Fisher & Paykel Healthcare“ vietinį atstovą.

625599 REV A 2021 © „Fisher & Paykel Healthcare Limited“

„Optiflow“, „Wigglepads“, „AIRVO“, „Next generation care“, „Seahorse“, „Crab“, „Starfish“, „Octopus“, „Turtle“ ir „Dolphin“ yra „Fisher & Paykel Healthcare Limited“ prekių ženklai. Su patentais susijusi informacija pateikta adresu www.fphcare.com/ip

www.fphcare.com

Fisher & Paykel
HEALTHCARE