

Kompiuterio klaviatūros apsauginis dangalas PC Uni Flex
naudojimo ir priežiūros instrukcija

Naudojant šį apsauginį dangalą, ženkliai sumažinama kompiuterio klaviatūros užteršimo pavojingais mikroorganizmais rizika. Šis dangalas apsaugo klaviatūrą nuo išsiliejusių skysčių patekimo. Šis dangalas užtikrina klaviatūros švarą ir gerą būklę.

Šis dangalas yra pakankamai stiprus ir naudojamas pakartotinai juos intensyviai valant ir dezinfekuojant. Priklausomai nuo naudojimo ypatumų, apsauginis dangalas gali būti pakartotinai naudojamas 3 mėnesius. Per nurodytą laiką, dangalas gali būti naudojamas skirtingoms klaviatūroms.

Kaip naudoti:

1. Pirma užmaukite dangalą ant vieno klaviatūros šono;
2. Įtempkite dangalą ir užmaukite likusią jo dalį ant kito klaviatūros šono;
3. Atlikta.

Pastaba: Taip pat galite rinktis dangalus įvairiems nešiojamiems kompiuteriams ir planšetėms. Dangalai pagaminti iš polyuretano termoplastiko (TPU).

Valymas ir dezinfekcija: kompiuterio klaviatūros apsauginis dangalas yra daugkartinio naudojimo. Jo išorinius paviršius galima valyti naudojant vandenį ir muilą. Dezinfekcijai rekomenduojama naudoti alkoholinius preparatus. Valymui rekomenduojama naudoti švelnios faktūros šluostę sudrėkintą plaunamuoju tirpalu arba nurodytu dezinfektantu. Nerekomenduojama dangalo mirkyti, laikyti po vandens srove taip pat drėkinti vidinių paviršių (tiesiogiai kontaktuojančių su klaviatūra), nes susikaupusi drėgmė gali paveikti klaviatūrą. Pažestas dangalas turi būti pakeistas nauju. Dangalui pageltus, rekomenduojama jį keisti nauju.

Pakuotėje: 1 kompiuterio klaviatūros apsauginis dangalas
Pagaminta iš polyuretano termoplastiko (TPU)

Išmatavimai: 400mm x 500mm

Medžiagos storis: 0.025mm

EU – Konformitätserklärung

EU declaration of conformity

Baaske Medical GmbH & Co. KG
Bacmeisterstr. 3
32312 Lübbecke
Deutschland / Germany

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
declares in sole responsibility, that the products

Typ: Tastaturschutz Baaske Uni Flex
Und: Tastaturschutz Baaske Uni Flex Nano

mit den grundlegenden Vorschriften der folgenden EG-Richtlinien übereinstimmen.
comply with the essential requirements of the following EC-Directives.


RoHS Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II), Anhang II 2015/863 EU (RoHS III)
RoHS Directive 2011/65/EU (RoHS II), annex 2015/863/EU (RoHS III)

Lübbecke, 04.07.2019

Andreas Baaske (GF)

Ort und Datum der Ausstellung
Place / Date

Angaben zum Unterzeichner
Issuer

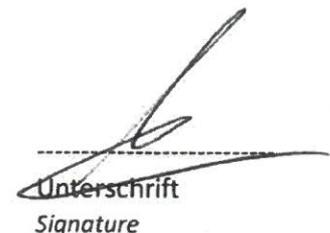

Unterschrift
Signature

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.


This declaration certifies the conformity with the named directives, but does not contain any assurance of quality. The safety instructions of the instruction manual are to be followed.

Product Information


Keyboard Protector PC Uni Flex




Using this protection keyboard skins enables you to minimize pollution or contamination with bacteria and germs. For example our keyboard protection cover is able to protect your keyboard against fluids like coffee or milk that have been overwhelmed by accident. That is the solution to keep your keyboard clean and look like new. The protection foils are very strong and can be used several times after cleaning them intensively.

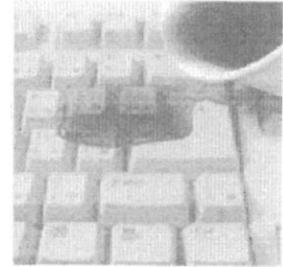


Installation:

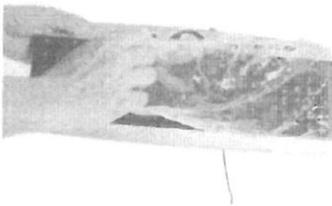

1. Adjust the protector on one side

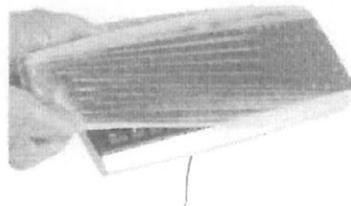


2. Cover the keyboard with the foil

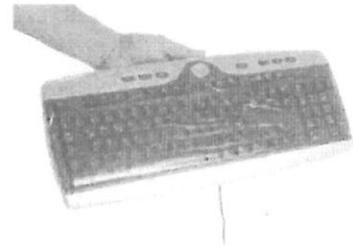

3. Done!

Our Keyboard protectors are also available for Laptops and Notebooks within the article numbers 2005551 to 2005554 for the different sizes. The material of the covers consist of thermoplastic polyurethane (TPU) Based on aromatic polyether.

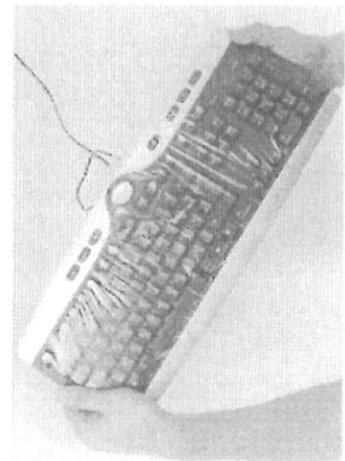

Cleaning / Desinfektion: The keyboard protectors can be used several times. You can either clean them using warm water and soap or explicit Isopropyl- Alcohol 70% only for disinfection.

Contact Information

Baaske Medical GmbH & Co. KG
Siemensstr. 5
32312 Lübbecke


Tel. +49 (0) 57 41 236 027 - 0
Email vertrieb@baaske.net

SALUBER

Daugiasluoksnis higieninis kilimėlis

Kiekvieną SALUBER kilimėlį sudaro 30 lipnių, sunumeruotų polietileno plėvelės sluoksnių.

Dėl ypatingos sudėties klijų SALUBER kilimėliai surenka dulkes ir mikroorganizmus, užtikrindami efektyvų barjerą mikroorganizmų pasklidimui ir dauginimuisi.

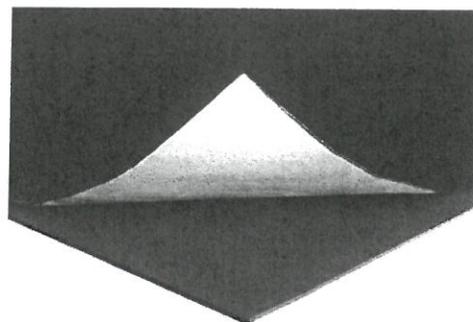


Nelipnios juostelės kiekvieno sluoksnio šone užtikrina lengvą panaudotų plėvelių pašalinimą.



SALUBER kilimėliai skirti aplinkai, kurioje būtinas visiškas užterštumo pašalinimas.

SALUBER, tai CE paženklinta vienkartinė medicinos priemonė.

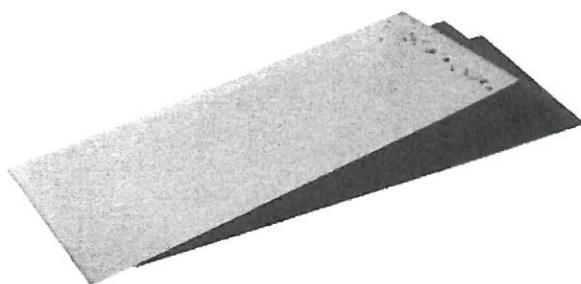

SALUBER galite rinktis:

Mėlynos, žalios ar baltos spalvos

45 x 120 cm

45 x 95 cm

60 x 120 cm

60 x 95 cm

90 x 120 cm

90 x 95 cm

Limpanti kilimėlių apačia, užtikrina tvirtą kilimėlio sukibimą su grindų arba su specialaus SALU-PLATE neslystančio padėklo paviršiumi.


genimpex srl

Brugherio, 12/02/2013

CERTIFICATE of CONFORMITY

We hereby certify that the multilayer decontaminating mat, non-sterile and non-invasive, **SALUBER** is produced and packaged by **genimpex srl** according to the Italian law n° 46 dated 24/02/1997 adopting the EC Directive 93/42/CEE (CE marking), subsequently amended by the Italian law n° 37 dated 25/01/2010 adopting EC Directive 2007/47/CE for non-sterile class 1 products.

We also certify that the above mentioned product is latex-free being this element not compatible with the materials used to manufacture **SALUBER**.

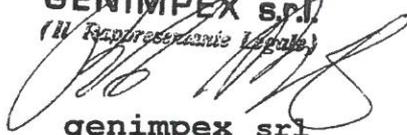GENIMPEX s.r.l.
(Il Rappresentante Legale)

genimpex srl
legal representative
Riccardo Montanari

GENIMPEX srl.

Brugherio, 12/02/2013

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes atsakingai deklaruojame, kad daugiasluoksniai nukenksminantys kilimėliai, nesterilūs ir neinvaziniai, SALUBER gaminami ir pakuojami įmonės GENIMPEX srl., vadovaujantis Italijos teisės akto Nr.46, 24-02-1997, atitinkančio EC direktyvą 93/42 CEE (CE ženkilinimas), priimti Italijos teisės akto Nr.37, 2010/01/25 perimant EB direktyvą 2007/47/EB priskiriami nesteriliems I klasės medicinos prietaisams.

Taip pat deklaruojame, kad minimų produktų sudėtyje nėra latekso, nes ši medžiaga nesuderinama su žaliavomis, naudojamomis SALUBER gamyboje.

Genimpex srl
Vardu
Riccardo Montanari

SALUBER - TECHNICAL FILE

UPDATE: FEBRUARY 2013

Page 1 of 3

1. COMPONENTS

• UPPER PROTECTIVE SHEET

MATERIAL : LOW DENSITY POLYTHENE
THICKNESS : MCR. 42 +/- 2
COLOURS : TRANSPARENT

• MONOADHESIVE SHEET

MATERIAL : LOW DENSITY POLYTHENE
THICKNESS : MCR. 42 +/- 2
COLOURS : GREEN - BLUE - WHITE/TRANSPARENT
ADHESIVE : ACRILIC IN WATERY SUSPENSION
QUANTITY : -WET: 7 GR/M² +/- 1 (COLOUR WHITE)
-DRY: 3.5 GR/M² +/- 0.5 (COLOUR NEUTRAL)
ADESIVITY : >10 N/CM

• BI-ADHESIVE SHEET

MATERIAL : LOW DENSITY POLYTHENE
THICKNESS : MCR. 100 +/- 5
COLOURS : WHITE
UP SIDE
ADHESIVE : ACRILIC IN WATERY SUSPENSION
QUANTITY : - WET: 12 GR/M² +/- 3 (COLOUR WHITE)
- DRY: 6 GR/M² +/- 0.5 (COLOUR NEUTRAL)
ADESIVITY : >12 N/CM
FLOOR SIDE
ADHESIVE : ACRILIC IN WATERY SUSPENSION
QUANTITY : - WET: 12 GR/M² +/- 3 (COLOUR WHITE)
- DRY: 6 GR/M² +/- 0.5 (COLOUR NEUTRAL)
ADESIVITY : >12 N/CM

• LOWER PROTECTIVE SHEET

MATERIAL : LOW DENSITY POLYTHENE
THICKNESS : MCR. 42 +/- 2
COLOURS : TRANSPARENT

• ANTIBACTERIAL

COMPOSITION : 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (CIT/MIT) + Bronopole
NAME : ACTICIDE LA gamma produced by THOR Specialties srl

• MANUFACTURING

SALUBER is produced and packaged by **genimpex srl** in Agrate Brianza (MI) - ITALY with fully automatized technologies designed and manufactured by genimpex srl.

SALUBER - TECHNICAL FILE

UPDATE: FEBRUARY 2013

Page 2 of 3

2. PROPERTIES

• ANAGRAPHICS

NAME : SALUBER.
DESCRIPTION : SEMIRIGID DECONTAMINANT MULTILAYER ADHESIVE MAT.
COLOURS : GREEN - BLUE - WHITE/TRANSPARENT
APPLICATION : ANTIBACTERIAL AND ANTIDUST PROTECTION
PRODUCT CODES : DK-450-V ; DK-600-V ; DK-900-V (GREEN)
DK-450-B ; DK-600-B ; DK-900-B (BLUE)
DK-450-T ; DK-600-T ; DK-900-T (WHITE/TRANSPARENT)
CB-450-B ; CB-600-B ; CB-900-B (BLUE)
CUSTOM CLASS : N° 39199000

• CHARACTERISTICS

SIZES AND WEIGHT	:	code	width mm	length mm	height mm	weight kg
-SINGLE MAT		DK-450	1150 / 1200	450	1,4	0,71
		DK-600	1150 / 1200	600	1,4	0,98
		DK-900	1150 / 1200	900	1,4	1,49
		CB-450	900 / 950	450	1,4	0,56
		CB-600	900 / 950	600	1,4	0,78
		CB-900	900 / 950	900	1,4	1,18
-PACKAGE (5 pcs)		DK-450	1270	600	17	4,63
		DK-600	1270	750	17	6,28
		DK-900	1270	1050	17	9,31
		CB-450	1020	600	17	3,66
		CB-600	1020	750	17	5,01
		CB-900	1020	1050	17	7,30

COMMENTS : GOOD RESISTENCE TO TEMPERATURE, PLASTIFYING AGENTS, OIL, UV RAYS, AGEING. EXCELLENT REMOVABILITY.

MELTING POINT : NOT APPLICABLE.

BOILING POINT : NOT APPLICABLE.

% VOLATILE COMPONENTS : TRACES.

MACERATION IN WATER : NOT POSSIBLE.

TEMPERATURE : - ADVISED min 15°C MAX 30°C
- USAGE min -20°C MAX 70°C
- LIMIT min -25°C MAX 90°C

SHEET LIFE : THE LIFETIME OF EACH ADHESIVE SHEET DEPENDS EXCLUSIVELY ON ITS USAGE.

SHELF LIFE : 3 YEARS FROM DATE OF MANUFACTURE IF STORED AT THE RECOMMENDED CONDITIONS.

PACKAGE : PACKED IN SPECIAL "KARTELLA-DISPENSER" ALLOWING THE PROGRESSIVE USAGE OF THE 5 MATS THEREIN CONTAINED AND THE BEST STORAGE FOR THE REMAINING CARPETS TO BE USED.

LAWS AND REGULATIONS : MEDICAL DEVICE CLASS 1° NON STERILE ACCORDING TO EXISTING UE LAWS. UMDNS NUMBER 11740, GMDN 44011.

SALUBER - TECHNICAL FILE

UPDATE: FEBRUARY 2013

Page 3 of 3

3. INSTRUCTIONS

• MODE OF EMPLOY

- INSTALLATION : 1. CLEAN AND DRY UP THE SURFACE WHERE THE MAT IS GOING TO BE PLACED.
2. REMOVE THE TRANSPARENT LOWER PROTECTIVE SHEET.
3. MAKE THE MAT SMOOTHLY ADHERE TO THE FLOOR.
4. REMOVE THE UPPER PROTECTIVE SHEET.
5. PROGRESSIVELY REMOVE EACH OF THE 30 DISPOSABLE ADHESIVE SHEETS WHEN DIRTY.
6. SALUBER does not require the usage of rigid frames which are not recommended. Frames are available on request.
- USAGE : AVOID CONTACT WITH WATER AND TRANSIT WITH WET SOLES.
- HANDLING : 1. CARRY IN THE ORIGINAL PACKAGE.
2. DO NOT FOLD.
3. PROTECT FROM RAIN.
- STORAGE : 1. STORE IN A DRY PLACE AWAY FROM STRONG HEAT SOURCES.
2. SUGGESTED RELATIVE HUMIDITY: 60%
3. PROTECT FROM DIRECT SUNBEAMS.
4. STORE IN ITS ORIGINAL PACKAGE.
5. The innovative production process allows to store the product in its upright position without prejudicing neither its quality nor its aesthetic.
- DISPOSAL : IN RESPECT OF LOCAL LAWS AND REGULATIONS CONCERNING DISPOSAL OF PLASTIC MATERIALS.

• PRECAUTIONS

- FLAMMABILITY : LOW: PRODUCT CAN BE SET ON FIRE ONLY IF IN CONTACT WITH FREE FLAMES. FIRE PRODUCES SMOKE THAT MAY CAUSE LACHRYMATION AND SUFFOCATION.
- SKIN CONTACT : IN CASE OF SUBJECTIVE HYPERSENSITIVITY, RINSE WITH FRESH WATER, COVER WITH DRY, CLEAN GAUZE AND SEE A PHYSICIAN.
- EYE CONTACT : NOT APPLICABLE.
- INGESTION : NOT APPLICABLE.
- INHALAZION : NOT APPLICABLE.

NOTE: Information herein contained refer to the captioned product and may not apply in case it is used in combination with other products. Such information are accurate and reliable to our knowledge, nevertheless each user shall verify the applicability of such information in relation to the particular usage of the product itself.

- 138 -