

Innolin HIGH conc. **(koncentratas)** **paviršių dezinfekantas**

Charakteristikos

Skystas koncentratas paviršių ir medicinos priemonių aukšto lygio dezinfekcijai. Sudėtyje nėra aldehydų. Testuotas pagal naujausias gaires ir vertinimus. Ypač plataus veikimo spektro, atitinka aukščiausius reikalavimus. Labai žemos darbinių tirpalų koncentracijos. Labai švelnus ir dera su daugeliu medžiagų. Nepalieka lipių likučių, nuriešina, neutralizuoja, nuvalius nelieka dėmių. Sudėtyje nėra aldehydų, peroksidų, chloro. Pasižymi puikiomis valymo savybėmis. Registruotas kaip medicinos priemonė ir biocidas.

Produkto tipas

Koncentratas paviršių valymui ir dezinfekcijai. Esant nedidelėms koncentracijoms, veikia bakterijas, grybus ir virusus.

Naudojimo sritys:

Medicinos priemonė (prietaisais)

Darbiniai dezinfekcijos priemonės tirpalai skirti medicinos priemonių paviršiams dezinfekuoti. Tinka ir baigiamajai dezinfekcijai, kai sterilizacija yra neįmanoma.

Biocidinės paskirties produktas

Darbiniai dezinfekcijos priemonės tirpalai skirti paviršių dezinfekcijai.

Naudojimas:

Prieš naudojimą dezinfekcijos priemonės koncentratas skiedžiamas vandeniu. Nemaišykite su kitomis valymo ir/arba dezinfekcijos priemonėmis. Prieš dezinfekuojant didesnę jautrių paviršių (tokių kaip dirbtinė oda) plotą, pirmiausia patikrinkite medžiagų suderinamumą mažame plote. Netinka polikarbonatų ir BMC dezinfekcijai. Norėdami išvengti dryžių, dezinfekuotus paviršius reguliariai nušluostykite drėgna (suderintu vandeniu) vienkartinėmis šluostėmis.

Ekspozicijos laikai:

Bakterijos ir Candida albicans (EN 13727, EN 13624 (nešvarios sąlygos))

1%, ekspozicija 1 min.

0,5%, ekspozicija 15 min.

Bakterijos ir Candida albicans (EN 13697, EN 16615, VAH2015 (nešvarios sąlygos))

0,5%, ekspozicija 15 min.

TBC (M. terrae ir M. avium) EN 14348 (švarios ir nešvarios sąlygos))

0,5%, ekspozicija 30 min.

1%, ekspozicija 15 min.

Virusai su apvalkalėliais (įsk. HBV, HCV ir ŽIV), RKI/DVV (nešvarios sąlygos))

0,5%, ekspozicija 15 min.

Norovirusas (EN14476 (švarios sąlygos))

0,5%, ekspozicija 15 min.

Polyoma virusas SV40, EN 14476 (nešvarios sąlygos))

1%, ekspozicija 15 min.

Virucidinis poveikis EN 14476 (virusai be apvalkalėlių, įsk.

Polio ir Adeno, švarios sąlygos))

3%, ekspozicija 30 min.

Sudėtis:

100g koncentrato sudėtis: didecildimetilamonio chloridas, 14 %; N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin 8.8 %, stiprikliai

Cheminės ir fizikinės savybės:

Tankis: 1,002g/ml

PH reikšmė: 10.7±0.2

Pakuotė:

1 litro ir 5 litrų bakeliai

(kitos talpos – pagal užsakymą)

Saugos gairės:

H302 Kenksminga prarijus. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H400 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. PRARIJUS: plauti burną. Neprovokuoti vėmimo. Turinį / talpyklą išmeskite laikydamiesi vietinių / regioninių / nacionalinių / tarptautinių taisyklių. Sudėtyje yra didecildimetilamonio chloridas, N- (3-aminopropil) -N-dodecilpropan-1,3-diaminas.

Saugojimo sąlygos:

temperatūra - ne žemiau 0°C ir ne aukščiau 40°C



D.
Pavojinga

Gamintojas: PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18

64653 Lorsch

Vokietija

Kontaktams:

Prisman Pharma International AG

Am Stalden 16

4622 Egerkingen

Šveicarija

Tel.: +41(0)62 206 20 60

Fax.: +41(0)62 206 20 69

www.innocid.com

info@prismanpharma.com

Platintojas: L. R. Tamulio firma "Meditalika"

Radvilų Dvaro g. 4. LT-48320 Kaunas, Lietuva.

Tel.: 8 (37) 22 22 23

info@meditalika.lt

INNOLIN HIGH KONCENTRATAS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

Prieš naudojimą paruošti darbinį tirpalą, pasirenkant reikiamą koncentraciją (koncentratas skiedžiamas vandentiekio vandeniu). Jei paviršius liečiasi su maistu, po dezinfekcijos jį nuplauti geriamuoju vandeniu.

Efektyvumas

Baktericidinis ir mielicidinis poveikis:

- pagal EN 13727, EN 13624, nešvariomis sąlygomis: 1 % tirpalo ekspozicijos laikas 1 min., 0,5 % tirpalo ekspozicijos laikas 15 min.;
- neakytus paviršius mechaniškai valant servetėlėmis (EN 16615, nešvariomis sąlygomis; pagal VAH (Vokietijos higienos asociacijos) reikalavimus (2015)): 0,5 % tirpalo ekspozicijos laikas 15 min.;
- pagal EN 13697, nešvariomis sąlygomis: 0,5 % tirpalo ekspozicijos laikas 15 min.

Fungicidinis poveikis (*Aspergillus brasiliensis*) (EN 13624, nešvariomis sąlygomis): 5 % tirpalo ekspozicijos laikas 60 min.

Tuberkulicidinis ir mikobaktericidinis (*M. terrae* ir *M. avium*) (pagal EN 14348, švariomis ir nešvariomis sąlygomis) poveikis: 0,5 % tirpalo ekspozicijos laikas 30 min.; 1 % tirpalo ekspozicijos laikas 15 min.

Virucidinis

- pilnas virucidinis pagal EN 14476: 3 % tirpalo ekspozicijos laikas 30 min. (švariomis sąlygomis; prieš *Murine Noro* virusą – 0,5 % tirpalo ekspozicijos laikas 15 min., *Polio* virusą, *Adeno* virusą – 3 % tirpalo ekspozicijos laikas 30 min.);
- prieš apvalkalinius virusus pagal RKI/DVV (Roberto Kocho instituto ir Vokietijos virusinių susirgimų kontrolės asociacijos) vadovą nešvariomis sąlygomis: 0,5 % tirpalo ekspozicijos laikas 15 min.;
- prieš *Polyoma* virusą SV40 (pagal EN 14476, nešvariomis sąlygomis): 1 % tirpalo ekspozicijos laikas 15 min.

Atsargumo priemonės

Nemaišyti su kitomis valymo ir (arba) dezinfekcijos priemonėmis.

Netinka polikarbonatinių ir BMC paviršių dezinfekcijai.

Abejojant, kad produktas gali gadinti paviršių (dirbtinės odos ar kt.), išbandyti ant nedidelio ploto.

Norint išvengti dryžių, dezinfekuotus paviršius reguliariai nušluostyti sudrėkinta vandeniu vienkartinėmis šluostėmis.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Nr. (10-14 17.5 E)BPR- 528 (A-0204PNO603652-20-279)

Išduotas 2020 m. spalio 5 d., galioja iki 2025 m. spalio 4 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

L. R. Tamulio firma „Meditalka“, Radvilų Dvaro g. 4, LT-48320 Kaunas.

Biocidinio produkto tipas

2 ir 4 produktų tipai. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, ir maisto srities dezinfekantas

Biocidinio produkto pavadinimas

Innolin High koncentratas.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

PRISMAN GmbH, Otto-Hahn-Ring 6 –18, D-64653 Lorsch (Vokietija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

didecildimetilamonio chloridas, CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230-525-2;

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas, CAS Nr. 2372-82-9, EB Nr. 219-145-8.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams sveikatos priežiūros įstaigose, išskyrus medicinos prietaisų paviršius, visuomeninės paskirties įstaigose, pramonės įmonėse, maisto gamybos įmonėse dezinfekuoti. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklavimas

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;

biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A0204PNO603652.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Liudijimą gavau

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5 E)BPR- 528 (A-0204PNO603652-20-279)
2 priedas

ETIKETĖ

INNOLIN HIGH KONCENTRATAS

Skystis

Veikliosios medžiagos: didecildimetilamonio chloridas, CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230-525-2, 14 %; N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas, CAS Nr. 2372-82-9, EB Nr. 219-145-8, 8 %.

Sudėtyje yra < 5 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, 5–15 % katijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų.



Kenksminga prarijus.
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.



Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.



PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją / ...
PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Pavojinga

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, ir maisto srities dezinfekantas (2 ir 4 produktų tipai). Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams sveikatos priežiūros įstaigose, išskyrus medicinos prietaisų paviršius, visuomeninės paskirties įstaigose, pramonės įmonėse, maisto gamybos įmonėse dezinfekuoti. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Gamintojas PRISMAN GmbH, Otto-Hahn-Ring 6 –18, D-64653 Lorsch (Vokietija)..

Platintojas

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5 E)BPR- 528 (A-0204PNO603652-20-279), galioja iki 2025-10-04.

Tūris

Tinka naudoti

Ženklime leistinas papildomas teiginys: „Innolin HIGH koncentratas“, kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvaskalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.“

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos



PRISMAN GmbH • Otto-Hahn-Ring 6-18 • 64653 Lorsch • Germany

To whom it may concern

Message from
Tilman Junger

Tel.
06251-866980-0

Date
22.6.2020

PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
64653 Lorsch
Germany
Tel.: +49 (0) 6251 866 980-0
Fax: +49 (0) 6251 866 980-77

E-Mail: info@prisman.de
www.prisman.com

Auftragsbearbeitung
Fax: +49 (0) 6251 866 980-78
E-Mail:
auftragsbearbeitung@prisman.de

Unsere allgemeinen Geschäfts-
bedingungen finden Sie unter
www.prisman.de

Geschäftsführer
CEO:
Stephan W. Metzger

HRB 93716
Amtsgericht Darmstadt

USt-IdNr./
VAT-No. DE 812526190
Steuer-Nr. 00724100800
Zoll-Nr. 4797930

Bankverbindungen
Bank accounts:

Volksbank
Darmstadt-Süd Hessen eG
IBAN:
DE48 5089 0000 0030 2903 05
SWIFT-BIC:
GENODEF1VBD

Sparkasse Starkenburg
IBAN:
DE08 5095 1469 0003 0324 39
SWIFT-BIC:
HELADEF1HEP

Qualitätsmanagement
Quality Assurance:
EN ISO 9001
EN ISO 13485
Annex V, Directive 93/42/EEC
Annex II, Directive 93/42/EEC

Herstellungserlaubnis
ausgestellt durch RP Darmstadt
DE HE 01 MIA 2015 0008
am 29.01.2015

GMP, Directive 2001/83/EC

Großhandelserlaubnis
ausgestellt durch RP Darmstadt
am 09.02.2015

Declaration

about product names of our EC certificates (page 1 of 2)

We declare and confirm herewith that the product names in the annexes of our 2 EC-certificates are identical with the below mentioned ones:

Annex to the EC certificate No. 50681-17-05 (Class II a)

Identical product (as on the label)

Suction System Disinfection conc. SS 400 conc.

Innotol conc.

Surface Disinfection PREMIUM conc., SD 240 conc.

Innolin PREMIUM conc.

Surface Disinfection RAPID FOAM PLUS,
RFD 440, including Disinfection Wipes

Innolin FOAM AF
+ Innolin WIPES SMALL AF
+ Innolin WIPES MAXI AF
+ Innolin WIPES FLOW AF

Impression Disinfection PLUS, IM 400

INNOCES IMP

Annex to the EC certificate No. 50681-16-05 (Class II b)

Identical product (as on the label)

Instrument Disinfection BASIS conc.,
ID 200 conc. (incl. Zyme)

Innosept BASIS conc.

Instrument Disinfection POW(D)ER HIGH conc.,
IDP 700 conc.

Innosept POWDER conc.

Instrument Disinfection PREMIUM HIGH conc.,
ID 700 conc.

Innosept PREMIUM conc.

Instrument Disinfection VIREX HIGH conc.,
ID 700 conc.

Innosept PLUS conc.

-75-

12/16

Suinteresuotiems asmenims

Deklaracija prie EC sertifikato
dėl gaminių ir jų pavadinimų (1 psl. iš 2)

Mes deklaruojame ir užtikriname, kad produktai nurodyti mūsų 2-jo EC sertifikato priede yra šie:

Priedas prie EC sertifikato Nr. 50681-17-05
(II a klasė)

Produktas (pavadinimas, nurodytas ant etiketės)

Siurbimo sistemos dizenfektantas konc., SS 400 konc. **Innotol konc.**

Paviršių dezinfektantas PREMIUM konc., SD 240 konc. **Innolin PREMIUM konc.**

Paviršių dezinfektantas RAPID FOAM PLUS. RFD 440, įskaitant dezinfekcijos servetėles **Innolin FOAM AF**
+ Innolin WIPES SMALL AF
+ Innolin WIPES MAXI AF
+ Innolin WIPES FLOW AF

Atspaudų dezinfektantas PLUS, IM 400 **INNODS IMP**

+++++

Priedas prie EC sertifikato Nr. 50681-16-05
(II b klasė)

Produktas (pavadinimas, nurodytas ant etiketės)

Instrumentų dezinfektantas BASIS konc., ID 200 konc. (įsk. Zyme). **Innosept BASIS konc.**

Instrumentų dezinfektantas POW(D)ER HIGH konc., IDP 700 konc. **Innosept POWDER konc.**

Instrumentų dezinfektantas PREMIUM HIGH konc., ID 770 konc. **Innosept PREMIUM konc.**

Instrumentų dezinfektantas VIREX HIGH konc., ID 700 konc. **Innosept PLUS konc.**

Vertimas iš anglų kalbos

PRISMAN GmbH • Otto-Hahn-Ring 6-18 • 64653 Lorsch • Germany

To whom it may concern

Message from
Tilman Junger

Tel.
06251-866980-0

Date
22.6.2020

PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
64653 Lorsch
Germany
Tel.: +49 (0) 6251 866 980-0
Fax: +49 (0) 6251 866 980-77

E-Mail: info@prisman.de
www.prisman.com

Auftragsbearbeitung
Fax: +49 (0) 6251 866 980-78
E-Mail:
auftragsbearbeitung@prisman.de

Unsere allgemeinen Geschäfts-
bedingungen finden Sie unter
www.prisman.de

Geschäftsführer
CEO:
Stephan W. Metzger

HRB 93716
Amtsgericht Darmstadt

USt-IdNr./
VAT-No. DE 812526190
Steuer-Nr. 00724100808
Zoll-Nr. 4797930

Bankverbindungen
Bank accounts:

Volksbank
Darmstadt-Süd Hessen eG
IBAN:
DE48 5089 0000 0030 2903 05
SWIFT-BIC:
GENODEF1VBD

Sparkasse Starkenburg
IBAN :
DE08 5095 1469 0003 0324 39
SWIFT-BIC:
HELADEF1HEP

Qualitätsmanagement
Quality Assurance:
EN ISO 9001
EN ISO 13485
Annex V, Directive 93/42/EEC
Annex II, Directive 93/42/EEC

Herstellungserlaubnis
ausgestellt durch RP Darmstadt
DE HE 01 MIA 2015 0008
am 29.01.2015

GMP, Directive 2001/83/EC

Großhandelserlaubnis
ausgestellt durch RP Darmstadt
am 09.02.2015

Declaration
about product names of our EC certificates (page 2 of 2)

Drill Bath PLUS, DB 400

Innodrill

Surface Disinfection VIREX PLUS conc.,
SD 400 conc.

Innolin PLUS conc.

Surface Disinfection VIREX HIGH conc.,
SD 700 conc.

Innolin HIGH conc.

Rapid Surface Disinfection MAX, RSD 500
including Disinfection Wipes


Innolin RAPID

Rapid Surface Disinfection MED, RSD 700
including Disinfection Wipes

Innolin RAPID Plus
+ Innolin WIPES SMALL
+ Innolin WIPES MEDI
+ Innolin WIPES MAXI
+ Innolin Wipes PREMIUM

Lorsch, the 22nd of June 2020

Stephan Metzger
General Manager

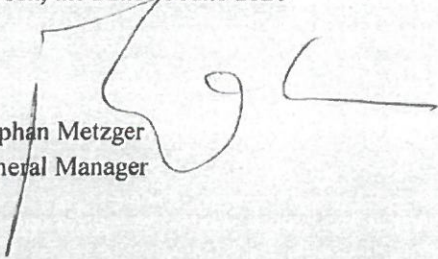

Suinteresuotiems asmenims

Deklaracija prie EC sertifikato
dėl gaminių ir jų pavadinimų (2 psl. iš 2)

Drill Bath PLUS, DB 400

Innodrill

Paviršių dezinfekantas VIREX PLUS conc.,
SD 400 conc.

Innolin PLUS conc.

Paviršių dezinfekantas VIREX HIGH conc.,
SD 700 conc.

Innolin HIGH conc.

Dezinfekantas paviršių greitai dezinfekcijai MAX,
RSD 500, įskaitant dezinfekcijos servetėles

Innolin RAPID

Dezinfekantas paviršių greitai dezinfekcijai MED,
RSD 700, įskaitant dezinfekcijos servetėles

Innolin RAPID Plus
+ **Innolin WIPES SMALL**
+ **Innolin WIPES MEDI**
+ **Innolin WIPES MAXI**
+ **Innolin WIPES PREMIUM**

Lorsch, 2020 birželio 22d.

Stephan Metzger
Vadovas


2019-07-09

Declaration of Identity

We herewith declare that the medical device (class IIb)

Product name PRISMAN	REF PRISMAN	Product name PRISMAN Pharma International AG	REF PRISMAN Pharma International AG
Flächendesinfektion VIREX HIGH Konz. SD700 conc	236	Innolin HIGH conc.	3013

manufactured by PRISMAN GmbH is identical in composition and manufacture with the product Innolin HIGH conc. the company PRISMAN Pharma International AG.

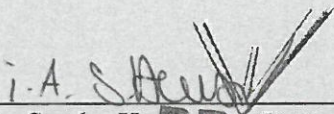
 Dr. Sandra Heise
 Manager Regulatory Affairs
 PRISMAN GmbH
 Otto-Hahn-Ring 6-18
 D-64653 Lorsch

PRISMAN GmbH firminis blankas

2019-07-09

Identiškumo deklaracija

Mes atsakingai deklaruojame, kad II b klasės medicinos priemonė (priedaisas)

Produkto pavadinimas PRISMAN	REF PRISMAN	Produkto pavadinimas PRISMAN Pharma International AG	REF PRISMAN Pharma International AG
Paviršių dezinfekantas VIREX HIGH conc., SD 700 conc.	236	Innolin HIGH Conc.	3013

Pagamintas PRISMAN GmbH, yra tas pats (savo sudėtimi ir gamintoju identiškas) produktui Innolin HIGH conc., teikiamu PRISMAN Pharma International AG.

(parašas) PRISMAN GmbH spaudas

Dr. Sandra Heuser

PRISMAN GmbH

vadovė reguliacijos klausimais

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Spausdinimo data: 11.05.2020

Versijos numeris: 2

Peržiūrėta: 11.05.2020

1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

- 1.1 Produkto identifikatorius
- Prekybos ženklas: Innolin High REF 3013
- 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatymo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
- Naudojimo sektorius
- SU20 Sveikatos apsaugos paslaugos
- SU22 Profesionalūs naudojami: viešojo erdvės (administracija, švietimas, pramonės, paslaugos, amatininkai)
- Produkto kategorija PC8 Biocidiniai produktai
- Techninė funkcija Biocidas
- Medžiagos / mišinio panaudojimas Paviršių dezinfekavimo priemonė
- 1.3 Išsamiai informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
- Gaminiojas / tiekėjas
- PRISMAL GmbH
- Otto Hahn Ring 6-18
- D-64653 Lorsch
- Germany
- Informacijos šaltinis:
- Abschlung Produktsecherheit
- Alexander Metz a.prsman.de
- 1.4 Pagalbos telefono numeris: ++49 (0)6251 866980-0, Mo - Fr 8-18 Uhr

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

- 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
- Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
-  Skin Cor. 1A H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
-  Eye Dam. 1 H318 Smarkiai pažeidžia akis.
-  Aquatic Chronic 1 H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
-  GHS07
- Acute Tox. 4 H302 Kenksminga prarijus.
- 2.2 Ženklinimo elementai
- Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
- Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KZP reglamentą.
- Pavojaus piktogramos
-  GHS05
-  GHS07
-  GHS09
- Signalinis žodis Pavojinga
- Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
- 1-aminopropan-2-olis
- N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

(Tiesus 2 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Spausdinimo data: 11.05.2020

Versijos numeris: 2

Peržiūrėta: 11.05.2020

Prekybos ženklas: Innolin High REF 3013

- didecildimetilamonio chloridas C22H48N.Cl
- Alcohols, C12-18, ethoxylated
- Pavojingumo frazės
- H302 Kenksminga prarijus.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- Atsargumo frazės
- P273
- P280
- P280 - P303 - P331 PRARIJUS: išskatinti burną. NEŠKATINTI vėmimo.
- P303 - P361 - P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvalyti visus užterštus drabužius. Odą nuvalyti vandeniui (arba čiaukšlei).
- P304 - P341
- P305 - P351 - P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310
- Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLES IR INFORMACIJOS BUREJ / KVEPUS.
- P501
- Turinį talpy išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
- 2.3 Kiti pavojai
- PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT: Nevertinama.
- vPvB: Nevertinama.

3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

- 3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai
- Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemian minių medžiagų su apytiksliais kiekiais.
- Pavojingos sudedamosios medžiagos:

CAS: 78-96-6	1-aminopropan-2-olis	10-25%
EINECS: 201-162-7	⚠ Skin Cor. 1B, H314; ⚠ Acute Tox. 4, H312	10-25%
CAS: 7173-51-5	didecildimetilamonio chloridas C22H48N.Cl	10-25%
EINECS: 230-525-2	⚠ Skin Cor. 1B, H314; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Acute Tox. 4, H302	2,5-10%
CAS: 2372-82-9	N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine	2,5-10%
EINECS: 219-145-8	⚠ Acute Tox. 3, H301; ⚠ STOT RE 2, H373; ⚠ Skin Cor. 1A, H314; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Aquatic Chronic 1, H410	2,5-10%
CAS: 68213-23-0	Alcohols, C12-18, ethoxylated	
	⚠ Eye Dam. 1, H318	

- Papildomos nuorodos: Nurodant rizikos frazių turinio iškotti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

- 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
- Bendra informacija: Produktui suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.
- Įkvėpus: Nėtkius sąmonės, paguldyti ir vėžti paguldžius stabiliai ant šono.
- Po kontakto su oda:
- Nesiliejant odos perėjimui, kreiptis į gydytoją.
- Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
- Po kontakto su akimis:
- Akis, alkūnės akių vokius, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju.
- Prarijus:
- Išgerti didelį kiekį vandens, gėriant tūrą orą. Nedelsiant kreiptis į gydytojus.

(Tiesus 3 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Spausdinimo data: 11.05.2020 Versijos numeris 2 Peržiūrėta: 11.05.2020

Prekybos ženklas: Innolin High REF 3013

(Puslapis 2 tęsiasi)

- Nesistengti išskirti vėmimą, nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.
- 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (žmonės ir uždegtas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
 - 4.3 Nuorodas apie bet kokios netolėtinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgausrinės priemonės

- 5.1 Gėsimimo priemonės
- 5.2 Tinkamos gėsimimo medžiagos: Gastro gėsimimo priemonės taikyti adekvaciai aplinkai.
- 5.3 Specialios medžiagos ar mišinio keliama pavojai Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 5.3 Patartini gaivinamieji
- Ypatingos saugos priemonės: Specialios priemonės nėra būtinos.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Devyti apsauginę ekipuotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.
- 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas. Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Surinkti su skystais išsiskyrus medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rūgštis, universalus rūgštis, pjuvenos). Panaudoti neutralizavimo priemonę. Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus. Garantuoti pokankamą vėdinimą.
- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius Informacija apie saugą vartojimą pateikiama 7 skyriuje. Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje. Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

- 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Indus laikyti sandariai uždarytus. Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą nutraukiant. Venyti aerozolių susidarymą.
- 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogių: Nebūtinis jokios specialiosios priemonės.
- 7.3 Konkrečius galutinio naudojimo būdus (at) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

- Papildomos nuorodos techninės įrangos prietaikymui: Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
- 8.1 Kontrolės parametrai Sudedamosios dalys su darbu vietoje stebimos vertėmis: Produktas nesama jokių žmonių medžiagų, kurių duomenys tų vietų įtakos darbu vietai ir būty stebėtini.
- Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo įaminti sudarymo metu galtojų aprašai.

(Tęsiasi 1 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Spausdinimo data: 11.05.2020 Versijos numeris 2 Peržiūrėta: 11.05.2020

Prekybos ženklas: Innolin High REF 3013

(Puslapis 3 tęsiasi)

- 8.2 Poveikio kontrolė
- Asmens saugos priemonės:
- Bendrosios saugos ir higienos priemonės: Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gerimų ir pasarių. Nedelsiant miestrenkti išėjus, įsigėrusius drabužius. Prieš pertraukus ir baigus darbą nusiplaun rankas. Nekvepioti dūpių garų aerozolių. Venyti kontakto su akimis ir oda.
- Kvepavimo takų apsauga: Nereikalaujama.
- Rankų apsauga:



Apsaugines prištines

- Medžiaga, iš kurios gaminama prištine, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui medžiagai mišinui. Prištinių medžiagų rinktis atsižvelgiant į prastiskverhimo, trynimosi ir suirimo lauką.
- Prištinių medžiaga
- Tinkamą apsauginę prištinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra dangčio medžiagų derinys, prištines medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuojamas iš anksto ir todėl tikrinamas prieš kiekvieną naudojimą.
- Prištinių medžiagos persigėrimo laikotarpis
- Tikslaus apsauginę prištinių susidėvėjimo laiko laukis gamintojo ir laukis nurodytos trukmės.
- Apsaugai nuo apipurskimo traka prištines iš šių medžiagų:
- Butilo kancūkas
- Fluoro kancūkas (Vitonas)
- Akių apsauga:
- Apsauginiai akiniai



Tampriai prisipandžiantys akiniai

9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes	
Bendra informacija	
Išvaizda:	Skystas(s)
Forma:	Grynas(s)
Spalva:	Kaip aminorai
Kvapnas:	Nemistatytas.
Kvapo atsidavimo slenkstis:	
pH vertė esant 20 °C (68 °F):	>12
Sudėties pakaitimas	
Lidimosi/ūžalimo temperatūra:	Nemistatytas
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:	100 °C (212 °F)
Plūpsnio temperatūra:	>100 °C (~212 °F)
Degumas (kietų medžiagų, dūjų):	Nemistatytas.
Skilimo temperatūra:	Nemistatytas.
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	Produktas savaime neužsidega.

(Tęsiasi 5 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Susidarymo data: 11.05.2020

Peržiūrėta: 11.05.2020

Versijos numeris 2

Prekybos ženklas: Innolin High REF 3013

(Puslapis 4 tęsiasi)	
Sprogstamumas (sprogiosios) sąlygos:	Produktas nekelia sprogdumo pavojų.
Sprogimo riba :	Nemustatyta.
Zemutinė:	Nemustatyta.
Viršutinė	23 hPa (17,3 mm Hg)
Garų slėgis esant 20 °C (68 °F):	1,01 g cm ³ (8,42845 lbs gal)
Tankis esant 20 °C (68 °F):	Nemustatyta.
Santūkinis tankis:	Nemustatyta.
Garų tankis:	Nemustatyta.
Garavimo greitis	Nemustatyta.
Tirpumas / Maišymas su vandeniu:	Pilnai maišytina(s).
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:	Nemustatyta.
Klampa:	Nemustatyta.
Dinaminis:	Nemustatyta.
Kinematinis:	Nemustatyta.
Tirpiklio sudėtis:	0 %
VOC (EC)	Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
9.2 Kita informacija	

10. SKIRSNIS. Stabilitumas ir reaktingumas

- 10.1 Reaktingumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.2 Cheminis stabilumas
- Terminis ir trintis / vengti šilumos sąlygos: Nesuvaržyti pagal instrukciją.
- 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė: Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
- 10.4 Pavojingos sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

- 11.1 Informacija apie toksiškumą
- Ūmus toksiškumas
- Kenksminga prarijus.

Klasifikacija svarbios LD₅₀/LC50 vertės:

ATE (Ūmus toksiškumo įvertis)

Oralinis(e) LD50 469 mg/kg

Dermalinis(e) LD50 11.714 mg/kg (raibut)

78-96-6 1-aminopropan-2-olis

Dermalinis(e) LD50 1.100 mg/kg (ATE)

7173-51-5 didecildimetilamono chloridas C22H48N.Cl

Oralinis(e) LD50 500 mg/kg (ATE)

2372-82-9 N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

Oralinis(e) LD50 100 mg/kg (ATE)

Pirminis perėjimo efektas:

Ūdos šalinimas ir (arba) dirginimas

Smarkiai nuodinga odai ir pažeidžia akis.

(Tęsiasi 6 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Susidarymo data: 11.05.2020

Peržiūrėta: 11.05.2020

Versijos numeris 2

Prekybos ženklas: Innolin High REF 3013

(Puslapis 5 tęsiasi)	
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	
Smarkiai pažeidžia akis.	
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
CMR padariniai (kanцерогеніскumą, mutagenіскumą ir toksiškumą reprodukcijai)	
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kancerogeninis poveikis	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Toksiškumas reprodukcijai	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT (vienkarštinis poveikis)	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT (kartotinis poveikis)	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Aspiracijos pavojus	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

- 12.1 Tokiškumas
- Vandensinis toksiškumas: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 12.2 Paviršius ir skaidomumas: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 12.3 Bioakumuliacijos potencialas: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 12.4 Judumas dirvožemyje: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- Ekotoksištinis poveikis:
- Pastaba: Labai madinga(s) žuvis.
- Kitos ekologinės nuorodos:
- Bendrosios nuorodos:
- Negali nesikviesti navedale arba nenukonsultuoti patiekti į motėkas arba į ištekėjimo kanalą.
- Vandensys: taip pat madinga(s) žuvis ir planktonai.
- labai madingas vandens organizmas
- Vandens užteršimo klase 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandens
- Neleisti patekti į granitinius vandens, vandens telkinius ir į kanalizaciją.
- Net ir nedidelis kiekis patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.
- 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT: Nevertinama.
- vPvB: Nevertinama.
- 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

- 13.1 Atliekų tvarkymo metodai
- Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitineis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

Europos atliekų katalogas

07 00 00 ORGANINŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIKOS

07 06 00 riebalų, tankių, miltų, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMITN atliekos

07 06 01 * vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

Nevalytos pakuočės:

Rekomendacija: Atsargiai pagal žinybinį reglamentą.

Rekomenduojamas valdymas: Vanduo, jeigu įmanoma pridėjant valymo priemones.

14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris

ADR, IMDG, IATA UN3267

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR 3267 EDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, ORGANINIS, K.N. (N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, didecildimetilamono chloridas C22H48N.Cl).

(Tęsiasi 7 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Spausdinimo data: 11.05.2020

Versijos numeris 2

Peržiūra: 11.05.2020

Prekybos ženklas: Innolin High REF 3013

(Puslapis 6 tęsiasi)	
IMDG	PAVOJINGA APLINKAI CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, didecildimetilamonių chloridai), MARINE POLLUTANT
IATA	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, didecildimetilamonių chloridai)
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	
ADR, IMDG	
klasė	8 Esdinančios medžiagos
Pavojingumo etiketė	
IATA	
klasė	8 Esdinančios medžiagos
ADR, IMDG, IATA	II
14.5 Pavojos aplinkai:	Produkto sudėtyje yra medžiagų, pavojingų aplinkai: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine
Marine pollutant:	Ne
Ypatinės ženklinimas (ADR):	Simbolis (žavis ir medis) Simbolis (žavis ir medis)
14.6 Specialios atsargos priemonės naudojant:	Atsargai: Esdinančios medžiagos
Pavojos identifikavimo numeris (Kontolio kodas):	80
EMS numeris:	F-A-S-B
Segregation groups	Alkalis
Storage Category	B
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą	Nevartautina.
Transportavimas/kitos nuorodos:	
ADR	
Išskirtiniai kiekiai (EQ):	E1
Riboti kiekiai (LQ):	II
Nekontroliuojami kiekiai (EQ)	Kodas: E2
Transporto kategorija	Didžiausias neto kiekis vidiniame taroje: 30 ml
Tunelio apribojimo kodas:	2
IMDG	E
Limited quantities (LQ)	II.
(Tęsiasi 8 psl.)	

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Spausdinimo data: 11.05.2020

Versijos numeris 2

Peržiūra: 11.05.2020

Prekybos ženklas: Innolin High REF 3013

(Puslapis 7 tęsiasi)	
Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN "Model Regulation":	UN 3267 EDUS SKYSTIS, ŠARMINIS, ORGANINIS, K. N. (N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE, DIDECDIMETILAMONIO CHLORIDAS C22H48N2CL), 8, II, PAVOJINGA APLINKAI
15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą	
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai	
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 GHS etiketės turinys	
Direktyva 2012/18/ES	
Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS (sudegti neįeina nė viena iš sudėtinių dalių)	
REGLEMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3	
Reglamentas (ES) Nr. 649/2012	
7173-51-5 didecildimetilamono chloridas C22H48N2CL	
15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.	
Annex I Part I	

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal standartinę mūsų žinių bazę, tačiau nepateikia produkto sąrybių garantijos ir nėra pagrindas suartiniams teisiniams santykiams.

Svarbios frazės

- H301 Toksiška prarijus.
- H302 Kiekviena prarijus.
- H312 Kiekviena susilietus su oda.
- H314 Gali pakenkti medegiai odą ir pažeidžia akis.
- H318 Smarkiai pažeidžia akis.
- H373 Gali pakenkti organizmams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotai.
- H400 Labai toksiška vandens organizmams.
- H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Duomenų suvestinė sudarantis skyrius: Abtelling Produktischerheit

Asmuo kontaktinis: Hr. Dr. Metz

Santrumpos ir Akronimai:

- RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- IAT-ADR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
- ICAO: International Civil Aviation Organisation
- ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- MDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labeling of Chemicals
- ELINCS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- CLP: European List of Notified Chemical Substances
- TOC: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- EC: European Chemical Substances (ECHA)
- LD50: Lethal dose concentration, 50 percent
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Acute Tox. 3: Unus toksikumas - pralimas 3 kategorija
- Acute Tox. 4: Unus toksikumas - suklimas su oda - 4 kategorija

(Tęsiasi 9 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Sprendimo data: 11.05.2020

Versijos numeris 2

Peržiūrėta: 11.05.2020

Pridedamas ženkla: Inulin High REF 3013

Skin Corr. 1A: Odos exudatas ir dirginimas – 1A kategorija
Skin Corr. 1B: Odos exudatas ir dirginimas – 1B kategorija
Eye Dam. 1: Smulkios akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija
STOT RE 2: Specifinis toksikumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) – 2 kategorija
Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens aplinkai – ūmus pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija
Aquatic Chronic 1: Pavojinga vandens aplinkai – ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija
Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai – ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 2 kategorija
* Lyginant su buvusia versija pakisti duomenys

(Puslapis 8 tęsiasi)

Declaration
about the application and application areas
of Innolin High conc. (SD700)

Our product Innolin High conc. (SD700) is a highly effective, quaternary ammonium based surface disinfection concentrate for the disinfection of all water resistant surfaces in medical, institutional as well as public areas.

Visibly dirty surfaces must be cleaned before the proper disinfection.


The disinfection is to be carried out by the wiping method. Used wipes must not be immersed again into the ready-to-use disinfection solution.

In order to remove residues of the active substances the surfaces must be wiped after the disinfection and the corresponding contact time again with clean wipes and water, and only then it can also be used for example for incubators.

The spectrum of efficacy of the product is bactericidal, yeasticidal, tuberculocidal, virucidal (enveloped and non-enveloped viruses) and fungicidal.

Lorsch, the 6th of September 2021

Stephan Metzger / CEO

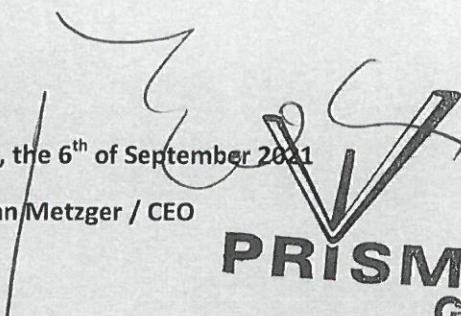


PRISMAN
GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
D-64653 Lorsch

INNOLIN PREMIUM CONC.

SURFACE DISINFECTION FLÄCHENDESINFEKTION

- Limited virucidal
- Aldehyde-free
- QAV-free
- without sticky residues
- DVG-certificate
- Very good cleaning effect and material tolerance
- Suitable for food processing industry
- Begrenzt Viruzid
- Aldehydfrei
- QAV-frei
- ohne klebrige Rückstände
- DVG-Gutachten
- Sehr gute Reinigungswirkung und Materialverträglichkeit
- Geeignet für Lebensmittel verarbeitende Gewerbe

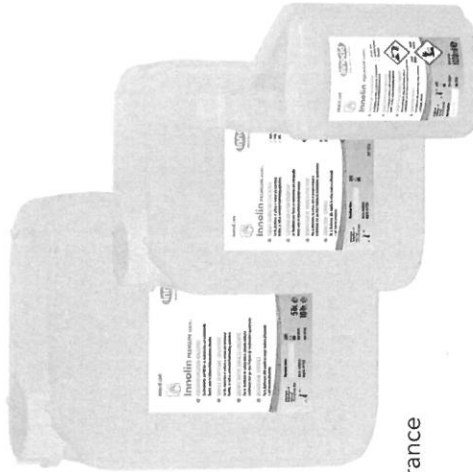

Available as
Erhältlich als

PACKAGING Inhalt	REF	PU VE
1.000 ml	3015I	9
5.000 ml	3015L	1
10.000 ml	3015N	1

Composition

100 g of the solution contain as active substances:
6.75 g N-(aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamin

Zusammensetzung

In 100 g sind als Wirkstoffe enthalten:
6.75 g N-(aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamin

EFFECTIVENESS AND TESTING METHODS Wirksamkeit und Prüfmethode

Bacteria and candida albicans	EN 16615 VAH	clean conditions	1.0% 15 min.
Bacteria	EN 1276 EN 13697 EN 13727	dirty conditions dirty conditions dirty conditions	1.0% 5 min. 1.5% 15 min. 1.0% 5 min.
Bacteria	DVG (8th list) at 20 °C	clean conditions clean conditions dirty conditions	0.75% 5 min. 0.25% 30 min. 1.0% 5 min. 0.5% 30 min.
Candida albicans	EN 1650 EN 13697 EN 13624	dirty conditions dirty conditions dirty conditions	0.5% 15 min. 1.0% 15 min. 1.0% 5 min.
Candida albicans	DVG (8th list) at 20 °C	clean conditions dirty conditions	0.75% 30 min. 1.0% 30 min.
Mycobacteria (M. terrae and M. avium)	EN 14348	clean conditions dirty conditions	1.5% 60 min. 2.0% 60 min.
Enveloped viruses (e.g. HBV, HCV and HIV)	EN 14476	dirty conditions	2.0% 15 min. 1.5% 30 min.

AREAS OF APPLICATION

Disinfectant concentrate for the cleaning and disinfection of surfaces in the food processing industries as well as in the medical and institutional fields.

ANWENDUNGSBEREICHE

Desinfektionsmittelkonzentrat zur Reinigung und Desinfektion von Flächen im lebensmittelverarbeitenden Gewerbe, sowie in medizinischen und institutionellen Bereichen.

Shelf life: 3,5 years
Haltbarkeit: 3,5 Jahre