

BACTIGRAS[®]

Medicated tulle gras - sterile


Indications

Bactigras is a wound contact layer for wounds such as:

- Minor burns and scalds
- Lacerations, abrasions and other skin loss wounds
- Donor and recipient graft sites
- Where the wound is no more than 10% of the body area, where there is a risk of infection, or on already infected wounds in conjunction with systemic antibiotics.

Contra-indications

It should not be used in known cases of sensitivity or allergy to chlorhexidine

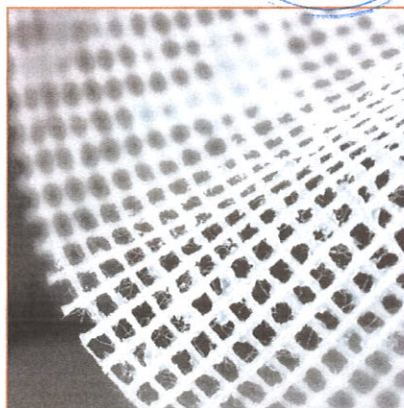

S&N Code	Description	Pack Content	NHS Code	PIP Code
7456	5cm x 5cm	50	EKB011	013-7943
7457	10cm x 10cm	10	EKB503	017-9432
7461	15cm x 20cm	10	EKB015	000-9779
66007505	15cm x 1m roll	12	EKB002	226-8258

19. Tinklelinis fraps-
tis su chlorheksidino
diacetatu

BACTIGRAS – PARAFINUOTAS MARLĖS TVARSTIS SU 0,5% CHLORHEKSIDINO ACETATU



INFORMACIJA UŽSAKYMUI:

Kodas	Dydis	Vnt./dėž.
7456	5 cm x 5 cm	50
7457	10 cm x 10 cm	10
7461	15 cm x 20 cm	10
66007505	15 cm x 1 m rulone	12

Oficialus Smith&Nephew atstovas Lietuvoje:

UAB Osteca

Tel.: 8-46 400 002, 8-610 40282

www.osteca.lt

Aprašymas

BACTIGRAS tinklinis tvarstis, impregnuotas baltu minkštu parafinu, kurio sudėtyje yra 0,5% chlorheksidino acetato.

Tiekiamas kaip atskirai supakuotos servetėlės, ar 1m ritiniais.

BACTIGRAS tvarstis veikia kaip barjeras tarp žaizdos ir antrinio tvarščio, leidžiant sekretui laisvai nutekėti į absorbuojantį antrinį tvarstį. Antiseptikas chlorheksidino acetatas lėtai įsisavinant suteikia ilgalaikį poveikį prieš gram-teigiamas ir gram-neigiamas bakterijas.

Skirtas vienkartiniam naudojimui. Sterilus. Tvarstis sterilus, kol nepažeista individuali pakuotė.

Indikacijos

BACTIGRAS tvarstis yra skirtas vietiniam plataus spektro žaizdų gydymui, kai gresia infekcija, ar jau užkrėstų žaizdų gydymui naudojant kartu su sisteminiais antibiotikais.

Žaizdų spektras, kurių gydymui gali būti naudojamas BACTIGRAS, apima:

- Gilius ir paviršinius nudegimus;
- Pilno ar dalies odos storio sluoksnio žaizdas, plėštines žaizdas ir įbrėžimus;
- Po odos persodinimo, odos transplantacijos;
- Kojų opas, pragulas.

Kontraindikacijos ir atsargumo priemonės

Nenaudoti jeigu esate alergiškas chlorheksidino acetatui arba bet kuriai sudedamajai medžiagai. Pasireiškus odos sudirginimui ar alerginei reakcijai, tvarstį nebenaudokite ir kreipkitės į gydytoją.

BACTIGRAS tvarstis negalima naudoti ant didesnio nei 10% kūno paviršiaus.

Tvarstį BACTIGRAS nerekomenduojama naudoti kartu su muilu, ar kitomis amoniako turinčiomis medžiagomis (pvz, odos valymo priemonės), kalio jodidu, vandenilio peroksidu. Venkite kontakto su akimis.

BACTIGRAS

keitimas

Keičiant antrinį tvarstį BACTIGRAS gali būti paliktas savo vietoje. Tvarščio keitimo dažnis priklauso nuo žaizdos klinikinių charakteristikų ir gali svyruoti nuo vieno karto per dieną iki dviejų kartų per savaitę.

ALLEVYN[®] Ag Gentle/Border

Polyurethane antimicrobial foam dressing – sterile



Indications

Wound management by secondary intention on chronic and acute, full thickness or partial thickness or shallow, granulating, exuding wounds such as pressure ulcers, leg ulcers, infected wounds, diabetic foot ulcers, surgical wounds. ALLEVYN Gentle and Gentle Border are suitable for use on fragile skin.

ALLEVYN Gentle and ALLEVYN Gentle Border are suitable for wounds with moderate to high levels of exudate.

ALLEVYN Gentle should be secured with a retention sheet, tape or bandage.

Contra-indications

Do not use on patients known to be hypersensitive to silver sulfadiazine or sulfonamides.

As sulfonamides are known to cause kernicterus, ALLEVYN Ag Gentle and ALLEVYN Ag Gentle Border should not be used on females who are at, or near term pregnancy or lactating, on premature infants or on newborn infants during the first months of life.



S&N Code	Description	Pack Content	NHS Code	PIP Code
Ag Gentle				
66800464	5cm x 5cm	10	ELA393	346-7511
66800465	10cm x 10cm	10	ELA394	346-7529
66800466	10cm x 20cm	10	ELA395	346-7537
66800467	15cm x 15cm	10	ELA396	346-7545
66800468	20cm x 20cm	10	ELA397	346-7552
Ag Gentle Border				
66800460	7.5cm x 7.5cm	10	ELA398	346-7677
66800461	10cm x 10cm	10	ELA399	346-7685
66800462	12.5cm x 12.5cm	10	ELA400	346-7693
66800463	17.5cm x 17.5cm	10	ELA401	346-7701

22. Tvarstis antimik -
robines

ALLEVYN™ Ag Gentle/Border

Poliuretano putų antimikrobinis tvarstis, sterilus

Indikacijos


Lėtinių ir ūminių, viso ir dalinio storio, negilių, granuliavimo stadijos žaizdų, šlapiojančių žaizdų priežiūrai antriniu būdu tokių kaip pragulos, kojų opos, infekuotos žaizdos, diabetinės pėdos opos, chirurginės žaizdos. ALLEVYN Gentle ir Gentle border tinkamas naudoti jautriai, gležnai odai. ALLEVYN Gentle ir ALLEVYN Gentle Border tinkamas vidutiniškai ir labai šlapiojančioms žaizdoms.

ALLEVYN Gentle turėtų būti papildomai tvirtinamas pleistru, lipnia juosta arba palaikomoju tvarsčiu.

Kontraindikacijos

Nenaudoti pacientams, kuriems yra padidėjęs jautrumas sidabro sulfadiazinams arba sulfonamidams.

Kadangi sulfonamidai yra žinomi kaip sukeliantys kernikterį, ALLEVYN Ag Gentle ir ALLEVYN Ag Gentle Border neturėtų būti naudojamas nėščioms moterims ar ketinančioms artimiausiu metu pastoti, žindymo laikotarpiu, kūdikiams arba naujagimiams per pirmuosius gyvenimo mėnesius.

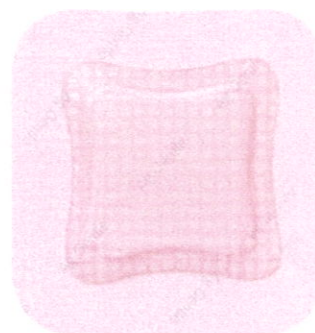

S&N Kodas Code PIP Code	Aprašymas	Pakuotė	NHS
Ag Gentle			
66800464	5cm x 5cm	10	ELA393
346-7511			
66800465	10cm x 10cm	10	ELA394
346-7529			
66800466	10cm x 20cm	10	ELA395
346-7537			
66800467	15cm x 15cm	10	ELA396
346-7545			
66800468	20cm x 20cm	10	ELA397
346-7552			
Ag Gentle Border			
66800460	7.5cm x 7.5cm	10	ELA398
346-7677			
66800461	10cm x 10cm	10	ELA399
346-7685			
66800438	12.5cm x 12.5cm	10	ELA400
346-7693			
66800463	17.5cm x 17.5cm	10	ELA401 346-7701

22. Tvarstis antimikrobinis