

Brackets Gemini de Unitek™

Sistema de Aparatología Versátil+ MBT™

APC™ II

Excelencia y Eficiencia

Por su consistente calidad y mejores resultados, escoja los innovadores Brackets Gemini de 3M Unitek.

Comprobado a nivel mundial, el Bracket Gemini presenta una base de malla, con una red micro-grabada calibre 80, para un óptimo ajuste al diente.

El sistema de brackets Gemini ahora está disponible en la prescripción MBT. En combinación con el sistema MBT, los brackets Gemini han sido diseñados para optimizar la eficiencia del tratamiento ortodóntico. El sistema MBT se basa en más de 20 años de experiencia clínica combinada de los doctores Richard McLaughlin, John Bennet y Hugo Trevisi. Esta experiencia clínica es la esencia del sistema MBT. Usando una prescripción refinada de torques y angulaciones, el sistema MBT, de mecánica de fuerzas ligeras, ayuda a obtener un resultado ortodóntico consistente y predecible.

Fabricados en acero inoxidable 17-4 de alta fortaleza, su forma romboidal, junto con la línea de referencia vertical, permite un posicionamiento más preciso del bracket sobre el diente. La función de torque en base del bracket Gemini de 3M Unitek implica un alineamiento de las ranuras con una interferencia oclusal reducida. Su diseño también hace que la ligación múltiple sea más fácil.

Los brackets para caninos y premolares se encuentran disponibles con ganchos integrales que son cómodos para el paciente. Las marcas de color facilitan la identificación y su relación “in-out” lo hacen compatible con nuestros Tubos Bucles Victory Series™, lo que significa que el sistema funciona eficientemente para usted. El sistema de brackets Gemini se encuentra disponible con ranuras de .018 y .022.



Micro-Grabado

Base de Micro-Grabado del Bracket Gemini

APC™ II

Sistema de Aparatología con Adhesivo Incorporado



Ahorre pasos de adhesión y mejore la eficiencia. Brackets Gemini ahora disponibles con el adhesivo incorporado APC™ II. Ver lista al dorso de esta hoja para hacer sus órdenes.

3M Unitek

Productos que hacen su vida más fácil.

Brackets Gemini de Unitek™

Sistema de Aparatología Versátil+ MBT™

								APC™ II
Maxilar	Torq.	Ang.	In /Out Pulg. mm	I/D	.018"	.022"	.022"	
Central	17°	4°	0.03 0.82	I D	119-613 119-614	119-713 119-714	3119-713 3119-714	
Lateral	10°	8°	0.04 1.06	I D	119-615 119-616	119-715 119-716	3119-715 3119-716	
Canino**	-7°	8°	0.03 0.80	I D	119-671 119-672	119-771 119-772	3119-771 3119-772	
Canino c/gancho**	-7°	8°	0.03 0.80	I D	119-673 119-674	119-773 119-774	3119-773 3119-774	
Canino*	0°	8°	0.03 0.80	I D	119-675 119-676	119-775 119-776	3119-775 3119-776	
Canino c/gancho*	0°	8°	0.03 0.80	I D	119-677 119-678	119-777 119-778	3119-777 3119-778	
1ra/2da Premolar	-7°	0°	0.03 0.83	I/D	119-635	119-735	3119-735	
1ra/2da Premolar c/gancho	-7°	0°	0.03 0.83	I D	119-665 119-666	119-765 119-766	3119-765 3119-766	
2da Premolar	-7°	0°	0.04 1.06	I/D	119-679	119-779	3119-779	
1ra/2da Premolar c/gancho	-7°	0°	0.04 1.06	I D	119-681 119-680	119-781 119-780	3119-781 3119-780	
Mandibular								
Anterior	-6°	0°	0.05 1.26	I/D	119-682	119-782	3119-782	
Canino**	-6°	3°	0.03 0.83	I D	119-683 119-684	119-783 119-784	3119-783 3119-784	
Canino c/gancho**	-6°	3°	0.03 0.83	I D	119-685 119-686	119-785 119-786	3119-785 3119-786	
Canino*	0°	3°	0.03 0.83	I D	119-687 119-688	119-787 119-788	3119-787 3119-788	
Canino c/gancho*	0°	3°	0.03 0.83	I D	119-689 119-690	119-789 119-790	3119-789 3119-790	
1ra Premolar	-12°	2°	0.03 0.83	I D	119-691 119-692	119-791 119-792	3119-791 3119-792	
1ra Premolar c/gancho	-12°	2°	0.03 0.83	I D	119-693 119-694	119-793 119-794	3119-793 3119-794	
2da Premolar	-17°	2°	0.03 0.83	I D	119-695 119-696	119-795 119-796	3119-795 3119-796	
2da Premolar c/gancho	-17°	2°	0.03 0.83	I D	119-697 119-698	119-797 119-798	3119-797 3119-798	

Sistema de Aparatología
con Adhesivo Incorporado
APC II

*** Denota cuáles brackets para
caninos se incluyen en el Kit.



3M Unitek
Orthodontic Products
2724 South Peck Road
Monrovia, CA 91016 USA
626-574-4000
www.3MUnitek.com

				APC™ II
Kits	.018"	.022"	.022"	
Kit 5x5, con gancho en 3* Caninos Trevisi	119-143	119-142	3119-142	
Kit 5x5, con ganchos en 3, 4 y 5* Caninos Trevisi	119-145	119-144	3119-144	
Kit 5x5, con gancho en 3**	119-153	119-152	3119-152	
Kit 5x5, con ganchos en 3, 4 y 5*	119-155	119-154	3119-154	

Sistema de Aparatología
con Adhesivo Incorporado
APC II

Bracket Gemini de Unitek™

Prescripción Roth*

Excelencia al alcance

Los Brackets Gemini de 3M Unitek ofrecen un sistema diseñado para optimizar la eficiencia del tratamiento ortodóntico. Los brackets Gemini presentan una base con malla, con una red micro-grabada calibre 80, diseñada para un contacto óptimo y una fuerza de adhesión fuerte y consistente. Fabricado en acero inoxidable de gran fortaleza, su forma romboidal, junto con la línea de referencia vertical, permite un posicionamiento más preciso del bracket, independientemente de la posición del diente.

El bracket Gemini le brinda el rendimiento del torque en base, con alineamiento de las ranuras y una interferencia oclusal reducida.

Micro-Grabado

Base de Micro-Grabado del Bracket Gemini



APC™ II



Sistema de Aparatología con Adhesivo Incorporado

Ahorre pasos de adhesión y mejore la eficiencia. Brackets Gemini ahora disponibles con el adhesivo incorporado APC II. Ver lista al dorso de esta hoja para hacer sus órdenes.



Los brackets para caninos y premolares se encuentran disponibles con ganchos integrales que aumentan la comodidad para el paciente. Las marcas de color facilitan la identificación y su relación “in-out” lo hacen compatible con nuestros Tubos Bucales Victory Series™, lo que significa que el sistema funciona eficientemente para usted.

El sistema de brackets Gemini, prescripción Roth, se encuentra disponible con ranuras de .018 y .022.

* Versión de 3M Unitek para esta receta. No implica endoso del Doctor.

3M Unitek

Productos que hacen su vida más fácil.

Brackets Gemini Unitek™

Prescripción Roth*

								APC™ II
Maxilar	Torq.	Ang.	In/Out		I/D	.018"	.022"	.022"
			pulg.	.mm				
Central	14°	5°	0.031	0.79	I	119-621	119-721	3119-721
					D	119-622	119-722	3119-722
Lateral	7°	8°	0.040	1.02	I	119-623	119-723	3119-723
					D	119-624	119-724	3119-724
Canino**	0°	10°	0.029	0.74	I	119-625	119-725	3119-725
					D	119-626	119-726	3119-726
Canino c/gancho**	0°	10°	0.029	0.74	I	119-661	119-761	3119-761
					D	119-662	119-762	3119-762
1ra/2da Premolar	-7°	0°	0.032	0.81	I/D	119-635	119-735	3119-735
1ra/2da Premolar c/gancho	-7°	0°	0.032	0.81	I	119-665	119-765	3119-765
					D	119-666	119-766	3119-766
								APC™ II
Mandibular	Torq.	Ang.	In/Out		I/D	.018"	.022"	.022"
			pulg.	.mm				
Anterior	-1°	0°	0.049	1.24	I/D	119-640	119-740	3119-740
Canino**	-11°	6°	0.032	0.81	I	119-611	119-711	3119-711
					D	119-612	119-712	3119-712
Canino c/gancho**	-11°	6°	0.032	0.81	I	119-659	119-759	3119-759
					D	119-660	119-760	3119-760
Canino*	0°	6°	0.030	0.76	I	119-645	119-745	3119-745
					D	119-646	119-746	3119-746
Canino c/gancho*	0°	6°	0.030	0.76	I	119-663	119-763	3119-763
					D	119-664	119-764	3119-764
1ra Premolar	-17°	0°	0.032	0.81	I/D	119-655	119-755	3119-755
1ra Premolar c/gancho	-17°	0°	0.032	0.81	I	119-667	119-767	3119-767
					D	119-668	119-768	3119-768
2da Premolar	-22°	0°	0.032	0.81	I/D	119-656	119-756	3119-756
2da Premolar c/gancho	-22°	0°	0.032	0.81	I	119-669	119-769	3119-769
					D	119-670	119-770	3119-770

*Versión de 3M Unitek para esta receta. No implica endoso del doctor.

Sistema de Aparato
con Adhesivo Incorporado
APC II

Kits	.018"	.022"	APC™ II .022"
Kit 5x5, con gancho en 3	119-162	119-172	3119-172
Kit 5x5, con gancho en 3**	119-182	119-192	3119-192
Kit 5x5, con ganchos en 3, 4 y 5	119-163	119-173	3119-173
Kit 5x5, con ganchos en 3, 4 y 5**	119-183	119-193	3119-193

** Los kits marcados con dos asteriscos incluyen torque -11° en canino inferior.

Sistema de Aparato
con Adhesivo Incorporado
APC II



3M Unitek
Orthodontic Products

2724 South Peck Road
Monrovia, CA 91016 USA

626-574-4000

www.3MUnitek.com

En E.U. y Puerto Rico: 1-800-423-4588 • 626-574-4000

En Canada: 1-800-443-1661

O contacte su representante local


Apoyo Técnico: 1-800-265-1943 • 626-574-4577

Sitio de Internet: www.3MUnitek.com

© 2004 3M Company.
REF 016-932-2S 0404

Unitek™

Miniature Twin Metal Brackets

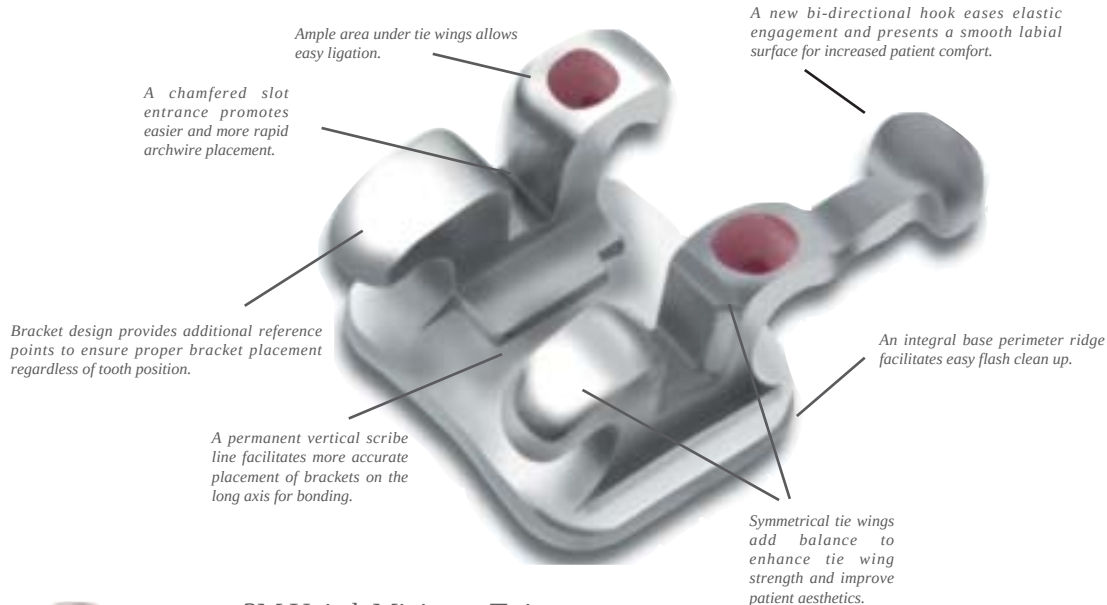

The torque-in-base design maintains level slot lineup when teeth are in their final, corrected position.

3M Unitek Miniature Twin Brackets provide all the proven clinical characteristics of full-size twin brackets, in a

smaller size for greater comfort and improved aesthetics.

Manufactured from sturdy 17-4 stainless steel, metal injected Miniature Twin brackets incorporate a micro-etched base for bond strength equivalent to mesh, and lower friction than machined brackets. Also featured are easy-to-read permanent I.D. marks plus new tie wing ink marks. In addition, Miniature Twin brackets include a smooth, bi-directional hook for superior elastic

engagement. And backed by 3M Unitek, the leader

in orthodontic brackets and appliances for more than 50 years, Unitek Miniature Twin brackets promise outstanding performance for patients and practitioners alike.



The standard integral hook has been replaced by a bi-directional version that facilitates ease and security of elastic engagement.



A micro-etched base features strength comparable to mesh, and results in significantly decreased bond failures.


3M Unitek

Products that make your life easier.



Unitek™


Miniature Twin Vertical Slot Brackets

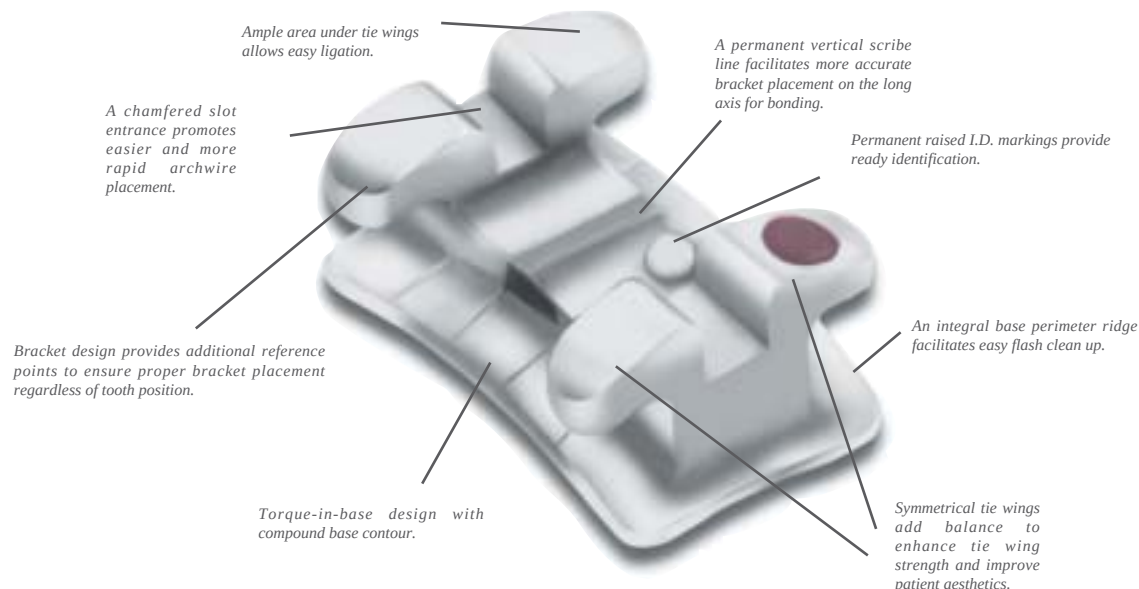

The torque-in-base design maintains level slot lineup when teeth are in their final, corrected position.

3M Unitek Miniature Twin Vertical Slot Brackets have all the features you've come to expect in a twin bracket—and more. They're smaller, for greater comfort and improved aesthetics. And their metal

injected, one-piece construction features a micro-etched base which provides bond strength comparable to mesh, and lower friction than machined brackets. Also featured are easy-to-read, permanent I.D. marks plus new tie wing ink marks. A vertical scribe line facilitates more accurate placement, and the vertical slot adds treatment flexibility. A variety of auxiliaries, including a removable hook pin, can be added when needed—or not, your choice.

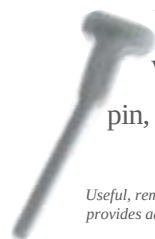

Useful, removable pin design provides added convenience.

Miniature Twin Vertical Slot brackets deliver outstanding performance for

both patients and practitioners.



A micro-etched base features bond strength comparable to mesh, and results in significantly decreased bond failures.



Cuspid auxiliaries available with ball hooks.



Vertical Slot (.020 x .020") accommodates various auxiliaries to aid with tooth alignment.

3M

**3M Unitek
Dental Products Division**

2724 South Peck Road
Monrovia, CA 91016 USA
www.3M.com/Unitek

In U.S. and Puerto Rico: 1-800-423-4588
In Canada: 1-800-443-1661
Technical Hotline: 1-800-265-1943
Outside these areas, contact your local representative.



Printed on 50% recycled
waste paper, including 10%
post-consumer waste paper.

Unitek is a trademark of 3M Unitek Corporation
©1997 3M Unitek Corporation 16-852-2 9903

Mini Uni-Twin™ Bracket



*You're familiar
with the face...*



*Now see what we've
done with the base.*



The Mini Uni-Twin Bracket features a new mesh base in addition to innovative design features that put you in control right from the start of treatment.

Combining the inter-bracket distance of a single width appliance with the rotational control of a twin bracket, it's designed for optimal orthodontic results. The innovative mesh bonding base is designed to match precisely to the curvature of the tooth for maximum contact and strong, consistent bonding.

For added convenience, you can select the Mini Uni-Twin Bracket with APC.™

The Mini Uni-Twin Bracket improves tooth movement in the early stages of treatment and tooth control throughout the course of therapy.

Much more than another pretty face, the Mini Uni-Twin Bracket delivers an unbeatable combination of superior function and superb bonding you'll want to put into your practice right away.



*The low profile hook and small ball
are milled from a single piece of
metal for increased patient comfort.*

3M Unitek

Products that make your life easier.

Mini Uni-Twin™ Brackets

Roth

							APC	APC
Maxillary	Torq.	Ang.	In/Out	L/R	.018-in.	.022-in.	.018-in.	.022-in.
Central	+12°	+5°	.036	L	020-837	020-937	2020-837	2020-937
				R	020-838	020-938	2020-838	2020-938
Lateral	+8°	+9°	.051	L	020-841	020-941	2020-841	2020-941
				R	020-842	020-942	2020-842	2020-942
Cuspid	0°	+11°	.037	L	020-845	020-945	2020-845	2020-945
				R	020-846	020-946	2020-846	2020-946
Cuspid w/distal hk	0°	+11°	.037	L	020-849	020-949	2020-849	2020-949
				R	020-850	020-950	2020-850	2020-950
Bicuspid	-7°	0°	.037	L/R	020-853	020-953	2020-853	2020-953
Bicuspid w/distal hk	-7°	0°	.037	L	020-855	020-955	2020-855	2020-955
				R	020-854	020-954	2020-854	2020-954
Bicuspid (off-set)	-7°	0°		L/R	020-8530	020-9530	2020-8530	2020-9530
Bicuspid w/hk (off-set)	-7°	0°		L	020-8550	020-9550	2020-8550	2020-9550
				R	020-8540	020-9540	2020-8540	2020-9540
Mandibular								
Anterior	-1°	0°	.051	L/R	020-858	020-958	2020-858	2020-958
Cuspid	-11°	+5°	.037	L	020-863	020-963	2020-863	2020-963
				R	020-864	020-964	2020-864	2020-964
Cuspid w/distal hk	-11°	+5°	.037	L	020-867	020-967	2020-867	2020-967
				R	020-868	020-968	2020-868	2020-968
1st Bicuspid	-17°	0°	.037	L/R	020-856	020-956	2020-856	2020-956
1st Bicuspid w/distal hk	-17°	0°		L	020-859	020-959	2020-859	2020-959
				R	020-860	020-960	2020-860	2020-960
1st Bicuspid (off-set)	-17°	0°		L/R	020-8560	020-9560	2020-8560	2020-9560
1st Bicuspid w/hk (off-set)	-17°	0°		L	020-8590	020-9590	2020-8590	2020-9590
				R	020-8600	020-9600	2020-8600	2020-9600
2nd Bicuspid	-22°	0°	.037	L/R	020-857	020-957	2020-857	2020-957
2nd Bicuspid w/distal hk	-22°	0°	.037	L	020-861	020-961	2020-861	2020-961
				R	020-862	020-962	2020-862	2020-962
2nd Bicuspid (off-set)	-22°	0°		L/R	020-8570	020-9570	2020-8570	2020-9570
2nd Bicuspid w/hk (off-set)	-22°	0°		L	020-8610	020-9610	2020-8610	2020-9610
				R	020-8620	020-9620	2020-8620	2020-9620

Kits	.018-in.	.022-in.	APC	APC
			.018-in.	.022-in.
One Case Kit w/Cuspid Hook	020-194	020-195	2020-194	2020-195
One Case Kit	020-165	020-169	N/A	N/A
One Case Kit w/Hooks	020-167	020-171	N/A	N/A
Ten Case Kit	020-166	020-170	N/A	N/A
Ten Case Kit w/Hooks	020-168	020-172	N/A	N/A



**3M Unitek
Dental Products Division**

2724 South Peck Road
Monrovia, CA 91016

In U.S. and Puerto Rico: 1-800-423-4588
In Canada: 1-800-443-1661
Technical Hotline: 1-800-264-1943
Outside these areas, contact your local representative.



Printed on 50% recycled
waste paper, including 10%
post-consumer waste paper.

Uni-Twin, Unitek and APC are
trademarks of 3M Unitek Corporation
©1996 3M Unitek Corporation 16-880 9609