

3 Techninės specifikacijos ir priedai

Toliau esančiuose skyriuose pateikta informacijos apie „DG THERM“ inkubatoriaus technines specifikacijas ir priedus.

3.1 Techninės specifikacijos

1 lentelėje pateiktos inkubatoriaus techninės specifikacijos.

1 lentelė. Techninės specifikacijos

Ypatybė	Techninės specifikacijos	
MODELIS	„DG THERM“ inkubatorius	
TALPA	24 „DG Gel“ kortelės. 2, 3 ir 4 punktai 24 mėgintuvėliai.	
INKUBAVIMO PARTIJOS	2 partijos su atskirais laikmačiais	
INKUBAVIMO TEMPERATŪRA	37 °C ± 1 °C 6 punktas	
TEMPERATŪROS VIENETAI	Programuojami, °C arba °F	
INKUBAVIMO LAIKAS	15 minučių, galima keisti 5–60 minučių intervalais	
PAŠILDYMO LAIKAS	Apie 6 minutes	
TEMPERATŪROS JUTIKLIAI	Taip, du atskiri jutikliai temperatūrai matuoti ir valdyti	
ISPĖJAMASIS SIGNALAS	Yra, kad būtų galima pranešti apie inkubavimo pabaigą ir klaidas	
ISPĖJAMOJO SIGNALO GARSUMAS	Galima užprogramuoti, 3 lygiai	
SAŠAJA 7 punktas	Skystųjų kristalų ekranas ir mygtukai	
MAITINIMO REIKALAVIMAI	Įtampa:	100–240 V
	Dažnis:	50–60 Hz
	Įvesties galia:	270 W

Ypatybė	Techninės specifikacijos	
APSAUGA NUO ELEKTROS SMŪGIO	Klasė:	I
ĮRENGIMO KATEGORIJA	II viršįtampio kategorija (vietinis lygmuo, įtaisai, kilnojamoji įranga ir pan.)	
MATMENYS	33 cm ilgio, 31 cm pločio ir 10 cm aukščio	
SVORIS	Apytiksliai 4 kg	
NAUDOJIMO SĄLYGOS	Naudoti viduje	
	Temperatūra:	15 °C - 30 °C
	Maksimalus santykinis drėgnis, nesukeliantis kondensacijos:	80 %
	Maksimalus aukštis virš jūros lygio:	3000 m
	Maksimalūs maitinimo šaltinio įtampos svyravimai:	± 10 % vardinės įtampos
TRANSPORTAVIMO IR LAIKYMO SĄLYGOS	Temperatūra:	-29 °C - 60 °C
	Maksimalus santykinis drėgnis, nesukeliantis kondensacijos:	85 %
APSAUGA NUO PERKAITIMO	50 °C ± 5 °C	
NAUDOJIMO TRUKMĖ	5 metai (vidutiniškai naudojant 8 val. per parą ir 200 dienų per metus)	

4.3 Laikmačio paleidimo / sustabdymo mygtukai

„DG THERM“ inkubatorius turi du laikmačio paleidimo / sustabdymo mygtukus (4 pav. 3 nr.): P1 (7 pav. 1 nr.) ir P2 (7 pav. 2 nr.). Kiekvieną laikmatį galima paleisti ir sustabdyti atskirai.




7 pav. Laikmačio paleidimo / sustabdymo mygtukai

- (1) Laikmačio paleidimo / sustabdymo mygtukas P1
- (2) Laikmačio paleidimo / sustabdymo mygtukas P2

4.4 Ekranas

Ekrane (8 pav.) rodomas iki inkubavimo pabaigos likęs laikas ir šilumos bloko temperatūra. Be to, ekrane rodomi galimų klaidų simboliai.

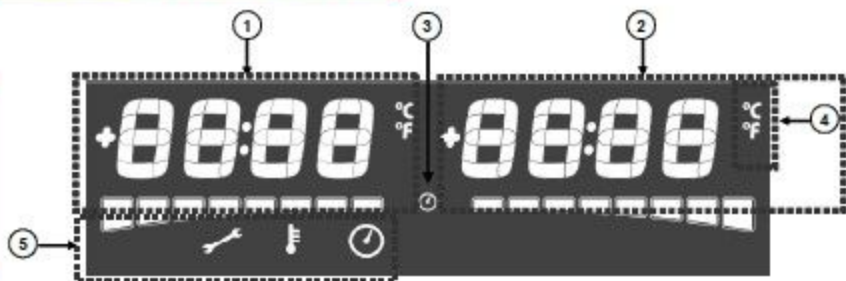

8 pav. Ekranas

- (1) 1 laikmačio informacija
- (2) 2 laikmačio informacija
- (3) Laikmačio matavimo indikatorius
- (4) Temperatūros vienetai
- (5) Klaidų simbolių sritis

Manual instrumentation for DG Gel cards

DG^{therm}

9 punktas



Digital incubator for manual processing of DG Gel cards.

- 2 independent incubation zones
- Capacity for 12 DG Gel cards and 12 tubes each
- Digital on-screen display
- Fixed preset temperature of 37°C
- Adjustable, preset incubation time of 15 minutes

Ref. 213734

DG^{spin}



Digital centrifuge for the manual processing of DG Gel cards.

- Simultaneous centrifuge of up to 24 DG Gel cards
- Removable and exchangeable spinning head
- Pre-defined centrifuge parameters
- Digital on-screen display
- Automatic detection of incorrect placement of DG Gel cards on the spinning head

Ref. 210363

Product registration and availability vary by country. Ask your local Grifols representative for more information.

Declaración CE de Conformidad

EC Declaration of Conformity

Fabricante:
Manufacturer:

DIAGNOSTIC GRIFOLS, S.A.
Passeig Fluvial, 24
08150 - Parets del Vallès
Barcelona. ESPAÑA

Producto y referencia:
Product and reference:

DG Therm 213734

Clasificación de acuerdo con la Directiva 98/79/CE:
Classification according to Directive 98/79/EC:

No listado en Anexo II de la Directiva 98/79/CE /
Non-listed in Annex II of Directive 98/79/EC

DIAGNOSTIC GRIFOLS, S.A. declara bajo su propia responsabilidad que el producto indicado anteriormente cumple los requisitos esenciales del Anexo I de la Directiva sobre Productos Sanitarios para Diagnóstico In Vitro 98/79/CE, habiéndose seguido el procedimiento de evaluación de conformidad del Anexo III.

DIAGNOSTIC GRIFOLS, S.A. declares under sole responsibility that the product specified above complies with the essential requirements given in Annex I of the Directive on In Vitro Diagnostic Medical Devices 98/79/EC and Annex III is used as the conformity assessment procedure.



Parets del Vallès, 6 de Julio de 2015
Parets del Vallès, 6th of July of 2015

Albert Hernández Botey
Director Técnico
Technical Director

/logotipas/

/rekvizitai/

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas:

DIAGNOSTIC GRIFOLS, S.A.
Passeig Fluvial, 24
08150 – Parets del Valles
Barselona, ISPANIJA

Produktas ir jo kodas:

DG Therm 213734

Klasifikacija pagal direktyvą 98/79/CE:

Nėra 98/79/EC direktyvos II priede

DIAGNOSTIC GRIFOLS, S.A., prisiimdama visą atsakomybę, tvirtina, jog aukščiau minimas produktas atitinka pagrindinius reikalavimus, pateikiamus In vitro diagnostinių medicinos priemonių direktyvos 98/79/EC I priede, o III priedas buvo naudojamas kaip atitikties įvertinimo procedūra.

/CE žyma/

Parets del Valles, 2015 m. liepos 6 d.

/parašas/

Albert Hernandez Botey
Techninis direktorius

/logotipas/

Tikslus dokumento vertimas į lietuvių kalbą

Vertėja Akvilė Gegelevičienė

Data 2016-12-07

UAB Diamedica

Molėtų pl. 73, Vilnius, Lietuva
Tel. 8 5 279 0080

