

Baktolin pure

Universalus plovimo losjonas



SUDĖTIS: Vanduo, natrio laurilsulfatas, natrio chloridas, PEG-7 glicerilkokoatas, kokamidopropil betainas, glicerinas, 2-natrio laurilsulfosuccinatas, natrio benzoatas, PEG-120 metilgliukozės diolatas, natrio citratas.

SAVYBĖS:

- pH neutralus;
- be kvapo ir dažo medžiagų;
- be šarmų;
- malonus, švelnus prausimuisi;
- tinka jautriai odai.


PASKIRTIS: Baktolin pure losjonas skirtas rankų plovimui. Naudojamas visur, kur reikalingas plovimas: gydymo įstaigose, maisto perdirbimo pramonėje, laboratorijose.

NAUDOJIMAS: Baktolin pure losjono paėmimui iš talpos gali būti naudojami sieniniai dozatoriai arba dozavimo pompos. Dozatoriaus pagalba iš talpos paimami 2 - 3ml losjono, 10-15s rankos kruopščiai muiluojamos trinamaisiais ir sukamaisiais judesiais, ypač riešai, tarpupirščiai, pirštų galiukai ir nagai. Muiluotos rankos nuplaunamos po vandens srove, rankos nusausinamos vienkartinio rankšluosčiu ar servetėle.

ĮPAKAVIMAS: 500ml, 1l, 5l talpos. Atidarius talpą galiojimas 12mėn.


GAMINTOJAS: Bode Chemie GmbH, Vokietija.

PLATINTOJAS: UAB "Armila", Ateities 10 Vilnius, tel. 8-800-20017, 8-5 2771732.

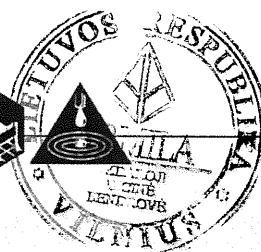

PARAŠAS TIKRAS:

Pardavimo vadybininkė
Jurgita Latvėnienė

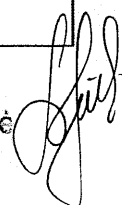

Bodedex forte

Medicinių instrumentų valymo priemonė



SUDĖTIS. Veikliosios medžiagos: nejoniniai (~5%) ir amfoteriniai (1-2.5%) tenzidai, amino rūgščių dariniai, plovimo, putojimą reguliuojančios ir konservuojančios medžiagos, korozijos inhibitoriai, kompleksiniai dariniai. Bekvapis, be dažo medžiagų.

SAVYBĖS. Koncentruotas, šviesiai gelsvos spalvos, skaidrus skystis. Koncentrato pH –8. 1,0% tirpalo pH– 7. Tankis prie 20°C– 1,05. Preparatas pasižymi stipriomis įvairių nešvarumų (net ir pridžiūvusių) valymo savybėmis. Preparatas veikia greitai– be papildomo šveitimo nešvarumus pašalina per 5-10 min. Tirpina kraujo, baltymų, sekreto, riebalų, rentgeno kontrastinių medžiagų liekanas. Nekenkia instrumentams, lengvai nusiplauna, mažai putoja.

PASKIRTIS. Instrumentų, prietaisų, laboratorinių indų ikisterilizaciniam valymui ir plovimui sveikatos priežiūros įstaigose. Jis tinka įvairių instrumentų, endoskopų (gastroskopų, bronchoskopų, kolonoskopų, duodenoskopų, biopsijos kilpų ir kt.), anestezilogijos, narkozės prietaisų ir kvėpavimo aparatų, chirurginių instrumentų, prietaisų (kraujo atsiurbėjų ir kt.), oftalmologinių, stomatologinių instrumentų valymui.

NAUDOJIMAS. Ruošiami 0,5% - 1,0% darbiniai tirpalai. Ekspozicijos laikas 5-10min. (priklauso nuo užterštumo laipsnio). Tirpalai keičiami ne rečiau kaip kartą dienoje, esant būtinybei- dažniau.

Darbinis tirpalas turi pilnai apsemti instrumentus. Instrumentai turi būti išardyti (tie, kurie išsiardo). Po valymo/ mirkymo Bodedex forte tirpale, instrumentai perplaunami geriamu vandeniu ir paruošiami tolesniam dezinfekcijos etapui.

Bodedex forte tinka rankiniam plovimui, cirkuliaciniuose, ultragarsiniuose įrenginiuose, chemoterminiam endoskopų apnuošimui.



LAIKYMAS. Laikyti kambario temperatūroje uždarytoje taroje.

GALIOJIMAS. Galiojimo laikas nurodytas ant įpakavimo.

ĮPAKAVIMAS. 2l ir 5l bakeliuose.

GAMINTOJAS: BODE Chemie GmbH, Vokietija.

PLATINTOJAS: UAB "Armila", Ateities 10, Vilnius, tel. 8-800-20017, 8-5 2771732.

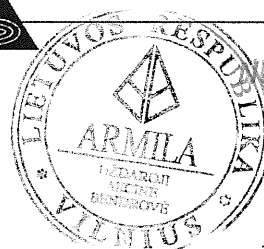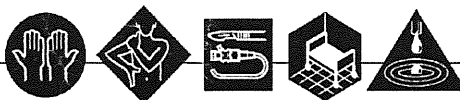

UAB "ARMILA" TIKRAS
 Personalo ir biuro
 vadybininkė
Jurgita Latvenienė

Sterillium

Rankų antiseptikos priemonė



SUDĖTIS Veikliosios medžiagos: 45g 2-propanolio, 30g 1-propanolio, 0,2g mecetronium etilsulfato.

SAVYBĖS Skaidrus, šviesiai melsvos spalvos, paruoštas naudoti tirpalas. Turi alkoholio kvapą. pH neutralus. Sudėtyje esantis mecetronium etilsulfatas mažina rankų prakaitavimą po pirštinių, prailgina priemonės veikimą.

PASKIRTIS Higieninei rankų antiseptikai sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose (ligoninėse, poliklinikose, ambulatorijose, skubios pagalbos skyriuose, sveikatos priežiūros, socialinės globos ir rūpybos įstaigų valgyklose, virtuvėse, maisto gamybos vietose ir kt.); chirurginei rankų antiseptikai.

NAUDOJIMAS

Higieninė rankų antiseptika: ant švarių sausų rankų užpilti preparato ir masažuojant įtrinti į odą. Ekspozicija- 30s.

Chirurginė rankų antiseptika: švarias sausas plaštakas ir dilbius įtrinti preparatu. Ekspozicija- 1,5min.

Visą antiseptikos laiką oda turi būti **drėgna**.

Nenaudoti veido odos ir gleivinių dezinfekcijai.

Veikimas	Ekspozicija
Baktericidinis EN13727	15s
MRSA/ EHEC	30s
Listerija, salmonella	15s
Mielicidinis EN13624, EN1275	15s
Tuberkulicidinis EN14348	30s
Mikobaktericidinis EN14348	30s
Apvalkalėlių turinčius virusus (įsk. HBV, ŽIV, HCV)	15s
Influenza- A	15s
Herpes simplex virusas (1+2 tipai)	15s
Influenza A virusas	15s
SARS- CoV	30s
Adenovirusas EN14476	1min
Polyoma	5min
Rota virusas	15s
Murine noro (MNV)	15s

1 produktų tipas. Asmens higienos dezinfekantas.


Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-10671(A-01PNO603309-19-187).

Galioja iki 2024-05-29

PAKUOTĖ 100ml, 500ml, 1,0l, 5,0l.


GAMINTOJAS BODE Chemie GmbH, Vokietija.

PLATINTOJAS UAB "Armila", Molėtų pl.75, Vilnius

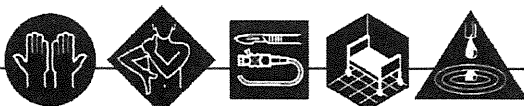

Baccalin

Paviršių dezinfekcijai ir valymui

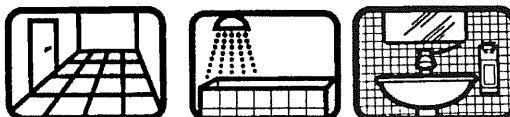

SUDĖTIS: 100g koncentrato yra: 4,0g benzil- alkildimetilamonio chlorido, 2,5g didecildimetilamonio chlorido, hidroksietan- difosfono rūgštis.

PASKIRTIS Rūgštims atspariems paviršiams, inventoriui, sanitariniams techniniams įrengimams (vonioms, praustuvėms, unitazams ir pan.) dezinfekuoti. Valo kalkių nuosėdas ir rūdis.

SAVYBĖS Šviesiai geltonos spalvos koncentratas, pH 1,0.

VEIKIMAS Baktericidinis (įsk. legionella, MRSA), fungicidinis, virucidinis prieš apvalkalėlį turinčius virusus (HBV, ŽIV, HCV), Polyoma, Vaccinia virusus.

NAUDOJIMO BŪDAS Paviršių dezinfekcijai naudojamas 1,5-5,0% darbinis tirpalas. Labai užterštiems paviršiams valyti galima naudoti koncentratą. Tirpalus ruošti naudojant šaltą vandenį (maksimaliai kambario temperatūros). Darbiniai tirpalai ruošiami kasdien. Po dezinfekcijos gerai nuplauti paviršius. Nemaišyti su aldehidiniais produktais.

Darbinių tirpalų gamybai naudoti rankinius dozatorius.

Paviršiai	Darbinio tirpalo koncentracija	Koncentrato kiekis ml	Ekspozicija
Baktericidinis/ mielicidinis	3,0%	30	4val
Legionella	2,5%	25	30 min
	1,5%	15	1val
Virucidinis (HBV, HCV, HIV)	1,5%	15	30 min
Polyoma virusas	1,5%	15	30 min
Vonios	2,5%	25	2 min
	5%	50	1 min

Atidarius talpa, koncentrato galiojimo laikas - 12 mėn. Tik profesionaliesiems vartotojams.

ĮPAKAVIMAS 1l ir 5l talpos.

GAMINTOJAS Bode Chemie GmbH, Vokietija.


PLATINTOJAS UAB "Armila", Ateities 10, Vilnius, tel.8-5 2777596

BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr (10-14 17.5)BSV-10416 (A-02PNO603018-18-104), galioja iki 2023-04-24.



PARAŠAS TIKRAS:

Paravimo vadybininkė
Jurgita Latvėnienė

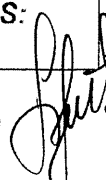

Baktolan balm

Intensyvus drėkinantis kremas sausai ir jautriai odai



SUDĖTIS: vanduo, izoheksadekanas, oktylstereatas, cetearyloktanoatas, glicerinas, cetyldimetiko kopolio aliejus, nuvandenintas ricinos aliejus, parafinas, pantenolis, allantoinas, vitaminas E, bisabololis, natrio chloridas, 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolis, kvapas.

SAVYBĖS: Baktolan balm yra aliejaus emulsija su vandeniu, atitinkanti odos pH 5,5. Apsaugo odą su ypatingais drėkinamaisiais ir riebalus atstatančiais komponentais. Skatina odos regeneraciją, stabilizuoja rūgščių pusiausvyrą, sušvelnina odos dirginimą ir raudonį, atstato ir palaiko odos elastingumą. Greitai ir lengvai įsigeria į odą, nepalikdamas ant jos nemalonaus riebalų sluoksnio. Maloniai kvepia.

PASKIRTIS: Sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų priežiūrai po dažno rankų plovimo ar dezinfekcijos. Naudojamas pacientų kūno priežiūrai po maudymo. Chemijos, farmacinių produktų, maisto pramonės darbuotojų rankų priežiūrai. Buityje.

NAUDOJIMAS: Po rankų plovimo ar kūno prausimo kremas įtrinamas į odą. Esant stipriai pažeistai odai, naudoti daug kartų dienoje. Kremas yra gana skystas, todėl lengvai paskirstomas, jo užtenka nedidelio kiekio.



Baktolan balm išsteptas rankas galima įtrinti alkoholiniu rankų antiseptiku Sterillium, prieš tai nebūtina nuplauti balzamo likučių.

PAKAVIMAS: 25ml tūbelėse, 350ml flakonuose.

GAMINTOJAS: Bode Chemie GmbH, Vokietija.

PLAINTOJAS: UAB "Armila", Ateities 10, Vilnius, tel. 8-800-20017, 8-5 2771732, faksas 8-5 2737381.

NUORAŠAS TIKRAS:

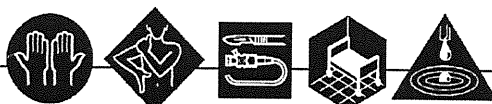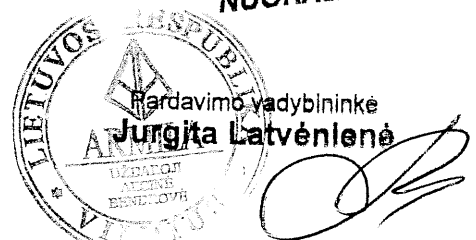

Cutasept F

Bespalvė priemonė odos dezinfekcijai



SUDĖTIS 63,0g (arba 72%) 2-propanolio alkoholio, 0,025g benzalkoniumchlorido.

SAVYBĖS Bespalvis, skaidrus skystis, paruoštas naudojimui. Tirpalo pH – 8,5.

Pasižymi baktericidiniu, mielicidiniu, tuberkuliocidiniu, virucidiniu (prieš apvalkalėlį turinčius virusus, rotą virusą) poveikiu.

PASKIRTIS Odos dezinfekcijai (prieš injekcijas, kraujo ėmimą, punkcijas, operacijas ir kitas chirurgines procedūras) sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.

NAUDOJIMAS Purkšti tiesiogiai ant odos ar užpurkšti ant sterilios vatos ir nuvalyti odos paviršių.

Visą dezinfekcijos laiką oda turi būti drėgna.

Nenaudoti veido odos ir gleivinių dezinfekcijai.

Odos dezinfekcijos laikas	
Prieš injekcijas, kraujo paėmimą	15s
Prieš punkcijas, operacijas ir kitas chirurgines procedūras	1min
Oda, turinti daug riebalinių liaukų	2min
Mikrobiologinis veikimas	
Baktericidinis (<i>P. aeruginos</i> , <i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> , <i>E. coli</i> , <i>P. Mirabilis</i>)	15s
MRSA/EHEC	1min
Tuberkuliocidinis (<i>M. terrae</i>)	30s
Mielicidinis (<i>C. albicans</i>)	15s
Prieš apvalkalėlį turinčius virusus (įsk. HCV, HIV, HBV)	30s
Prieš apvalkalėlį neturinčius virusus (rotavirusas)	30s

1 produktų tipas. Asmens higienos dezinfekantas.


Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr.(10-14 17.5) 40100-10673(A-01PNO603310-19-188), galioja iki 2024-05-29

LAIKYMAS Uždarytuose originaliuose įpakavimuose. Atidarius galioja 12mėn.

PAKUOTĖ 50ml ir 250ml flakonuose su purkštuku, 1l ir 5l talpose.

GAMINTOJAS BODE Chemie GmbH, Vokietija.

PLATINTOJAS UAB "Armila", Molėtų pl.75, Vilnius

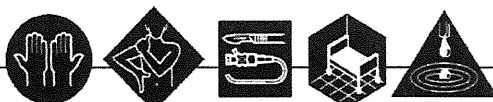

Cutasept G

Spalvota odos dezinfekcijos priemonė



SUDĖTIS Veikliosios medžiagos: 63,0g (arba 72%) 2-propanolio, 0,025g benzalkoniumchlorido; natūralūs dažai.

SAVYBĖS Skaidrus, raudonai rudos spalvos tirpalas, paruoštas naudoti. Tirpalo pH – 8,2

Pasižymi baktericidiniu, mielicidiniu, tuberkulicidiniu, virucidiniu (prieš apvalkalėlį turinčius virusus, rotą virusą) poveikiu.

PASKIRTIS Odos dezinfekcijai (prieš injekcijas, kraujo ėmimą, punkcijas, operacijas ir kitas chirurgines procedūras) sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.

NAUDOJIMAS Purkšti tiesiogiai ant odos ar užpurkšti ant sterilios vatos ir nuvalyti odos paviršių.

Visą dezinfekcijos laiką oda turi būti drėgna

Odos dezinfekcijos laikas	
Prieš injekcijas, kraujo paėmimą	15s
Prieš punkcijas, operacijas ir kitas chirurgines procedūras	1min
Oda, turinti daug riebalinių liaukų	2 min
Mikrobiologinis veikimas	
Baktericidinis (<i>P. aeruginos</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.hirae</i> , <i>E.coli</i> , <i>P. Mirabilis</i>)	15s
MRSA/EHEC	1min
Tuberkulicidinis (<i>M.terrae</i>)	30s
Mielicidinis (<i>C.albicans</i>)	15s
Prieš apvalkalėlį turinčius virusus (įsk. HCV, HIV, HBV)	30s
Prieš apvalkalėlį neturinčius virusus (rotavirusas)	30s

1 produktų tipas. Asmens higienos dezinfekantas.


Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr.(10-14 17.5)BSV-10649(A-01PNO603311-19-189) galioja iki 2024-05-29.

LAIKYMAS Uždarytoje originalioje pakuotėje. Atidarius galioja 12mėn.

PAKUOTĖ 250ml su purškutuku, 1.0l, 5.0l

GAMINTOJAS BODE Chemie GmbH, Vokietija.

PLATINTOJAS UAB "Armila", Molėtų pl.75, Vilnius

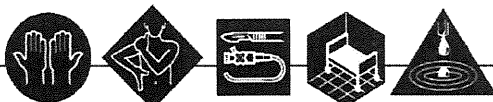

Bacillol AF

Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai

SUDĖTIS. 100g tirpalo yra: 45,0g 1-propanolio; 25,0g 2-propanolio ir 4,7g etanolio.

SAVYBĖS. Bespalvis skystis, turintis alkoholio kvapą. Paruošta naudoti.

VEIKIMAS. Baktericidinis (įsk. MRSA, TBC, mikobakterijas), mielicidinis, fungicidinis, virusidinis prieš apvalkalėlį turinčius virusus (HBV, ŽIV, HCV), Adeno, FCV, MNV, Polyoma ir Rota virusus. Greitai suyra aplinkoje.

Veikimas	Laikas
Baktericidinis, mielicidinis	15s
Fungicidinis	5min
Tuberkulicidinis, mikobaktericidinis	30s
Virusidinis (įsk. HBV HIV, HCV), adenovirusas	30s
Polyoma virusas	10min
Rotavirusas, MNV	1min
Maisto pramonė	
Baktericidinis, mielicidinis	1-5min
Fungicidinis	5min

PASKIRTIS. Nedidelių aplinkos paviršių ir medicinos prietaisų greitai dezinfekcijai. Tik profesionaliesiems naudotojams. Profesionalieji naudotojai turi taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Bacillol AF sudėtyje yra tik alkoholiai, todėl priemonė tinka maisto ruošimo ir gamybos srityje: išlaikius ekspoziciją, maistas gali tiesiogiai liestis su dezinfekuotu paviršiumi. Priemonė naudojamas dezinfekcijai kirpyklose, grožio salonuose: plaukų kirpimo mašinėlėms, šukoms, plaukų kirpimo žirkelėms, nedideliems paviršiams dezinfekuoti.

NAUDOJIMAS

- Biocidinio produkto naudojimo instrukcija (2 ir 4 produktų tipai)

Nedidelių paviršių dezinfekcijai. Nuvalytą, švarų paviršių apipurkšti priemone iš 30cm atstumo. Didesniam efektyvumui pasiekti rekomenduojama išpurkštą paviršių šluostyti preparatu sudrėkinta vienkartinio naudojimo servetėle. Sveikatos priežiūros, visuomeninės paskirties įstaigose ekspozicijos laikas iki 5min., maisto gamybos iki 30min (siekian sunaikinti virusus), greitai dezinfekcijai- 30s.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. 11(11.1)-(A-0204PNO601515-15-47)-BSV-3259, galioja iki 2020-03-19.

- Medicinos prietaiso naudojimo instrukcija (Ila klasė)

Skirta: medicinos prietaisų greitai dezinfekcijai; maisto ruošimo įmonėse paviršių dezinfekcijai. Netinka invazinių medicinos prietaisų dezinfekcijai. Ekspozicija- 30s. Netinka alkoholiui jautriems paviršiams, taip pat pagamintiems iš akrilo, Plexiglas.

Nedideliems paviršiams sunaudojama iki 50ml/m² priemonės, dezinfekuojant sienas, grindis - iki 100ml/m².

IPAKAVIMAS: 0,5; 1,0; 5,0 l talpos.
0,5 ir 1,0l talpoms reikalingas purkštukas.

GAMINTOJAS. BODE Chemie GmbH, Vokietija.

PLATINTOJAS : UAB "Armila", Ateities 10, Vilnius, tel. 8-800-20017, 8-5 2771732.




LIORAS TIKRAS:

Paravimo vadybininkė
Jurgita Latvėnienė

Mikrobac forte

Preparatas paviršių dezinfekcijai ir valymui

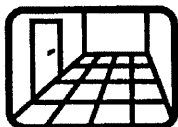

SUDĖTIS Veikliosios medžiagos: 100g koncentrato yra: benzyl-C12-18-alkyldimethylamonium chloridas 199mg/g, N-3-aminopropyl-N-dodecylpropan-1.3-diaminas 50mg/g, taip pat glicerino, tenzidų, putojimą reguliuojančių medžiagų, korozijos inhibitorių, kvapiųjų medžiagų.

SAVYBĖS Šviesiai geltonos spalvos, malonaus kvapo skystis. Koncentrato pH 8-9; 0,5 % darbinio tirpalo pH 8.

VEIKIMAS Baktericidinis (įsk. MRSA), mielicidinis, tuberkulicidinis, virucidinis prieš apvalkalėlį turinčius virusus (HBV, ŽIV, HCV), SŪRS, FCV, MNV, adeno, polyoma ir rota, nora virusas.

Savo sudėtyje neturi aldehidų, negadina paviršių, pasižymi geromis valymo savybėmis. Tinka rankiniam ir mechanizuotam plovimui bei dezinfekcijai. Nesukelia metalų korozijos.

PASKIRTIS Paviršių dezinfekcijai ir valymui ligoninėse ir bendros praktikos medicinos įstaigose (operacinėse, gimdyklose, naujagimių, intensyvios terapijos skyriuose, laboratorijose, virtuvėse ir kt.), maisto pramonės įmonėse (išskyrus pieno perdirbimo), viešojo maitinimo įstaigose, kirpyklose ir kt.

Tinka kasdieniniam visų vandeniu atsparių paviršių (metalinių, įvairių dirbtinių medžiagų), įrengimų, inventoriaus, sanitarinių įrenginių (vonių, plautuvių, unitazų), baldų, grindų, sienų, lubų, stalų, lovų, vežimėlių, naujagimių inkubatorių, greitosios pagalbos automobilių ir kt. dezinfekcijai bei valymui.

NAUDOJIMAS Koncentratas skiedžiamas šaltu (max. kambario temp.) vandeniu. Darbinių tirpalų gamybai rekomenduojame naudoti rankinius dozatorius. Prieš naudojant, nuo paviršių mechaniškai nuvalomi didesni nešvarumai, po to jie dezinfekuojami atitinkamos koncentracijos tirpalais. Jei paviršiai tiesiogiai liečiasi su maisto produktais, po dezinfekcijos tokie paviršiai gerai nuplaunami geriamu vandeniu.

Rekomenduojame darbinius tirpalus ruošti kiekvieną dieną. Paruošti, bet nepanaudoti tirpalai, uždaroje taroje išlieka stabilūs 14 parų.







1m² paviršiaus dezinfekuoti reikia 40 – 80 ml darbinio tirpalo.

Eksp./Konc.	3 min	5 min	15 min	30 min.	1h	2h	4h
Baktericidinis/ mielicidinis		2%	1,5%	1,0%	0,5%		0,25%
		20ml konc+980ml vandens	15ml konc+985ml vandens	10ml konc+990ml vandens	5ml konc+ 995ml vandens		2.5ml konc+ 997,50ml vandens
Tuberkulicidinis					2,5%	2%	
					25ml konc+ 975ml vandens		
Apvalkalėlį turintys virusai (HBV, ŽIV, HCV)		0,5 %		0,25%			
SŪRS				0,5 %			
Adeno virusas				1 %	0,5 %		
Rota virusas		0,25 %					
Papova virusas				1 %		0,5 %	
Vonios	2 %						
Virtuvės				1,5%	0,5 %		
Virtuvės (labai užteršti paviršiai)				2%	1 %		

IPAKAVIMAS: Maišeliuose po 20ml ir 5l bakeliuose.

GAMINTOJAS: BODE Chemie GmbH, Vokietija. **PLATINTOJAS:** UAB "Armila", Vilnius, tel. 8-5 2777596

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. 11(11.1)-(A-0204PNO 601546-15-48) BSV-3261, išduotas 2015-03-20, galioja iki 2020-03-19.

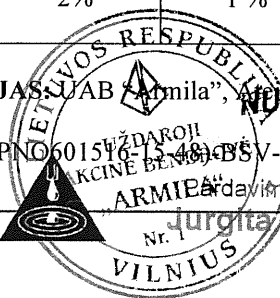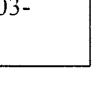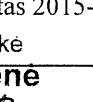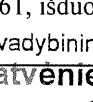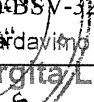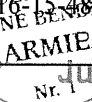

Jurgita Latvenienė

QUANTOFIX[®] Glutaraldehyde

QUANTOFIX Glutaraldehyde - indikatorinės juostelės, skirtos kiekybinei gliutaraldehydų (C₅H₈O₂) tirpaluose kontrolei. Paruoštas gliutaraldehydo tirpalas naudojamas karščiui jautrių medicinos įrenginių (endoskopų) šaltai sterilizacijai, paviršių ir įrangos dezinfekcijai.

QUANTOFIX[®] Glutaraldehyde naudojamas gliutaraldehydų koncentracijos nustatymui šiose ribose:

Matavimo ribos 0.5-2.5 % gliutaraldehydo

Gradacija: 0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5 % gliutaraldehydo

Pakuotės turinys 100 indikatorinių juostelių

Reakcijų principas Gliutaraldehydas sąveikaudamas su natrio sulfitu, sudaro šarminį produktą, kuris reaguoja su juostelės indikatoriniu lauku ir juostelę keičia spalvą nuo rausvos iki violetinės.

Bendrosios nuorodos Paimti tiek indikatorinių juostelių, kiek reikia ir uždaryti dėžutę. Neliesti juostelių indikatorinės dalies.

Naudojimo instrukcija

1 Įmerkite indikatorinę juostelę į darbinį tirpalą 1s.

2 Nukratykite juostelę.

3 Palaukite 15s.

4 Palyginkite indikatoriaus spalvą su spalvų skale ir nustatykite spalvą, kuri artimiausia (tikslumas $\pm \frac{1}{2}$ spalvos skalės).

Laikui bėgant spalva gali pasikeisti, todėl labai svarbu įvertinti atspalvį per nurodytą laiko terminą, kad teisingai įvertinti rezultatą.


Kokybės kontrolė Indikatorinių juostelių patikrai naudokite 1 % gliutaraldehydo tirpalą (tirpalo paruošimas: 1,8 ml gliutaraldehydo (50% w/w vandeninio tirpalo) praskiesti iki 100 ml distiliuoto vandens). Į paruoštą tirpalą įmerkite indikatorinę juostelę. Jei rezultatas blogas, pakartokite procedūrą dar kartą. Jei rezultatai neatitinka spalvų skalės, likusių indikatorinių juostelių naudoti negalima.

Net po neigiamo rezultato (įmerkus indikatorinę juostelę į distiliuotą vandenį) negali pasirodyti raudona arba violetinė spalva.

Galimos indikatorinių juostelių netinkamumo priežastys: pasibaigęs galiojimo laikas, indikatorijų dėžutė buvo ilgai ar nesandariai uždaryta.

Trukdžiai Ph intervale nuo 4 iki 9 reakcija vyksta be trukdžių. Esant 0.2 % formaldehido koncentracijai, galimi klaidingi rezultatai.





Saugojimas Saugoti juosteles nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Pakuotę laikyti vėsioje ir sausoje vietoje (saugojimo temperatūra +4 -+30 °C). Naudoti iki datos, pažymėtos ant pakuotės.

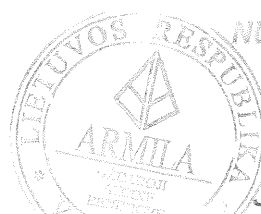

NUORAŠAS TIKRAS

Personalo ir biuro
vadybininkė
Jurgita Latvėnienė

Papildoma informacija Indikatorinių juostelių dažikliai nėra toksiški. Prarijus gerti daug vandens. Šalinti kaip buitines atliekas.

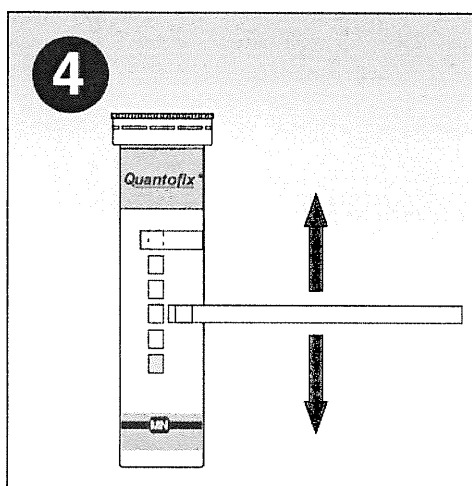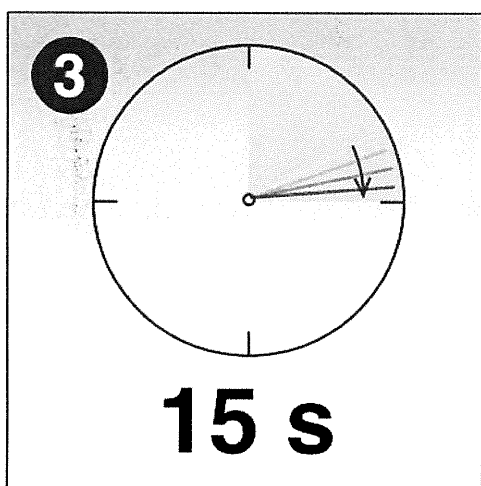
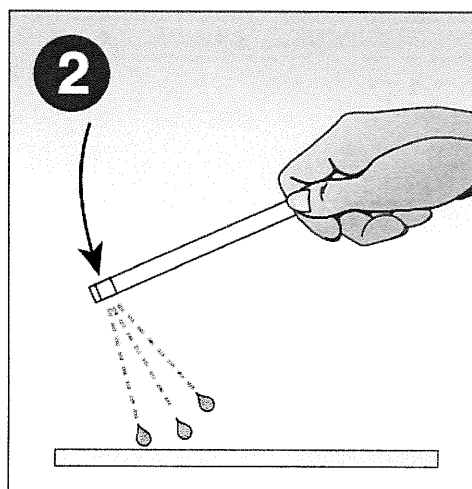
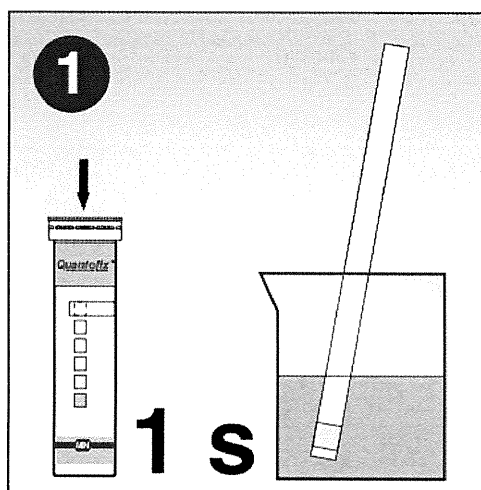


NUORAŠAS TIKRAS

Personalo ir biuro
vadybininkė
Jurgita Latvėrienė

Korsolex basic

Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė

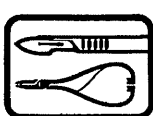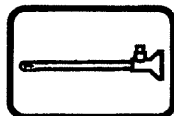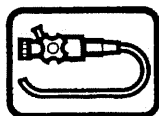

SUDĖTIS: 100 g koncentrato yra 15,2 g gliutaraldehido, 19,7 g dimetanolio, tenzidų, korozijos inhibitorių, druskų, kvapiųjų medžiagų ir dažų.

SAVYBĖS: Žalias, skaidrus skystis. Koncentrato pH-4, tankis 20°C g/cm³ -1,09. Veikia bakterijas (įsk. TBC mikobakterijas), grybelius, mieles, virusus (įsk. HBV, HIV, HCV), bakterijų sporas.

PASKIRTIS: Šilumai jautrių ir atsparių instrumentų, endoskopų dezinfekcijai. Tinka prietaisų ir instrumentų, pagamintų iš gumos, plastiko, metalinių, porceliano ir stiklo, dezinfekcijai.

Tinka rankiniam, pusiau automatiniam ir automatiniam (šalta dezinfekcija) naudojimui.

NAUDOJIMO BŪDAS: Koncentratas skiedžiamas šaltu arba kambario temperatūros vandeniu. Prieš dezinfekuojant lanksčius endoskopus ar naudojant cirkuliacinį metodą, būtinas instrumentų, prietaisų valymas **Bodedex forte** valikliu.

Korsolex basic darbinis tirpalas kartotinai gali būti naudojamas **7paras**.


Veikimas	Ekspozicija/koncentracija					
	5min	15min	30min	1val	2val	4val
Baktericidinis/ mielicidinis		2%	1%	1%		
Fungicidinis(EN13624)	3%	2%		1%		
Tuberkulicidinis		5%	3%	1,5%		
Mykobaktericidinis			3%	2%		
Sporicidinis						5%
Virusidinis prieš apvalkalėlių turinčius virusus (įsk HBV, HIV, HCV)	1%					
Virusidinis			4%	2%		
SARS		4%	3%	2%		
Adenovirusas	1%					
HAV			4%	2%		
Polyoma virusas		2%	1%			
Rota virusas	1%					

LAIKYMAS: Kambario temperatūroje, originaliuose induose. Atidarius bakelį, koncentratas galioja 12mėn.

PAKAVIMAS: 2l ir 5l bakeliai.


GAMINTOJAS: BODE Chemie, GmbH, Vokietija.

PLATINTOJAS: UAB "Armila", Ateities 10, Vilnius, tel. 277 75 96.

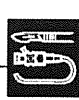

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ARMILA“

Pardavimo vadybininkė
Jurgita Latvėnienė

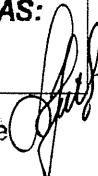

Mikrobac Tissues

Servetėlės alkoholiui jautrių medicinos prietaisų dezinfekcijai

SUDĖTIS: Servetėlės impregnuotos dezinfekciniu tirpalu, kurio 100g yra:

4 g Benzyl-C12-18-alkyldimethylamonium chlorido, 4g didecyldimethylamonium chlorido.

SAVYBĖS: Paruoštos naudoti. Savo sudėtyje neturi aldehydų, alkoholių, be dažų ir kvapų priedų, negadina jautrių paviršių, pasižymi greitu veikimu ir geromis valymo savybėmis.

Servetėlės yra pagamintos iš 100% PET pluošto (sintetinės vilnos). PET pluoštas pasižymi geromis valymo savybėmis, puikiai išsaugo veikliosios medžiagos aktyvumą, ir nepalieka pūkų ant paviršių. Servetėlės tankis 60g/m³, dydis 180x200. Viena servetėlė galima dezinfekuoti 1 m² plotą.


PASKIRTIS: Skirtos valomajai dezinfekcijai:

- medicinos prietaisų: kurie negali būti merkami į dezinfekcinį tirpalą, jautrūs alkoholiui, pvz. abdominaliniai echoskopų davikliai.
- visiems medicinos prietaisų ir aplinkos, jautriems alkoholiui paviršiams: ligoninėse, ambulatorijose, stomatologiniuose, laboratorijose, slaugos namuose; nedideliams paviršiams (durų rankens, lovų rėmai ir t.t.).
- paviršių dezinfekcijai maisto ruošimo ir maisto gamybos zonose.

NAUDOJIMAS: Išimti servetėlę iš pakelio ir ją valyti paviršių. Norint pašalinti dezinfekcinės priemonės likučius nuo plastikinių medicinos prietaisų paviršiaus, išlaikyti ekspoziciją, nuvalyti paviršius servetėle, sudrėkinta vandeniu (geriamuoju).

Dirbant mūvėkite pirštines. Nenaudoti odos, invazinių medicinos prietaisų dezinfekcijai. Sandariai uždarykite pakelį, kad neišdžiūtų servetėlės.


Veikimas	Ekspozicija
Baktericidinis (EN13727, EN 1040)	30s
Mielicidinis (EN13624, EN1275)	30s
Virucidinis prieš apvalkalėlį turinčius (HBV, ŽIV, HCV)	30s
Rota virusas	30s
Polyoma virusas	1 min.
MNV (EN14476)	4val.
Maisto ruošimo ir gamybos zonos	
Baktericidinis (EN13697+EN1276)	1min (esant nedideliame užterštumui)
	5min (esant dideliame užterštumui)
Mielicidinis (EN13697+EN1650)	1min (esant nedideliame užterštumui)
	5min (esant dideliame užterštumui)
Baktericidinis EN 1276	1min
Mielicidinis EN1650	1min

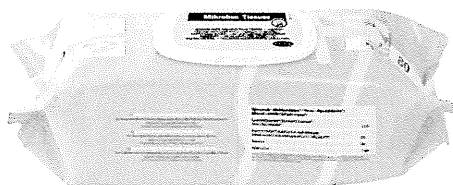

IPAKAVIMAS: Minkštuose pakeliuose po 80vnt servetėlių. Atidarius pakelį, galioja 3mėn.

GAMINTOJAS: BODE Chemie GmbH, Vokietija.

PLATINTOJAS: UAB "Armila", Ateities 10, Vilnius, tel.8-5 2777596

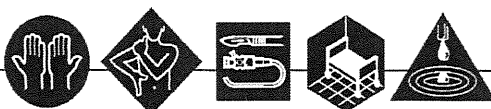

Cutasept Feet

Dezinfekcinė priemonė pėdų grybelio profilaktikai



SUDĖTIS 2-propanolis, benzalkonium chloridas.

SAVYBĖS Bespalvis, alkoholio kvapo skaidrus skystis. Preparatas pasižymi baktericidiniu, fungicidiniu veikimu.

PASKIRTIS. Pavargusių kojų atgaivinimui, pėdų grybelio profilaktikai.

Kojų grybelio profilaktika rekomenduojama, jei lankotes: prausyklose, baseinuose, saunose, persirengimo kambariuose, soliariumuose, fitneso studijose, viešbučiuose.

NAUDOJIMAS.

Esant kojų nuovargiui, pvz. po ilgo stovėjimo, sporto, vaikščiojimo, purkšti preparatą 30s ir palikti išdžiūti.

Pėdų grybelio profilaktikai: apsaugo nuo pirminės ir pakartotinos infekcijos. Esant pėdų grybeliui purkšti pėdas, kojines, batus. Norint išvengti pakartotinos infekcijos kartu su priešgrybeliniu gydymu rekomenduojama dezinfekuoti *Cutasept® feet*. batus, kojines ir kojas.

Pėdų dezinfekcija: sausas pėdas apipurkšti ar sudrėkinti *Cutasept® feet*. Naudoti tiek preparato, kad oda būtų drėgna ne mažiau kaip 30 sekundžių.

Batų dezinfekcija - batų vidų gausiai išpurkšti *Cutasept® feet* ir leisti išdžiūti.

Kojinių dezinfekcija - švarias ir sausas kojines išpurkšti preparatu ir leisti išdžiūti.

IPAKAVIMAS. 250 ml su purkštuku; 5l bakelis

GAMINTOJAS. Bode Chemie GmbH, Vokietija.

PLATINTOJAS. UAB "Armila", Ateities g. 10, Vilnius, tel. 8-800-20017, faksas 8-5 2737381




PARAŠAS TIKRAS:

Pardavimo vadybininke
Jurgita Latvėnienė



Bacillol Tissues

Alkoholinės servetėlės aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai

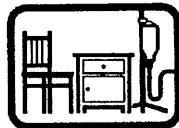

SUDĖTIS 45% propanolio-1, 25% propanolio -2, 4,7% etanolio.

VEIKIMAS Naikina bakterijas (įsk. tuberkuliozės, MRSA), mieles, grybelius, virusus: apvalkalėlį turinčius (įsk. HBV, ŽIV, HCV, Vaccinia virus); be apvalkalėlio (Rota, Adeno, Polyoma).

PASKIRTIS Mažiems paviršiams dezinfekuoti sveikatos priežiūros, soc. globos ir rūpybos įstaigose, maisto perdirbimo įmonėse bei maisto ruošimo vietose. Tinka visiems alkoholiui atspariems paviršiams.

NAUDOJIMAS Servetėlės paruoštos naudojimui. Viena servetėlė galima dezinfekuoti iki 0,2m² paviršiaus. Serverėle paviršių šluostykite taip, kad visas paviršius būtų padengtas dezinfekuojančiu tirpalu. Po panaudojimo dispenserį būtina uždegti, kad servetėlės neišdžiūtų.

Negalima dezinfekuoti invazinių medicinos prietaisų.

Veikimas/ekspozicija	30s.	1 min.	5 min.	10 min.
Medicinos srityje				
Baktericidinis		X		
Mielicidinis		X		
Fungicidinis			X	
Tuberkuliocidinis	X			
Mikobaktericidinis	X			
Virusai (HBV, ŽIV, HCV)		X		
Polyoma virusas				X
Adeno virusas		X		
Rota virusas		X		
Maisto srityje				
Baktericidinis		X		
Mielicidinis				
Fungicidinis				

PAKUOTĖ

Dispenseris. Minkšta papildymo pakuotė. 100 servetėlių.

SERVETĖLĖS DYDIS

12x23cm

GAMINTOJAS

BODE Chemie GmbH, Vokietija.


PLATINTOJAS

UAB "Armila", Ateities 10, Vilnius, tel. 8-800 20017, 8-22 777596.

BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-10417(A-0204PNO603017-18-

103), galioja iki 2023-04-24.

MEDICINOS PRIETASŲ DEZINFEKCIJA Ila klasės medicinos prietaisais.

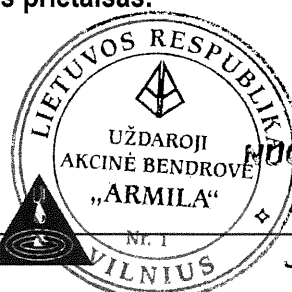

PARAŠAS TIKRAS:

Pardavimo vadybininkė
Jurgita Latvėnienė

SUMA TAB D4

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Chloro tabletėje yra 1,5 gr aktyvaus chloro, greitai tirpsta vandenyje, turi silpną chloro kvapą.

Darbinis chloro tirpalas naikina bakterijas ir jų sporas, miko bakterijas(TBC), grybelius ir virusus (HBV, ŽIV, Rota).

PASKIRTIS: sveikatos priežiūros įstaigose aplinkos bei prietaisų (t.t. stalo indų), vienkartinį gaminių, medicininių gaminių nukenksminimui, organizmo skysčiams, kraujui neutralizuoti. Naudojamas kiaušinių dezinfekcijai.

DARBINIŲ TIRPALŲ RUOŠIMAS: tabletės ištirpinamos kambario t° vandenyje.


Darbinis tirpalas gaminti prieš naudojimą.

<i>Kas dezinfekuojama</i>	<i>Kaip dezinfekuojama</i>	<i>Dozavimas</i>	<i>Ekspozicija</i>
Neinfekuoti paviršiai, prietaisai	nuplaunama tirpalu (valo ir dezinfekuoja)	1 tabletė-10 l vandens	15 min.
Infekuoti paviršiai, prietaisai, dušai, tualetai.	nuplaunama tirpalu (valo ir dezinfekuoja)	7 tabletės-1 l vandens	30 min.
Kraujas ir kt. kūno skysčiai	užpilama dez. tirpalu (dezinfekuoja)	7 tabletės-1 l vandens	30 min.
Stalo indai	mirkoma dez. tirpale (valo ir dezinfekuoja)	1 tabletė-10 l vandens	15 min.
Basonai, šlapimo surinkimo indai	mirkoma dez. tirpale (valo ir dezinfekuoja)	1 tabletė-10 l vandens	15 min.
Sanitariniai techniniai įrengimai (plautuvės, unitazai, vonios, dušai)	nuplaunama tirpalu (valo ir dezinfekuoja)	1 tabletė-10 l vandens	15 min.
Valymo inventoriai	mirkoma dez. tirpale (valo ir dezinfekuoja)	1 tabletė-10 l vandens	15 min.
Kiaušiniai	užpilama dez. tirpalu (dezinfekuoja)	1 tabletė-1 l vandens	10 min.

DARBO SAUGA : dėvėti gumines pirštines, akių ir veido apsaugos priemones. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu su muilu. Patekus į akis, plauti dideliu kiekiu vandens, ir jei reikia kreiptis į gydytoją.

Prarijus- gerti daug šilto vandens ir jei reikia kreiptis į gydytoją.

PAKAVIMAS: plastikiniai indai po 300 tablečių.

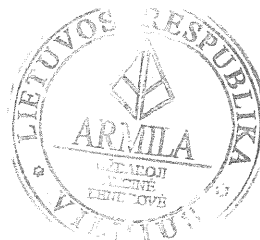

NUORAŠAS TIKRAS:

Pardavimo vadybininkė
Jurgita Latvėnienė

BODE X-WIPES sistema

Universali sistema- dispenseris ir servetėlės- paviršiams valyti ir dezinfekuoti

Savybės

- universalus naudojimas;
- ekonomiškas servetėlių ir darbinio tirpalo vartojimas;
- apsaugo valiklius ar dezinfekcinius tirpalus nuo užteršimo ir išgaravimo;
- tirpalo naudojimo terminas – 28 paros;
- servetėlės pagamintos iš tvirtos, gerai sugeriančio pluošto, be pūkų.

Kur naudoti

BODE *X-Wipes* rekomenduojamos naudoti paviršių valymui ir dezinfekcijai gydymo įstaigose, farmacijos gamyboje, laboratorijose ir maisto perdirbimo įmonėse ten, kur privalo būti ideali higiena. Naudokite valymui ir dezinfekcijai:

- darbinių paviršių;
- neštuvų;
- lovų;
- spintelių;
- endoskopų valymui;
- aukštos rizikos zonose;
- ten, kur nėra vandentiekio;
- visur, kur neįmanoma naudoti valymo įrangos.

Medžiagos

- Dispenseris pagamintas iš tvirtos sintetinės medžiagos (polipropileno), yra atsparus rūgštims (išskyrus skruzdžių rūgštį) ir šarmams. Dispenserio rankena patogiai pernešant jį į reikiamą vietą. Dispenseryje telpa 3 litrai darbinio tirpalo, kuris puikiai sudrėkina vienasluoksnes servetėles. Sistemos dangtelyje, kuris pagamintas iš tokios pat tvirtos medžiagos, padaryta plati briauna, tad galėsite uždaryti dalytuvą visiškai sandariai: tai parodo būdingas spragtelėjimas, girdimas uždariant dangtį.
- Servetėlės BODE *X-Wipes* pagamintos iš sugeriančio poliesterio pluošto (60g/m^2) be pūkų. Aukštos kokybės servetėlės išlieka tvirtos net būdamos drėgnos ar šlapios. Sugerta dezinfekuojamoji medžiaga neužsilaiko pluoštinėje medžiagoje, o puikiai paskirstoma ant dezinfekuojamo paviršiaus.
- Vieną ritinį sudaro 90 vienasluoksnių stačiakampių servetėlių, kurių dydis 38 x 20 cm.

Naudojimo instrukcija

- Pasirinkite išėmimo sistemą, savo spalva atitinkančią naudojamą dezinfekuojamą medžiagą (pavyzdžiui, mėlynoji sistema medžiagai be aldehido, žalioji – medžiagai su aldehidu, raudonoji – medžiagai alkoholio pagrindu). Kad nesuteptumėte servetėlių ritinio, užsimaukite pirštines.
- Išimkite ritinį iš pakuotės, atidarykite dalytuvo dangtį ir įstatykite sausą ritinį. Darydami tai, šiek tiek ištraukite pirmosios servetėlės kraštą iš ritinio vidurio.
- Paruoškite 3 litrus norimos koncentracijos darbinio tirpalo. Lėtai pilkite tirpalą į dispenserį – spirale nuo ritinio centro jo išorinės dalies link, taip, kad skystis visiškai įsigertų. Po 10 minučių tolygiai sudrėkintas ritinys bus paruošas naudoti.
- Per išėmimo sistemos angą ištraukite pirmąją servetėlę iš ritinio vidurio, atplėškite ir išmeskite ją. Uždenkite dispenserį dangčiu, spausdami jį tol, kol išgirsite spragtelėjimą. Vėliau atsargiai uždarykite išėmimo sistemos apsauginį dangtelį.
- Užpildykite lipduką pridėtu universaliu rašikliu ir priklijuokite jį ant pažymėtos dalytuvo *X-Wipes* vietos.

Pakartotinis dispenserio užpildymas

Taisyklingai uždarius, dezinfekcinį tirpalą BODE *X-Wipes* dispenseryje galima naudoti 4 savaites. Keisdami priemonę, naudokite pakartotinam pripildymui skirtų servetėlių pakuotę.

Dar kartą pilant į sistemą dezinfekcinį tirpalą reikia:

- Pašalinkite esamas servetėles ir skystį.
- Kruopščiai išvalykite dispenserį ir jo dalis (dispenserio apruošimo būdai pateikti žemiau.)
- Visos dalys turi pilnai išdžiūti.
- Įstatykite naują ritinį ir įpilkite valiklio arba dezinfekcinio tirpalo.
- Užklijuokite naują lipduką su nauja informacija.



Dispenserio dezinfekcija

- Prieš naujai užpildant dispenserį dezinfekciniu tirpalu, jis turi būti apdorotas chemoterminiu būdu, ne žemesnėje nei 60°C ir ne aukštesnėje kaip 70° C temperatūroje, kad išvengti bioplėvelės susidarymo.
- Dispenseris chemotermiškai turi būti apdorojamas ne rečiau kaip kas 28 dienas, jei naudojimos bealdehidinės dezinfekcinės medžiagos.
- Jei dispenseryje naudojamos bealdehidinės (KAJ, amino , gliukoprotamino pagrindu) pagamintos dezinfekcinės medžiagos (pvz. Mikrobac forte, Baccalin, Sokrena) yra keičiamos į aldehido (Korsolin FF) arba alkoholio pagrindu pagamintas medžiagas (pvz. Bacillol AF), dispenseris prieš pakeitimą turi būti apdorojamas chemoterminiu būdu.
- Jei dispenseryje naudojamos aldehido ar alkoholio pagrindu pagamintos dezinfekcinės medžiagos, dispenseris gali būti apdorojamas tik rankiniu būdu. Tam tinka naudoti paruoštas servetėles paviršių dezinfekcijai (Bacillol tissues, Mikrobac tissues)



ĮPAKAVIMAS: Rulone 90vnt. servetėlių.

GAMINTOJAS: BODE Chemie GmbH, Vokietija.

PLATINTOJAS : UAB “Armila”, Ateities 10, Vilnius, tel.8-5 2777596

Sieninis laikiklis

SAVYBĖS

- Pagamintas iš tvirto plastiko
- Lengvai prižiūrimas ir valomas
- Lengvai tvirtinimas prie sienos
- Tinkamas 0,35l, 0,5l ir 1l originalioms Bode pakuotėms.



GAMINTOJAS: Bode Chemie GmbH, Vokietija


PLATINTOJAS: UAB "Armila", Ateities 10 Vilnius, tel. 8-800-20017, 8-5-2771732



NUORAŠAS TIKRAS:

Pardavimo vadybininkė

Jurgita Latvėnienė

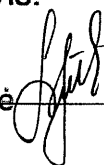

Dozatorius Eurodispenser Safety plus



PASKIRTIS: Rankų antiseptiko ir skysto muilo dozavimui visur, kur reikalinga higieninė ir chirurginė antiseptika. Skirtas Bode Chemie originalioms 0,5l ir 1,0l muilo, rankų antiseptiko talpoms.

SAVYBĖS

Pagaminta iš dezinfekcinėms priemonėms atsparaus plastiko.

Uždaro tipo.

Integruotas užraktas apsaugo nuo vagystės.

Dozavimo pompa vienu paspaudimu dozuoja ~1,7ml skysčio.

Dozatoriaus alkūnės ilgis: 0,5l talpos- 17cm, 1,0l- 20,5cm.

Plati dozatoriaus rankena patogiam naudojimui.

Lašų surinkimo padėklas.

Komplekte: dozatorius, lašų surinkimo padėklas, tvirtinimo elementai, instrukcija (dozavimo pompos nėra).

DEZINFEKCIJA IR VALYMAS Atliekama visada, kai keičiama talpa. Dozatoriaus, lašų surinkimo padėklo išorė valoma paviršių dezinfekcijos priemonėmis (pvz. Bacillol tissues, Bacillol 30 tissues, Mikrobac tissues, Dismozon pur (0,6%)).

Dozatorių galima dezinfekuoti plovimo mašinoje: dezinfekcinio tirpalo pH 7-12; temperatūra ne aukštesnė 83°C.

Negalima autoklavuoti.

Nenaudoti rūgštinių, abrazyvinių valiklių.

TALPA 0,5l ir 1,0l

GAMINTOJAS Bode Chemie GmbH, Vokietija

ATSTOVAS LIETUVOJE UAB Armila

