

SERRES

Profesionalus pasirinkimas

Gaminių katalogas



Inovacijos pagal jūsų klinikišius poreikius

Kaip jūs pasiruošę tokioms situacijoms, kai nelieta vietos kompromisui? Kaip pasiruošiate operacijai, kai spaudžia laikas? Kaip atlikti viską teisingai nuo pradžių? Mes pateikiame sprendimus, kurie padės pasiekti jūsų tikslus:

Visiška sprendimų
partnerystė

Sauga ir
higiena

Sąnaudų
sumažinimas

Sklandūs
veiksmai

„SERRES“ siurbimo sistema apima plačiausią medicininių siurbimo operacijų diapazoną. Sistemą visada galima papildyti, kad būtų tenkinami besikeičiantys jūsų poreikiai. Mūsų gaminiai yra paprastai naudojami ir pagaminti pagal aukščiausius kokybės standartus.

„SERRES“ yra šeimos valdoma suomių įmonė. Mūsų misija yra padėti sveikatos priežiūros specialistams sėkmingai atlikti kasdienį darbą. Mes sukūrėme pasitikėjimą mūsų įranga, todėl pacientai gali pasitikėti geriausia jūsų teikiama priežiūra.

Trumpas „SERRES“ siurbimo sistemos aprašymas

Pagrindines „SERRES“ siurbimo sistemos savybes ir privalumus galite rasti toliau pateiktuose paveikslėliuose. Norėdami rasti daugiau informacijos, apsilankykite www.serres.com.

Vienkartiniai siurbimo maišeliai

1. Hidrofobinis filtras veikia kaip kombinuotas bakterijų filtras ir apsaugo nuo perpildymo. Filtras automatiškai uždaro siurbimą, kai jis liečiasi su skysčiais.

2. Nuoseklusis prievadas leidžia išplėsti siurbimo talpą iki 36 litrų – tai didžiausias galimas tūris rinkoje.

3. Maišeliai sulankstyti ir sutvirtinti juostomis, todėl juos greitai ir lengvai prijungsite.

4. Tirpiose pakuotėse supakuota kietinanti medžiaga iš anksto įdėta į maišelius, todėl naudoti galite pradėti iškart.



5. Matavimo indelio prijungimo taškas. Visi specialūs gaminiai ir priedai visada yra suderinami su kitais „SERRES“ gaminiais ir sukalibruoti veikti kartu.

6. Paimkite rankenėlę ir lengvai nuimkite maišėlį baigę naudoti. Taip nenusilaužysite nagų.

7. Patentuota vienos jungties sistema užtikrina prijungimą be klaidų. Tiesiog prijunkite paciento vamzdelį ir sistema bus paruošta naudoti.

8. Uždėjus dangtelius jie tvirtai laikosi uždaryti, todėl maišelis išlieka visiškai sandarus, net jei atsitiktinai nukristų ant grindų.

Daugkartinio naudojimo siurbimo indai

1. Vakuumo šaltinis prijungiamas prie indo kampinės jungties. Prijungus vakuumo vamzdelį, tarp operacijų jo ir jungties liesti nebereikia.

2. Indą galima tvirtinti įvairiuose skirtinguose laikikliuose. Indai permatomi, tačiau yra ir mėlynos spalvos modelių, jei nepageidaujama, kad turinys būtų matomas.

3. Plati matavimo skalė gerai matoma iš visų pusių.

4. Tvirta konstrukcija ir atspari medžiaga gali būti veiksmingai valoma, taip pat ir autoklavuojama.

5. 2 000 ml ir 3 000 ml indai yra apvalūs. 1 000 ml indai yra ovalios formos ir telpa net mažiausioje erdvėje.



Vienkartiniai siurbimo maišeliai

Vienkartiniai „SERRES“ siurbimo maišeliai pasižymi geriausiu funkcionalumu ir yra paprastai naudojami. Siurbimo maišeliai yra 1 000 ml, 2 000 ml ir 3 000 ml talpos bei pagaminti iš plonos, bet stiprios polietileno plėvelės, todėl ši sistema yra saugiausias ir labiausiai higieniškas siurbimo sprendimas rinkoje. Kiekviename „SERRES“ siurbimo maišelyje įrengta patentuota vienos jungties sistema, todėl neteisingai jį prijungti praktiškai neįmanoma. Kaip naudotis šia suklysti neleidžiančia, greitai prijungiama jungtimi, galima lengvai išmokti. Tai padės darbuotojams išvengti pavojingų situacijų. Visuose „SERRES“ siurbimo maišeliuose yra hidrofobiniai filtrai, kurie veikia kaip kombinuotas bakterijų filtras ir apsaugo nuo perpildymo.



Siurbimo maišeliai, standartiniai

Siurbimo maišelis.

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57157	Siurbimo maišelis, 1 000 ml	216 (36 x 6)
57167	Siurbimo maišelis, 2 000 ml	144 (24 x 6)
57187	Siurbimo maišelis, 3 000 ml	144 (24 x 6)



Siurbimo maišeliai, sulankstyti

Sulankstyti maišeliai yra suvynioti ir sutvirtinti juosta, todėl juos lengviau ir greičiau įrengti.

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57167-0	Siurbimo maišelis, sulankstytas, 2 000 ml	144 (24 x 6)
57187-0	Siurbimo maišelis, sulankstytas, 3 000 ml	144 (24 x 6)



Siurbimo maišeliai su atgalinio srauto vožtuvu

Pagerinta higiena, nes induose įrengtas atgalinio srauto vožtuvas, neleidžiantis skysčiui tekėti iš paciento prievado, kol jis neprijungtas.

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57157-3	Siurbimo maišelis, atgalinio srauto vožtuvas, 1 000 ml	216 (36 x 6)
57167-3	Siurbimo maišelis, atgalinio srauto vožtuvas, 2 000 ml	144 (24 x 6)
57187-3	Siurbimo maišelis, atgalinio srauto vožtuvas, 3 000 ml	144 (24 x 6)



Siurbimo maišeliai, vienetinė pakuotė

Po vieną supakuoti maišeliai yra apsaugoti nuo dulkių laikant ir idealiai tinka tuo atveju, kai naudojama nedaug maišelių.

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57157-2	Siurbimo maišelis, vienetinė	90
57167-2	Siurbimo maišelis, vienetinė	90
57187-2	Siurbimo maišelis, vienetinė	90



Siurbimo maišelis su dvigubu filtru

Naudojamas atliekant operacijas, kurių metu susidaro labai daug dūmų. Papildomas filtras apsaugo nuo pirmalaikio perpildymo filtro užsikimšimo.

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57167-5	Siurbimo maišelis su dvigubu filtru, 2 000 ml	144 (24 x 6)
57187-5	Siurbimo maišelis su dvigubu filtru, 3 000 ml	144 (24 x 6)

Kietinanti medžiaga

„SERRES“ gelio pripildomuose maišeliuose yra kietinančios medžiagos, kuri užtikrina paprastesnį ir saugesnį skysčių tvarkymą. Pradėti darbą galite greitai ir patogiai, nes kietinanti medžiaga jau sudėta į maišelius ir supakuota tirpiose pakuotėse. Be to, prireikus į maišelį galima įdėti daugiau kietinančios medžiagos, kuri parduodama atskirai.



Iš anksto gelio pripildyti siurbimo maišeliai

Iš anksto gelio pripildytuose maišeliuose yra kietinančios medžiagos, supakuotos tirpiose pakuotėse.

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57557	Gelio pripildomas maišelis, 1 000 ml	192 (32 x 6)
57567-0	Gelio pripildomas maišelis, sulankstytas, 2 000 ml	132 (22 x 6)
57587-0	Gelio pripildomas maišelis, sulankstytas, 3 000 ml	120 (20 x 6)



57550

Kietinanti medžiaga

Papildomos kietinančios medžiagos galima įsigyti atskirose pakuotėse arba indeliuose po 2 kg. Kietinančios medžiagos galima pridėti į siurbimo maišelį per nuoseklyjį prievadą.

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57550	Kietinanti medžiaga, 25 g	24/288 *
57553	Kietinančios medžiagos indelis, 2 kg	1

* Pakuotės yra supakuotos plastikiniuose maišeliuose po 24 vnt. Bendras pakuočių kiekis dėžutėje yra 288 vnt.



57553






„SERRES“ transportavimo dėžė

- 1 standartinėje „SERRES“ transportavimo dėžėje yra 144 vnt. 3 000ml siurbimo maišelių.
- Lengvos ir ekonomiškios pakuotės sumažina logistikos ir siuntimo klientams išlaidas.
- „SERRES“ sutaupo iki 88 % saugojimo vietos, reikalingos atsargoms valdyti ir tiekti ligoninėms.



Siurbimo maišelio pasirinkimo patarimai

„SERRES“ siurbimo maišelių parinktys ir pagrindinės gaminių savybės.

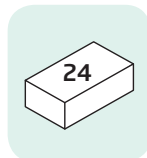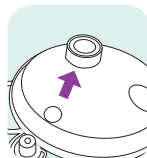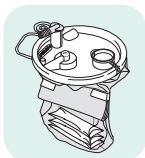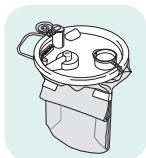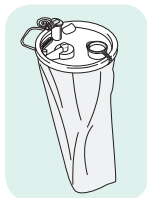

Gaminio Nr.	Standartinis	Sulankstytas	Pripildomas geliu	Vienetinė pakuotė	Atgalinio srauto vožtuvas	Dvigubas filtras	Pakuotės dydis *
1 000 ml							
57157	●	-	-	-	-	-	216 (36 x 6)
57557	-	-	●	-	-	-	192 (32 x 6)
57157-2	-	-	-	●	-	-	90 **
57157-3	-	-	-	-	●	-	216 (36 x 6)
2 000 ml							
57167	●	-	-	-	-	-	144 (24 x 6)
57167-0	-	●	-	-	-	-	144 (24 x 6)
57567-0	-	●	●	-	-	-	132 (22 x 6)
57167-2	-	●	-	●	-	-	90 **
57167-3	-	●	-	-	●	-	144 (24 x 6)
57167-2	-	●	-	-	-	●	144 (24 x 6)
3 000 ml							
57187	●	-	-	-	-	-	144 (24 x 6)
57187-0	-	●	-	-	-	-	144 (24 x 6)
57587-0	-	●	●	-	-	-	120 (20 x 6)
57187-2	-	●	-	●	-	-	90 **
57187-3	-	●	-	-	●	-	144 (24 x 6)
57187-5	-	●	-	-	-	●	144 (24 x 6)

* Jei nenurodyta kitaip, siurbimo maišeliai yra supakuoti išdavimo dėžutėse, o išdavimo dėžutės po 6 sudėtos transportavimo dėžėje

** Gaminiai supakuoti ne palatai skirtose dėžutėse, o didesnėse laikymo dėžėse.

Siurbimo indai

Daugkartinio naudojimo „SERRES“ indai neturi būti dažnai keičiami ir yra itin tvirti. „SERRES“ siurbimo indai yra sertifikuoti kaip matavimo įrenginiai, kurių tikslumas ± 100 ml. Induose yra įmontuoti laikikliai, skirti tvirtinti ant sienos, bėgelių atramų ar vežimėlių. Induose yra daugkartinio naudojimo kampinės jungtys, skirtos vakuumo vamzdeliams. Kompaktiški ovalios formos 1 000 ml indai idealiai tinka mažose erdvėse – greitosios pagalbos automobiliuose, intensyviosios priežiūros skyriuose ir anestezijos darbo vietose.



Siurbimo indai, permatomi

Permatomas indas plačia skale, jame aiškiai matomas siurbiamas skystis.

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57308	Siurbimo indas, 1 000 ml	45
57328	Siurbimo indas, 2 000 ml	24
57348	Siurbimo indas, 3 000 ml	16



Siurbimo indai, mėlyni

Mėlyni indai yra skirti naudoti esant jautrioms aplinkybėms, kad būtų užtikrintas paciento ir šeimos narių komfortas.

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57309	Siurbimo indas, mėlynas, 1 000 ml	45
57329	Siurbimo indas, mėlynas, 2 000 ml	24



Plovimo indas

Nepertraukiamai naudojant siurbimo vamzdelį galima išplauti ir užtikrinti jo veiksmingumą įsiurbiant nedidelį kiekį vandens iš plovimo indo.

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57319	Plovimo indas, baltas, 1 000 ml	45



57958



57959

„SERRES“ indų vožtuvai ir jungtys

- Įjungimo-išjungimo vožtuvą galima naudoti siurbimui atidaryti ir uždaryti. Jis pakeičia pilną kampinę jungtį.
- „SERRES“ vožtuvas naudojamas siurbimui atidaryti ir uždaryti, kai naudojamas dūmų filtras.
- Trišakė jungtis naudojama nuosekliems sujungimams ir gali pakeisti „SERRES“ vožtuvą, kai naudojamas dūmų filtras.
- Daugkartinio naudojimo kampinę jungtį galima įsigyti kaip atsarginę dalį, jei ji netyčia buvo išmesta.



57610



57618

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57958	„SERRES“ vožtuvas	10
57959	Įjungimo-išjungimo vožtuvas	10
57610	Trišakė jungtis	100
57618	Kampinė jungtis	20

Nuoseklusis sujungimas

„SERRES“ siurbimo maišelius lengva sujungti į nuoseklią grandinę, kad būtų galima užtikrinti maksimalią siurbimo talpą. Vienkartiniai nuoseklojo jungimo vamzdeliai su plataus kampo jungtimi prijungiami tarp siurbimo maišelių. Daugkartinio naudojimo silikoniniu vakuomo vamzdeliu indai prijungiami prie vakuomo šaltinio. Visus „SERRES“ siurbimo maišelius galima naudoti po vieną arba sujungus nuosekliai.



57918



57908

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis	Daugkartinio naudojimo
57918	Nuoseklaus jungimo vamzdelis	150 (25 x 6)	ne
57908	Vakuomo vamzdelis, silikoninis	10	taip
57899	Vakuomo vamzdelio ritinys, 5 m, silikoninis	10	taip

Į vieną grandinę galima nuosekliai sujungti iki 6 bakelių. Jei naudojamas vakuomo perjungiklis dviem grandinėms sujungti, maksimali surenkama talpa yra 36 litrai viename vežimėlyje. Naudojant nuosekliai sujungtus „SERRES“ siurbimo maišelius, skystis teka į pirmąjį maišelį. Kai jis prisipildo, skystis automatiškai, be naudotojo įsikišimo pradeda tekėti į kitą maišelį per nuoseklaus jungimo vamzdelį. Kai paskutinis grandinės maišelis prisipildo, procedūra baigiama, maišeliai užkemšami ir pašalinami, kaip naudojant įprastai.



Specialūs „SERRES“ siurbimo sistemas gaminiai

Visi priedai yra suderinami su „SERRES“ siurbimo maišeliais ir yra lengvai bei greitai prijungiami.

- Surinkimo indelis yra skirtas mėginiams paimti iš įsiurbto skysčio.
- Matavimo indelis skirtas mažiems skysčio tūriams tiksliai išmatuoti.
- Nuotekų siurblys idealiai tinka patogiai pašalinti dideliame kiekyje skysčių nuo grindų.
- Bakterijų filtrą galima prijungti tarp siurbimo indo ir siurbimo pompos.
- Dūmų filtras apsaugo nuo pirmalaikio filtro užsikimšimo dūmais.



57247

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57247	Surinkimo indelis 300 ml - Ø 7,2 *	108 (18 x 6)
57242	Surinkimo indelis 300 ml, be kampinės jungties	108 (18 x 6)
57257	Matavimo indelis 250 ml - Ø 7,2 *	72 (12x6)
57270	Nuotekų siurblys + 3 m siurbimo vamzdis	25
57702	Bakterijų / virusų filtras	10
57710	Dūmų filtras	10

* Kampinės jungties skersmuo.



57257



57270



57702



57710

Specialios jungtys

Dviguba jungtis yra skirta siurbimo maišelio paciento jungčiai pakeisti, jeigu reikalingas siurbimas vienu metu iš dviejų vietų. Tiesioji jungtis naudojama kaip pakaitalas paciento jungčiai, jei naudojamas didesnis siurbimo vamzdelis.



57620



57621


Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57620	Dviguba jungtis	20/100
57621	Tiesioji jungtis	20/500

„SERRES“ siurbimo sistemos priedai

„SERRES“ siurbimo sistemoje yra didelis priedų asortimentas. Visi priedai yra pagaminti atsižvelgiant į praktiškumą, funkcionalumą ir naudojimo paprastumą.

Laikikliai

„SERRES“ laikikliai yra skirti siurbimo indams laikyti visose galimose situacijose: ant sienos, bėgelių, stalo ir prie lovos. Bėgelių laikiklį su sparčiąja jungtimi galima įrengti be jokių įrankių. Plastikinius laikiklius galima plauti dezinfekuojančiame plautuve net 95 °C temperatūroje.

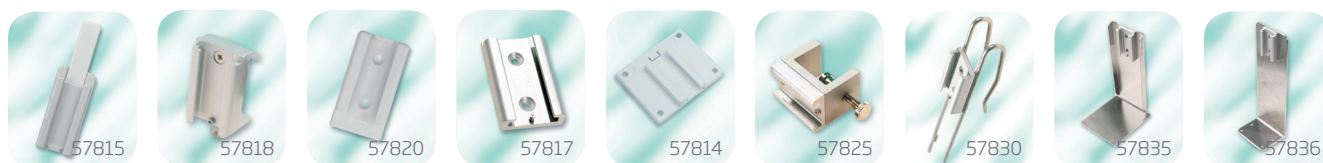

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis	Medžiaga
57815	Bėgelių laikiklis	25	plastikas
57818	Bėgelių laikiklis	1/25	aliuminis
57820	Sienos laikiklis	50	plastikas
57817	Sienos laikiklis	1/25	aliuminis
57814	Sienos laikiklis, platus	25	plastikas
57825	Stalo laikiklis	1/10	aliuminis
57830	Lovos laikiklis	1/10	aliuminis / nerūdijantysis plienas
57835	Stalo stovas, 1 000 ml	10	aliuminis / nerūdijantysis plienas
57836	Stalo stovas, 2 000 ml	10	aliuminis / nerūdijantysis plienas



Adapteriai

Naudojant adapterius „SERRES“ indus galima įrengti ant daugelio trečiųjų šalių sienos laikiklių. Adapteriai idealiai tinka ligoninėms, kurios nori išvengti papildomų tvirtinimo darbų.

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57821	D adapteris	50
57822	C adapteris	50
57823	A adapteris	50
57824	V adapteris	50
57826	J adapteris	50



Kiti laikikliai

Kateterių laikiklis yra patogiausias indas kateteriams laikyti ten, kur jų reikia. Vamzdelių laikiklis visada laiko siurbimo vamzdelį pasiekiamoje vietoje ir paruoštą naudoti.

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57831	Kateterių laikiklis	1
57833	Vamzdelių laikiklis	10

Vežimėliai

„SERRES“ vežimėliai yra lengvi ir patogūs pervežti, juose telpa iki 12 indų ir du priedai. Jie yra dviejų aukščių, vežimėlį galima laikyti net po lova.



Vežimėliai

Aukštajame vežimėlyje yra laikiklis 6 indams. Ant strypo viršaus yra vietos dviem papildomiems įrenginiams, tokiems kaip ežektorius, vakuumo perjungiklis arba plovimo indas. Galima įrengti laikiklį papildomiems 6 indams. Žemajame vežimėlyje telpa 3 indai arba įranga.

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57940	Aukštas vežimėlis, 120 cm *	3
57945	Žemas vežimėlis, 55 cm	4

* Aukštajame vežimėlyje įrengtas ratų stabdys.



Vežimėlio priedai

Naudojant papildomą indų laikiklį, galima gerokai padidinti vežimėlio talpą. Valdymo vožtuvu galima greitai pradėti naudoti siurbimo maišelius individualiai.

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57941	Indų laikiklis	6
57942	Valdymo vožtuvas	1/30
57943	Valdymo vožtuvo kaištis	100



Vakuomo perjungiklis

Vakuomo perjungiklis yra skirtas vakuumui perjungti iš vienos siurbimo maišelių sistemos į kitą. Vakuomo perjungiklis įrengiamas vežimėlyje tarp dviejų indų. Jį galima naudoti ir nuosekliems sujungimams.

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis
57955	Vakuomo perjungiklis, plastikinis	5

Siurbimo maišelis ir vamzdelis

Paruoštos naudoti pakuotėse yra jungiamasis paciento vamzdelis ir siurbimo maišelis, kartu supakuoti nuplėšiamoje pakuotėje. Šis visiškai suderinamų siurbimo gaminių rinkinys palengvina slaugytojų darbą ir sumažina gaminių kodų skaičių – taip geriau kontroliuojamos atsargos.



Lizdas-lizdas jungtis standartiniams „Yankauer“ tipo ir kitiems siurbimo antgaliams (vidinis jungties skersmuo 11 mm)

Gaminio Nr.	Vamzdelio dydis * CH25CH30		Ilgis (m)	Siurbimo maišelio dydis	Vakuumo valdy- mo adapteris **	Pakuotės dydis
1 000 ml						
57157-23181	x		1,8 m	1 000 ml	-	65
57157-23188	x		1,8 m	1 000 ml	„SerresTip“	60
57157-26308		x	3,0 m	1 000 ml	„SerresTip“	50
57157-23185	x		1,8 m	1 000 ml	Vakuumo stabdiklis	60
2 000 ml						
57167-23181	x		1,8 m	2 000 ml	-	60
57167-26301		x	3,0 m	2 000 ml	-	50
57167-23188	x		1,8 m	2 000 ml	„SerresTip“	60
57167-26308		x	3,0 m	2 000 ml	„SerresTip“	50
57167-23185	x		1,8 m	2 000 ml	Vakuumo stabdiklis	60
57167-26305		x	3,0 m	2 000 ml	Vakuumo stabdiklis	50
3 000 ml						
57187-23181	x		1,8 m	3 000 ml	-	60
57187-26301		x	3,0 m	3 000 ml	-	50
57187-23188	x		1,8 m	3 000 ml	„SerresTip“	60

* 5,8–8,3 mm / CH25, 7–10 mm / CH30

** Supakuota atskirai

Vakuomo valdymo parinktys

„SerresTip“ ir vakuomo stabdiklio adapteriai prijungiami prie standartinių siurbimo kateterių ir užtikrina saugesnį siurbimo valdymą prie paciento lovos. „SerresTip“ adapteris pasižymi unikalia ergonomiška konstrukcija, užtikrinančia patogesnę ir labiau higienišką laikymą tik viena ranka. Vakuomo stabdiklio įrenginys pateikia saugų vakuomo jungiklį arčiau pacientų. Yra dvi šio įrenginio versijos, pritaikytos suaugusiųjų arba vaikų siurbimo kateteriams. Visi adapteriai parduodami kaip atskiros prekės arba pateikiamos su siurbimo maišelio ir vamzdelio pakuotėmis.



Adapteriai

Gaminio Nr.	Gaminio pavadinimas	Pakuotės dydis	Medžiaga be ftalatų
58280-1	„SerresTip“ adapteris	100	●
58250	Vakuomo stabdiklis, suaugusiems	70	●
58260	Vakuomo stabdiklis, vaikams	70	●

Novatoriškas maišelio ištuštinimo įtaisas

SERRES NEMO leidžia sumažinti išlaidas ir padidina darbo našumą. Naujasis SERRES NEMO veiksmingai ištuština siurbimo maišelius, užtikrindamas švaresnį ir saugesnį kasdienį ligoninės darbuotojų darbą. Kartu su mūsų siurbimo maišeliais jis sudaro vientisą, higienišką ir išlaidas mažinantį bendrą sprendimą – nuo siurbimo iki atliekų valdymo.

SERRES NEMO nauda

- Itin ekonomiškas, sumažina su siurbimo maišeliais susijusias klinikines atliekas
- Paspirtina kasdienes darbus, ištuštinimo ciklas trunka tik 20 sekundžių
- Higieniškas, apsaugo darbuotojus nuo biologiškai pavojingų skysčių poveikio
- Kasdienis plovimo dėklo naudojimas užtikrins puikią higieną
- Paprastas naudoti kaip ir visi kiti SERRES gaminiai
- Funkcionali ir pakankamai kompaktiška konstrukcija, todėl telpa net ankštesiose vietose



Gaminio Nr.	57984
Tinka:	SERRES 2 ir 3 l standartiniams siurbimo maišeliams ištuštinti
Matmenys:	Aukštis 1 010–1 060 mm Plotis 330 mm Gylis 630–730 mm
Jungtys:	Šalto vandens R ½ col. Kanalizacijos DN 50 Elektra: įžemintas lizdas 230 V / 50 Hz, 10 A
Medžiaga:	Nerūdijantysis plienas, plastikas
Svoris:	apie 60 kg
Vandens suvartojimas:	8 l / cikl.
Techninė ir kita informacija:	SERRES NEMO, siurbimo maišelio ištuštinimo įtaisas Plovimo dėklas, 40 vnt. / dėž.

Ežektorius

Prijungus prie ligininės suslėgtojo oro tiekimo sistemos, „Q-Vac“ užtikrina reguliuojamą ir tylų siurbimą. Ergonomiškas „Q-Vac“ yra patogus naudoti, nes sumažina siurbimo triukšmą ir palengvina naudojimą. Faktiškai „Serres Q-Vac“ yra itin tylus siurbimo ežektorius. Progresyvi konstrukcija apsaugo įrenginį nuo smūgių ir suteikia atnaujintą išvaizdą bei naujų spalvų ligininės aplinkai.



„Q-Vac“

Gaminio Nr.	Jungimas prie bėgelio	Greitas prijungimas	Pridedama 1,5 m suslėgtojo oro žarna	Standartinis	Pakuotės dydis
57966	•	-	•	SS	1
57967	-	•	-	SS	1
57974	•	-	•	DIN	1
57975	-	•	-	DIN	1



„Q-Vac“ priedai

Gaminio Nr.	Gaminys	Pakuotės dydis
57978	„Q-Vac“ priežiūros rinkinys	1
57969	Specialus duslintuvas	1
57964	Specialus duslintuvas + „Q-Vac“ priežiūros rinkinys	1
57977	Degazavimo vamzdelio antgalis (naudojamas kaip duslintuvo pakaitalas)	1
57979	Suslėgtojo oro žarna 3 m	1



Pasaulyje pirmaujantis siurbimo sistemų tiekėjas.

„SERRES“ pateikia aukštos kokybės siurbimo sistemas sveikatos priežiūros specialistams

Mes žinomi savo aukštos kokybės gaminiais ir novatoriškais sprendimais. Dėl mūsų nuolatinio pasišventimo tobulinti gaminius mes didžiuojamės galėdami pasiūlyti moderniausias siurbimo sistemas pasaulyje.

„SERRES“ yra šeimos valdoma suomių įmonė. Mes esame didžiausias siurbimo sistemų tiekėjas Europoje ir antras didžiausias visame pasaulyje.

Mūsų misija yra padėti sveikatos priežiūros specialistams sėkmingai atlikti kasdienį darbą. Mes sukūrėme pasitikėjimą mūsų įrangą, todėl pacientai gali pasitikėti geriausia jūsų teikiama priežiūra.

Jūsų vietinis platintojas:

„Sanovus“, UAB
Daugėlišio g. 32–301, 09300
Vilnius, Lietuva
T.: +370 5 2450 415
F.: + 370 5 2706 201
El. p. info@sanovus.lt
www.sanovus.lt



SERRES

The Professional Choice

„Serres Oy“ | Keskustie 23 | FI-61850 Kauhajoki as Suomija
Tel. +358 20 746 4400 | Faks. +358 20 746 4401 | serres@serres.com

www.serres.com