

64 pozicija

Centrinės venos kateteriai trikanaliai

Bioptimal Consumables

Bioptimal International Pte. Ltd.

PRUNUS Global R&D Centers





Bioptimal International Pte. Ltd.

36, Jalan Tukang Singapore 619266

Tel: +65 6213 5706

Email: Sales@bioptimalg.com

Web: <https://www.bioptimalg.com>

Born For Love



Central Venous Catheter and Catheterization Kit

Your reliable choice for deep vein catheterization



Safety & stable

Special formulated biocompatible polyurethane material and soft tip



Smooth operation

Special designed guidewire with a soft flexible tip, catheter tip with multi-hole design



Multi-choice

Basic CVC Kit and CVC Procedure Tray for choice. Customization is available

Minkštas, poliuretalinis kateteris


Rentgenokontrastinis, sužymėtas centimetrais

Catheter Marking

Radiopaque material with clear, definite marking (1cm), ensures correct placement of the catheter.

Suture Wing & Clamp Fastener

Keep catheter in place thereby reducing the risk of mechanical phlebitis and irritation.

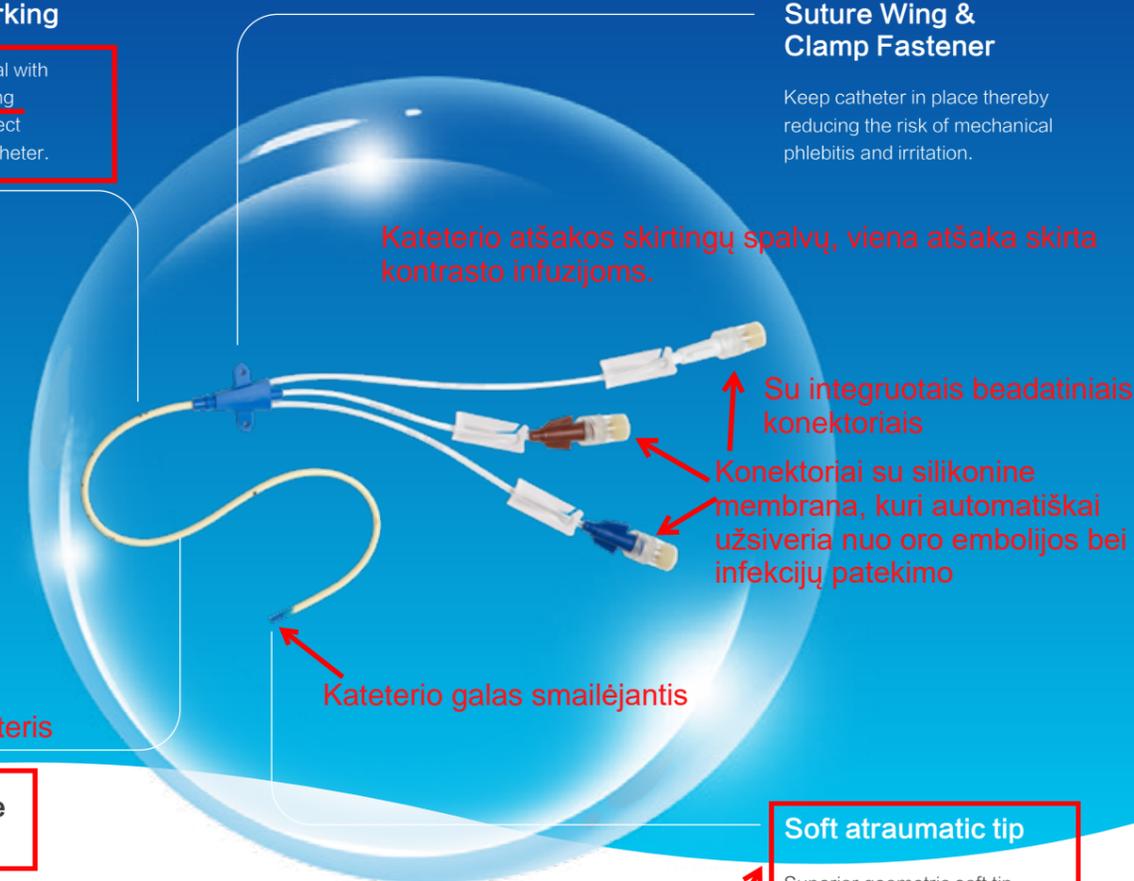

Polyurethane Material


Special formulated biocompatible polyurethane material, provides strength during insertion, yet soften in body.

Soft atraumatic tip

Superior geometric soft tip design makes insertion safe and easy.

Kateterio galas smailėjantis, lankstus atrauminis

COMPONENTS

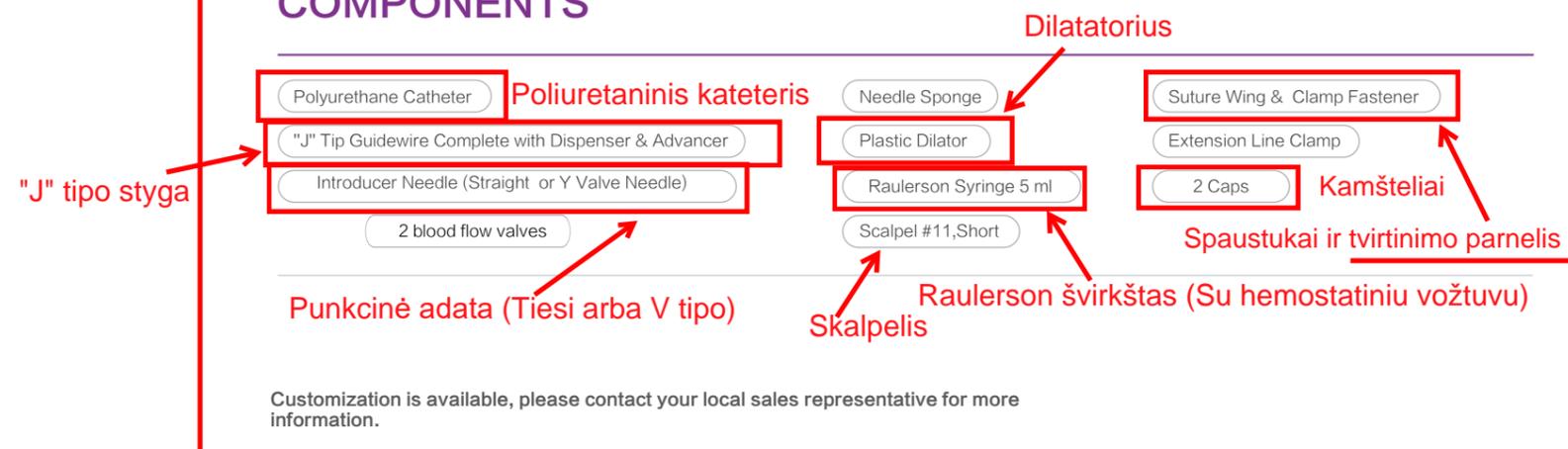

SPECIFICATIONS

Model No.	Catheter Size	Gauge Size	Ilgis						Styga			Dilator	Adata 18G	
			6	8	10	13	16	20	30	0.018"	0.025"		0.035"	18Gx21/2"
Single Lumen														
CV-401-16	4F	18G					✓			✓		5F	✓	
CV-401-20	4F	18G						✓		✓		5F	✓	
CV-501-16	5F	16G					✓			✓		6F	✓	
CV-501-20	5F	16G						✓		✓		6F	✓	
CV-701-16	7F	14G					✓			✓		7F	✓	
CV-701-20	7F	14G						✓		✓		7F	✓	
Double Lumen														
CV-402-06	4F	22/22G	✓							✓		5F	✓	
CV-402-10	4F	22/22G		✓						✓		5F	✓	
CV-402-16	4F	22/22G					✓			✓		5F	✓	
CV-502-10	5F	18/18G		✓						✓		6F	✓	
CV-502-16	5F	18/18G					✓			✓		6F	✓	
CV-502-20	5F	18/18G						✓		✓		6F	✓	
CV-702-16	7F	16/16G					✓			✓		8F	✓	
CV-702-20	7F	16/16G						✓		✓		8F	✓	
CV-702-30	7F	16/16G								✓		8F	✓	
CV-802-16	8.5F	13/13G					✓			✓		10F	✓	
CV-802-20	8.5F	13/13G						✓		✓		10F	✓	
CV-802-30	8.5F	13/13G								✓		10F	✓	
Triple Lumen Trikanaliai														
CV-503-08	5.5F	20/22/22G	✓							✓		6F	✓	
CV-503-13	5.5F	20/22/22G			✓					✓		6F	✓	
CV-503-30	5.5F	20/22/22G								✓	✓	6F	✓	
CV-703-10	7F	16/18/18G		✓						✓		8F	✓	
CV-703-16	7F	16/18/18G					✓			✓		8F	✓	
CV-703-20	7F	16/18/18G						✓		✓		8F	✓	
CV-703-30	7F	16/18/18G								✓		8F	✓	
CV-713-10	7F	14/18/18G		✓						✓		8F	✓	
CV-713-16	7F	14/18/18G					✓			✓		8F	✓	
CV-713-20	7F	14/18/18G						✓		✓		8F	✓	
CV-713-30	7F	14/18/18G								✓		8F	✓	
CV-803-16	8.5F	14/18/18G								✓		10F	✓	
CV-803-20	8.5F	14/18/18G								✓		10F	✓	
CV-803-30	8.5F	14/18/18G								✓		10F	✓	
Quad Lumen														
CV-804-16	8.5F	14/16/18/18G					✓			✓		10F		
CV-804-20	8.5F	14/16/18/18G						✓		✓		10F		
CV-804-30	8.5F	14/16/18/18G								✓		10F		

0,035" = 0.89mm

Su atsparia persilenkimui (nitinoline) styga ir Raulerson tipo švirksčiu

Komplektuojamas su: OPTIONAL FEATURES

Family/Configuration	Description of configuration	Remark
CV-XXX-XX	CVC with Spring Guidewire and Straight Needle	NA
CVN-XXX-XX	CVC with Kink-Resistance (Nitinol) Guidewire and Straight Needle	N-Refer to Kink-Resistance Guidewire
CVNR-XXX-XX	CVC with Kink-Resistance (Nitinol) Guidewire and Raulerson Syringe	R-Refer to Raulerson Syringe
CVN-XXX-XX Y	CVC with Kink-Resistance (Nitinol) Guidewire and Y Valve Needle	Y-Refer to Y-Valve Needle
CV-XXX-XX T	CVC Kit with Procedure Tray	T-Refer to Procedure Tray
CVR-XXX-XX	CVC with Raulerson Syringe	R-Refer to Raulerson Syringe

All complete CVC kit includes Extension Line Clamp, Injection Site, 1 ea. of Luer Slip Syringe, 1 ea. of #11 Short Scalpel, 1 ea. of Suture Wing with Clamp Fastener & 1 ea. of Needle Sponge.

Su atsparia persilenkimui (nitinoline) styga ir V tipo adata

QUALITY COMPONENTS FOR OPTIMAL PERFORMANCE



Tegaderm Transparent Dressing (optional)

Transparent window provides visibility, stabilizes catheter and protects from outside contamination.

Introducer Needle

Available in straight or V needle. V valve needle designed to prevent back-flow of blood and air embolism.

Advancer

Single hand operated advancer helps to straighten the "J" Tip spring guidewire and advancing it to the proper position.

Needle Sponge

Specialized sponge for holding used needle preventing the potential of needle piercing.

Guidewire
Specially designed nitinol guidewire, kink-resistant (length 60 cm) with a soft flexible tip to prevent vessel perforation (vascular trauma), provides good torque to ensure firm insertion. One end straight, the other J-shaped.
Nitinolinė viela pravedėjas 60 cm ilgio, atspari perlenkimui. Vienas galas tiesus, kitas „J“ formos, su atžymomis.

Contents of the CVC Procedure Tray

- CVC Kit
- Sponge Swabs
- Fenestrated Drape
- Needle 25G x 5/8"
- Suture: Braided Silk 3-0 with Straight Needle
- 5cc syringe with luer slip
- Paper Towel 17" x 22"
- CVC Tray-Medication Cup
- Blue Wrap (70 x 70)
- Gauze White
- Needle 22G x 11/2"
- Tegaderm transparent dressing (optional)

The CVC Procedure Tray is optional and can be purchased together with the standard central venous catheter kit as a complete set. Please approach our sales representatives for further enquires.

Įpakavimas po 1 rinkinį

Central Venous Catheter

English

Contents of this package are sterile and non-pyrogenic if package is unopened and undamaged.
For single use only.
Instructions for use enclosed.
Store in cool, dark place
CAUTION: USA Federal Law restricts this device to use by or on the order of a physician.

Deutsch

Inhalt steril und pyrogenfrei, wenn die Verpackung verschlossen und unbeschädigt ist. Nicht wiederverwenden oder sterilisieren.
Vor Gebrauch alle in der Packung enthaltenen Hinweise beachten.
Kühl und dunkel lagern
VORSICHT: Ein US-Bundesgesetz schränkt den Verkauf dieses Produktes auf Anordnung durch einen Arzt ein.

Français

Le contenu de cet emballage est stérile et apyrogène lorsqu'il reste fermé et intact.
A usage unique.
Voir mode d'emploi ci-joint.
Conserver au frais et à l'abri de la lumière.
ATTENTION: La loi fédérale limite l'utilisation de cet article aux seules personnes habilitées (Médecins ou autres).

Italiano

Il contenuto di questa confezione è sterile ed apirogeno purché rimanga chiusa e non danneggiata.
Da usare una volta sola.
Istruzioni per l'uso all'interno.
Conservare in un luogo fresco e al riparo dalla luce
ATTENZIONE: Ai sensi delle legge federale questo dispositivo deve essere usato soltanto da un medico o su prescrizione di quest' ultimo.

Español

El contenido de este embalaje es estéril y apirogeno mientras permanece cerrado e intacto. Le aconsejamos que lo utilice una sola vez. Siga las instrucciones de uso.
Guárdese en sitio obscuro y fresco.
PRECAUCION: La ley federal limita el uso de este dispositivo a los medicos o por prescripción médica.

日本語

この包装の内部は、開封あるいは破損されていない限り、無菌で発熱物質も含まれません。本品の使用は一回限りです。使用説明書が包装内に入っています。
涼しくて光の当たらない場所で保管してください。
注意：米国の法律により、本品は医師の指示によってのみ使用されます。

中文

本產品之包裝，在未被打開或破損的情形下，其包裝內部是無菌的，並且不含發熱性物質。本產品只限使用一次。包裝內裝有使用說明書。請存放在無日照陰涼的地方。
注意：依據美國的法律規定，本產品需經醫師指示後方可使用。

FREE SAMPLE NOT FOR SALE



Bioptimal™

REF

P/N 25-000070-10 REV. A5

LOT H220900052

Use By 2025-08-31

QTY 1/PKG

STERILE EO



Non-Pyrogenic



Legal Manufacturer
BIOPTIMAL INTERNATIONAL PTE.LTD. 2022-09-16
36 Jalan Tukang, Singapore 619266

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg
Germany

Vienkartinis

CE 0344

Central Venous Catheter

Pakuotes pavyzdys

CONTENTS (per kit):

- 1 Catheter (7Fr/2.4mm 2L 20cm)
- 1 Guidewire (0.035"/0.89mm-J 60cm NiTi)
- 1 Needle (18Ga×2-1/2" 63.5mm) *Adatā 18G/ 63,5 mm*
- 1 Dilator (8Fr/2.7mm)
- 1 Scalpel # 11-Short
- 1 Clamp Fastener
- 1 Suture Wing
- 1 Injection Port
- 2 Extension Line Clamps
- 1 Raulerson Syringe
- 1 Blue Needle Stopper

Flowrate	(ml/min)
Distal:	58
Proximal:	47



(01)08886483506770(17)250831(10)H220900052

LABEL P/N: LDCV-0026-703 REV. A3

Be latekso (simbolis ant pakuotės)

LATEX FREE

Su numatyta pakuotės atidarymo vieta

RM012-002-019A3

