


## SONIC SRAUTINIS PINTAS MIKROKATETERIS

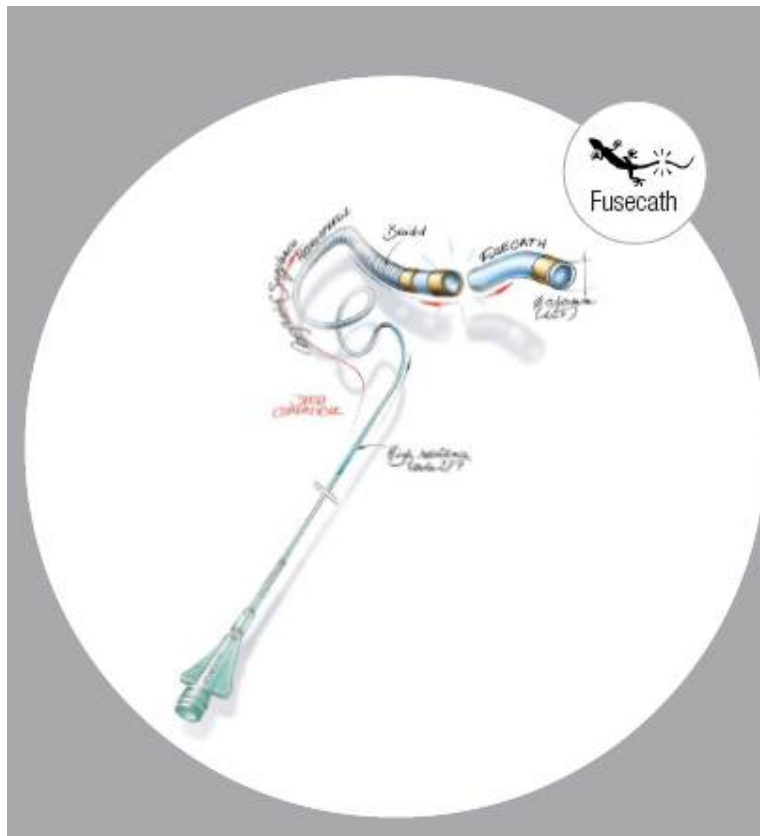

Magija, žinoma nuo 1987 metų, vis dar laikytinas geriausias srautą nukreipiantiskateteris, tačiau jis pagamintas iš polimerų, kurie ne atsispiria DMSO-embolizacijos produktus. BALT SONIC palaiko Magic kateterio savybes su dideliu atsparumu slėgiui ir visą DMSO suderinamumą. Kuris yra SONIC įrengtas su patentuota sistema "Fusecath", kuri leidžia jos distalinei daliai išeiti, kai įstringa embolizacijos produktas.


### SISTEMOS TYRIMAS

Sonic kateterį yra įrengta Fusecath sistema, kuri riboja distalines užklijuota embolizacijos produkto pasekmes: su nedidele trauka, Sonic patarimas atsitraukti nuo, likusio kateterio nes:

Pastangos perdavimo arterijose išlieka mažos ir hamorrhage rizika yra kuo labiau sumažinama.

Nėra jokios rizikos, paliekant pilną kateterį padėtyje

3 rentgenokontrastiški žymekliai  
distalinei pakuotej  
atsiskyrimo taškas  
didžiausias refliuksas

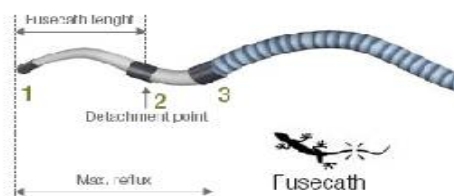

### ATSPARUMAS SPAUDIMUI

Balt sukurtas naujo tipo mikro-pynės sustiprina, SONIC elastingą distalinesdalis. Ši nauja technologija, Balt išskirtinumas, daro SONIC atspariu aukštam slėgiui tikrai saugioms injekcijoms...

## NUKREIPTAS SRAUTAS

ir leidžia Sonic išlaikyti didelį elastingumą, pagrindinis veiksnys, už puikią navigaciją pasirodymams

## DISTALINIAI NURODYMAI

Siekiant padidinti SONIC pasirodymus, kai navigacija yra labai distalinė arba ypač sudėtinga, microcatheter Vasco 35,120 geriau "palaiko" dėl tri-axial technikos:

6F pagrindinis kateteris 90 cm


.Vasco 35,120 (120cm ilgis, distalines OT 3,8 F ID3.1F).

SONIC 1.2F25.180.

Sonic Visiškai suderinamas su DMSO

tirpiklis buvo patvirtintas nepriklausomos

laboratorijos (Laboratoire national de metrologija et d'essais-Paryžius-Prancūzija) ir gyvūnų bandymais.

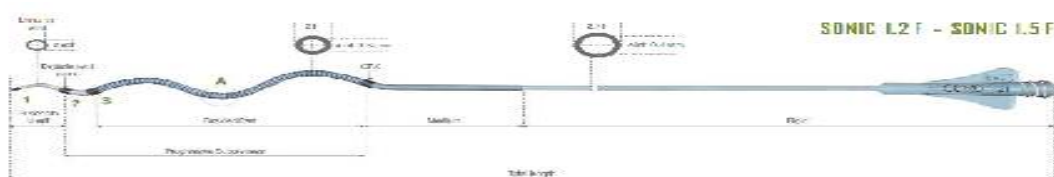

## SONIC 1.2 F15

Fusecath ilgis: 1.5 cm; Visas ilgis 165 cm Distalinis galiukas O ext; 1.2 F; Distalinis galiukas O int 0.17 mm. Nenaudojama erdvė: 0,3ml; Maximalus refluksas: 2cm; Įskaitant .007h guidewire

## SONIC 1.2 F 25

Fusecath ilgis: 2.5cm ; Totalus ilgis: 165cm; Distalinis galiukas O ext: 1.2 F; Distalinis galiukas O int: 0.17mm; Nenaudojama erdvė 0,3ml; Max refluksas: 3cm; Įskaitant .007 Guidewire

## SONIC 1.2 F 25.180

Fuskalinis ilgis: 2.5 cm; Totalus ilgis: 180cm; Distalinis galiukas O ext: 1.2 F; Distalinis galiukas O int: 0.17 mm. Nenaudojama erdvė: 0,38ml; Maksimalus refluksas 3cm; Įskaitant ,007 Guidewire

## SONIC 1.5 F 25

Fuskalinis ilgis 2.5 cm; Totalus ilgis 165 cm; Distalinis galiukas O ext: 1,5 F; Distalinis galiukas O int: 0,27 mm. Nenaudojama erdvė: 0,33 ml; Maksimalus refluksas 3cm; Įskaitant 008 Guidewire

## ĮSPĖJIMAS

Tam, kad išvengti rizikos pažeisti Fusekalinę sistemą, reikia naudoti ypatingai pritaikytą Guidewire.

*Vertinimas tikslas.*  
*Klin. tyrim. ir prod. spec.*  
*Viktoras J. Jankauskas*

UAB  
MEDICAL  
TINAC  
Joint Stock  
Company