



Export and Production
- since 1949 -

Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH • Rudorffweg 10 • 21031 Hamburg, Germany

Product description

Item: SuperFrost Microscopic slides
Item nos.: 1041001, 1041003

Material: extra white glass (soda lime glass)

Measurements: 26 x 76 mm (ISO Norm 8037/I), thickness: 1 mm
tolerance: +/- 0.05mm

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------|--------------------------------|--------|
| <u>Chemical composition:</u> | Silicon Dioxide | SiO ₂ | 72,20 % | Magnesium Oxide | MgO | 4,30 % |
| <u>(approx.)</u> | Sodium Oxide | Na ₂ O | 14,30 % | Aluminium Oxide | Al ₂ O ₃ | 1,20 % |
| | Potassium Oxide | K ₂ O | 1,20 % | Ferric Oxide | Fe ₂ O ₃ | 0,03 % |
| | Calcium Oxide | CaO | 6,40 % | Sulfur Trioxide | SO ₃ | 0,30 % |

Description: 1041001: coloured, cut edges, without cellophane
1041003: coloured, ground edges 90°, without cellophane

Characteristics: Smooth and opaque surface allows for effortless writing and provides a bright background for excellent contrast. The surface of the writing tab is resistant to commonly used laboratory chemicals and solvents and prevents scratching or sticking when the slides are stacked together. Available in 7 standard colours (white, blue, pink, yellow, green, purple, orange). These colours simplify marking and categorizing of different preparations. The word "SuperFrost" marks the correct side, so it is easy to find the right side.

Intended Use and Information: Particularly suitable for the microscopic analysis of blood, urine and tissue samples.
Ready to use and should not be reused (for single use only).
Be aware of the possibility of harm when dealing with the slides and take the corresponding safety measures, e. g. wearing gloves.
When using in machines, the additional usage instruction from the manufacturer of the machinery should be followed.
When using dyes or other chemicals, please note the safety advice from the manufacturer.
cut edges: for routine microscopy applications.
ground edges: the incorporation of ground edges reduces the danger of cuts and infections to laboratory personnel.

Shelf life: 12 month from date of production. Due to the composition of the glass, the alkali parts can, under the influence of humidity, lead to an alteration of the glass surface. Even under correct storage conditions the surface of the soda-lime glass may be subject to a natural alteration.



Export and Production
- since 1949 -

Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH • Rudorffweg 10 • 21031 Hamburg, Germany


Packaging: 50 pcs / box, 5000 pcs. / carton

Storage:

- keep dry.
- avoid large variations in temperature during both storage and usage. Cooling of the product can cause condensation and lead to condensed water forming between the glasses.
- please note: Use older products in storage first!
- protect the bottom of the carton from dampness.
- slide storage periods: see "use before" date.

Classification: In-vitro-diagnostic

Norms: DIN EN 13485, DIN EN 15223, DIN EN 14971, MPG (German Medical product law), MDD 98/79/EC, ISO 8037/1, DIN EN ISO 9001

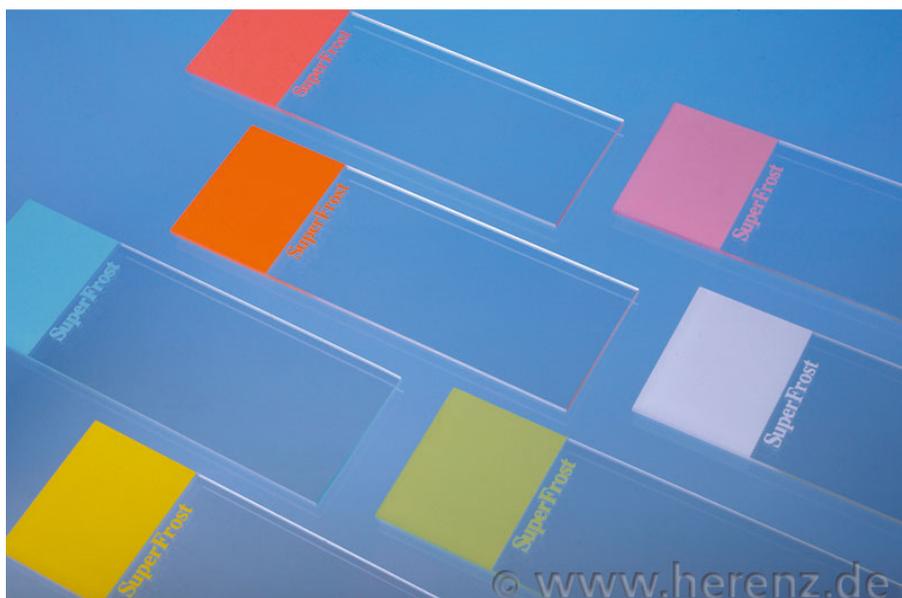

www.herenz.de

Phone +49-040-739-20-40
Fax +49-040-730 41 48
Email hhh@herenz.de
ILN 40 49434 00000 8
Objektraeger-Superfrost-e

Managing Directors

Dieter Cyll, Antje Herenz-Cyll
Comm. Reg. Hamburg HRB 48884
Tax No. 44/729/00248
V.A.T. No. DE 118 665 646

Postbank Hamburg

Sort Code 200 100 20
Account No. 6846 46 200
IBAN DE97200100200684646200
Swift-Code PBNKDEFF
page 2 of 2

Deutsche Bank AG

Sort Code 200 700 00
Account No. 55 00 251
IBAN DE82200700000550025100
Swift-Code DEUTDEHH

Hamburger Sparkasse

Sort Code 200 505 50
Account No. 1085 243 002
IBAN DE87200505501085243002
Swift-Code HASPDEHH

07.11.13 rev. 2



Export and Production
- since 1949 -

Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH • Rudorffweg 10 • 21031 Hamburg, Germany

Prekės aprašymas

=====

Prekė: SuperFrost Mikroskopo skaidres
Prekės nr.: 1041001, 1041003

Medžiaga: papildomas baltas stiklas (natrio kalkių stiklas)

Matavimai: 26 x 76 mm (ISO Norm 8037/I), storis : 1 mm
tolerancija: +/- 0.05mm

| | | | | | |
|---|-------------------|---------|-------------------|--------------------------------|--------|
| Cheminė sudėtis: silicio dioksidas | SiO ₂ | 72,20 % | Magnio oksidas | MgO | 4,30 % |
| (maždaug) natrio oksidas | Na ₂ O | 14,30 % | Aliuminio oksidas | Al ₂ O ₃ | 1,20 % |
| Kalio oksidas | K ₂ O | 1,20 % | Geležies oksidas | Fe ₂ O ₃ | 0,03 % |
| Kalcio oksidas | CaO | 6,40 % | Sieros trioksidas | SO ₃ | 0,30 % |

Apibūdinimas: 1041001: spalvoti, supjaustyti kraštai, be celofano
1041003: spalvos, grunto kraštai 90 °, be celofano

Charakteristikos: Lygus ir nepermatomas paviršius leidžia lengvai rašyti ir pateikia ryškus fonas puikus kontrastas. Rašymo skirtuko paviršius yra atsparus dažniausiai naudojamiems laboratoriniams cheminėms medžiagoms ir tirpikliams, ir apsaugo subraižyti arba klijuoti, kai skaidres yra sukrauti kartu. Yra 7 standartinės spalvos (balta, mėlyna, rožinė, geltona, žalia violetinė, oranžinė). Šios spalvos supaprastina skirtingų preparatų žymėjimą ir kategorizavimą. Žodis "SuperFrost" žymi teisingą pusę, todėl lengva rasti dešinę pusę.

Numatomas naudojimas ir ypač tinka mikroskopinei kraujo, šlapimo ir audinių mėginių analizei.
Informacija:

Paruošta naudoti ir neturėtų būti pakartotinai naudojama (tik vienkartiniam naudojimui)
Atkreipkite dėmesį į žalos galimybę, kai susiduria su skaidres ir imtis atitinkamos saugos priemonės, e. g. dėvėti pirštines
Naudojantis mašinos, iš papildomos naudojimo instrukcijos turėtų būti laikomasi mašinų gamintojo.

Jei naudojate dažiklius ar kitas chemines medžiagas, atkreipkite dėmesį į gamintojo pateiktą saugos patarimą.

supjaustyti kraštai: įprastu mikroskopu.

grunto kraštai: grunto kraštų įtraukimas sumažina gabalų ir infekcijų pavojų laboratorijos darbuotojams.

Tinkamumo laikas: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Dėl stiklo sudėties

šarminės dalys, esant drėgmei, gali pakeisti stiklo paviršius. Net ir esant tinkamoms laikymo sąlygoms termofikacinio stiklo paviršius gali būti natūraliai pakeistas.



Export and Production
- since 1949 -


Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH • Rudorffweg 10 • 21031 Hamburg, Germany

Pakuotė: 50 vnt. / Dėžutė, 5000 vnt. / kartonas

Sandėliavimas - laikyti sausą.
: - išvengti didelių svyravimų vidutinio sunkumo metu saugojimo ir naudojimo metu.
Produktu aušinimas gali sukelti kondensaciją ir sukelti kondensuotą vandenį tarp akinių.
- atkreipkite dėmesį: pirmiausia naudokite senesnes prekes saugykloje!
- apsaugokite kartono dugną nuo drėgmės.
- skaidrės laikymo laikotarpiai: žr. "naudoti prieš" datą.

Klasifikacija: In-vitro diagnostika

Normos: DIN EN 13485, DIN EN 15223, DIN EN 14971, MPG (German Medical product law), MDD 98/79/EC, ISO 8037/1, DIN EN ISO 9001

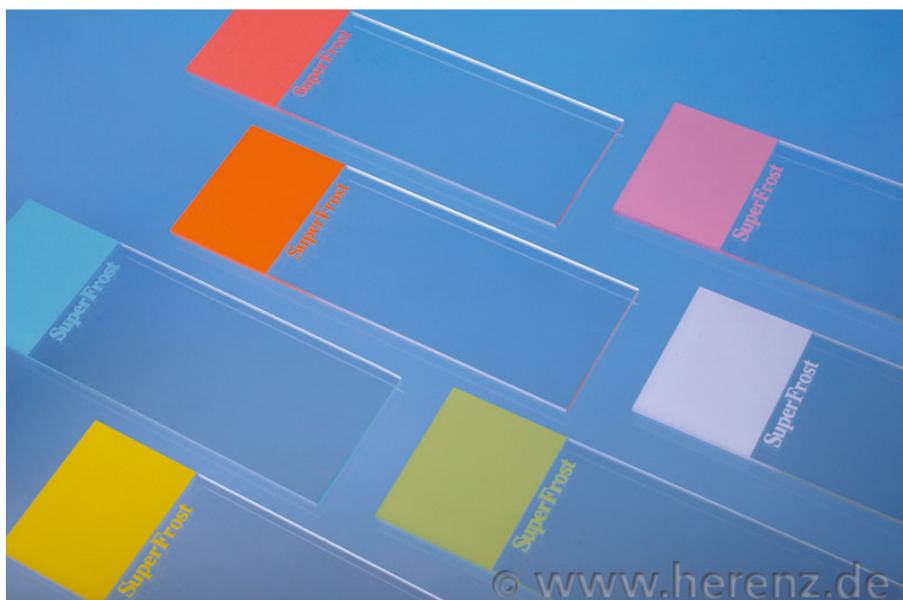

www.herenz.de

Phone +49-040-739-20-40
Fax +49-040-730 41 48
Email hhh@herenz.de
ILN 40 49434 00000 8
Objektraeger-Superfrost-e

Managing Directors

Dieter Cyll, Antje Herenz-Cyll
Comm. Reg. Hamburg HRB 48884
Tax No. 44/729/00248
V.A.T. No. DE 118 665 646

Postbank Hamburg

Sort Code 200 100 20
Account No. 6846 46 200
IBAN DE97200100200684646200
Swift-Code PBNKDEFF
page 2 of 2

Deutsche Bank AG

Sort Code 200 700 00
Account No. 55 00 251
IBAN DE82200700000550025100
Swift-Code DEUTDEHH

Hamburger Sparkasse

Sort Code 200 505 50
Account No. 1085 243 002
IBAN DE87200505501085243002
Swift-Code HASPDEHH

07.11.13 rev. 2