

ENDO STRATUS[®]

Drėkinimo siurblys ir CO₂ insufliatorius | **Procedūra**





VISAS APSAUGOS RATAS

Būdama pasaulinė infekcijų prevencijos lyderė, tik „Cantel“ teikia „Complete Circle of Protection“ – visavertę, iniciatyvią partnerystę, skirtą padėti jums pašalinti riziką, racionalizuoti veiklos efektyvumą ir optimizuoti jūsų sėkmę.


Pažangi CO₂ įpūtimas greitesnėms procedūroms ir geresniems pacientų rezultatams.

Greitesnis paciento atsigavimas*

- Padidėjęs aklųjų žarnų intubacijos greitis¹
- Didesnis plonosios žarnos intubacijos gylis²
- 38 % sumažėjo slaugytojo dėmesys⁴

Didesnis pacientų pasitenkinimas

- Mažiau diskomforto, skausmo ir pilvo pūtimo^{3,4,1}
- Šilto vandens technologija sumažina spazminės gaubtinės žarnos tikimybę
- Greitesnis atkūrimo laikas⁴
- Sumažėjęs dujų išsiplėtimas
- Sugeriamas 150 kartų greičiau nei kambario oras

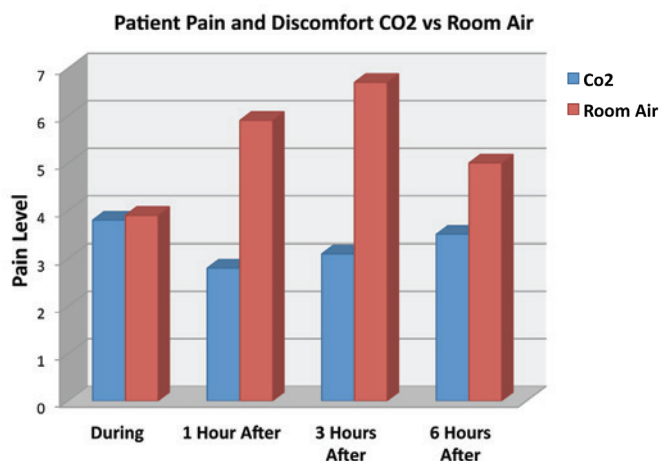

Lengvas mygtuko ON/OFF valdymas

Kintami srautai – mažas, vidutinis ir didelis

Standartinė vyriško luerio išvestis – suderinama su ENDO SMARTCAP™
lęšių valymas ir įpūtimas

Išlaiko sterilus vandens
butelių temperatūrą 37°C

Kaitinamas CO₂ – 37°C



1. Singh, R., Neo, E. ir Nordeen, N. (2012 m. liepos mėn.). Anglies dioksido insufliacija kolonoskopijos metu giliai ramintiems pacientams. World Journal of Gastroenterology, 18(25), 3250-3253.

2. Bretthauer, MD, PhD, M. (2010). Mokslo pavertimas klinikoje praktika – anglies dioksido insufliacija pagerina intubacijos gylį dvigubo baliono enteroskopijoje: atsitiktinių imčių, kontroliuojamas, dvigubai aklas tyrimas.

Endoskopija 2007, 39(1), 1064-1067. doi:10.1055/s-2007-966990

4. Lynch, MBA, BSN, RN, Hayes BSN, RN, CGRN, Buffum DNSC, APRN, CS. (2012). Įpūtimas naudojant CO₂ ir kambario orą kolonoskopijos metu: paciento komforto, atsigavimo laiko ir slaugos išteklių palyginimas [PowerPoint skaidrės]. San Francisco veteranų reikalų medicinos centras.



PROCEDŪRA

Pacientų kryžminio užteršimo rizikos mažinimas yra infekcijų prevencijos priešakyje. „Cantel“ atnaujina infekcijų kontrolės produktus, skirtus pagerinti pacientų rezultatus, kartu didinant procedūrų efektyvumą.

ENDO STRATUS

®

Drėkinimo siurblys ir CO2 insufliatorius | **Procedūra**



ENDO STRATUS®CO2 insufliatorius

Suderinamas su

- ENDO SMARTCAP®Drėkinimo vamzdeliai (veikia su sieniniu šaltiniu arba rezervuarais (C arba E dydžio))
- Visi pagrindiniai GI endoskopai

ENDO STRATUS®Drėkinimo siurblys

Suderinamas su

- ENDOGATOR vamzdeliai ir jungtys
- Visi pagrindiniai GI endoskopai

Siurblyje yra patogus universalus pedalas

Šilto vandens drėkinimas pagerina jūsų matomumą ir pagerina paciento komfortą

Lengvai ir greitai reguliuojamas srauto greitis

Suderinamas su ENDOGATOR vamzdeliais ir jungtimis

Automatinis užpildymo mygtukas suteikia akimirksniu drėkinimą nuspaudus kojos pedalą

Reguliuojamas vandens butelio laikiklis su integruotu vandens šildytuvu



ENDO STRATUS®CO2 insuflatoriaus specifikacija

Modelis		EGA-501E
Matmenys	H	121 mm
	W	197 mm
	D	349 mm
Svoris		4,8 kg
Galia		Max 82W 240V 50-60Hz
CO2		IN: maks. 1900psi, 1/4" OUT: nom 8psi (maks. 12psi) Luer, vyras
Insufacija (CO2)		3 xed nustatymai: 1,4 l/min,
Savybės		Šildomas CO2 37°C ±3 Šildomas vanduo 37°C ±3 Viršslėgis: maks. 12psi



Jungiamas prie aukšto slėgio CO2 buteliui / bakui
Jungiamas prie žemo slėgio CO2 (sieninis lizdas pagal EN15908, B11 CO2)

ENDO STRATUS®Drėkinimo siurblio specifikacija

Modelis		EGA-500E
Matmenys	H	121 mm
	W	197 mm
	D	349 mm
Svoris		4,8 kg
Galia		Max 82W 240VAC 50-60Hz
Srauto normos		Papildomas vandens kanalas: 0-300 ml/ min. Biospy kanalas: 0-650 ml/min.
Savybės		Šildomas vanduo 37°C ±3 20 sekundžių automatinis užpildymas



ENDO STRATUS®Siurblių užsakymo informacija

Dalies numeris	Aprašymas	Vienetai dėžutėje
EGA-500E	ENDO STRATUS drėkinimo siurblys	1
EGA-501E	ENDO STRATUS insuflatorius	1
EGA-7011	3 pėdos bako žarna (aukšto slėgio)	1
EGA-7024	9 Kojos bako žarna (aukštas slėgis)	1
EGA-2071	NIST adapteris	1
EGA-7026	DIN butelio jungtis	1
EGA-7012	PIN indekso jungo butelio jungtis	1

ENDO STRATUS®, ENDO SMARTCAP®ir ENDOGATOR®yra registruotieji Medivators Inc. prekių ženklai.



Cantel (UK) Limited
Batiškumas
Camp Eld Road
Eseksas, S53 9BX
Jungtinė Karalystė
Tel: +44 (0) 1702 291878
Faksas: +44 (0) 1702 290013
www.cantelmedical.co.uk

Medivators BV
Sourethweg 11
6422 PC Heerlen
Nyderlandai
Tel.: +31.45.5.471.471
Faksas: +31 45 5 429 595

Medivators Inc.
14605 28th Avenue North
Minneapolis, MN
55447-4822 JAV
Tel.: +1 763 553 3300
Faksas: +1 763 553 3387

Į VIETĄ
UŽSAKYMAS

Skambinti: 01702 291878
Faksas: 01702 290013
El. paštas: orders@cantelmedical.co.uk