



Ultra HD endoskopinė sistema

Ultra HD Endoscopy System

AQ-300





4K

The Future Of Endoscopy Is Here

Su 4K Disp
patobulintas endo







8.10.

4 CBI režimai

Ant 5LED

AQ-300 siūlo keturis chromoendoskopijos režimus, pasiekiamus įvairiais penkių LED šviesos šaltinių deriniais. Šie režimai suteikia efektyvius, greitus ir tikslius įvairių scenarijų klininių problemų sprendimus.

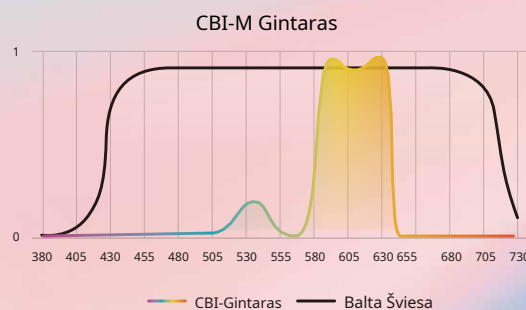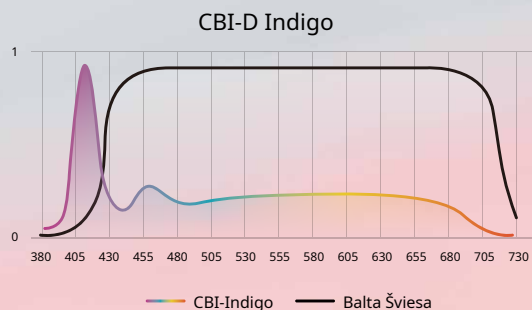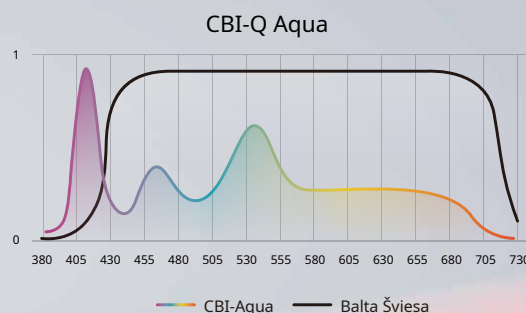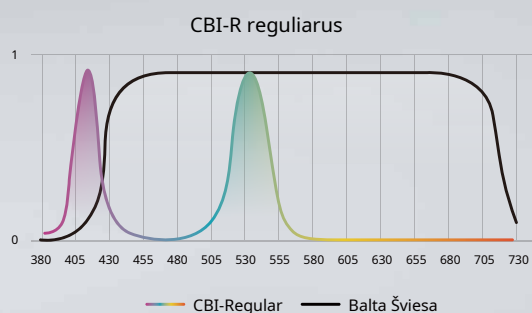



Lazerinė transmisija Ir bevielis


Maitinimo šaltinis

Lazerio perdavimo integravimas užtikrina greitą perdavimą ir pagerina izoliacijos stiprumą bei aukšto dažnio signalų trukdžius, užtikrinant stabilesnį vaizdų perdavimą. Be to, įdiegus belaidžio maitinimo technologiją, pašalinama rizika, kad pacientai gali nutekėti nuo elektros.



Dvigubas vaizdas Ekranas

AQ-300 leidžia rodyti tiek baltą šviesą
ir optinės chromoendoskopijos vaizdai tame
pačiame ekrane, leidžiantys aiškiai vizualizuoti
skirtumai tarp šių dviejų.

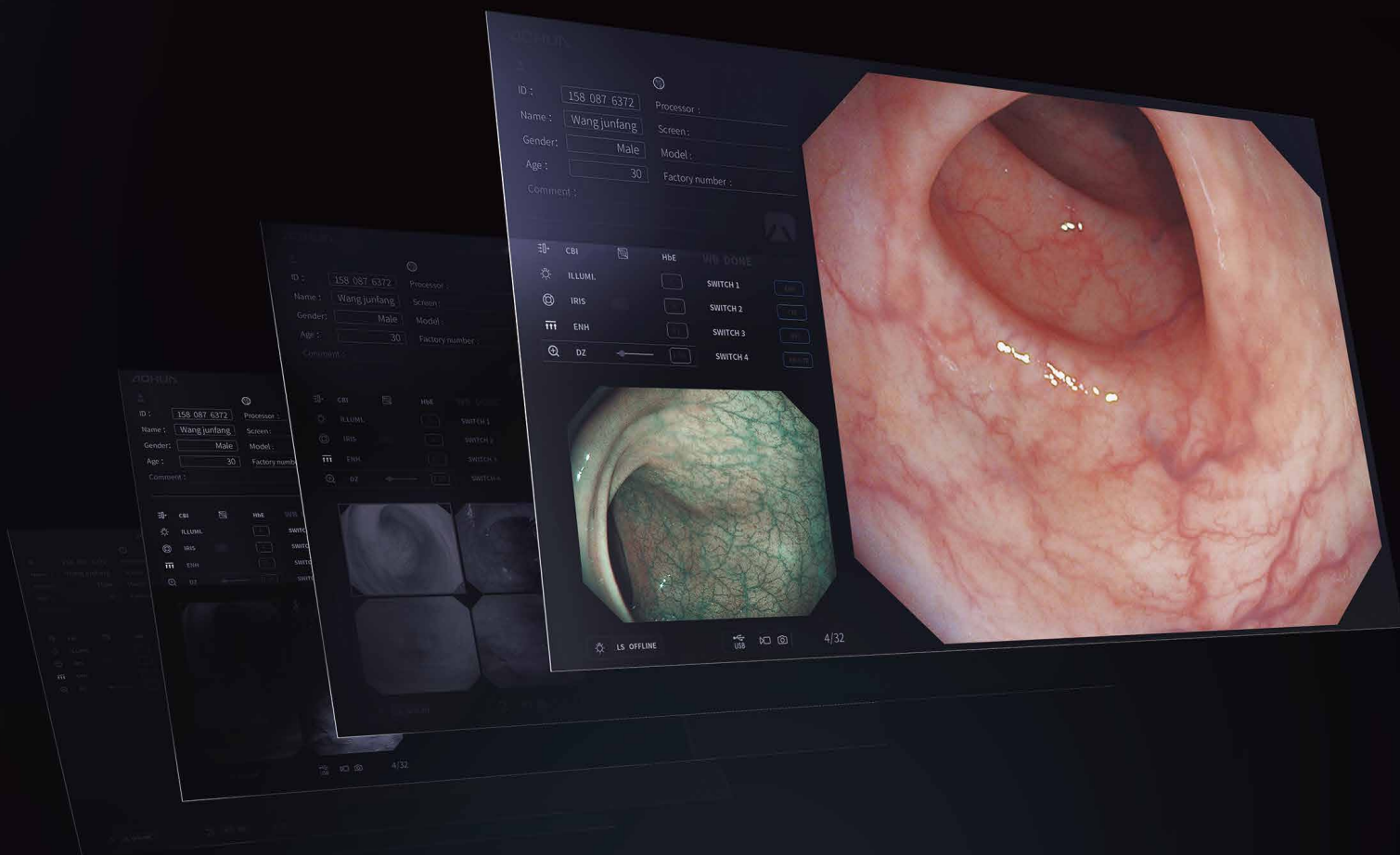

Protingas

Patirkite pažangų išmanųjį AQ-300 veikimo srautą,
kuriame yra keletas naujoviškų funkcijų.

Funkcijos ir savybės

Šviesos šaltinis	5 LED
Chromoendoskopija	CBI Regular / CBI Indigo / CBI Aqua / CBI Amber
Vaizdo tobulinimas	Struktūra / Kraštas / Derinys
Ryškumo reguliavimas	Automatinis / rankinis režimas
Skaitmeninio priartinimo funkcija	1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 kartus
Užšaldymas ir atkūrimas	Sustabdo vaizdą realiuoju laiku ir atkuria.
IRIS	Didžiausias / vidutinis / automatinis
USB atmintinė	Didelės raiškos vaizdai ir vaizdo įrašai gali būti saugomi bet kuriuo metu
Dvigubas vaizdo ekranas	Rodyti ir WLI vaizdą, ir CBI vaizdą

GI endoskopas



5 kartos rankena

Naujai pristatyta rankenos konstrukcija yra lengvesnė, todėl efektyviai sumažėja rankų nuovargis.




Standartinis persiuntimas vandens srove

Visoje virškinimo trakto endoskopų serijoje yra vandens srovės nukreipimo funkcija, kuri padeda išlaikyti aiškų vaizdą diagnozuojant ir gydant.



Instrumentų kanalas

Galima rinktis iš 3,2 mm didelio vidinio kanalo gastroskopo ir 4,2 mm instrumentinio kanalo kolonoskopo.

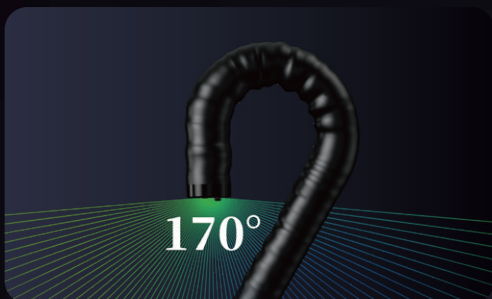

matymo laukas

300 siūlo platesnį matymo lauką, o tai yra visoje kolonoskopijos serijoje.



Šviesos vadovai

endoskopinis antgalis sukurtas su 3 šviesos kreiptuvais, užtikrinančiais ryškesnį ir tolygesnį apšvietimą, ypač tolimojo lauko srityse.

UHD-GT/CL/ED									
	Modelis	Darbas ilgio	Iš viso ilgio	Distalinis galas išorinis skersmuo	Įvedimo vamzdis išorinis skersmuo	Instrumentų kanalas vidinis skersmuo	Gylis lauko	Laukas peržiūros	Kampų diapazonas
Vaizdo įrašas Gastroskopai	* UHD-GT300	1100 mm	1400 mm	9,2 mm	9,2 mm	2,8 mm	2-100 mm	145°	U210°D120°L100° R100°
	* UHD-GT300T	1100 mm	1400 mm	9,8 mm	9,6 mm	3,2 mm	2-100 mm	145°	U210°D120°L100° R100°
	* UHD-GT300Z	1100mm	1400mm	9,9mm	9,6 mm	2,8 mm	1,5-3 mm(Mag) 3-100 mm(Normalus)	95° 145°	U210°D120°L100° R100°
	UHD-GT300XP	1100 mm	1400 mm	5,4 mm	5,8 mm	2,4 mm	2-100 mm	140°	U210°D90°L100° R100°
	UHD-GT300XTP	1100 mm	1400 mm	5,9 mm	6,0 mm	2,8 mm	2-100 mm	140°	U210°D90°L100° R100°
Vaizdo įrašas Kolonoskopai	* UHD-CL300I	1350mm	1650mm	12.2mm	12.0mm	3.8mm	2-100mm	170°	U180°D180°L160° R160°
	* UHD-CL300L	1700mm	2000mm	12.2mm	12.0mm	3.8mm	2-100mm	170°	U180°D180°L160° R160°
	* UHD-CL300TI	1350mm	1650mm	12.2mm	12.0mm	4.2mm	2-100mm	170°	U180°D180°L160° R160°
	* UHD-CL300TL	1700mm	2000mm	12.2mm	12.0mm	4.2mm	2-100mm	170°	U180°D180°L160° R160°
	* UHD-CL300ZI	1350 mm	1650mm	12,8 mm	12,0 mm	3,8 mm	2-3,5 mm(Mag) 3-100 mm(Normalus)	90° 170°	U180°D180°L160° R160°
	* UHD-CL300ZL	1700 mm	2000 mm	12,8 mm	12,0 mm	3,8 mm	2-3,5 mm(Mag) 3-100 mm(Normalus)	90° 170°	U180°D180°L160° R160°
	* UHD-CL300PI	1350mm	1650mm	9,8mm	9,8 mm	3,2 mm	2-100 mm	170°	U210°D180°L160° R160°
	* UHD-CL300PL	1700mm	2000mm	9,8mm	9,8 mm	3,2 mm	2-100 mm	170°	U210°D180°L160° R160°
	* UHD-CL300TPI	1350mm	1650mm	10.2mm	10.5mm	3.8mm	2-100mm	170°	U210°D180°L160° R160°
	* UHD-CL300TPL	1700 mm	2000 mm	10,2 mm	10,5 mm	3,8 mm	2- 100 mm	170°	U210°D180°L160° R160°
Vaizdo įrašas Duodenoskopas	UHD-ED300V	1250mm	1530mm	13,5mm	11,2 mm	4,2mm	4-60 mm	100°	U120°D90°L90° R110°


*: vandens srovės nukreipimas
Didinimas: didinimo režimas

Bronchoskopas



Itin didelis instrumentų kanalas

3,2 mm instrumento kanalas su 5,8 mm vamzdeliu (VBC-T300H)

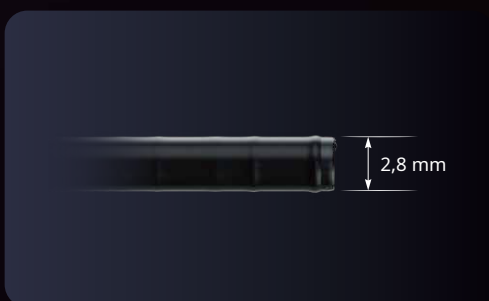

Itin plonas įterpimo vamzdelis

2,8 mm distalinis galas su 1,2 prietaisų kanalu (VBC-XQ300)



Sukimas į kairę/dešinę

Valdymo žiedas leidžia įvesties vamzdelį pasukti į kairę ir dešinę 120° abiem kryptimis.



210° sukimasis aukštyn

Visos VBC-300 serijos palaiko sukimąsi 210° aukštyn, kad būtų lengviau pasiekti bronchus.



Kampavimo užraktas

Užrakinimo mygtukas ant rankenos leidžia užfiksuoti distalinį galiuką kampuotoje padėtyje.

VBC-300 serijos vaizdo bronchoskopas

Modelis	Darbas ilgio	Iš viso ilgio	Distalinis galas išorinis skersmuo	Įdėjimas vamzdžio skersmuo	Instrumentų kanalas vidinis skersmuo	Gylis lauke	Laukas peržūrėti	Kampavimas diapazonas	Kairė/dešinė sukimasis
VBC-QX300	600 mm	870 mm	2,8 mm	2,8 mm	1,2 mm	2-100 mm	120°	U210° D130°	L120° R120°
VBC-N300	600 mm	870 mm	3,8 mm	3,8 mm	2,2 mm	2-100 mm	120°	U210° D130°	L120° R120°
VBC-T300	600 mm	870 mm	4,9 mm	4,9 mm	3,0 mm	2-100 mm	120°	U210° D130°	L120° R120°
VBC-N300H*	600 mm	870 mm	4,9 mm	4,9 mm	2,2 mm	2-100 mm	120°	U210° D130°	L120° R120°
VBC-T300H*	600 mm	870 mm	5,8 mm	6,1 mm	3,2 mm	2-100 mm	120°	U210° D130°	L120° R120°


* palaiko HDTV vaizdą

Laryn




Itin didelis instrumentų kanalas

2,2 mm prietaiso kanalas su 4,9 mm įterpimo vamzdeliu (VRL-N300H)

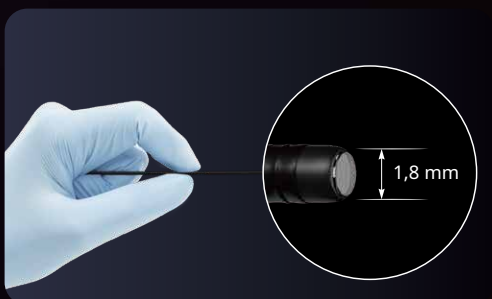

tra Plonas įterpimo vamzdelis

L-X300 su 1,8 mm distaliniu galu užtikrina puikų erimą.

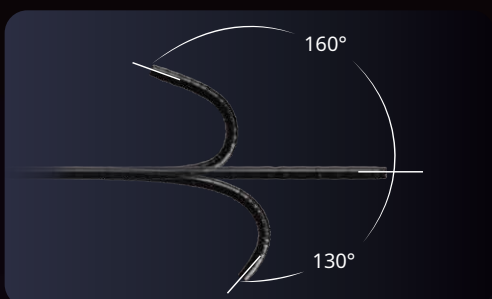

Didelis kampavimas

Visos VRL-300 serijos palaiko 160° kampą aukštyn ir 130° žemyn, kad būtų lengviau stebėti platesnį matymo lauką.



Visiškai atsparus vandeniui

Visiškai vandeniui atsparus dangtelis padarys valymo procesą efektyvesnį.



Rankena

ndle optimizuotas naudojant daugiau endoskopas yra sudėtingesnis

VRL-X300	300 mm	570 mm	1,8 mm	1,9 mm	/	2-100 mm	120°	U160°D130
VRL-XQ300H*	300 mm	570 mm	2,8 mm	2,8 mm	/	2-100 mm	120°	U160°D130°
VRL-N300H*	380 mm	650 mm	4,9 mm	4,9 mm	2,2 mm	2-100 mm	120°	U160°D130°

*palaiko HDTV vaizdą



 **+49 (0) 8104-8908-0**

Pagrindinė būstinė Europoje (Aohua filialas) WISAP
Medical Technology GmbH
Fichtenstrasse 27
85649 Brunnthal-Hofolding El.
paštas: Info@aohua.eu

www.Aohua.eu

Išsamią informaciją apie kontraindikacijas ar atsargumo priemones rasite vadove.

v3.1_2409_EU