


Techninis aprašymas
Dienos priemonių rinkinys WIS

Kodas: 24A1G20001

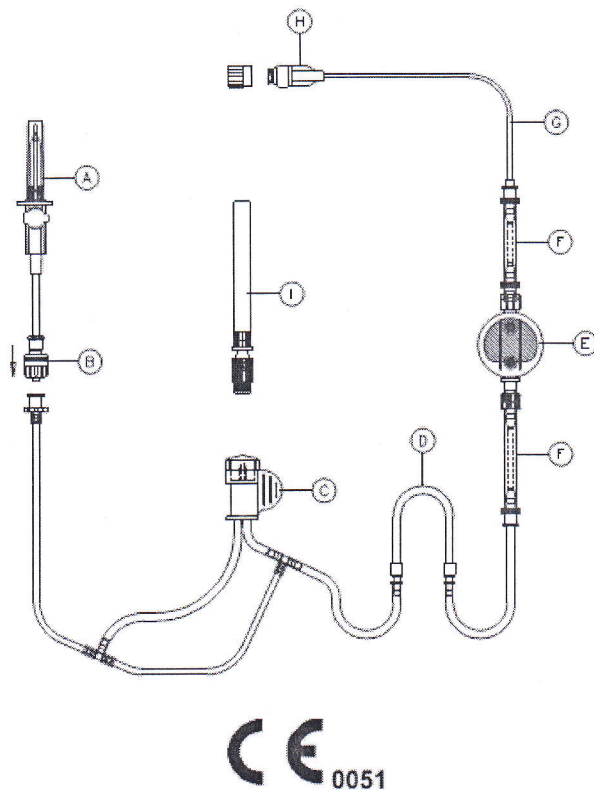

1.1 Paskirtis:


Tirpalų ir radioaktyviųjų preparatų pacientui administravimo rinkinys. Maksimalus darbinis slėgis 3 bar = 40 psi. Tinka naudoti su WIS įranga.

1.2 Aprašymas

Rinkinys susideda iš :

- A. Adata su oro ventiliacija prijungimui prie natrio chlorido tirpalo
- B. Vienos krypties vožtuvas
- C. Dviguba adata prijungimui švirkšto su radiofarmaciniu preparatu
- D. Peristaltinis vamzdis iš termoplastinio elastomero
- E. Oro šalinimo filtras, turinti šias charakteristikas: 0,2 µm filtras polietersulfono membrana; Efektyvus filtravimo plotas = 4,5 cm²; Minimalus vandens burbulo taškas = 3,1 bar (45 psi); Varčia: 0,02 µm palaikanti PTFE. Gruntavimo tūris 0,7 mL.
- F. Vamzdis su saugumo davikliais
- G. Pratęsimo spiralinis vamzdis
- H. Nuvalomas kempine vožtuvas paciento rinkiniui prijungti

Exclusive Distributor:

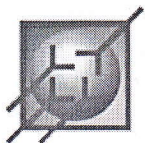

COMECER S.p.A.
via Maestri del Lavoro, 90
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
phone +39 0546 656375
fax +39 0546 656353
e-mail: comecer@comecer.com
<http://www.comecer.com>

I. Praduriamas dangtelis dvigubai adatai

Medžiagos: polietilenas, polipropilenas, ABS, PVC, PVC DEHP FREE, polisulfonas, poliuretanai, PC, silikonas, ESP, PTFE, nerūdijantis plienas, polisoprenas. **Prietaise nėra latekso.**

VADOVAUKITĖS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOMIS

1.3 Pakuotė:

Prietaisas yra supakuotas į maišelį iš farmacinio popieriaus ir plėvelės, tinka ETO sterilizacijai. 50 vnt. dėžėje. Preparatas yra sterilus ir neturi pirogenų.

1.4 Sterilizavimas

Sterilizacija atskirai atliekama per ETO ekspoziciją. Apdorojimas yra patvirtintas pagal normas ISO 11135. Sterilumas turi 5 metų garantiją. Produktas negali būti antrą kartą sterilizuotas.

Vertimas tikras

Generalinė direktorė
Zinaida Tamaševičienė



1.5 Kokybės kontrolė:

Su kiekvienu komponentu yra atliekami matmenų ir vizualiniai bandymai dėl atitikimo standartų reikalavimams, pagal vidaus kokybės procedūras: vizualinis bandymas, matmenų bandymas, sandarumo bandymas, klijavimo sandarinimo bandymas ir suvirinimo sandarinimo bandymas, pagal vidaus kokybės procedūras (IO01: klijavimas naudojant tirpiklį; IO02 atskiras pakavimas; IC02: vizualinis ir matmenų testas; IC03: oro sandarumo bandymas; IC01: šveitimo bandymas). Sandarinimo bandymai atliekami su bandymo mašina esant 1 bar slėgiui. Toks bandymas yra atliekamas prijungiant prietaisą prie bandymų mašinos ir uždariant su dangteliais išėjimus. Prietaisas atitinka reikalavimus jei per 10 sekundžių slėgis nenukrenta daugiau nei 5 mmHg. Užbaigti prietaisai tik išleisti sterilizatoriaus yra bandomi pakavimo sandarumui po sterilizavimo poveikio. Prieš tai minėtiems bandymams mėginių ėmimo planai atitinka normas UNI ISO 2859-1. Su steriliai užbaigtais prietaisais yra atliekami sterilumo bandymai, pirogenų bandymas, cheminių medžiagų toksiškumo bandymas pagal monografiją E.P. IV laida ir ISO 10993-7 ir suderinamumo bandymas pagal ISO 10993.

1.6 Gamyba ir atitiktis:

Prietaisas yra pagamintas pagal GMP, be to BTC Medical Europe įkūrė ir veikia pagal kokybės sistemą, atitinkančią standartų UNI EN ISO 9001 / ISO 13485 reikalavimus. Prietaisas atitinka esminius Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus dėl Medicinos Prietaisų. Komponentai atitinka ISO 594/1-2, F.U. e F.Eu. dabartinio leidimo reikalavimus.

1.7 Klasifikacija:

Klasės IIa medicininis prietaisas, pažymėtas CE ženklu pagal Direktyvą 93/42/EEC, dabartiniai leidimai ir integracijos susijusios su Medicinos prietaisais.

1.8 Atliekų tvarkymas:

Vartotojai turi taikytis galiojančių normų, reguliuojančių ligoninės atliekų šalinimą.

1.9 Laikymo sąlygos:

Įprasta saugojimo procedūra, saugoti nuo drėgmės ir laikyti atokiau nuo šviesos ar šilumos šaltinių.

1.10 Stabilumas:

Medicinos prietaisas, jei teisingai naudojamas ir saugojamas, išlaiko nuosavas chemines – biologines ir fizines savybes visą naudojimo laiką. Galiojimas yra parašytas ant kiekvienos atskiros pakuotės. Galiojimo terminas baigiasi po 5 metų nuo pagaminimo.

Vertimas tikras

Generalinė direktorė
Zinaida Tamasevičė

