

Pažangi hemostazės kontrolė virškinamojo trakto endoskopijai

SPECIFIKACIJOS

Pavadinimas	Kodas	Specifikacija	Pakuotė
EndoClot PHS	EPK2302	2g AMP, 2300 mm kateteris	1 rink./dež.
EndoClot PHS	EPK2303	3g AMP, 2300 mm kateteris	1 rink./dež.
EndoClot Kateteris	EPAA230	2300 mm	5 vnt./dež.
EndoClot Oro kompresorius	EPAC-1	H: 18+-3kPa, L: 12+-3kPa	1 rink./dež.
EndoClot Oro kompresoriaus jungiamasis vamzdis	EPAC-1T		10 vnt./dež.




5201 Great America Parkway | Suite 526 | Santa Clara | CA 95054 JAV
Phone: +1 (408) 980-9125 | Fax: +1 (408) 980-9237
info@endoclot.com | www.endoclot.com

CE 1023

©2016 EndoClot Plus, Inc. All rights reserved.
EndoClot® is a registered trademark of EndoClot Plus, Inc.
Patent No. US 8,721,582 B2, and US 9,205,207 B2

EndoClot polisacharidinė hemostazės sistema

EndoClot PHS sudaro absorbuojami modifikuoti polimerai (AMP) ir miltelių įvedimo sistema. Jis skirtas naudoti kaip adjunktyvus hemostatas kontroliuoti kraujavimą iš kapiliarų, venų ir arterijų viršutiniame ir apatiniame virškinamajame trakte.

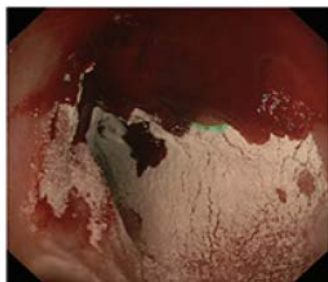

Milteliai

AMP dalelės yra biologiškai suderinamos, ne pirogeninės ir gaunamos iš krakmolo. AMP dalelėse nėra žmonių ar gyvūnų komponentų.

- Greita hemostazė
- Lipnūs
- Itin hidrofiliški
- Greitai degraduojantys



Aplikatorius

Aplikatorius sudarytas iš miltelių/dujų maišymo kameros, įvedimo kateterio ir jungiamojo vamzdžio kartu su oro filtru išoriniam oro šaltiniui.

- Lengvai valdomas
- Anti-refliukso konstrukcija, apsauganti nuo okliuzijos
- Efektyvus sunkiai pasiekiamose vietose




Oro kompresorius

EndoClot oro kompresorius yra rekomenduojamas išorinis oro šaltinis miltelių įvedimo sistemai.

- Du slėgio nustatymai didesnei miltelių įvedimo kontrolei.
- Mažas ir lengvas.

Hemostazės sprendimai viršutiniame ir apatiniame virškinamajame trakte

Endoclot PHS yra efektyvus ir saugus būdas kontroliuoti kraujavimą virškinamajame trakte. Ypač efektyvus didelioms ir kraujuojančioms žaizdoms. Taip pat, leidžia endoskopuotojui kontroliuoti kraujavimą tada, kai įprastų hemostazės technikų neįmanoma panaudoti. EndoClot gali būti panaudotas kraujavimo prevencijai po endoskopijos.

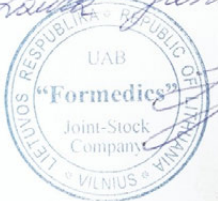Vertinimas Tisingas
Laura Janušienė

2018.06.01