




## „Quartet™“ modelis 1458Q

Keturių polių, S formos fiksuojamasis, steroidus išskiriantis, endokardinis kairiojo širdies skilvelio elektrodas

Nominaliosios specifikacijos	
<b>Ilgis</b>	75, 86, 92 cm
<b>Jungties dydis</b>	IS4-LLLL
<b>Maksimalus elektrodo korpuso dydis</b>	5,1 prancūziško dydžio arba mažesnis
<b>SJM kairiojo skilvelio elektrodo stūmimo sistema (rekomenduojamas minimumas)</b>	5 prancūziško dydžio spindžio vidinis skersmuo
<b>Fiksavimo mechanizmas</b>	Pasyvus (S formos, mažiausiai 16 mm nuo linkio iki linkio)
<b>Elektrodo sandara</b>	
Elektrodo galas	Dengtas Pt/Ir, TiN, žiedo formos, dviejų griovelių, steroidus išskiriantis per skyles, esančias galiuke ir proksimalinėje griovelių angoje
Žiedinis elektrodas	Pt/Ir, TiN danga
<b>Elektrodo paviršiaus plotas</b>	
Galiukas	4,9 mm <sup>2</sup>
Žiedai	7,35 mm <sup>2</sup>
<b>Atstumas tarp elektrodo kontaktų</b>	
Nuo distalinio galiuko 1 iki vidurinio 2	20 mm
Nuo distalinio galiuko 1 iki vidurinio 3	30 mm
Nuo distalinio galiuko 1 iki proksimalinio 4	47 mm
<b>Medžiagos</b>	
Laidininkai	
Distalinis (ritė)	MP35N LT <sup>1</sup>
Proksimalinis (kabelis)	ETFE, MP35N LT <sup>1</sup>
Jungtis	MP35N
Elektrodo korpusas	„Optim™“ su išorine „Fast-Pass™“ danga
Galiuko ir žiediniai elektrodai	Platinos ir iridžio lydinys, dengtas titano nitridu
Steroidus išskiriantis kaištis	Silikono guma, kurioje yra mažiau kaip 1,0 mg deksametazono natrio fosfato

1. MP35N LT yra „SPS Technologies“ prekės ženklas.

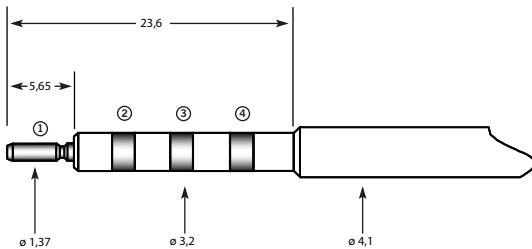

1. Distalinis galiukas
2. Vidurinis 2
3. Vidurinis 3
4. Proksimalinis 4

**1 pav. Nominalūs IS4-LLLL elektrodo jungties matmenys (mm)**

Priedai <sup>1</sup>
IS4 plovimo / įpylimo įrankis
Elektrodo dangtelis
Zondo rinkinys
Venos kėliklis
Fiksavimo įvorė <sup>2</sup>

1. Norėdami gauti daugiau informacijos apie elektrodo priedus, kreipkitės į „St. Jude Medical“ atstovą.
2. DSA0006 modelio „St. Jude Medical™“ siūlės mova yra naudojama su visais „St. Jude Medical“ 4,3–4,7 F elektrodoais.

**Zondo spalvinis kodas**

Galvutės spalva	Aprašymas	Skersmuo
Žalias	Minkštas tiesus (15 cm mandrenas)	0,014 colio / 0,36 mm
Geltonas	Kietas tiesus (15 cm mandrenas)	0,014 colio / 0,36 mm
Raudona	Ypač kietas tiesus (15 cm mandrenas)	0,014 colio / 0,36 mm

Indikacijos, kontraindikacijos, išpėjimai ir atsargumo priemonės nurodytos atitinkamoje naudojimo instrukcijoje.



February 2011  
Art 50039729/A