

MEDLANCE[®] plus

Safety Lancets

Product features

Comfort
MAX

CE 0344

- **Safe:** single use, self-destructing. No possibility of reuse.
- **Simple:** intuitive 2 step operation. Blood sampling simpler than ever before.
- **Sterile:** needles are sterilized with Gamma irradiation.



- **Gentle:** ultra sharp needles, ideally positioned during skin penetration.
- **Tailored:** available in 5 different versions to meet specific blood sample needs and address the variety of patients' skin types.
- **Efficient:** a "technique-independent" design provides an adequate blood flow.



BOX

100ct 200ct 50ct 25ct 12ct

MEDLANCE[®] *plus*

Medlance[®] *plus SuperLite*

30G
Needle Tip

1.2 mm

Cat. No. 7241, Sales Box 200ct
Cat. No. 7242, Sales Box 100ct
Cat. No. 7286, Sales Box 50ct
Cat. No. 7276, Sales Box 25ct
Cat. No. 7053, Sales Box 12ct



**Comfort
MAX**

Collecting blood has never been so simple! Specially designed 30G needle tip provides higher patient's comfort without compromising usability.

Medlance[®] *plus Lite*

25G
Needle

1.5 mm

Cat. No. 7043, Sales Box 200ct
Cat. No. 7243, Sales Box 100ct
Cat. No. 7287, Sales Box 50ct
Cat. No. 7277, Sales Box 25ct
Cat. No. 7057, Sales Box 12ct



Ideal for blood glucose monitoring purposes.

Medlance[®] *plus Universal*

21G
Needle

Penetration Depth
1.8 mm

Cat. No. 7044, Sales Box 200ct
Cat. No. 7244, Sales Box 100ct
Cat. No. 7288, Sales Box 50ct
Cat. No. 7278, Sales Box 25ct
Cat. No. 7058, Sales Box 12ct



Whenever you need larger blood samples for testing glucose, hemoglobin, cholesterol, blood type studies, coagulation, blood gas and many others.

Medlance[®] *plus Extra*

21G
Needle

Penetration Depth
2.4 mm

Cat. No. 7045, Sales Box 200ct
Cat. No. 7245, Sales Box 100ct
Cat. No. 7289, Sales Box 50ct
Cat. No. 7279, Sales Box 25ct
Cat. No. 7059, Sales Box 12ct



Patient's skin is tough? More blood is needed? Reach for Medlance[®] plus Extra and collect larger blood sample also from men and physical workers.

Medlance[®] *plus Special*

0.8mm
Blade

Penetration Depth
2 mm


Cat. No. 7046, Sales Box 200ct
Cat. No. 7246, Sales Box 100ct
Cat. No. 7285, Sales Box 50ct
Cat. No. 7280, Sales Box 25ct
Cat. No. 7771, Sales Box 12ct



Medlance[®] plus Special is perfect for tests requiring larger blood samples. Ultra-sharp blade provides adequate blood volume.

Instructions for use

1. Twist

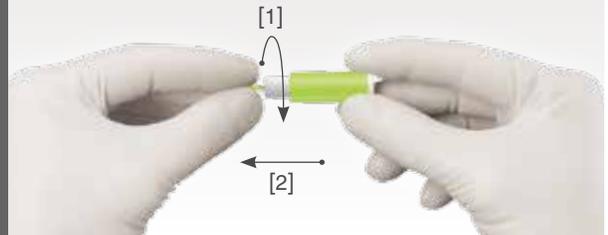

Twist off protective cap and then pull it straight out.

2. Press



Press the Medlance[®] plus body firmly against the puncture site to activate the device. Dispose of used lancets in an approved sharps container.

3. Collect



Gently apply intermittent pressure near the puncture site to obtain the required blood volume.

HTL STREFA
high tech lab

Distributed in the US by:
HTL-STREFA, Inc.

3005 Chastain Meadows Pkwy, Suite 300,
Marietta, GA 30066, USA
T: +1 770 528 0410, F: +1 770 528 0411

info@htl-strefa.com • www.htl-strefa.com

Manufactured by:
HTL-STREFA S.A.

Adamówek 7,
95-035 Ozorków, Poland
T: +48 22 587 05 72, F: +48 22 811 05 36
info@htl-strefa.pl • www.htl-strefa.pl

MEDLANCE[®] plus

Saugos Lancetai

Prekės savybės

Comfort
MAX

CE 0344

● **Saugus:** vienkartinis, nėra galimybės pakartotinio naudojimo.

● **Paprastas:** intuityvus dviejų žingsnių veiksmas. Kraujo mėginių ėmimas yra paprastesnis nei, bet kada anksčiau.

● **Sterilūs:** adatos sterilizuojamos gama spinduliuotė.



● **Švelnus:** itin ryškios adatos, idealiai tinka odos įsiskverbimui.

● **Specialiai pritaikytos:** prieinama 5 skirtingomis versijomis, kad atitektų konkrečius kraujo mėginių poreikius ir sprendžia pacientų odos tipų įvairovę.

● **Efektyvus:** "techniškai nepriklausomas" dizainas užtikrina pakankamą kraujo srautą.



BOX

100ct 200ct 50ct 25ct 12ct



MEDLANCE[®] plus

Medlance[®] plus SuperLite

30G
Needle Tip

1.2 mm

Cat. No. 7241, Sales Box 200ct
Cat. No. 7242, Sales Box 100ct
Cat. No. 7286, Sales Box 50ct
Cat. No. 7276, Sales Box 25ct
Cat. No. 7053, Sales Box 12ct



Comfort
MAX

Kraujo surinkimas dar niekada nebuvo toks paprastas! Specialiai sukurtas 30 g adatos antgalis užtikrina didesnį paciento patogumą, nekenkdamas naudojimui.

Medlance[®] plus Lite

25G
Needle

1.5 mm

Cat. No. 7043, Sales Box 200ct
Cat. No. 7243, Sales Box 100ct
Cat. No. 7287, Sales Box 50ct
Cat. No. 7277, Sales Box 25ct
Cat. No. 7057, Sales Box 12ct



Idealiai tinka gliukozės kiekiui kraujyje stebėsenos tikslais.

Medlance[®] plus Universal

21G
Needle

Penetration Depth
1.8 mm

Cat. No. 7044, Sales Box 200ct
Cat. No. 7244, Sales Box 100ct
Cat. No. 7288, Sales Box 50ct
Cat. No. 7278, Sales Box 25ct
Cat. No. 7058, Sales Box 12ct



Whenever you need larger blood samples for testing glucose, hemoglobin, cholesterol, blood type studies, coagulation, blood gas and many others.

Medlance[®] plus Extra

21G
Needle

Penetration Depth
2.4 mm

Cat. No. 7045, Sales Box 200ct
Cat. No. 7245, Sales Box 100ct
Cat. No. 7289, Sales Box 50ct
Cat. No. 7279, Sales Box 25ct
Cat. No. 7059, Sales Box 12ct



Paciento oda yra kieta? Reikia daugiau kraujo? Pasiekite "Medlance[®] plus Extra" ir surinkite didesnių kraujo mėginių, taip pat iš vyrų ir fizinių darbuotojų.

Medlance[®] plus Special

0.8mm
Blade

Penetration Depth
2 mm


Cat. No. 7046, Sales Box 200ct
Cat. No. 7246, Sales Box 100ct
Cat. No. 7285, Sales Box 50ct
Cat. No. 7280, Sales Box 25ct
Cat. No. 7771, Sales Box 12ct



Medlance[®] plus Special yra tinkama testams, kuriems reikalingi didesni kraujo mėginiai. Ypač aštrus ašmenys užtikrina pakankamą kraujo tūrį.

Naudojimo instrukcijos

1. Atsukite

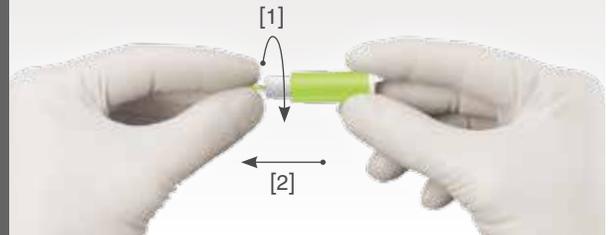

Atsukite apsauginį dangtelį ir ištraukite jį tiesiai.

2. Paspauskite



Paspauskite "Medlanceplus" kūno skydą, kad įjungtumėte įrenginį. Naudotus lankstus išmeskite į patvirtintą antspaudų talpyklą.

3. Surinkite



Norint gauti reikiamą kraujo kiekį, atsargiai taikykite tarpinio slėgio ties punkcijos vieta.

HTL STREFA
high tech lab

Distributeris JAV:
HTL-STREFA, Inc.
3005 Chastain Meadows Pkwy, Suite 300,
Marietta, GA 30066, USA
T: +1 770 528 0410, F: +1 770 528 0411
info@htl-strefa.com • www.htl-strefa.com

Gamintojas:
HTL-STREFA S.A.
Adamówiek 7,
95-035 Ozorków, Poland
T: +48 22 587 05 72, F: +48 22 811 05 36
info@htl-strefa.pl • www.htl-strefa.pl