

<http://www.smith-nephew.com/professional/products/advanced-wound-management/allevyn/allevyn-gentle-border-lite1/>

103. 1.

Allevyn Gentle Border Lite



Like all ALLEVYN Dressings, ALLEVYN Gentle Border Lite has at its heart a unique three-layer technology that effectively manages exudate, helping to ensure that the wound is kept at optimum moisture levels to maintain a moist wound environment.³

The dressing consists of an absorbent³ hydrocellular foam pad, held between a perforated wound contact layer which is coated with a soft silicone gel adhesive and a highly permeable outer top film.⁷

ALLEVYN Gentle Border Lite Dressings achieve their benefits of easy application and removal, and the ability to reposition through an adhesive technology based on a soft silicone gel.^{1,5}

On application, the silicone gel adhesive on ALLEVYN Gentle Border Lite Dressings flows into the crevices of the skin, allowing more points of contact to stay in place.

On removal, the silicone gel adhesive stretches and flows out of the crevices of the skin, minimizing the risk of trauma to the wound and pain to the patient.

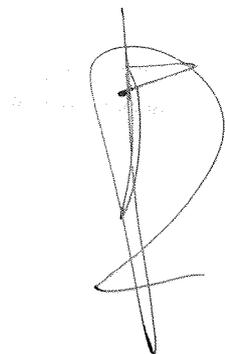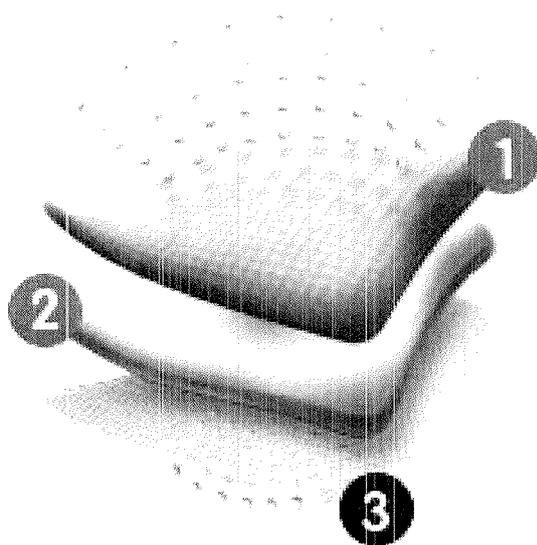

<http://www.smith-nephew.com/professional/products/advanced-wound-management/allevyn/allevyn-gentle-border-lite1/>

103. 1.



Allevyn Gentle Border Lite

Kaip ir visų „ALLEVYN“ tvarščių, „ALLEVYN Gentle Border Lite“ šerdyje yra unikali trijų sluoksnių technologija, kuri efektyviai valdo eksudatą ir padeda užtikrinti optimalią drėgną žaizdos aplinką. Tvarstis susideda iš absorbuojančio hidroceliulinio putplasčio sluoksnio, perforuoto žaizdos kontaktinio sluoksnio, padengto minkštu silikono geliu, ir labai pralaidžios išorinės viršutinės plėvelės.⁷

„ALLEVYN Gentle Border Lite“ tvarščius paprasta naudoti bei lengva pakeisti ir minkšto silikono gelio technologija suteikia galimybę perklijuoti.^{1,5}

Uždedant ALLEVYN Gentle Border Lite tvarstį silikoniniai geliniai klėjai užpildo odos plyšius, tokiu būdu užtikrindami geresnį tvarščio sąlyti su oda, kad išliktų vietoje.

Dėka silikoninio kontaktinio sluoksnio, keičiant tvarstį, jis nuimamas be skausmo, netraumuojant žaizdos.

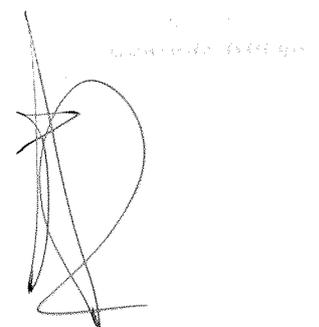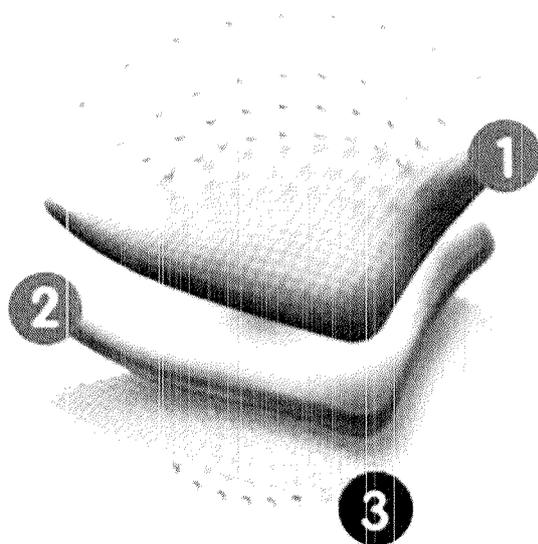


103.2.

ALLEVYN[◇] LIFE

The comprehensive wound care solution

97% of clinicians rated ALLEVYN LIFE Foam Dressing as better for overall performance compared to previous dressings ⁽¹⁾⁽²⁾

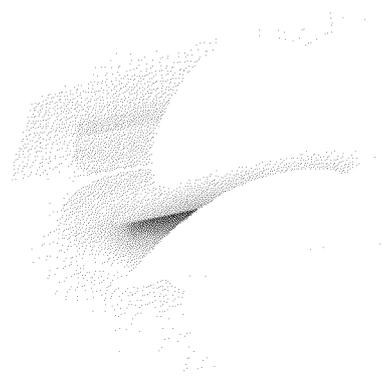

Superior exudate management** with a five-layer design to help prevent leakage ^(ROB12)

Happier budget


- Enhanced wear time ensures it lasts 2x longer than other dressings ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾
- Change indicator makes increasing the time between dressing changes easy ⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾
- Clinicians reported that the complexity and number of different dressing products decreased ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾

Healthier patients

- Hyper-absorbent lock-away core alleviates the fear of dressing leakage and provides odour control (*in-vitro*) patients can depend on ⁽¹¹⁾⁽¹²⁾
- Unique quadrilobe shape with wide border securely fits the contours of the body, reassuring patients that the dressing will stay in place ⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾

ALLEVYN[◇] LIFE Non-Bordered


A 5 layer conformable shape ⁽¹⁵⁾ that is cuttable ⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾ and can be used to dress a variety of wounds

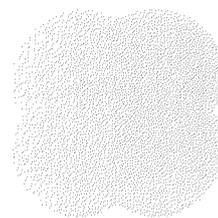

- With its perforated silicone wound contact layer it's well suited to patients with fragile skin ⁽¹⁸⁾⁽¹⁹⁾⁽²⁰⁾
- It's also suitable for use under compression therapy ⁽²¹⁾



97% of clinicians rated ALLEVYN LIFE as easier to use ⁽²²⁾

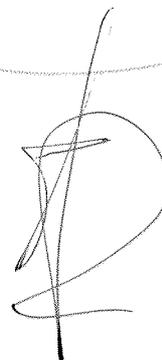

Woundcare
Solutions

Ordering information

66801067	ALLEVYN LIFE	ALLEVYN LIFE, 10,3 x 10,3 cm, 10 Stück	10,3 cm x 10,3 cm	9634019	10 Stück
66801068	ALLEVYN LIFE	ALLEVYN LIFE, 12,9 x 12,9 cm, 10 Stück	12,9 cm x 12,9 cm	9634031	10 Stück
66801069	ALLEVYN LIFE	ALLEVYN LIFE, 15,4 x 15,4 cm, 10 Stück	15,4 cm x 15,4 cm	9634048	10 Stück
66801070	ALLEVYN LIFE	ALLEVYN LIFE, 21,0 x 21,0 cm, 10 Stück	21,0 cm x 21,0 cm	9634060	10 Stück
66801304	ALLEVYN LIFE Heel	ALLEVYN LIFE Heel, 25,0 x 25,2 cm, 5 Stück	25,0 cm x 25,2 cm	7116438	5 Stück
66801248	ALLEVYN LIFE Non-Bordered	ALLEVYN LIFE Non-Bordered, 10,5 x 10,5 cm, 12 Stück	10,5 cm x 10,5 cm	13880037	12 Stück
66801751	ALLEVYN LIFE Non-Bordered	ALLEVYN LIFE Non-Bordered, 10,0 x 20,0 cm, 12 Stück	10,0 cm x 20,0 cm	13880066	12 Stück
66801749	ALLEVYN LIFE Non-Bordered	ALLEVYN LIFE Non-Bordered, 16,0 x 16,0 cm, 12 Stück	16,0 cm x 16,0 cm	13880043	12 Stück
66801252	ALLEVYN LIFE Non-Bordered	ALLEVYN LIFE Non-Bordered, 20,0 x 50,0 cm, 3 Stück	20,0 cm x 50,0 cm	13880161	3 Stück
66801750	ALLEVYN LIFE Non-Bordered	ALLEVYN LIFE Non-Bordered, 21,0 x 21,0 cm, 12 Stück	21,0 cm x 21,0 cm	13880155	12 Stück
66801747	ALLEVYN LIFE Non-Bordered	ALLEVYN LIFE Non-Bordered, 5,5 x 5,5 cm, 12 Stück	5,5 cm x 5,5 cm	13880020	12 Stück
66801306	ALLEVYN LIFE Sacrum	ALLEVYN LIFE Sacrum, 12,2 x 12,5 cm, 10 Stück	12,2 cm x 12,5 cm	2495000	10 Stück
66801307	ALLEVYN LIFE Sacrum	ALLEVYN LIFE Sacrum, 21,6 x 23,0 cm, 10 Stück	21,6 cm x 23,0 cm	2495129	10 Stück

Advanced Wound Management www.smith-nephew.com
 Smith & Nephew Medical Ltd
 101 Hessel Road
 Hull HU3 2BN
 UK
 T +44 (0) 1482 225181
 F +44 (0) 1482 328326

*Trademark of Smith & Nephew
 All Trademarks acknowledged
 ©January 2019 Smith & Nephew
 GMC0765

Supporting healthcare professionals for over 150 years

References

1. Audit in Changing of dressing use in two centres in UK vs. clinicians' usual dressing
 11 vs. Mepilex-Border and ALLEVYN Care/Border
2. (in average) based on a reduction in frequency of dressing change visits in a UK product evaluation, with appropriate training, education and promotion of practice change (N=37)
 KROCI M, ROBERTS C, ROTH C, SIVALE R. The impact of introducing a new foam dressing in community practice. [WMA Journal 2016; 16(2): 7-12] (6/2/16) Jay J et al. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. Journal of Wound Care 2015; 24(2): 312-314. (8/2015) Smith & Nephew Data on file D54177130. Roberts, S. June 2017. (8/2018) Rossington, A et al. Clinical performance and usability impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. Wounds UK 2013; 9(4): 91-5. (5/2014) Savoni D and Bickel A. A structured collaborative approach to improve the clinical performance of a new product. Wounds UK 2014; 10(2): 80-87. (5/2014) Smith & Nephew R&D Report RD 17047 - ALLEVYN LIFE Non-Bordered Heelability and Conformability. (Wound) Product. F12016 ALLEVYN LIFE Non-Bordered Heelability and Conformability summary. (5/2016) Smith & Nephew R&D Report RD 17047 - ALLEVYN LIFE Non-Bordered Heelability and Conformability

Handwritten signature and notes:
 17/01/19
 17/01/19

<http://www.smith-nephew.com/key-products/advanced-wound-management/secura/secura-nosting-barrier-film/>

104.



Description

SECURA No-Sting Barrier Film is a liquid film forming skin protectant that minimises stinging¹. On application to intact or damaged skin, it forms a protective interface that helps protect intact and damaged skin from irritation due to^{2,3}

- Urinary and faecal incontinence
- Bodily fluids
- Adhesive trauma
- Frictional forces

Features and Benefits

- Available in a choice of 3 sterile formats; spray, swabs and wipes.
- Non irritating^{6,7} and alcohol free formulation which reduces the potential for stinging.
- Fast drying time of under 30 seconds.^{6,7}
- Effective waterproof^{7,8} and breathable barrier for up to **96 hours (4 days)**²
- The unique polymer formulation means only one coat is needed to form a protective film.
- Once applied the film is clear providing constant visibility of the skin and periwound area.
- Applies easily, even on areas such as elbows, knees, and heels. Moves naturally with patients' skin and won't crack or peel.

Indications

- SECURA No-Sting Barrier Film forms a protective, waterproof barrier which acts as a protective interface between the skin and bodily wastes, fluids, adhesive dressings, drainage tubes, external catheters and around ostomy sites.
- SECURA No-Sting Barrier Film can also be used to help protect areas of the body that are at risk of irritation due to friction damage caused by external surfaces.
- SECURA No-Sting Barrier Film may be used on intact or damaged skin. The product may be used on adults, children and full term infants from one month, with normal skin.

Contraindications / Precautions


For external use only.

A large, stylized handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Keep out of the reach of children. Avoid contact with eyes. In the case of accidental contact, flush eyes well with water. Do not apply directly to open wounds or in deep puncture wounds. Should redness or other signs of irritation appear, discontinue use. Do not apply to infected areas of the skin. Do not use on patients with a known allergy to any of the ingredients.

References

1. Assessing the Sting Potential of Film Forming Barriers. Rpt # 0960, Cyberderm Clinical Studies, 2009.
2. Study to Compare the Wash Off Resistance and Durability of a Barrier Film. Rpt # 0958A, Cyberderm Clinical Studies, 2009.
3. Skin Protectant Barrier Test: No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.
4. An Evaluation of Health Care Products on Children 0-36 Months of Age w/ Normal Skin. Report 09129700111, Hilltop Research, 2010. In vitro
5. Formulations: NOSTINGSKINPREP Spray and NOSTINGSKINPREP Wipe/Swab
6. Time To Dry Test: No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.
7. Tactile Characterization (Stickiness) Test: No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.

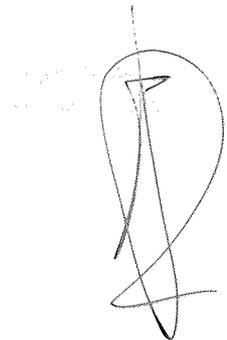

<http://www.smith-nephew.com/key-products/advanced-wound-management/secura/secura-nosting-barrier-film/>

104



Aprašymas

SECURA nedilginanti apsauginė plėvelė yra skysta plėvelė, sudaranti odos apsaugą, mažinančią dilgčiojimą¹. Naudojant ant sveikos ar pažeistos odos, ji sudaro apsauginę plėvelę, kuri padeda apsaugoti sveiką ir pažeistą odą nuo sudirginimo, atširandancio dėl

- Šlapimo ir išmatų nelaikymo
- Kūno skysčių
- Klijų
- Frikcinės jėgos

Savybės ir privalumai

- Galima rinktis iš trijų sterilių formatų; purškalo, tamponų ir servetėlių.
- Nedirginantis^{6,7} ir be alkoholio, kas sumažina dilginimo pojūčio potencialą
- Greitai išdžiūsta, laikas iki 30 sekundžių.^{6,7}
- Efektyvus vandeniui atsparus^{7,8} ir kvėpuojantis barjeras iki **96 valandų (4 dienos)**²
- Unikali polimerinė kompozicija reiškia, kad apsauginei plėvelei sukurti reikia tik vieno sluoksnio.
- Užtepus (užpurškus) plėvelę, ji yra permatoma, kas užtikrina nuolatinį odos ir odos aplink žaizdos matomumą.
- Lengvai taikomas net ir tokiose srityse kaip alkūnės, keliai ir kulnai. Natūraliai juda su paciento oda ir neištrūksta ar nenusilupa.

Indikacijos

- SECURA nedilginanti apsauginė plėvelė sudaro apsauginį, vandeniui atsparų barjerą, kuris veikia kaip apsauginis barjeras tarp odos ir kūno išskyrų, skysčių, lipnių tvarsčių, drenavimo vamzdelių, išorinių kateterių ir aplink stomas.
- SECURA nedilginanti apsauginė plėvelė taip pat gali būti naudojama siekiant apsaugoti kūno vietas, kurios gali būti paveiktos išorinių paviršių sukeltos trinties.
- SECURA nedilginanti apsauginė plėvelė gali būti naudojama ant sveikos arba pažeistos odos. Produktas gali būti naudojamas suaugusiems, vaikams ir kūdikiams nuo vieno mėnesio, turintiems normalią odą.

Kontraindikacijos / atsargumo priemonės


Tik išoriniam naudojimui.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vengti patekimo į akis. Atsitiktinio sąlyčio atveju gerai praplaukite akis vandeniu. Netepkite (nepurškite) tiesiai į atviras žaizdas

ar galias punkcijos žaizdas. Jei pasireiškia paraudimas ar kiti dirginimo požymiai, nutraukite jo vartojimą. Nenaudoti ant infekuotų vietų. Negalima naudoti pacientams, kuriems yra žinoma alergija bet kuriai iš sudėtinių dalių.

Nuorodos

1. Įvertinimas dilginimo potencialo apsauginių plėvelių. Rpt # 0960, „Cyberderm Clinical Studies“, 2009 m.
2. Tyrimas palyginti barjerinės plėvelės atsparumo plovimui ir patvarumui. Rpt # 0958A, „Cyberderm Clinical Studies“, 2009 m.
3. Odos apsauginis barjero testas: Nedilginanti apsauginė plėvelė. SAP, 2009 m.
4. Vaikų sveikatos priežiūros produktų įvertinimas vaikams 0–36 mėn. turintiems normalią odą. Pranešimas 09129700111, Hilltop Research, 2010. In vitro
5. Preparatai: Nedilginantis purškalas ir Nedilginančios Servetėlės / Tamponai
6. Laikas išdžiūvimo testas: Nedilginanti apsauginė plėvelė. SAP, 2009 m.
7. Taktilinės charakteristikos (lipnumas) testas: Nedilginanti apsauginė plėvelė. SAP, 2009 m.

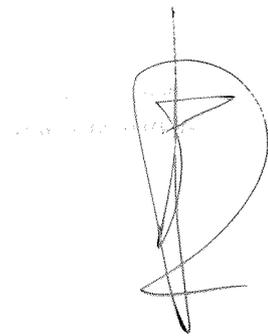A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'R' with a vertical line through it, and some smaller scribbles below.