


„NeuroSlider®“ mikrokateteris

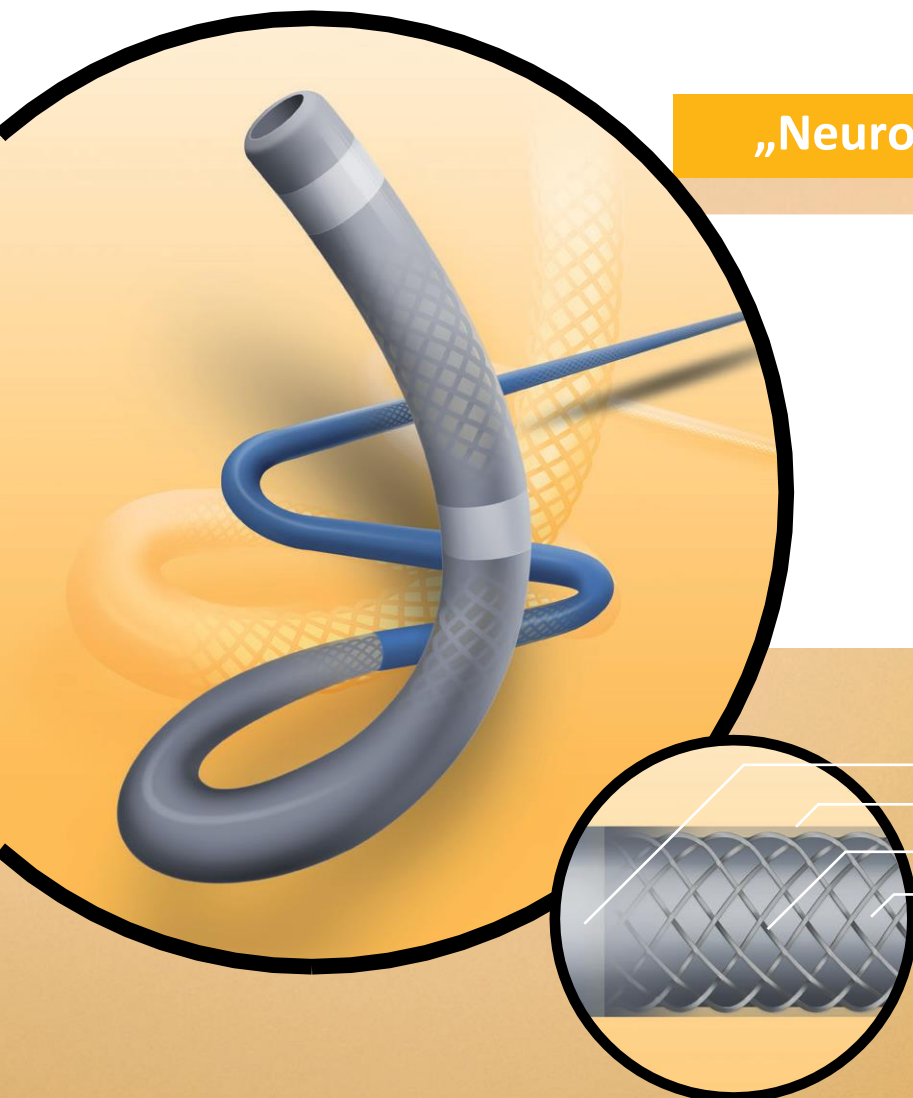

Antgalio žymos

Dvisluoksnė hidrofilinė danga

Supynimo technologija stūmimui-sukimui-

kreipimui Vidinė PTFE danga

EIGA.
VALDYMAS.
ĮLEIDIMAS.

xcandis®

ENGINEERING STROKE SOLUTIONS

„NeuroSlider®“ SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

EIGA.

- Dvigubo sluoksnio hidrofilinė danga užtikrina nepakartojamą sutepimą ir patvarumą.
- Supynimo technologija stūmimui-sukimui-kreipimui lemia tobulą pasukamumą bei reikšmingai sumažina ovalumo susiformavimą bei pailgėjimą.

VALDYMAS.


- Formuojamas antgališ, kuris išlaiko formą ilgą laiką, užtikrina puikų valdymą tolimesnėse srityse net ir esant itin kreivai trajektorijai.
- Daugiapolimerinė konstrukcija sudaryta iš 5 skirtingų lankstumo zonų su sklandžiais perėjimais nuo maksimalaus stabilumo ties įvore iki maksimalaus lankstumo ties antgaliu užtikrina tikslų ir efektyvų valdymą.

ĮLEIDIMAS.


- Vidinė PTFE danga sumažina trintį ir taip užtikrina sklandų ir patikimą prietaiso ir spiralės įleidimą.
- Pažangi įvorės konstrukcija su skaidriu langeliu užtikrina tikslų prietaiso perėjimą į įvorę.

SPECIFIKACIJOS


„NeuroSlider® 17“

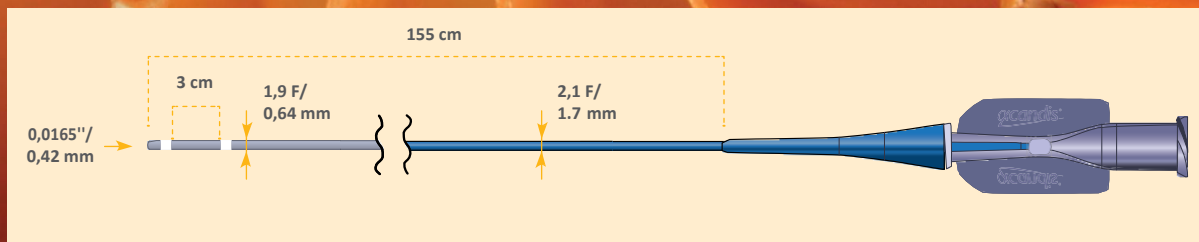

„NeuroSlider® 21“

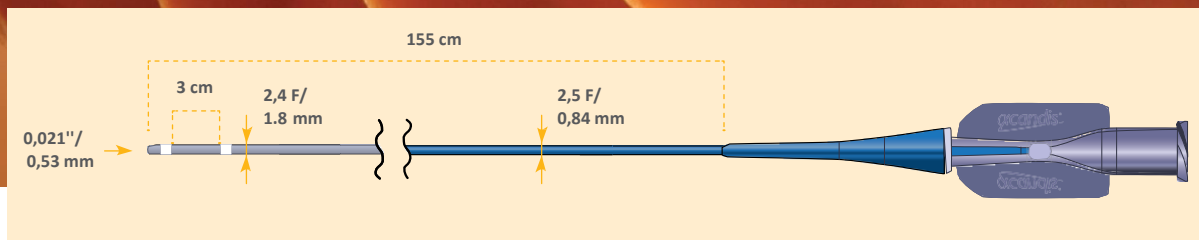

„NeuroSlider® 27“

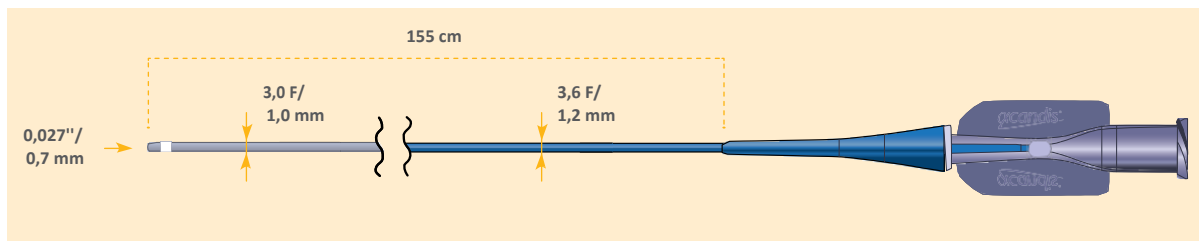


UŽSAKymo informacija

Gaminio pavadinimas	Serijos numeris	VS (coliai)	IS dist. / proks. (French)	Panaudojamas (centimetrai)	Antgalio forma	Antgalio žymos
„NeuroSlider® 17“	01-000272	0,0165	1,9 / 2,1	155	Tiesios formos	2
„NeuroSlider® 21“	01-000273	0,021	2,4 / 2,5	155	Tiesios formos	2
„NeuroSlider® 27“	01-000274	0,027	3,0 / 3,6	155	Tiesios formos	1

Aš, Vaidotas Rimeikis, patvirtinu, kad anglų kalba sudaryto dokumento vertimas į lietuvių kalbą yra tikslus ir priimu atsakomybę už vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą teisingumą.

Vertėjas Vaidotas Rimeikis

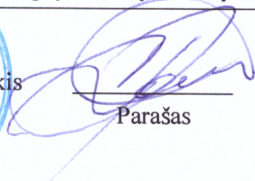


Parašas