

GASTROENTEROLOGIC SERIES


GASTROSTOMY CATHETER WITH ENFit CONNECTOR

Fortune® Silicone Gastrostomy Catheter with ENFit**Connector:**

- The silicone gastrostomy catheter with ENFit connector is soft and flexible, It includes a silicone bolster, a silicone balloon, and silicone tri-ports connector. These components are medical grade silicone for enhancing patient comfort and superior biocompatibility; It can reduce the discomfort contact with the tube.
- Transparent tube for easy visual inspection, X-ray-opaque line for easy and accurate confirmation of tube position by X-ray. Depth markings for convenient confirmation of the tube position.
- Wide and open-rounded end improves flow, and the shortened tip design reduces gastric mucosa irritation.
- The tri-ports connector of the gastrostomy tube has assembly 2 ENFit male connectors and 2 ENFit female caps in the feeding lumen and the medication lumen.
When the feeding or medication is stopped, the ENFit female caps can be close by rotated clockwise to prevent the air into the stomach.
- External Bolster prevents tube migration and eliminates the needs for tape or suture.
- The ENFit connector can prevent the misconnection risk, and provide a safer feed and medication channel for the patient.

**SPECIFICATIONS****Gastrostomy Catheter with ENFit Connector:**


REF. No.	Size.	Balloon volume	Length	Depth marking	Description
2019-0512	12FR	5-10cc			
2019-0514	14FR				
2019-0516	16FR	10-20cc		2	Silicone Bolster
2019-0518	18FR			4	2ENFit Male Connector
2019-0520	20FR		256 mm	6	2 ENFit Female Cap
				8	FEED Feeding
				10	MED Medication
2019-0522	22FR	15-20cc			Depth Marking
2019-0524	24FR				X-Ray Opaque Line
2019-0526	26FR				
2019-0528	28FR				
2019-0101	ENFit Male Connector, ENFit Female Cap, Strap				

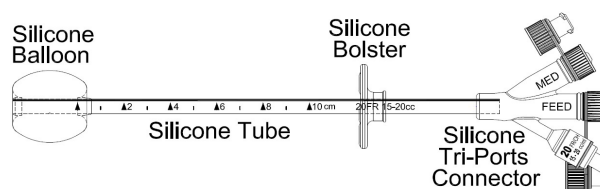

2019-05XX




6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,
Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan
Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266
www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com

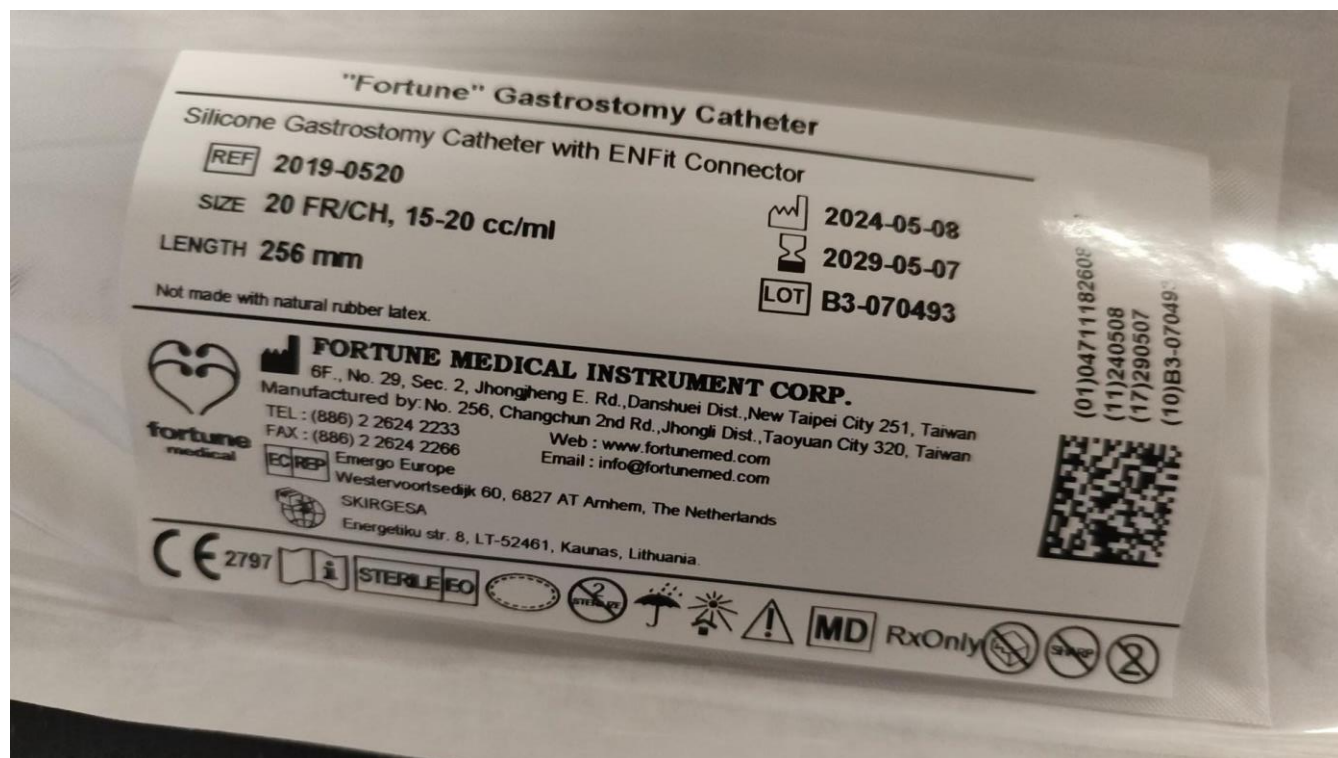

Performer™ Introducer and Sets

SPECIFICATIONSIMAGES

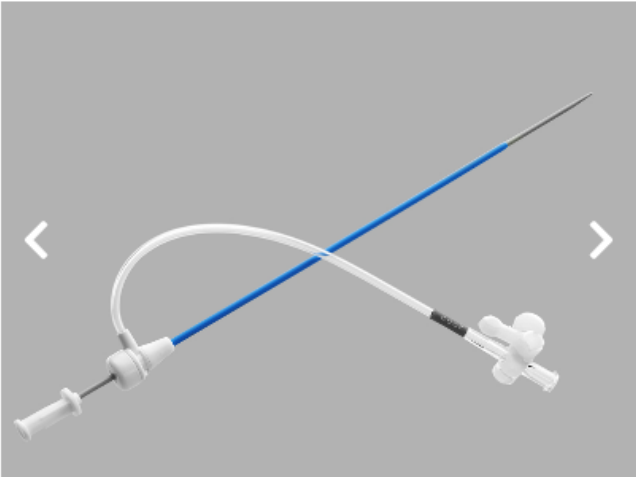

Used to introduce balloons, closed and non-tapered end catheters or other diagnostic and interventional devices.

This product line is serviced by the following clinical division(s):
Aortic Intervention »
Peripheral Intervention »

Instructions for Use (IFUs) linked below are the most current version associated with the product. To find an IFU associated with a specific Lot Number, please visit <https://ifu.cookmedical.com/>.

Order Number	Reference Part Number	Instructions for Use (IFU)	MR Status	Fr	Length cm	Accepts Wire Guide Diameter inch	More Info
G07417	RCF-10.0-38-J		N/A	10	13	.038	Expand »

INCLUDED COMPONENTS	
Description	Quantity
Introducer	1
Wire guide that has one straight tip and one 3 mm J tip	1

- skirtas intervencinėms procedūroms, įvesti terapinėms ir diagnostinėms priemonėms į kraujagyslę;
- įvedėjo storis 10 Fr, ilgis 13 cm;
- viela 0,038" storio ir 3mm J tipo lanksčiu galu;
- supakuota po 1 rink.;

A.5650

LEM

Legatore Emorroidario Monouso.

Disposable Haemorrhoid Banding Ligator.

A.5651

A.5660

A.5661

CE

CE
0476

Il **legatore emorroidario monouso LEM** è un dispositivo Sapi Med brevettato ed unico nel suo genere. È realizzato in due versioni: ad **"ASPIRAZIONE"** e a **"TRAZIONE"**. Entrambi sono dotati di ampio cilindro (Ø 10 mm) per il contenimento del nodulo.

Dispone di un'impugnatura ergonomica ed il grilletto di comando espulsione anello elastico è provvisto di balestra di richiamo. Una calcolata angolatura permette una buona visione nell'intervento.

Entrambi i modelli sono disponibili con cono a scalini per impedire all'anellino di tornare indietro durante la fase di "carico" oppure con cono a pareti lisce e caricatore di anellini. Il dispositivo è costruito in materiale plastico trasparente antiurto e marchiato CE secondo la direttiva 93/42.

The **LEM Disposable Haemorrhoid Banding Ligator** is a unique, patented design made from a light, tough polymer. It is a single-patient product available in two variants: for **use with either suction or grasping forceps.**

Both variants are supplied with a stepped cylindrical cone (Ø 10mm) for easy band loading, or with a smooth cone and a ring-loader. The 20-degree angled tip of the LEM ensures optimal visual clarity and the ergonomically designed trigger enables smooth and accurate banding procedures.

A length of flexible suction tubing connects the LEM to a low-pressure suction aspirator. The haemorrhoid is retracted into the LEM's barrel-end and then banded by the operator using the trigger-action. Throughout the procedure, the suction may be manually thumb-controlled by the operator. If the forceps variant is chosen, suction is replaced by the insertion of grasping forceps through a cutaway section in the barrel so that the haemorrhoid may be retracted manually prior to being banded.

The LEM is designed for use with the Sapi Med Self Light operative proctoscopes.

be latekso

jungiamas prie siurblio

LEM ad ASPIRAZIONE

Il dispositivo, per un corretto funzionamento, necessita di un aspiratore chirurgico a bassa pressione da collegare, per mezzo di un tubo, all'appendice posta alla base dell'impugnatura. L'operatore con la semplice pressione del pollice sul foro collocato sulla canna di aspirazione può regolare il flusso d'aria che richiama, nel cilindro, il nodulo emorroidario alla cui base verrà posto l'elastico. Non contiene lattice. Non sterile.

LEM a TRAZIONE


Il dispositivo si presenta esteticamente come il modello ad aspirazione. Non è più utilizzabile con l'aspiratore. Il segmento o la porzione di strumento che viene introdotta nel canale anale, è provvista di un cilindro aperto nel quale verrà introdotta una pinza di trazione per ritirare il nodulo emorroidario alla cui base verrà posto l'elastico. Non contiene lattice.

LEM for use with SUCTION

Suction tubing connects the LEM to a low-pressure suction aspirator, and the LEM is then inserted into an operative proctoscope and placed over the surgical site. The haemorrhoid is retracted from the tissue by suction and then banded using the trigger-mechanism. During the procedure, the rate of suction may be controlled manually by the practitioner's thumb. Latex free. Non sterile.

LEM for use with FORCEPS

In place of suction, grasping forceps are inserted through a cut-out opening in the barrel of the bander and used to manually retract the haemorrhoid for banding. Latex free.

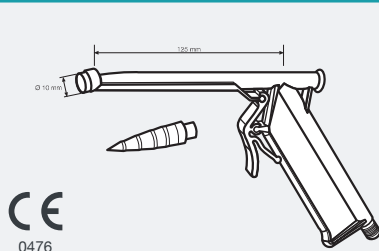

REF A.5650: LEM ad aspirazione con cono zigrinato.

REF A.5650.5: kit LEM ad aspirazione con cono zigrinato e n° 5 anellini elastici.

REF A.5650.5LF: kit LEM ad aspirazione con cono zigrinato e n° 5 anellini elastici LATEX FREE.

Confezione: n° 25 pz.

Non sterile


REF A.5650: LEM - Disposable haemorrhoid ligation suction and banding instrument.

REF A.5650.5: LEM - Disposable haemorrhoid ligation suction and banding instrument complete with 5 rings.

REF A.5650.5LF: LEM - Disposable haemorrhoid ligation suction and banding instrument complete with 5 rings LATEX FREE.

Quantity per box: 25 pcs.

Non sterile

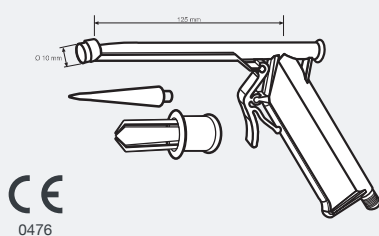

REF A.5651: kit LEM ad aspirazione con cono liscio e caricatore d'anellini.

REF A.5651.5: kit LEM ad aspirazione con cono liscio, caricatore d'anellini e n° 5 anelli elastici.

REF A.5651.5LF: kit LEM ad aspirazione con cono liscio, caricatore d'anellini e n° 5 anelli elastici LATEX FREE.

Confezione: n° 25 pz.

Non sterile


REF A.5651: LEM - Disposable haemorrhoid banding ligator for use with suction, complete with rings loader.

REF A.5651.5: LEM - Disposable haemorrhoid banding ligator for use with suction, complete with rings loader and 5 rings.

REF A.5651.5LF: LEM - Disposable haemorrhoid banding ligator for use with suction, complete with rings loader and 5 rings LATEX FREE.

Quantity per box: 25 pcs.

Non sterile

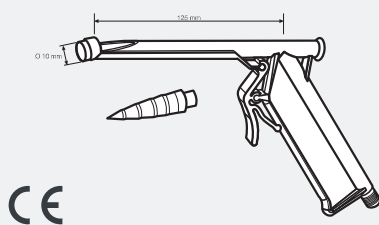

REF A.5660: LEM a trazione con cono zigrinato.

REF A.5660.5: kit LEM a trazione con cono zigrinato e n° 5 anellini elastici.

REF A.5660.5LF: kit LEM a trazione con cono zigrinato e n° 5 anellini elastici LATEX FREE.

Confezione: n° 25 pz.

Non sterile


REF A.5660: LEM - Disposable haemorrhoid banding ligator for use with forceps.

REF A.5660.5: LEM - Disposable haemorrhoid banding ligator for use with forceps, complete with 5 rings.

REF A.5660.5LF: LEM - Disposable haemorrhoid banding ligator for use with forceps, complete with 5 rings LATEX FREE.

Quantity per box: 25 pcs.

Non sterile

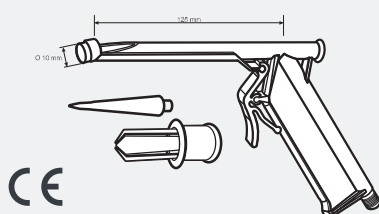

REF A.5661: kit LEM a trazione con cono liscio e caricatore d'anellini.

REF A.5661.5: kit LEM a trazione con cono liscio, caricatore d'anellini e n° 5 anellini elastici.

REF A.5661.5LF: kit LEM a trazione con cono liscio, caricatore d'anellini e n° 5 anellini elastici LATEX FREE.

Confezione: n° 25 pz.

Non sterile

REF A.5661: LEM - Disposable haemorrhoid banding ligator for use with forceps, complete with rings loader.

REF A.5661.5: LEM - Disposable haemorrhoid banding ligator for use with forceps, complete with rings loader and 5 rings.

REF A.5661.5LF: LEM - Disposable haemorrhoid banding ligator for use with forceps, complete with rings loader and 5 rings LATEX FREE.

Quantity per box: 25 pcs.

Non sterile