


PROLANCE

SAUGŪS AUTOMATINIAI LANCETAI KAPILIARINIO KRAUJO PAĖMIMUI

- Siekiant apsaugoti pacientą ir sveikatos priežiūros personalą nuo adatos dūrio sužeidimų adata įtraukiama automatiškai ir užsirakina, kasd užtikrintų papildomą saugumą.
- Galimi šeši skirtingi dydžiai leidžiantys sveikatos priežiūros personalui gauti reikiamą kraujo kiekį bet kokiems kapiliariniams tyrimams.
- Prolance yra greita ir paprasta naudoti, reikalinga nedidelė instrukcija.
- Prolance negali būti panaudotas pakartotinai.
- Dvigubos spyruoklės mechanizmas užtikrina staigų nevibruojantį dūrį ir adatėlės įtraukimą mažesniame sužalojime.
- Skirtingo gylio adatos suteikia pacientui didesnę komfortą.
- Sterilizuota Gama spinduliais.
- Ergonomiškas ir lengvai valdomas su šoninėmis briaunomis, leidžia geriau pozicionuoti dūrio vietą.

Kaip naudoti PROLANCE

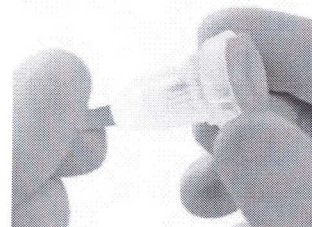


Laikykite Prolance už kraštų, nuimkite apsauginį dangtelį, pasukant 360 laipsnių ar daugiau.



Tvirtai paimkite lanceto viršūnę, švelniai priglaskite prie piršto, apytiksliai 2 mm nuo nago. Greitu judesiu oaspauskite ir atleiskite mygtuką. Tinkamai pašalinkite po panaudojimo.

Spalvinis kodas	Pavadinimas	Adatėlės dydis	Dūrio gylis	Produkto Nr.	Pakuotė, vnt
Rožinė	ProLance Pediatric	Peiliukas, 1,5mm	1,2mm	7609	200
Violetinė	ProLance Max Flow	Peiliukas, 1,5mm	1,6mm	7620	200
Geltona	ProLance High Flow	~ 18G (1,2mm)	1,8mm	7601	200
Žalia	ProLance Normal Flow	~ 21G (0,8mm)	1,8mm	7594	200
Mėlyna	ProLance Low Flow	~ 25G (0,5mm)	1,4mm	7599	200
Melsva	ProLance Micro Flow	28G (0,35mm)	1,6mm	7604	200

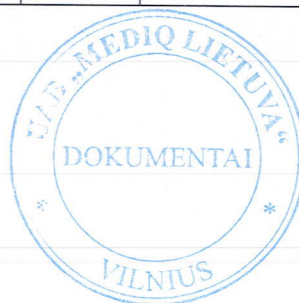

Konkursų ruošimo vadybininkė
Meleta Prunskaitė

M. Prunskaitė