

Single Bond Universal

Surišiklis

Tas pats
vienintelis surišiklis



Pilnam ir savaiminiam ėsdinimui

Atraskite tikrą universalumą

- Tinkamas pilno ėsdinimo, savaiminio ėsdinimo ir pasirinktinio ėsdinimo technikoms
- Itin geras sukibimas - tiek su drėgnu, tiek su sausu dentinu
- Nėra pooperacinio jautrumo
- Itin geras sukibimas be papildomo apdorojimo prameriais su netiesioginių restauracijų paviršiais (cirkonio, aliuminio, stiklo keramikomis bei metalais)
- Puikus kraštų pritikimas estetinėse restauracijose
- Vieno žingsnio, vieno sluoksnio surišiklis
- Naudojamas su savaiminio kietėjimo ir su dvigubo kietėjimo (su Single Bond DCA dvigubo kietėjimo aktyvatoriumi) medžiagomis
- Nereikia laikyti šaldytuve, kambario temperatūroje galiojimo laikas - dveji metai
- Tiekama vienkartinėse dozėse ir patogiam, viena ranka atidaromame buteliuke
- Pagerintos visos savybės, patogus naudojimas

Teisingas pasirinkimas pilnam ėsdinimui ir savaiminiam ėsdinimui

Išbandykite pirmąjį tikrai universalų surišiklį. Single Bond Universal surišiklis - tai vienas tirpalas, kurį galima įvairiapusiškai naudoti. Rezultatai bus puikūs - patikimą stiprų sukibimą pasieksite greitai atlikdami paprastą patogią procedūrą.

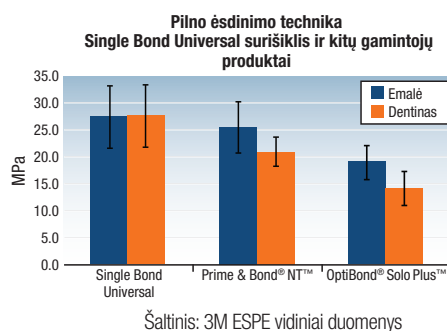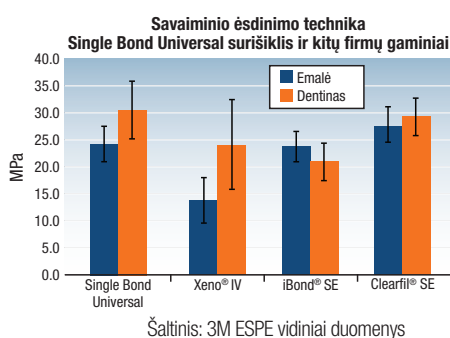

Pastovus prognozuojamas sukibimo rezultatas ir itin retas pooperacinis jautrumas

Single Bond Universal surišiklio cheminėje sudėtyje puikiai subalansuotas 3M ESPE unikalaus išradimo Vitrebond™ kopolimero, HEMA dervų ir vandens santykis. To dėka vyksta kolageno skaidulų rehidracija ir susiformuoja tinkamas hibridinis sluoksnis, nepriklausomai nuo to ar dentinas buvo drėgnas, ar sausas. Todėl procedūra paprasta, rezultatas mažai priklauso nuo technikos tikslumo, visuomet gaunamas puikus sukibimas naudojant pilno ar savaiminio ėsdinimo metodus.

Viso atlikta
3467
restauracijų pilno
ėsdinimo technika

0.4%
pooperacinio jautrumo
atvejų atlikus restauracijas
pilno ėsdinimo technika

0.06% pooperacinio jautrumo atvejų, atlikus
restauracijas savaiminio ėsdinimo technika.

Šaltinis: 3M ESPE vidiniai duomenys

Puikus sukibimas su įvairiais paviršiais

Single Bond Universal surišiklis puikiai sukimba su įvairiais paviršiais: su emale, dentinu, stiklo bei cirkonio keramikomis, su tauriais bei ne tauriais metalų lydiniais, tai pat su kompozitais be papildomo apdorojimo specialiais prameriais.

3M ESPE



Viena ranka atidaromas buteliukas su užsifiksuojančiu dangteliu ir specialiu snapeliu, leidžiančiu kontroliuoti dozę

Single Bond Universal - aukščiausios kokybės surišiklis

Sukurtas remiantis išbandyta ir patikima 3M ESPE surišiklių technologija, Single Bond Universal surišiklis pasižymi unikalia chemine sudėtimi, kuri užtikrina panaudojimo įvairiapusiškumą - visos funkcijos viename tirpale.

- **Vitrebond™ kopolimeras** užtikrina pastovų vienodą sukibimą su dentinu drėgnoje ir sausoje aplinkoje.
- **MDP monomeras** kontroliuoja savaiminį ėsdinimą, užtikrina cheminį sukibimą su cirkonio bei aliuminio keramikomis ir metalais be atskiro apdorojimo specialiais praimeriais, taip pat stabilizuoja tirpalą, todėl jo nereikia laikyti šaldytuve.
- **Silanas** užtikrina sukibimą su stiklo keramika be atskiro apdorojimo specialiais praimeriais.

Platus pritaikymas

Tiesioginės restauracijos:

- Visų klasių ertmių plombavimas šviesa kietinamais kompozitais bei kompomeriais
- Šaknų paviršių nujautrinimas
- Dentino hermetizavimas, prieš plombuojant amalgama
- Apsauginis lakas stiklo jonominėms plombavimo medžiagoms
- Kompomerų ir kompozitų restauracijų pataisos
- Silantų surišiklis

Netiesioginės restauracijos:

- Venyrų surišiklis, naudojant RelyX™ Veneer cementą
- Surišiklis/praimeris cheminiam sukibimui su cirkonio bei aliuminio keramika, stiklo keramika ir metalais
- Intraoralinės netiesioginių restauracijų pataisos
- Sukibimas, naudojant savaiminio ar dvigubo kietėjimo danties kulties atstatymo medžiagas ir dervinius cementus (su Single Bond DCA dvigubo kietėjimo aktyvatoriumi)
- Dentino hermetizavimas prieš dengiant laikiniais vainikėliais

Užsakymų informacija



Užsakymo kodas	Gaminys
41265	Įvadinis rinkinys (5 ml surišiklio; 50 maišymo indelių; 50 šepetėlių; 25 aplikavimo adatų, 3 ml microbrushes; 25 ėsdinimo gelio)
41266	Papildymas (5 ml surišiklio)
41276	Surišiklis vienkartinėse dozėse - 40 vnt.
41278	Surišiklis vienkartinėse dozėse - 100 vnt.
41268	Single Bond Universal dvigubo kietėjimo aktyvatorius - 5 ml
41263	Ėsdinimo gelis Scotchbond™ Universal - 2 x 3 ml švirkštai, 50 aplikavimo adatų
41274	Scotchbond™ Universal aplikavimo adatos - 25 vnt.



3M ESPE

3M Lietuva
A. Goštauto g. 40 A
Vilnius
www.3mespe.com
www.odontologija.com/3m

3M, ESPE, RelyX ir Vitrebond yra 3M ar 3M Deutschland GmbH prekiniai ženklai.
Clearfil, iBondm OptiBond Solo Plus, Prime&Bond NT ir Xeno nėra 3M prekiniai ženklai.

© 3M 2012 Visos teisės saugomos.