

## Popieriaus – plastiko sterilizacijos juostos

Su klosle ir plokščios

- Produkto apibūdinimas**

Vienkartinės pakavimo medžiagos, gaminamos įvairių dydžių ir tipų, juostų su klosle ir be klostės pavidalu, suteikia ir užtikrina saugų sterilizavimo ir medicinos prietaisų laikymą. Sterim® juostos yra pagamintos iš dviejų sluoksnių: popieriaus ir plastiko, sulydyto 3 siūlėmis šonuose, kas suteikia išskirtinį stiprumą ir garantuoja lengvą atidarymą bei plėšimą. Juostose naudojamas specialus medicininis 70 g/m<sup>2</sup> popierius, kuris yra vienas iš patikimiausių medžiagų, kai kalbama apie atsparumą įplėšimams ir trūkimams.


Plastikinis žalios spalvos viršutinis sluoksnis yra pagamintas iš 6 MULTI sluoksnių, polyesterio junginio, sutvirtinto su polypropilen, kurio storis yra 52µm. Patobulinti juostos komponentai suteikia aukštą kokybę, plastiką lydant su popieriumi, o taip pat pasižymi lankstumu ir ilgaamžiškumu. Ant popieriaus – plastiko juostų yra 1 klasės indikatoriai Garams, EO ir FORM sterilizacijai. Pagrindinė techninė informacija, kuri reikalaujama pagal normas, atspausdinta keturiomis kalbomis: Lenkų, Anglų, Vokiečių ir Rusų.

Visi užrašai, indikatoriai ir kita informacija apie paketo atidarymo nuorodas yra pateikiami tarp užlydymo siūlių, stengiantis pašalinti bet kokią riziką, spausdinimui naudojamo rašalo patekimui į paketo vidų. Papildoma informacija apie spalvos pasikeitimą prieš ir po sterilizacijos skirta medicinos personalui greitam rezultatų įvertinimui ir atskirymui nuo nesterilių paketų.

Rekomenduojama užlydymo temperatūra yra 160-200°C ir priklauso nuo naudojamo užlydytuvo techninių parametrų. Kiekviena Sterim® juosta yra apsauta specialia pakavimo juosta ir teikiama individualiose su identifikaciniu lipduku, kuriame pateikiama informacija: partijos numeris, gamybos ir galiojimo data, CE ženklas. Juostos supakuotos popierinėse dėžėse su informaciniais lipdukais.

- Pritaikymas**

Garuose, Formaldehyde ir EO dujų sterilizatoriuose naudojant skirtingų dydžių paketus.

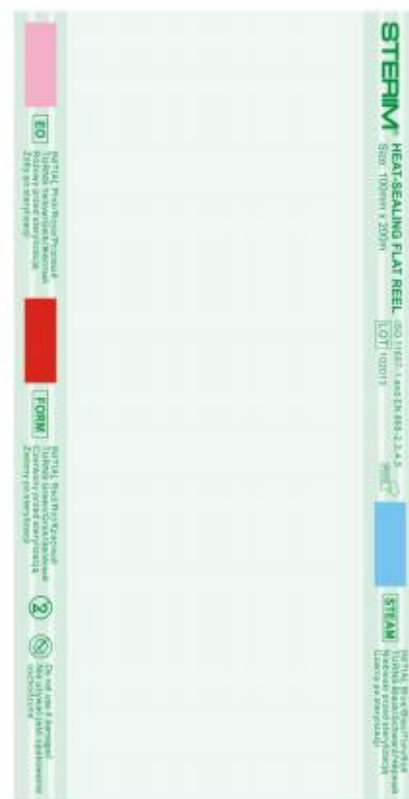**Standartai:**

ISO 111607 – 1  
PN EN 868 – 2,3,4,5  
ISO 9001  
CE 93/42 Direktyva  
Klasė 1 (nesterilių) medicinos  
direktyva  
CE

**Laikymo sąlygos:**

Laikyti originaliose pakuotėse  
sausose vietose saugant nuo  
tiesioginės saulės spindulių  
palaikant 10 – 40 °C temperatūrą.  
Galiojimas: ant pakuotės.

**Kodas ir pakuotė:**


Produkcijos pagaminimo data,  
CE ženklas, partijos numeris yra  
spausdinti ant pakuotės.

Partijos numeris atspausdintas  
ant gaminio.

## Popieriaus – plastiko sterilizacijos juostos

- Plokščios juostos**

RSP050	50mm x 200m	12 rul./dėž.
RSP075	75mm x 200m	8 rul./dėž.
RSP100	100mm x 200m	6 rul./dėž.
RSP120	120mm x 200m	4 rul./dėž.
RSP150	150mm x 200m	4 rul./dėž.
RSP200	200mm x 200m	2 rul./dėž.
RSP250	250mm x 200m	2 rul./dėž.
RSP300	300mm x 200m	2 rul./dėž.
RSP350	350mm x 200m	2 rul./dėž.
RSP380	380mm x 200m	2 rul./dėž.
RSP400	400mm x 200m	2 rul./dėž.
RSP420	420mm x 200m	2 rul./dėž.

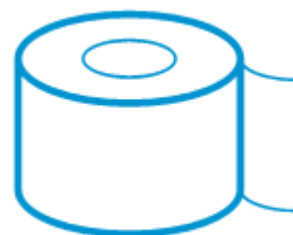

- Juostos su kliste**

RSF075	75mm x 30mm x 100m	8 rul./dėž.
RSF100	100mm x 40mm x 100m	6 rul./dėž.
RSF150	150mm x 50mm x 100m	4 rul./dėž.
RSF200	200mm x 50mm x 100m	2 rul./dėž.
RSF250	250mm x 60mm x 100m	2 rul./dėž.
RSF300	300mm x 60mm x 100m	2 rul./dėž.
RSF350	350mm x 80mm x 100m	2 rul./dėž.
RSF380	380mm x 80mm x 100m	2 rul./dėž.
RSF400	400mm x 80mm x 100m	2 rul./dėž.
RSF420	420mm x 80mm x 100m	2 rul./dėž.



Šis bukletas skirtas informaciniam tikslui ir nėra laikomas kaip pasiūlymas ar prekybinis įstatymas. Gamintojas gali keisti pasiūlytų produktų parametrus, sekdamas naujienas, bandymus ar išradimus.